

Phonak

Target 7.0

Tilpasningsguide for verifisering

Denne guiden oppsummerer trinnene for bruk av verifiseringsassistent i Phonak Target siden det finnes ulike variabler som kompresjon, frekvensreduksjon og støyadministrering som kan påvirke verifisering av forsterknings- og MPO-innstillinger.

Se tilpasningsguiden for Phonak Target for kommentarer om programmering og tilpasning av Phonak-høreapparater.

Innhold

Forberedelser	2
Koble til høreapparatene	2
RECD	2
Tilpasningsformel	3
Verifiseringsassistent.....	4
Fullføring av tilpasningsøkten.....	5
Informasjon om og beskrivelse av symboler og systemkrav.....	5

Forberedelser

Gå inn på **[Klient & sesjoner]** og klientinformasjon hvis det ikke allerede er tilgjengelig. Koble til høreapparatene med den foretrukne tilpasningsenheten for å forberede høreapparatene for verifisering.

Merk: Verifiseringsassistenten er bare tilgjengelig når høreapparater er tilkoblet

Koble til høreapparatene

Velg hvordan du ønsker å programmere høreapparatene **[HI-PRO]** / **[NOAHlink]** / **[iCube II]** / **[Noahlink Wireless]** via rullegardinmenyen øverst i midten av hovedskjermbildet.

Sørg for at høreapparatene har nye batterier eller at de er fulladet når du bruker en trådløs tilpasningsenhet. Klikk på **[Tilkoble]** for å etablere forbindelsen med høreapparatene.




Når høreapparatene er koblet til, vil skjermbildet **[Akustiske parameter]** vises automatisk. Verifiser eller endre tilkoblingsmulighetene slik at de tilsvarer tilpasningen.


RECD

Du kan se RECD-verdier ved å gå til **[Klient]** og deretter **[RECD]**. Ulike RECD-verdier kan brukes i Phonak Target.

Gjennomsnittlig RECD er RECD-verdier med innstikkstelefon basert på HA-1-coupler, personens alder og tilpasningsformelen som brukes (dvs. DSLv5 eller NAL-NL2).

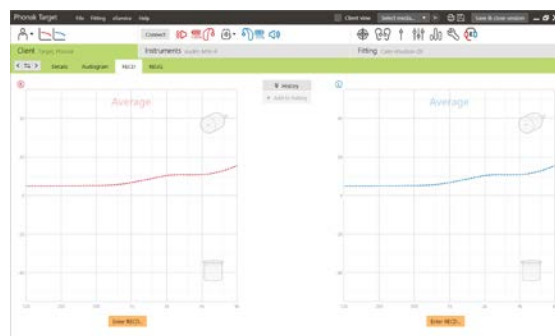


Den målte RECD fra verifiseringsutstyr kan angis i Target ved å klikke på **[Enter RECD]**. Velg ønsket ørepropp (ørepropp eller innstikkstelefon), coupler (HA-1 eller HA-2) og RECD-adapterttype.

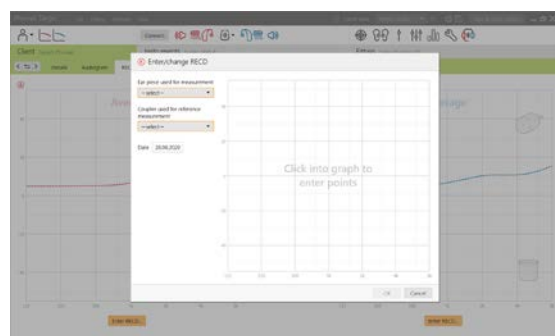

Klikk på **[+ Legg til historie]** for å importere en eksisterende RECD fra NOAH. Klikk på **[Historie]** for å se de tilgjengelige RECD-ene og velg RECD-en som skal brukes til tilpasningen. Hvis RECD-informasjonen er ufullstendig, vil Target be deg om å angi manglende ørepropp-, coupler- eller RECD-adapterinformasjon.

Den estimerte RECD-en er basert på egenskapene til et voksent øre og resultatene av feedback-testen. Klikk på **[Bruk estimert ventilering]** i feedback-fanen for å bruke denne RECD-en til tilpasningen.

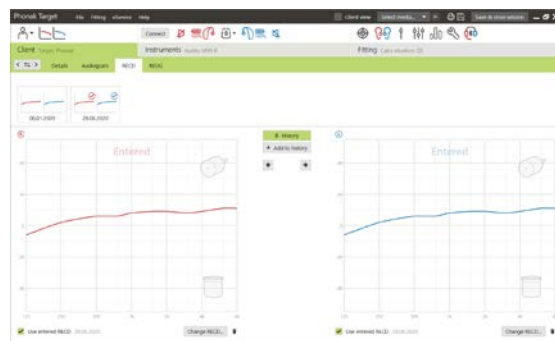


Tilpasningsformel

Ved tilpasning hos et barn velger Junior-modus automatisk standard tilpasningsformel basert på barnets alder.

Den ønskede tilpasningsformelen kan velges i skjermbildet **[Grunninnstilling]**.

Grunninnstillinger gjøres via **[Tilpasning]** og **[Grunninnstilling]**.


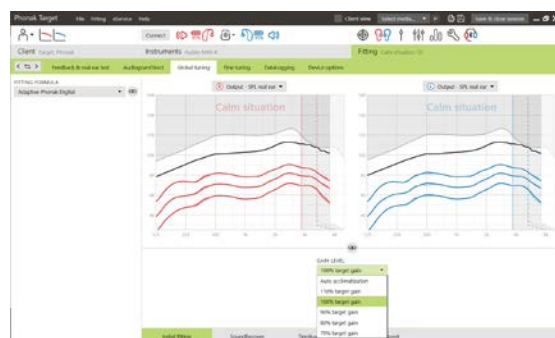


Verifiseringsassistent

Du får tilgang til verifiseringsassistenten via **[Finjustering]** > **[Forsterkning & MPO]** > **[Verifiseringsassistent]**.

Assistenten veileder deg gjennom trinnene.

Trinn 1 **[Forberedelser]**: Dette trinnet starter med å bekrefte de akustiske parametrene og koblingen som brukes under tilpasningen.

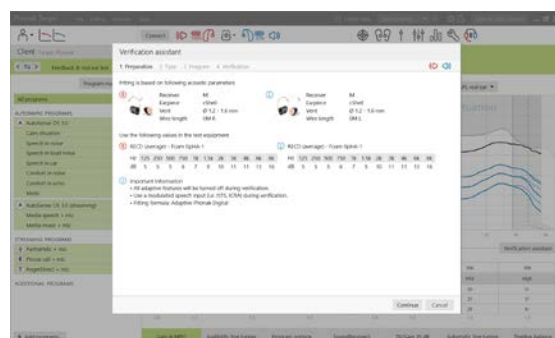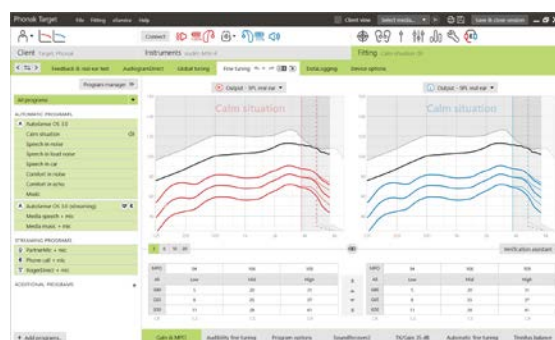

Trinn 2 **[Type]**: Velg om testboks- eller REM-verifisering skal utføres. Her finnes det også noen nyttige tips for REM.


Merk: For testboksverifisering må du bekrefte at RECD-verdiene matcher med verifiseringsutstyret.




Trinn 3 **[Program]**: Velg programmet som skal være aktivt under verifisering, og angi om justeringene skal gjelde for det aktive programmet eller for alle programmer.



Trinn 4 **[Verifisering]**: Dette trinnet deaktiverer alle adaptive funksjoner i høreapparatene og gjør det mulig å justere forsterkning og MPO. Den tilgjengelige kurvevisningen samsvarer med typen verifisering som utføres. Testboksen viser kurve for enten 2cc-output eller 2cc-forsterkning, mens virkelig øre viser kurver for innsettingsforsterkning eller SPL-output for virkelig øre.

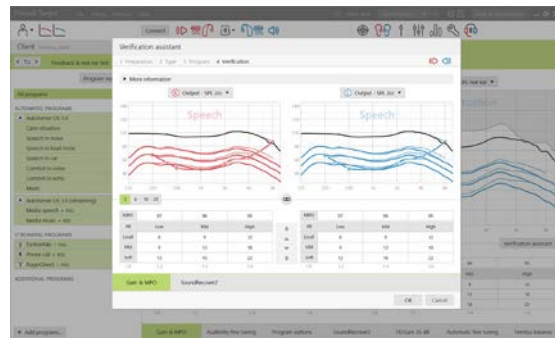

Aktiver SoundRecover ved å gå til **[SoundRecover]** i den nederste delen av vinduet. Klikk på **[Juster SoundRecover]** for å endre innstillingene. Alle justeringer vil brukes for den gjeldende økten.

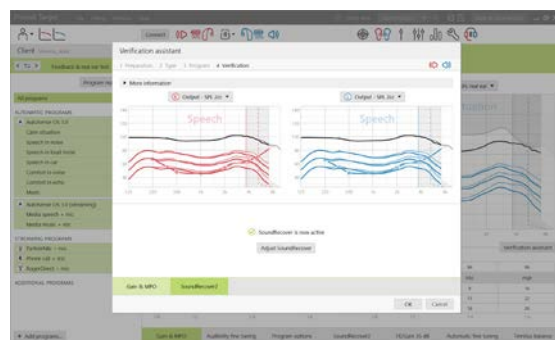

Når et høreapparat dempes eller får opphevet dempingen, vises det et vannmerke over kurvevisningen (dvs. dempet eller tale). Talevannmerket fungerer som en påminnelse om det anbefalte inngangssignalet for å optimalisere måltilpasning.

Klikk på **[Legg til]** for å bekrefte justeringer som er gjort, og gå tilbake til standard tilpasningsmodus. SoundRecover aktiveres igjen som standard. Klikk på **[Avbryt]** hvis det er behov for å forkaste noen justeringer under verifisering.

Fullføring av tilpasningsøkten

Du kan lukke økten når som helst ved å klikke på **[Lagre & lukk sesjonen]** i øvre, høyre hjørne av skjermen. Dialogboksen for lagring bekrefter at lagringen for høreapparater var vellykket. Etter lagringen vil Phonak Target føre deg tilbake til startskjerm bildet.

Informasjon om og beskrivelse av symboler og systemkrav

Informasjon om og beskrivelse av symboler og oversikt over systemkrav finnes i tilpasningsguiden for Phonak Target.

CE-merket 2020



Produsent:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveits

sonova
HEAR THE WORLD