


# Phonak Target™ 2.1

## Programmerings- og tilpasningsvejledning – introduktion

Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target 2.1. Læs desuden **[Nyheder]** på Phonak Targets startskærm.

Audiogramdataene fra NOAH importeres automatisk til Phonak Target og benyttes under forhåndsberegningen.

### Klargøring af høreapparaterne

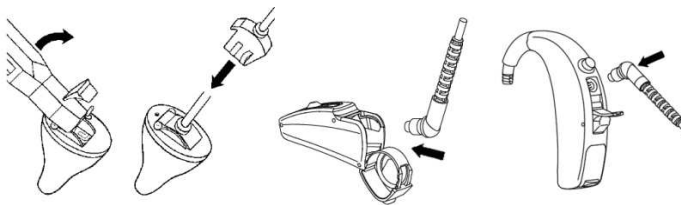

#### iCube

Høreapparaterne skal ikke tilsluttes med ledninger. Du skal blot isætte batteriet og tænde høreapparatet ved at lukke batterikammeret.

#### NOAHlink eller HiPro

Slut programmeringskablerne til høreapparaterne og til tilpasningsenheden.


### Opbygning/navigation i Phonak Target



Ved hjælp af de tre faneblade **[Bruger]**, **[Apparater]** og **[Tilpasning]** samt panelet ovenover kan du let navigere i softwaren og se statusinformation.



Alle brugeroplysninger, såsom personlige data og audiogram, findes på denne fane.

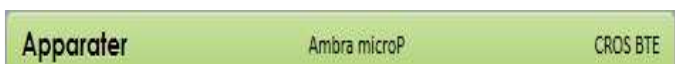

Alle høreapparater, akustisk kobling, fjernbetjening og andet tilbehør findes her.



Alle justeringer af apparatet foretages her.



Panelet viser tilpasningsstatus og indeholder genveje.



Ved tryk på knappen **[X Luk session]** startes dialogboksen Gem, som gemmer indstillingerne i høreapparaterne og databasen.

# Phonak Target™ 2.1


## Tilslut høreapparaterne



Kontroller, at den rette tilpasningsenhed er vist. Du kan skifte tilpasningsenhed ved at bruge rullepilen ud for tilpasningsenhed.

Klik på **[TILSLUT]** for at starte tilpasningen. Det tilsluttede høreapparat vises på panelet.

## Kontroller de akustiske parametre

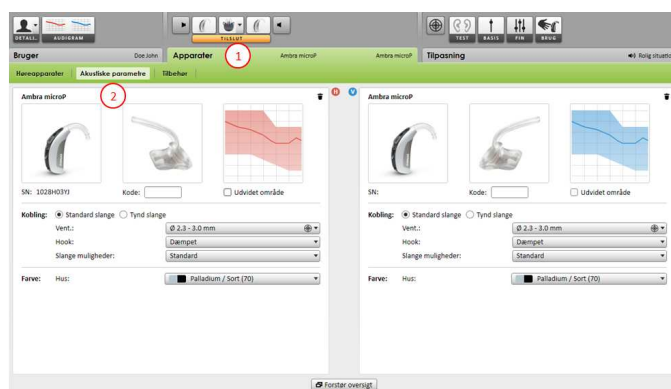

Du kan når som helst se eller ændre de akustiske parametre.

1. Klik på fanen **[Apparater]**.

**[Akustiske parametre]** Vælg den rigtige kobling på skærmen.




Phonak Target identificerer automatisk tilsluttet tilbehør. Du skal blot slutte det til under tilpasningen. Tag altid batteriet ud, før du sætter USB-kablet i. Identificeret tilbehør vises på panelet ved siden af de tilsluttede høreapparater.

Tilbehør kan også vælges manuelt på fanen **[Apparater]** > **[Tilbehør]**.

Når indstillingerne gemmes, vises tilbehøret i dialogboksen Gem.

# Phonak Target™ 2.1


## Start tilpasningen

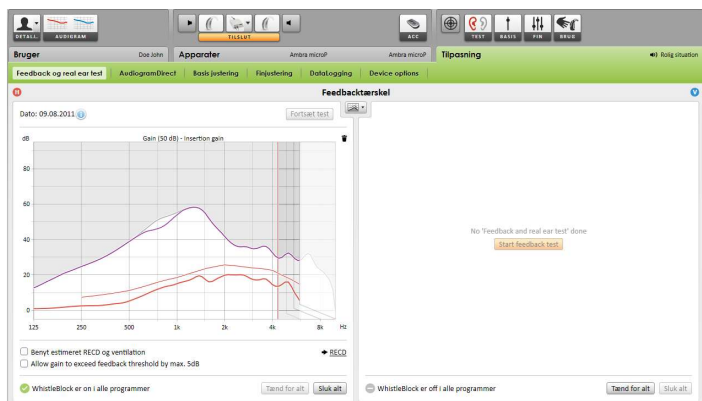

1. Klik på fanen **[Tilpasning]**.

2. På skærmen **[Feedback og real ear test]** skal du klikke på **[Start feedback test]** for at køre testen. Hvis du vil bruge testresultaterne til at beregne den estimerede RECD og de akustiske parameterindstillinger, skal du markere afkrydsningsfeltet **[Benyt estimeret RECD og ventilation]**. Afkrydsningsfeltet er kun tilgængeligt, hvis systemet kan beregne den estimerede RECD og ventilation.

Det anbefales at køre Feedback og real ear test før test med AudiogramDirect.

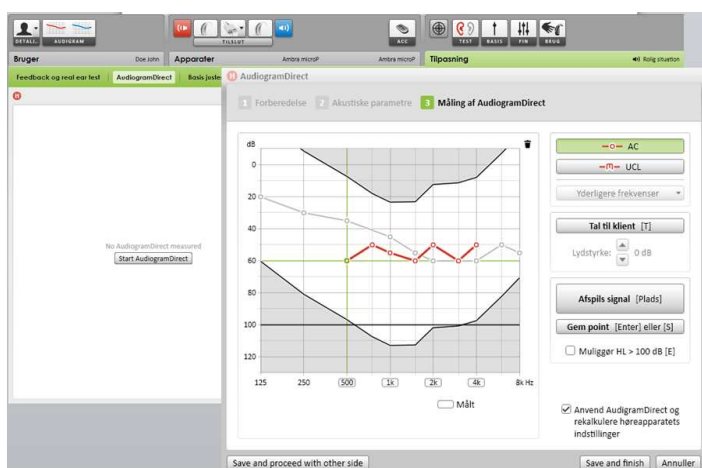

1. Klik **[AudiogramDirect]** for at teste høreknækpunktet og UCLs via det tilsluttede høreapparat.

2. Klik på **[Start AudiogramDirect]** og følg anvisningerne.


I Phonak Target Setup (adgang via startskærmen) kan du fastsætte det ønskede måleforhold.



Gå til **[Basis justering]**, hvis det er nødvendigt at justere **[Gain niveau]**, **[Kompensation for okklusion]**, **[BassBoost]** eller **[kompression indstilling]**. Værktøjerne kan vælges via fanerne nederst på skærmen.

Gainniveauerne og kompressionsindstillingerne skal baseres på brugerens anvendelseserfaring og den valgte tilpasningsregel.

# Phonak Target™ 2.1

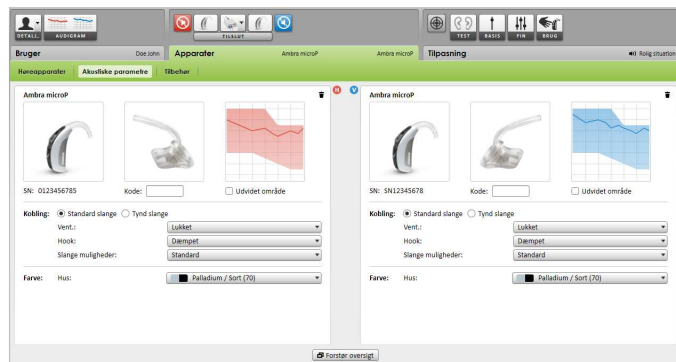


## [Kompression indstilling]

### [Prescribed compression] (Foreskrevet kompression)

vælges, medmindre brugeren har stor erfaring med brug af lineær signalbehandling. Hvis det er tilfældet, vælges **[Semi-linear]** (Semi-lineær). Denne indstilling gør kompressionsindstillingerne mere lineære, end den valgte tilpasningsregel anbefaler, for at gøre overgangen fra lineær signalbehandling nemmere.

Du kan også manuelt vælge **[Linear]** (lineær). Denne indstilling bevarer målene fra den valgte tilpasningsregel, samtidig med at alle kompressionsindstillinger gøres så lineære som muligt.

## Finjustering af høreapparaterne

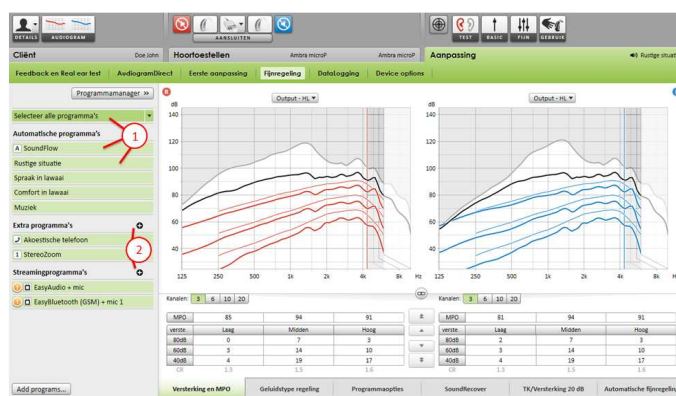

Den venstre side af skærmen **[Fine tuning]** (Finjustering) anvendes til håndtering af programmerne.


1. Klik på **[All programs]** (Alle programmer) for at justere alle programmerne samlet.

Klik på **[SoundFlow]** for kun at justere de automatiske programmer.

Klik på et enkelt program på listen, f.eks. **[Rolig situation]**, for kun at justere det pågældende program.

2. Klik på ikonerne **[+]** for at tilføje et ekstra manuelt eller let program eller et streamingprogram.


Du kan få adgang til **[Program manager]** (Programstyring) ved at klikke på knappen over programmerne. Via programstyring kan du foretage yderligere programjusteringer.

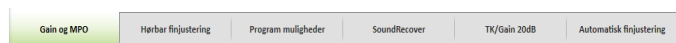

## Fanenavigation

Faner nederst på skærmen giver adgang til tilpasningsværktøjerne. Hvert værktøj indeholder specifikke modifikatorer til finjustering af høreapparatet.

# Phonak Target™ 2.1

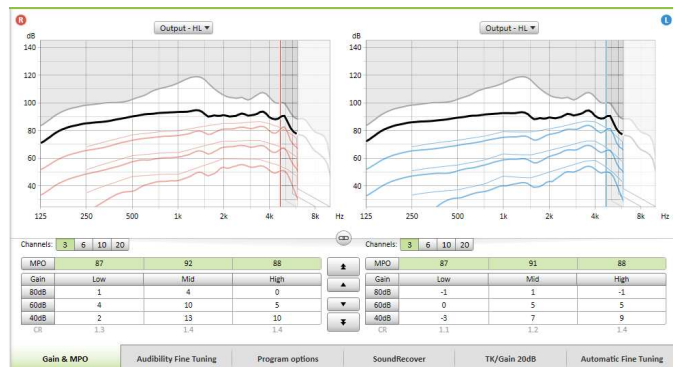


## [Gain&MPO]

Vælg gainværdierne med markøren for at justere dem. Gainværdierne kan justeres til svage (G40), moderate (G60) og kraftige (G80) inputlyde.

Det optimale tilpasningsområde er tilgængeligt, hvis de individuelle UCL-værdier blev indtastet i brugerens audiogram.

Du kan ændre MPO for alle kanaler samtidigt ved at klikke på **[MPO]**, som er vist til venstre ved siden af MPO-værdierne. Den generelle gainværdi kan ændres ved at klikke på **[Gain]**.


Kompressionsforholdet for hver kanal er vist i rækken umiddelbart under gainværdierne.

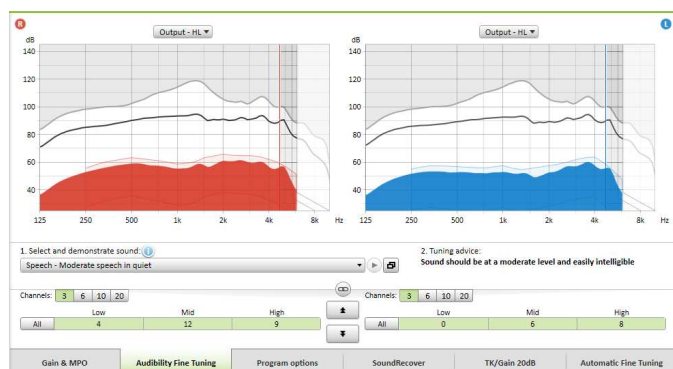

## [Audibility Fine Tuning]

De lydeksempler, der kan vælges, og de tilknyttede gainværdier vises i kurvevisningen. Lydeksemplerne kan afspilles, hvis du vil simulere et bestemt lytemiljø.

Justeringerne påvirker kun de gainniveauer og -frekvenser, som er relevante for at forbedre hørbarheden af de valgte stimuli.

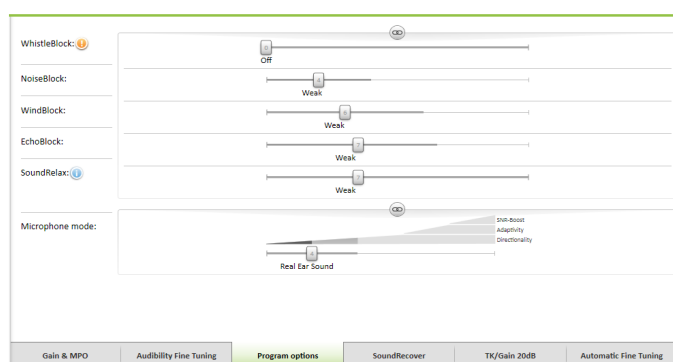

## [Program options]


Lydrensningsfunktionerne kan finjusteres individuelt efter behov. De aktuelle indstillinger er placeret på skalaer, der går fra 0 til 20, og de tilgængelige intervaller på hver skala er synlige.

Et fuldt brugerdefinerbart program fås som et ekstra program.

De lydrensningsjusteringer, der foretages ved hjælp af FlexControl, vises ved efterkontrollen, hvis der findes registrerede data.



# Phonak Target™ 2.1

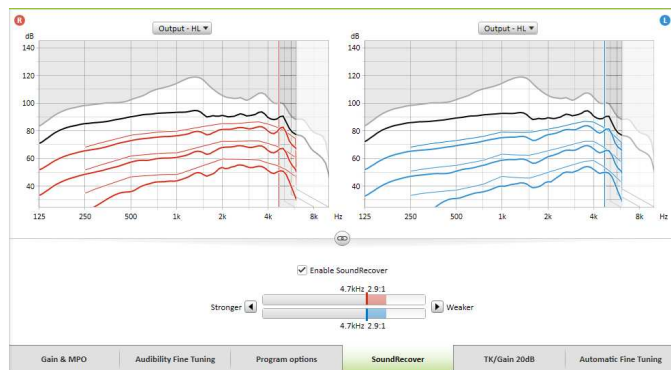


## [SoundRecover]

De enkelte SoundRecover-indstillinger, der fastsættes på baggrund af forhåndsberegningen, kan finjusteres.

Ved binaural tilpasning beregnes grænsefrekvensen og frekvenskompressionsforholdet i forhold til øre, hvor hørelsen er bedst. Kontroller SoundRecover-indstillingerne, hvis inkompatible høreapparater skal tilpasses under samme session.


Mængden af frekvenskompression kan øges eller reduceres efter behov for at øge taleforståeligheden, hørbarheden og lydkvaliteten.

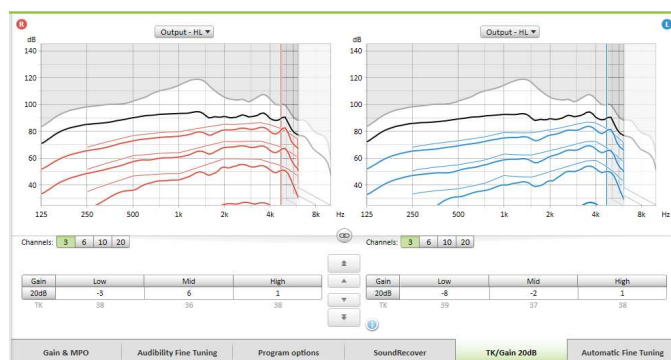

## [TK/Gain 20dB]

Lydstærkningen af meget svage (G20) indgangsslyde kan justeres ved hjælp af dette justeringsværktøj. En øget gainværdi for meget svage indgangsslyde reducerer knæpunktet (TK) og omvendt.

Vælg værdierne med markøren for at justere dem. Under gainværdierne vises TK-værdierne for hver enkelt kanal. Gain-/udgangsslydkurven for meget svage indgangsslyde vises på kurvevisningen.

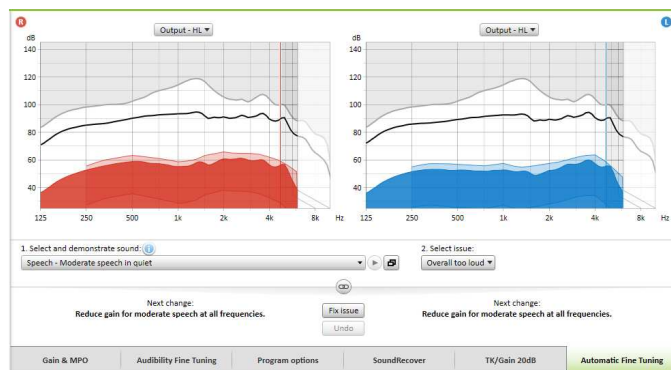

## [Automatic Fine Tuning]

er et situationsbaseret finjusteringsværktøj. Justeringsmulighederne afhænger af brugerens vurdering af lydsituationen.

Finjusteringstrinene vises i oversigtsform, før handlingen udføres af høreapparatspecialisten. Alt efter det valgte program er et anbefalet lydeksempel forhåndsvalgt.


Lydeksemplerne kan afspilles, hvis du vil simulere lyttemiljøet.



Funktionen **fortryd/annuller fortryd** er placeret på menulinjen øverst på skærmen. Benyt den, hvis du vil fortryde eller annullere fortrydelsen af trin på skærmen finjustering.

# Phonak Target™ 2.1

## Device Options

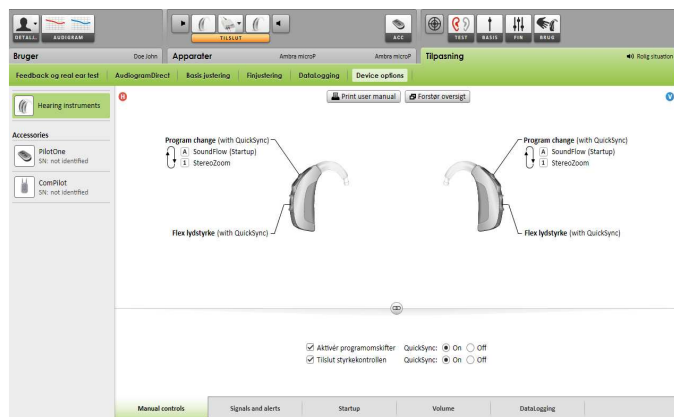


Ved at klikke på **[Device options]** kan du indstille høreapparatets muligheder, såsom bip-konfiguration, samt indstillinger for det valgte tilbehør.


## Afslutning af tilpasningen



Du kan når som helst lukke sessionen ved at klikke på **[X Luk session]** i skærmens øverste højre hjørne.

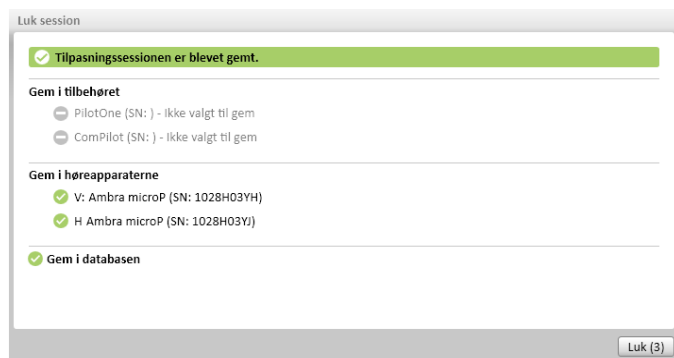

Standarddialogboksen Gem bekræfter, at indstillingerne i høreapparater og tilbehøret er blevet gemt.

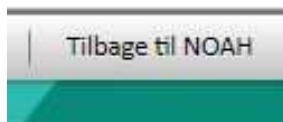

Efter lagringen fører Phonak Target dig videre til startskærmen.


Hvis du arbejder under NOAH, kan du vende tilbage til NOAH ved at klikke på **[Tilbage til NOAH]** i startskærmens øverste højre hjørne.

# Phonak Target™ 2.0

## Phonak CROS

Phonak CROS kan tilpasses som et CROS- og BiCROS-system. Det er kompatibelt med alle trådløse Phonak Spice Generation-høreapparater.

### Tilslut høreapparaterne

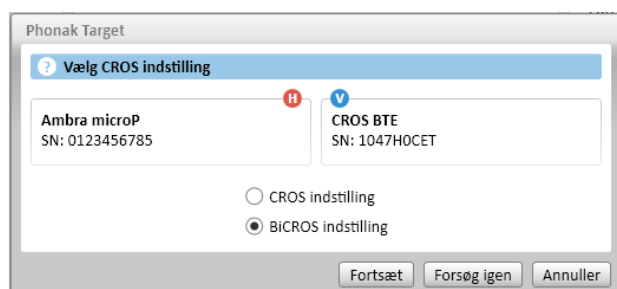


Tilslutningsprocessen er den samme som for enhver anden tilpasning.

Angiv om Phonak CROS skal bruges som CROS- og BiCROS-system, når tilslutningen er færdig.

### Start tilpasningen

Start feedbacktesten i tilfælde af en BiCROS-tilpasning.

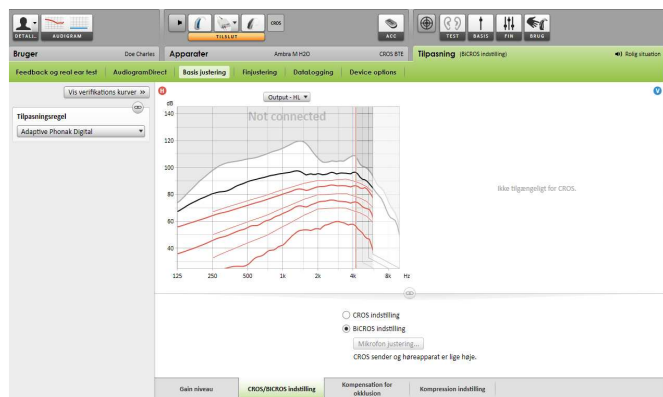

I **[Basis justering]** vil høreapparatets justering af **[Gain level]** i en BiCROS-tilpasning optimere høreapparatets korrekte forstærkning ved streaming. Ændringerne vil kun gælde for høreapparatet.

Hvis du har brug for at justere højre/venstre-balancen i en BiCROS-tilpasning: Klik på **[CROS/BiCROS indstilling]** på skærmen **[Basis justering]**.

Når du har valgt BiCROS, skal du klikke på **[Mikrofon justering...]** og følge anvisningerne om, hvordan du tilpasser Phonak CROS-senderens og -høreapparatets lydstyrkebalance.

Høreapparatet på det hørende øre kan justeres på samme måde, som det gøres ved en standardtilpasning.

Den trådløse forbindelse mellem Phonak CROS-senderen og -høreapparatet begynder automatisk streamingen, når begge høreapparater er blevet frakoblet tilpasningsenheden og tændt.

Der lyder en akustisk signaltone af typen 'CROS forbundet' i høreapparatet, når Phonak CROS-senderen og -høreapparatet er forbundet.