

# Phonak Target 6.1

## Οδηγός ρύθμισης Phonak Target



Το λογισμικό ρύθμισης Phonak Target προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ακοοπροσθετιστές, για τη διαμόρφωση, τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Αυτός ο οδηγός προσφέρει μια λεπτομερή εισαγωγή για τη ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας με το Phonak Target. Επιπλέον, στην οθόνη εκκίνησης του Phonak Target, μπορείτε να βρείτε το στοιχείο [Ειδήσεις].

Για τις παρακάτω δυνατότητες στο Phonak Target, υπάρχουν ειδικοί οδηγοί ρύθμισης (\*σε επιλεγμένες χώρες):

**Junior mode**

**Naída Link**

**Υποστήριξη εξ'αποστάσεως Phonak\***

**Phonak Target/ALPS\***

**SoundRecover2**

**TargetMatch**

**Ισορροπιστής εμβοών**

**Επιβεβαίωση**

## Περιεχόμενο

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Δομή και πλοήγηση .....                                                | 2  |
| Προετοιμασία των ακουστικών βαρηκοΐας και του CROS .....               | 2  |
| Προετοιμασία των δοκιμαστικών ακουστικών βαρηκοΐας Phonak Marvel ..... | 3  |
| Σύνδεση των ακουστικών βαρηκοΐας .....                                 | 3  |
| Έλεγχος δέκτη .....                                                    | 4  |
| Έλεγχος των ακουστικών παραμέτρων .....                                | 4  |
| Αξεσουάρ .....                                                         | 4  |
| Ρύθμιση .....                                                          | 5  |
| Βασική ρύθμιση .....                                                   | 5  |
| Μικρορυθμίσεις .....                                                   | 6  |
| Ολοκλήρωση της συνεδρίασης ρύθμισης .....                              | 10 |
| Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων .....                               | 11 |
| Απαιτήσεις συστήματος .....                                            | 12 |

## Δομή και πλοήγηση

Οι τρεις καρτέλες **[Πελάτης]**, **[Ακουστικά]** και **[Ρύθμιση]**, αλλά και ο παραπάνω πίνακας, διευκολύνουν την πλοήγηση και σας παρέχουν πληροφορίες κατάστασης.

Ο πίνακας εμφανίζει την κατάσταση ρύθμισης, ενώ προσφέρει και συντομεύσεις.

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Client Target, Phonak                                                                                                   | Instruments Audéo M30-312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fitting Calm situation <J>                            |
| Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, όπως προσωπικά δεδομένα και ακουογράμματα, υπάρχουν σε αυτήν την καρτέλα. | Όλα τα ακουστικά βαρηκοΐας, οι ακουστικές παράμετροι, τα τηλεχειριστήρια και άλλα αξεσουάρ βρίσκονται εδώ.<br><b>Σημείωση:</b> Περάστε το ποντίκι επάνω από το εικονίδιο του ακουστικού βαρηκοΐας για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (μόνο για επαναφορτιζόμενα) και την άδεια χρήσης Roger. | Από εδώ πραγματοποιούνται όλες οι ρυθμίσεις συσκευών. |

## Προετοιμασία των ακουστικών βαρηκοΐας και του CROS

### iCube/iCube II/Noahlink Wireless

Δεν χρειάζονται καλώδια για τα ακουστικά βαρηκοΐας. Απλώς τοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας τη μπαταριοθήκη. Για επαναφορτιζόμενα, ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας.

**Για τη ρύθμιση του CROS II ή του CROS B, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το iCube II, καθώς επιτρέπει πιο γρήγορες μικρορυθμίσεις και άμεση επίδειξη στο σύστημα CROS.**

Το CROS II μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με ακουστικά βαρηκοΐας Venture.


Το CROS B μπορεί να ρυθμιστεί με ακουστικά βαρηκοΐας Belong™ (με εξαίρεση τα επαναφορτιζόμενα).

Το CROS B-R μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με ακουστικά βαρηκοΐας Phonak Audéo B-R.

### NOAHlink ή HI-PRO


Συνδέστε τα καλώδια προγραμματισμού στα ακουστικά βαρηκοΐας και τη συσκευή ρύθμισης.

Για ρυθμίσεις CROS, δεν υπάρχει δυνατότητα επίδειξης CROS με συνδεδεμένα καλώδια.

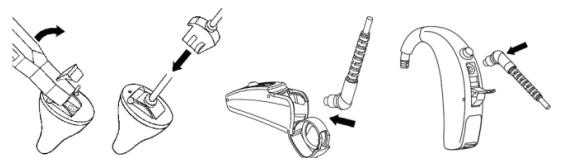


## Προετοιμασία των δοκιμαστικών ακουστικών βαρηκοΐας Phonak Marvel

Τα δοκιμαστικά ακουστικά βαρηκοΐας Phonak Marvel προσφέρουν τη δυνατότητα αλλαγής των επιπέδων απόδοσης σε μία συσκευή. Κάντε κλικ στο **[Δοκιμή & Εργαλεία]**, επιλέξτε το στοιχείο **[Δοκιμαστικά ακουστικά βαρηκοΐας]** και, στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο **[Διαμορφώστε]** για να ξεκινήσετε.

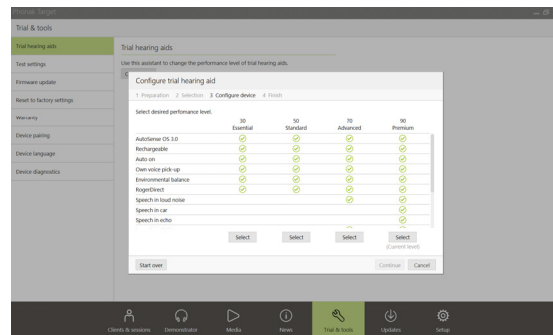

Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης και πατήστε **[Συνέχεια]**. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι συσκευές είναι έτοιμες για ρύθμιση σε μια συνεδρίαση ρύθμισης.

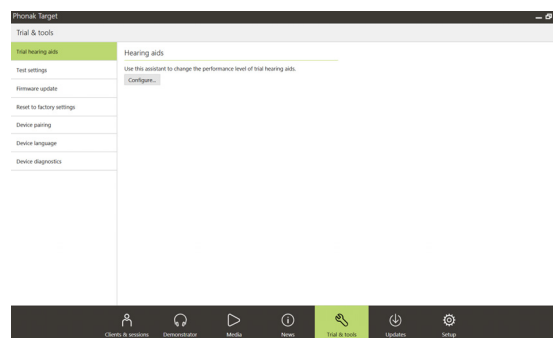

## Σύνδεση των ακουστικών βαρηκοΐας


Ανοίξτε τη συνεδρίαση ρύθμισης και επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η σωστή συσκευή ρύθμισης. Για να αλλάξετε συσκευή ρύθμισης, χρησιμοποιήστε το βέλος ανάπτυξης προς τα κάτω, δίπλα στη συσκευή ρύθμισης, στον πίνακα.



Κάντε κλικ στο στοιχείο **[Σύνδεση]** για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. Τα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας θα εμφανιστούν στον πίνακα.

Για συσκευές άμεσης συνδεσιμότητας:

- Αν μια συσκευή δεν βρεθεί, ανοίξτε/κλείστε το πορτάκι μπαταριοθήκης ή απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τα επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρηκοΐας για ρύθμιση σε κατάσταση σύζευξης.
- λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας για να το επισημάνετε στη λίστα, όταν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες συσκευές, ή για να επιβεβαιώσετε την πλευρά που θα αντιστοιχίσετε σε έναν πελάτη.
- εμφανίζονται ως συζευγμένο ζευγάρι.

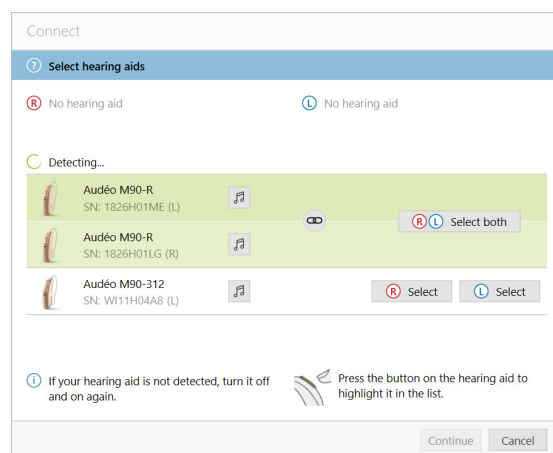

Για όλες τις νέες ρυθμίσεις, θα προσφέρεται ένα προτεινόμενο επίπεδο εμπειρίας πελάτη, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες της συνεδρίασης ρύθμισης.


Τα δεδομένα του ακοογράμματος από το NOAH θα εισάγονται αυτόματα στο Phonak Target και θα λαμβάνονται υπόψη για τον αρχικό υπολογισμό. Για ανεξάρτητη έκδοση του Phonak Target, εισαγάγετε το ακοόγραμμα στην καρτέλα **[Ακοόγραμμα]**.

## Έλεγχος δέκτη

Κατά την πρώτη σύνδεση συσκευών, το Phonak Target ελέγχει αν ο δέκτης που είναι συνδεδεμένος με τις συσκευές Α udéo B και Α udéo M αντιστοιχεί στην επιλογή που υπάρχει στην οθόνη **[Ακουστικές παράμετροι]**.

Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία, το Phonak Target θα σας ειδοποιήσει και θα σας ζητήσει να ελέγξετε το δέκτη. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το δέκτη ή να αλλάξετε την επιλογή της ακουστικής παραμέτρου.


Για να εκκινήσετε έναν επανέλεγχο του δέκτη, κάντε κλικ στην επιλογή **[Ελέγξτε]** στην οθόνη **[Ακουστικές παράμετροι]**.

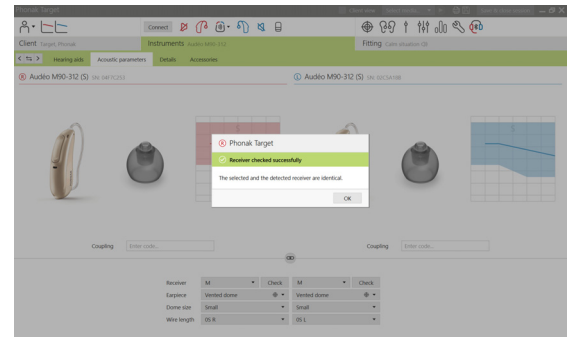

## Έλεγχος των ακουστικών παραμέτρων

Το Phonak Target συνδέει αυτόματα ακουστικές παραμέτρους μεταξύ τους όταν είναι ίδιες. Μπορείτε να δείτε, να αλλάξετε ή να αποσυνδέσετε τις ακουστικές παραμέτρους ανά πάσα στιγμή.


Κάντε κλικ στην καρτέλα **[Ακουστικά] > [Ακουστικές παράμετροι]**. Εισαγάγετε ή επιβεβαιώστε τις σωστές πληροφορίες σύζευξης.

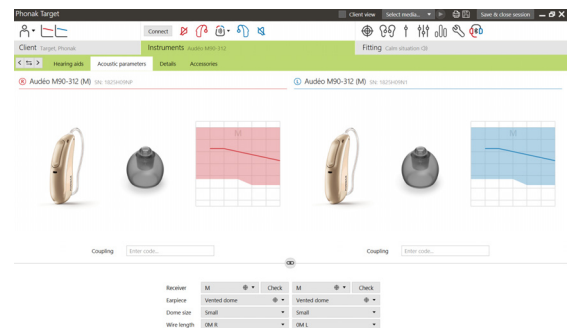

## Αξεσουάρ

Ανάλογα με τα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας, το Phonak Target μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τα συνδεδεμένα αξεσουάρ κατά τη συνεδρίαση ρύθμισης. Τα αξεσουάρ που ανιχνεύονται εμφανίζονται στον πίνακα, δίπλα στα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας.

Τα αξεσουάρ μπορούν επίσης να επιλέγονται με χειροκίνητο τρόπο στην καρτέλα **[Ακουστικά] > [Αξεσουάρ]**.

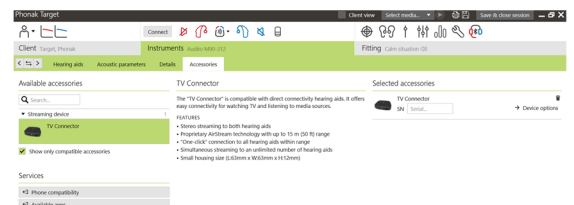

Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, τα αξεσουάρ αναγράφονται στο παράθυρο διαλόγου αποθήκευσης.

**Σημαντικό:** Κατά τη ροή από αξεσουάρ, το CROS θα αποσυνδέεται αυτόματα. Το CROS θα επανασυνδεθεί αυτόματα όταν διακοπεί η ροή.

## Ρύθμιση

Κάντε κλικ στην καρτέλα **[Ρύθμιση]** για να έχετε πρόσβαση στο **[Feedback και τεστ real ear]**.

Το τεστ ανάδρασης μπορεί να πραγματοποιείται και στα δύο αυτιά ή σε ένα αυτί τη φορά. Κάντε κλικ στο στοιχείο **[R]/[Εκκινήστε και τα δύο] / [L]** για να ξεκινήσετε το τεστ.

Για να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα του τεστ για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου RECD και των ρυθμίσεων ακουστικών παραμέτρων, επιλέξτε το κουτάκι ελέγχου **[Χρησιμοποιήστε το εκτιμημένο RECD και vent]**. Το πλαίσιο ελέγχου θα είναι διαθέσιμο μόνο αν το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει το RECD και την εκτίμηση εξαερισμού.

## AudiogramDirect

Επιβεβαιώστε ότι το **[Feedback και τεστ real ear]** έχει εκτελεστεί πριν από τη χρήση του AudiogramDirect.

Κάντε κλικ στο **[AudiogramDirect] > [Εκκίνηση]** για να ελέγξετε τα κατώφλια ακοής και τα UCL χρησιμοποιώντας τα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας. Για τα κατώφλια επιπέδου ακοής, διατίθενται τα **[Ρυθμικός τόνος]**.

Μπορείτε να συγκρίνετε και να ελέγξετε προηγούμενες δοκιμές ακοής κάνοντας κλικ στο στοιχείο **[Ιστορικό]**.




Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες αντιδράσεις μέτρησης AC και UCL, μεταβείτε στο **[Εκκίνηση] > [Συνεδρίαση ρύθμισης] > [AudiogramDirect]**.

## Βασική ρύθμιση

Μεταβείτε στο στοιχείο **[Βασική ρύθμιση] > [Αρχική ρύθμιση]** αν απαιτούνται ρυθμίσεις στο Επίπεδο ανάκτησης, την Αποζημίωση σύγκλισης ή τη Συμπύεση. Οι ρυθμίσεις για το επίπεδο ανάκτησης και τη συμπύεση βασίζονται στην εμπειρία της χρήσης από τον πελάτη και στον επιλεγμένο τύπο ρύθμισης.

Ανάλογα με τα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετα εργαλεία, όπως ο **[Ισορροπιστής εμβόων]** και ο **[Εξισορροπιστής CROS]**, μέσω της καρτέλας στο κάτω μέρος της οθόνης.

- Για να ρυθμίσετε την αναλογία ηχηρότητας μεταξύ της συσκευής CROS και του ακουστικού βαρηκοΐας, κάντε κλικ στο στοιχείο **[Εξισορροπιστής CROS]**.

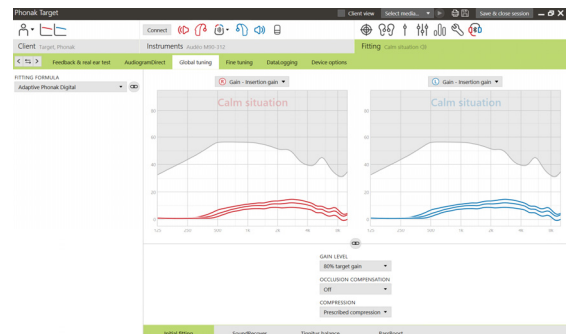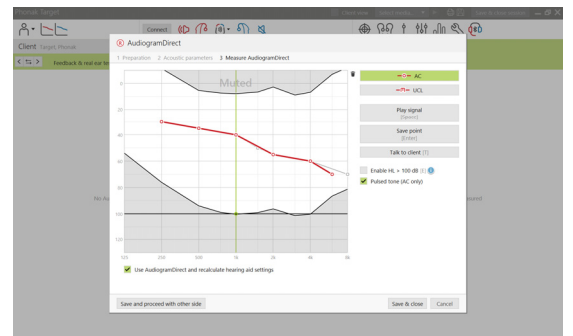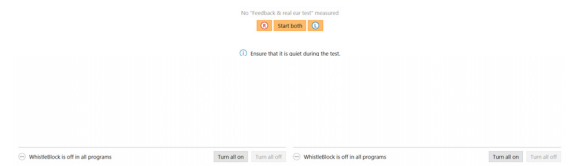

## Auto acclimatization

Επιβεβαιώστε ότι το **[Feedback και τεστ real ear]** έχει εκτελεστεί πριν από τη χρήση του Auto acclimatization.

Επιλέξτε **[Auto acclimatization]** στο μενού "Επίπεδο ανάκτησης", στην καρτέλα **[Αρχική ρύθμιση]**.

Κάντε κλικ στο [...] για να ορίσετε το Επίπεδο εκκίνησης, το Τελικό επίπεδο και τη διάρκεια εντός της οποίας η ανάκτηση του ακουστικού βαρηκοΐας αυξάνεται αυτόματα στο ρυθμισμένο Τελικό επίπεδο.

## Προβολή σε πραγματικό χρόνο

Κάντε κλικ στην **[Όψη πελάτη]** για να μεταβείτε στην Προβολή σε πραγματικό χρόνο.

Η Προβολή σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμη για όλα τα ακουστικά βαρηκοΐας, ως μια επιλογή παρουσίασης καμπυλών ρύθμισης, σε μια μεγάλη προβολή φιλική για τον πελάτη ή σε μια δεύτερη οθόνη.

Η επίδειξη για βελτιώσεις στην κατανόηση ομιλίας, την ανάκτηση, την έξοδο, το SoundRecover και την ανάλυση καναλιών μπορούν να γίνει με ευκολία, ειδικά με τα παρεχόμενα δείγματα ήχου stereo ή ήχου surround.

## Μικρορυθμίσεις

Η αριστερή πλευρά της οθόνης **[Μικρορυθμίσεις]** χρησιμοποιείται για το χειρισμό των προγραμμάτων.




Κάντε κλικ στο στοιχείο **[Όλα τα προγράμματα]** για να ρυθμίσετε ταυτόχρονα όλα τα προγράμματα.

Κάντε κλικ στο στοιχείο **[AutoSense OS 3.0]** για να τροποποιήσετε όλα τα ακουστικά αυτόματα προγράμματα ή στο στοιχείο **[AutoSense OS 3.0 (streaming)]** για να τροποποιήσετε το AutoSense OS για ροή.

Για να τροποποιήσετε ένα μόνο πρόγραμμα, κάντε κλικ στο πρόγραμμα, π.χ. **[Ήρεμη κατάσταση]**, στη λίστα και ρυθμίστε το ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο **[+]** για να προσθέσετε ένα επιπλέον χειροκίνητο πρόγραμμα.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προγράμματα κάνοντας κλικ στο στοιχείο **[Διαχειριστής προγράμματος]** πάνω από τα προγράμματα. Έτσι θα μπορέσετε να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις προγραμμάτων. Η λειτουργία αναίρεσης/επανάληψης βρίσκεται στη γραμμή του μενού, στην κορυφή της οθόνης, και μπορεί να

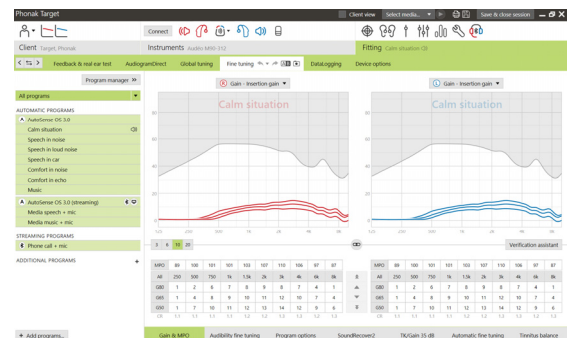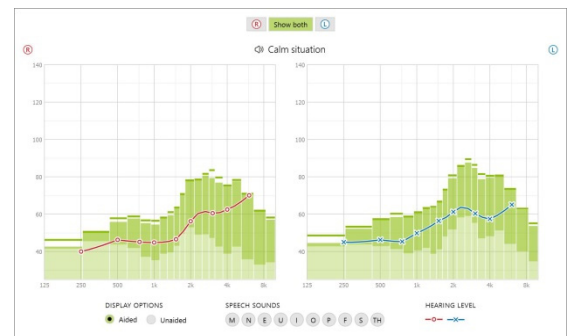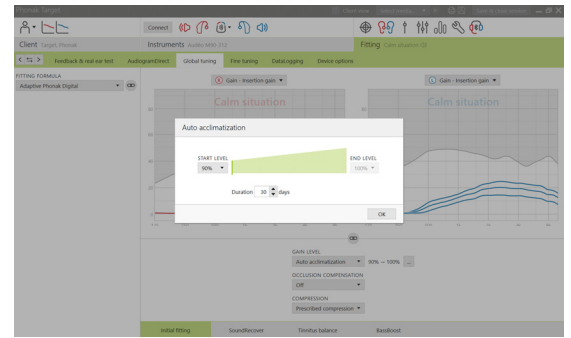

Οι καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης σας προσφέρουν πρόσβαση στα εργαλεία ρύθμισης. Κάθε εργαλείο προσφέρει συγκεκριμένους τροποποιητές για την πραγματοποίηση μικρορυθμίσεων στο ακουστικό βαρηκοΐας.



χρησιμοποιηθεί για αναίρεση ή επανάληψη βημάτων στην οθόνη με τις μικρορυθμίσεις.

## Ανάκτηση & ΜΡΟ

Επιλέξτε τιμές ανάκτησης με το δρομέα του ποντικιού για να τις ρυθμίσετε. Οι τιμές ανάκτησης είναι ρυθμιζόμενες για απαλούς, μέτριους και δυνατούς ήχους εισόδου. Το βέλτιστο εύρος εφαρμογής είναι διαθέσιμο αν οι επιμέρους τιμές UCL έχουν καταχωρηθεί στο ακοόγραμμα του πελάτη.

Για να τροποποιήσετε το ΜΡΟ ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια, κάντε κλικ στο στοιχείο **[ΜΡΟ]** που εμφανίζεται στα αριστερά, δίπλα από τις τιμές ΜΡΟ. Η συνολική ανάκτηση μπορεί να αλλάξει κάνοντας κλικ στο στοιχείο **[Ανάκτηση]**.

Η αναλογία συμπίεσης κάθε καναλιού εμφανίζεται στη σειρά που βρίσκεται ακριβώς από κάτω από τις τιμές ανάκτησης.




## Audibility fine tuning

Τα επιλέξιμα δείγματα ήχου και η σχετική ανάκτηση εμφανίζονται στην παρουσίαση καμπυλών. Υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής των δειγμάτων ήχου, για προσομοίωση ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ακρόασης.

Οι τιμές ανάκτησης εμφανίζονται για απαλούς, μέτριους και δυνατούς ήχους εισόδου. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο επίπεδα ανάκτησης και συχνότητες που σχετίζονται με την ενίσχυση της ακουστικότητας των επιλεγμένων ερεθισμάτων, τα οποία υποδεικνύονται από τους διαφορετικούς τόνους κόκκινου/δεξί και μπλε/αριστερό.


## Επιλογές προγράμματος

Οι επιλογές προγράμματος μπορούν να ρυθμίζονται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις τοποθετούνται σε κλίμακες με αρίθμηση από το 0 έως το 20. Επιπλέον, οι διαθέσιμες τιμές εύρους σε κάθε κλίμακα είναι ορατές και εξαρτώνται από το επίπεδο απόδοσης.

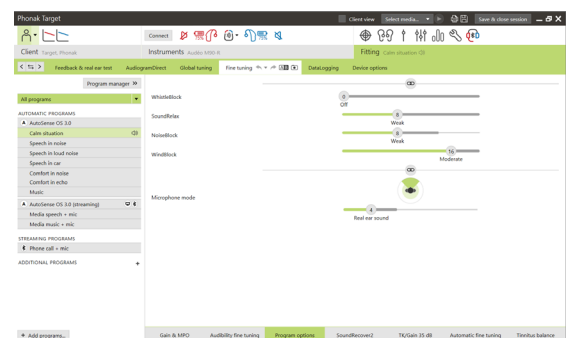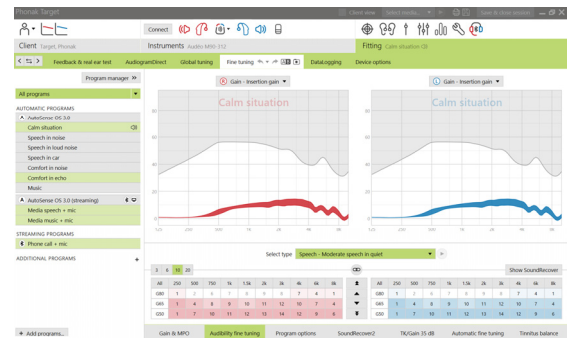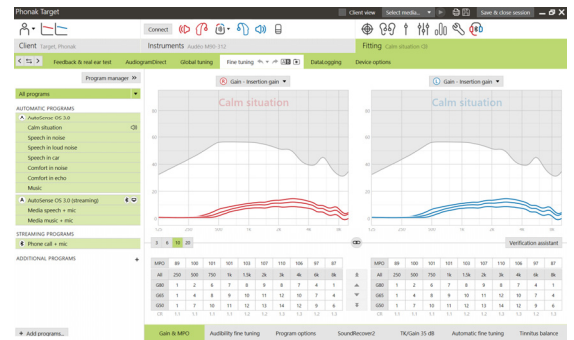

Για ακουστικά βαρηκοΐας άμεσης συνδεσιμότητας, μπορούν να τροποποιούνται οι προεπιλεγμένες αντιδράσεις εναλλαγής για πρόσβαση στη λειτουργία ροής (π.χ. TV Connector, Roger™, Phonak PartnerMic™):

- **[Αυτόματο]** - τα ακουστικά βαρηκοΐας θα πραγματοποιούν αυτόματα εναλλαγή και θα λαμβάνουν ένα σήμα ροής (προεπιλογή).
- **[Χειροκίνητο (με μπιμπ)]** - ακούγεται ένα μπιμπ στα ακουστικά βαρηκοΐας και ο πελάτης επιλέγει με χειροκίνητο τρόπο να λάβει το σήμα ροής.
- **[Χειροκίνητο ]** - δεν ακούγεται μπιμπ και το πρόγραμμα προστίθεται ως τελευταίο πρόγραμμα.
- Οι αντιδράσεις αυτές είναι διαθέσιμες για TV Connector, Roger και Phonak PartnerMic.

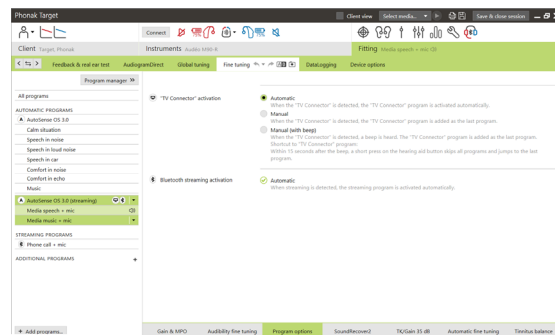

## SoundRecover2/SoundRecover


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικρορυθμίσεις στις μεμονωμένες ρυθμίσεις του SoundRecover, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί με τον αρχικό υπολογισμό. Για εφαρμογές διπλής ρύθμισης, η συχνότητα αποκοπής και η αναλογία συμπίεσης συχνότητας υπολογίζονται με βάση το καλό σας αυτί.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του SoundRecover αν πρόκειται να ρυθμίσετε ταυτόχρονα μη συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας σε μία συνεδρίαση.

### SoundRecover2

Ρυθμίστε την ισχύ του SoundRecover2 σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών σας για την Ακουστικότητα ή τη Διακριτικότητα.

Η Ακουστικότητα κάνει τους ήχους υψηλής συχνότητας να ακούγονται περισσότερο, καθώς μετατοπίζονται στην περιοχή καλύτερης χαμηλής συχνότητας. Η Διακριτικότητα αυξάνει τη διαφοροποίηση των ήχων υψηλής συχνότητας όπως τα γράμματα Σ και Ζ.

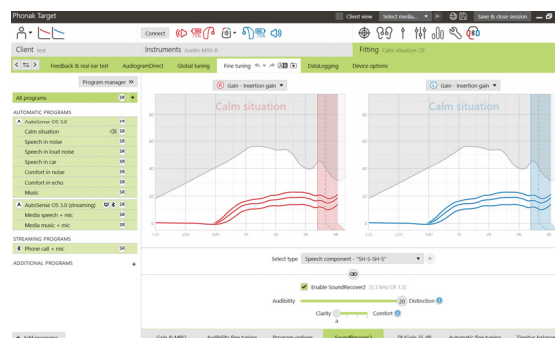


Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για την Ακουστικότητα και τη Διακριτικότητα, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τη Σαφήνεια και την Άνεση.

Η Άνεση κάνει τους ήχους όπως οι αρσενικές φωνές, η δική τους φωνή ή η μουσική να ακούγονται πιο φυσικοί. Η Σαφήνεια προσαρμόζει την ακουστικότητα και τη διακριτικότητα των ήχων υψηλής συχνότητας αν ακούγονται αλλοιωμένοι.

### SoundRecover

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ της συμπίεσης συχνότητας όπως επιθυμείτε για να βελτιώσετε την κατανόηση ομιλίας, την ακουστικότητα και την ποιότητα του ήχου.

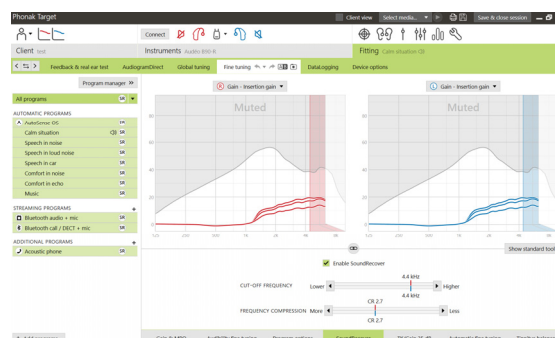





Μπορείτε να επεκτείνετε το εργαλείο ρύθμισης του SoundRecover για να προσαρμόσετε ανεξάρτητα τη συχνότητα αποκοπής και την αναλογία συμπίεσης. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην **[Εμφάνιση των παρατεταμένων εργαλείων]**.

## TK/ανάκτηση 35 dB

Η ενίσχυση των πολύ απαλών ήχων εισόδου (G35) μπορεί να ρυθμιστεί. Η αύξηση ανάκτησης των πολύ απαλών ήχων εισόδου χαμηλώνει το σημείο καμπής (TK) και αντίστροφα.

Επιλέξτε τις τιμές με το δρομέα για να τις ρυθμίσετε. Κάτω από τις τιμές ανάκτησης, εμφανίζονται οι τιμές TK για κάθε κανάλι. Η καμπύλη ανάκτησης/εξόδου για πολύ απαλούς ήχους εμφανίζεται στην παρουσίαση καμπυλών.

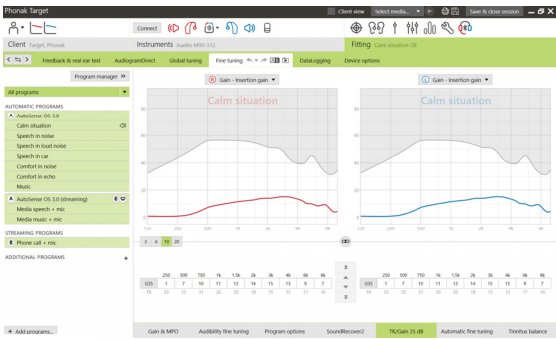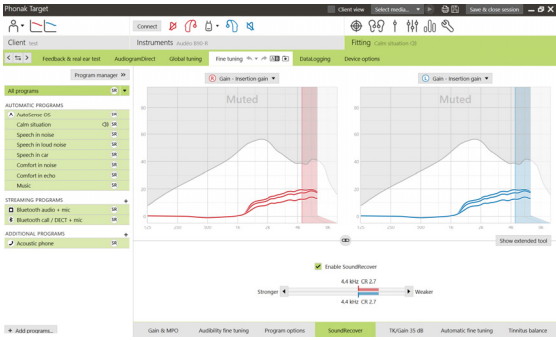

## Αυτόματες μικρορυθμίσεις

Αυτό είναι ένα εργαλείο για μικρορυθμίσεις που βασίζονται στην εκάστοτε κατάσταση. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την αξιολόγηση του πελάτη και την κατάσταση του ήχου.

Τα βήματα για τις μικρορυθμίσεις εμφανίζονται με σαφήνεια πριν από την εφαρμογή της ενέργειας. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, προεπιλέγεται ένα συνιστώμενο δείγμα ήχου.




Υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής των δειγμάτων ήχου για προσομοίωση ενός περιβάλλοντος ακρόασης.

## Αποτελέσματα του Τεστ Αντίληψης Φωνήματος


Τα αποτελέσματα ενός προηγούμενου Τεστ Αντίληψης Φωνήματος μπορούν να προβληθούν και να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της ρύθμισης. Η οθόνη **[Αποτελέσματα PPT]** είναι προσβάσιμη μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμα συμβατά αποτελέσματα τεστ στη λίστα συνεδριάσεων NOAH.

Σημείωση: Οι συστάσεις για τις μικρορυθμίσεις θα παρέχονται μόνο αν χρησιμοποιείται ο τύπος ρύθμισης Adaptive Phonak Digital.

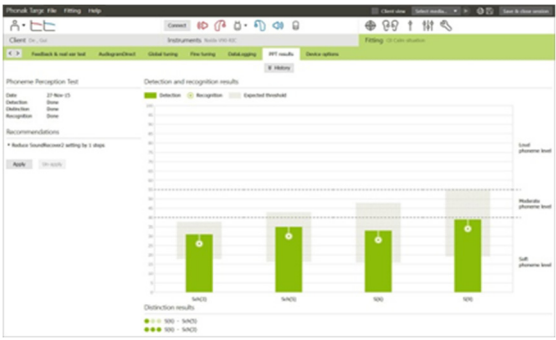


## Επιλογές συσκευής

Επιλέγοντας το στοιχείο **[Επιλογές συσκευής]**, μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές του ακουστικού βαρηκοΐας, όπως τις αντιδράσεις του κουμπιού προγράμματος ή του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών, τα σήματα και προειδοποιήσεις, τις αντιδράσεις εκκίνησης ή το DataLogging.

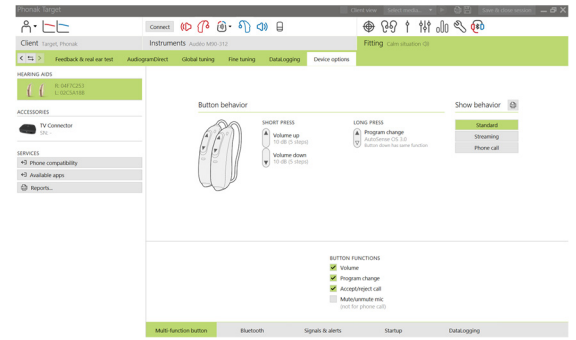

Για συσκευές άμεσης συνδεσιμότητας:

- του ονόματος Bluetooth, ρυθμίσεις πλευράς και διαχείρισης συζεύξεων, κάνοντας κλικ στην καρτέλα **[Bluetooth]**.

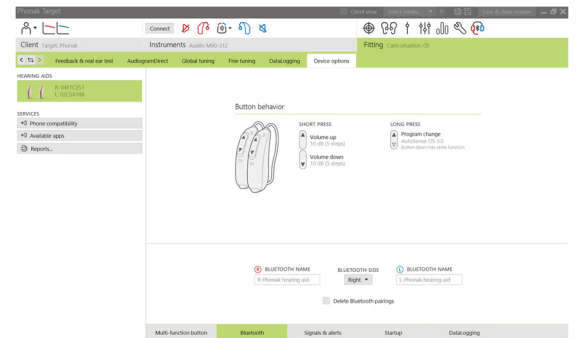


## Ολοκλήρωση της συνεδρίασης ρύθμισης

Μπορείτε να κλείσετε ανά πάσα στιγμή τη συνεδρίαση κάνοντας κλικ στο στοιχείο **[Αποθηκεύστε & κλείστε τη συνεδρίαση]** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε τα είδη για αποθήκευση. Η προεπιλογή για τα δοκιμαστικά ακουστικά βαρηκοΐας Phonak Marvel θα ορίζεται αυτόματα στη μέγιστη δοκιμαστική περίοδο των 6 εβδομάδων.

Το κανονικό παράθυρο διαλόγου αποθήκευσης θα επιβεβαιώνει την επιτυχημένη αποθήκευση των ακουστικών βαρηκοΐας και των αξεσουάρ.

Μετά την αποθήκευση, το Phonak Target θα σας οδηγήσει στην οθόνη εκκίνησης.

Αν εργάζεστε με NOAH, μπορείτε να επιστρέψετε στο NOAH κάνοντας κλικ στο στοιχείο **[Επιστροφή στο Noah]**, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εκκίνησης.

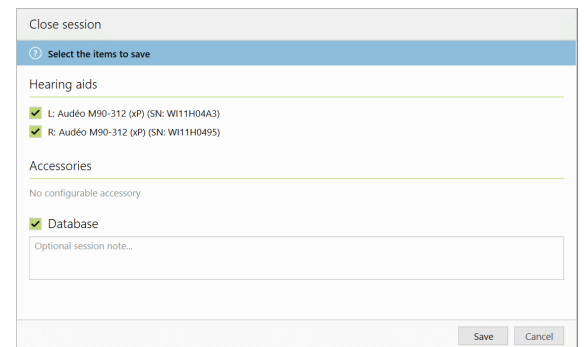

## Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Sonona AG επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν της πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της παραπάνω οδηγίας.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.



Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον ιστότοπο [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).



Παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις για ένα χαρακτηριστικό ή μια λειτουργία και επισημαίνει την εφαρμογή σχετικών πληροφοριών ρύθμισης



Υποδεικνύει έναν περιορισμό στη λειτουργικότητα που ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία του τελικού χρήστη ή επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη

## Απαιτήσεις συστήματος

### Λειτουργικό σύστημα

- Windows 10, Home/Pro/Enterprise
- Windows 8/8.1, το πιο πρόσφατο SP, Pro/Enterprise
- Windows 7, το πιο πρόσφατο SP, Home/Professional/Business/Enterprise/Ultimate

|                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Επεξεργαστής</b>                         | Intel Core ή μεγαλύτερης απόδοσης                                                                                                                                                                |
| <b>RAM</b>                                  | 4 GB ή περισσότερα                                                                                                                                                                               |
| <b>Χώρος στο σκληρό δίσκο</b>               | 3 GB ή περισσότερα                                                                                                                                                                               |
| <b>Ανάλυση οθόνης</b>                       | 1280 x 1024 pixel ή μεγαλύτερη                                                                                                                                                                   |
| <b>Κάρτα γραφικών</b>                       | 16 εκατ. (24 bit) χρώματα οθόνης και άνω                                                                                                                                                         |
| <b>Μονάδα</b>                               | DVD                                                                                                                                                                                              |
| <b>Σειριακή θύρα COM</b>                    | Μόνο αν χρησιμοποιείται το RS-232 HI-PRO                                                                                                                                                         |
| <b>Θύρες USB</b><br>Μία για κάθε χρήση      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασύρματος προσαρμογέας με τεχνολογία Bluetooth®*</li> <li>• HI-PRO</li> <li>• Noahlink Wireless</li> </ul>                                              |
| <b>Διεπαφές προγραμματισμού</b>             | Noahlink Wireless/iCube II/iCube/NOAHlink/RS-232 HI-PRO/HI-PRO USB/HI-PRO2                                                                                                                       |
| <b>Πρόγραμμα οδήγησης Noahlink</b>          | Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση                                                                                                                                                                  |
| <b>Πρόγραμμα οδήγησης Noahlink Wireless</b> | Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση                                                                                                                                                                  |
| <b>Σύνδεση στο διαδίκτυο</b>                | Συνιστώμενες                                                                                                                                                                                     |
| <b>Κάρτα ήχου</b>                           | Stereo ή surround 5.1                                                                                                                                                                            |
| <b>Σύστημα αναπαραγωγής</b>                 | 20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB                                                                                                                                                                 |
| <b>Έκδοση NOAH</b>                          | Η πιο πρόσφατη έκδοση (NOAH 4.4 και άνω)<br>Ελέγξτε τους περιορισμούς για το NOAH για λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit στη διεύθυνση <a href="http://www.himsa.com">http://www.himsa.com</a> |
| <b>TargetMatch</b>                          | Έκδοση NOAH 4.4.2280 και άνω<br>Otometrics Otosuite 4.84.00 και άνω<br>Otometrics AURICAL FreeFit για REM & AURICAL HIT για μετρήσεις test box                                                   |

\*Το λεκτικό σήμα Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG. Inc.

Επικόλληση σήματος CE το 2019



**Κατασκευαστής:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa



058-0125-061

Phonak Target 6.1 DVD

**sonova**  
HEAR THE WORLD