

Styilet de programmation Lyric₃

Mode d'emploi pour professionnels



PHONAK
life is on

Bienvenue


Présentation du nouveau stylet de programmation Lyric3 de Phonak.

Le stylet de programmation Lyric3 est spécialement conçu pour être utilisé par vous, l'audioprothésiste, et permet un transfert sans fil des données d'appareillage de votre PC à l'aide auditive Lyric3 de votre patient.

Veillez lire ce mode d'emploi avec attention pour profiter de toutes les fonctionnalités du stylet de programmation Lyric3.

Phonak – life is on

Description

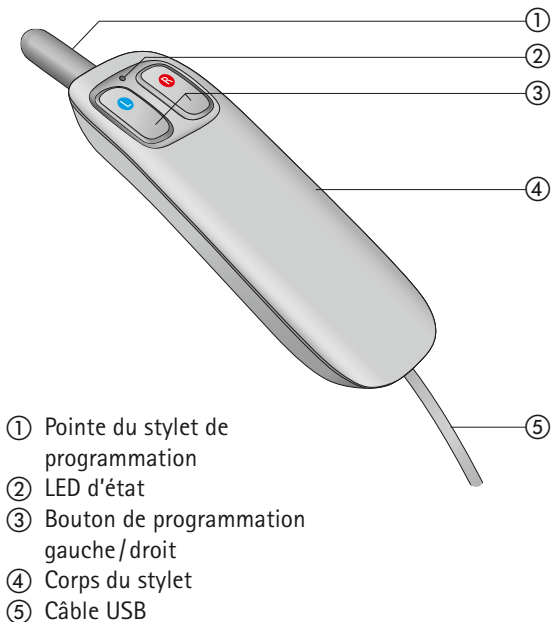


Démarrage

Pour connecter le stylet de programmation Lyric3, branchez la prise USB dans un port USB disponible sur votre ordinateur d'appareillage. Aucun pilote d'installation n'est nécessaire pour le stylet de programmation Lyric3.

Une fois la configuration terminée, la LED d'état du stylet s'allume en vert pour indiquer qu'il est prêt à l'utilisation.

Programmation

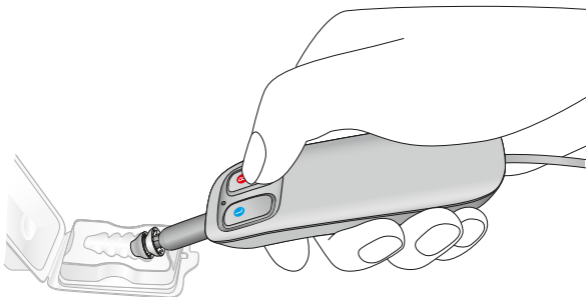

Pour programmer un appareil, tenez la pointe du stylet près de l'extrémité latérale de Lyric3 et appuyez sur le bouton de programmation correspondant à l'oreille que vous voulez appareiller. La LED d'état clignote en vert lors de la programmation.

La LED d'état repasse au vert continu après 3 secondes. Le stylet est alors prêt pour la programmation suivante.

Lyric3 fait entendre un double bip pour indiquer que la programmation est terminée. Lors de la première programmation de Lyric3, il passe du « Réglage usine » à MARCHE lorsque la programmation est terminée avec succès. Il est possible de vérifier cela en provoquant un larsen ou en utilisant un stéthoscope d'écoute.

Si la programmation est effectuée dans l'oreille, demandez au patient de prêter attention aux bips et de les confirmer pour s'assurer de la réussite de la programmation.

Indicateurs supplémentaires

Si une erreur survient pendant la programmation, la LED d'état clignote en orange pendant 3 secondes avant de repasser au vert. Dans ce cas, répétez la procédure de programmation.

Lors de tout autre dysfonctionnement du stylet, la LED d'état s'éclaire en rouge. Dans ce cas, redémarrez le stylet en le déconnectant puis en le reconnectant au port USB.

La LED d'état clignote en rouge lors de la mise à jour du microprogramme du stylet. Avant la programmation, patientez jusqu'à ce que la LED repasse au vert. Ne déconnectez pas le stylet pendant la mise à jour du microprogramme.

Entretien et maintenance

Pour nettoyer la pointe du stylet de programmation, utilisez une lingette désinfectante si nécessaire. Pour nettoyer le corps du stylet, utilisez un détergent doux. Le stylet ne doit pas être trempé dans l'eau ni dans d'autres détergents.

Informations sur la conformité

Par la présente, Phonak AG déclare que ce produit Phonak est conforme aux exigences principales de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible chez le fabricant ou chez le représentant local Phonak dont l'adresse figure sur www.phonak.com (agences internationales).

Informations importantes pour la sécurité

Veillez lire attentivement les informations des pages suivantes avant d'utiliser votre stylet de programmation Lyric3.

- ⚠ L'utilisation du stylet de programmation Lyric3 a pour but de programmer les aides auditives Lyric3 avec les paramètres d'appareillage.
- ⚠ Les altérations ou modifications du stylet de programmation Lyric3 ne sont pas autorisées. De tels changements pourraient endommager le stylet de programmation Lyric3. Phonak ne pourra être tenu responsable de situations résultant d'une modification de l'appareil.
- ⚠ Le stylet de programmation Lyric3 contient un aimant. Si vous portez un stimulateur cardiaque, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant pour vérifier si les champs magnétiques risquent d'avoir un impact sur l'appareil médical. Gardez une distance d'au moins 15 cm entre le stylet de programmation Lyric3 et votre appareil médical.

-
- ① Ne plongez jamais le stylet de programmation Lyric3 dans l'eau. Protégez-le d'une humidité excessive car il contient des pièces électroniques fragiles.
 - ① N'exposez pas le stylet de programmation Lyric3 à de trop fortes températures (ne le laissez jamais derrière une fenêtre ou dans une voiture). N'utilisez jamais de four à micro-ondes ou d'autres appareils de chauffage pour sécher le stylet de programmation Lyric3.
 - ① Ne faites pas tomber le stylet de programmation Lyric3 ! Un choc sur une surface dure pourrait endommager votre stylet de programmation Lyric3.
 - ① N'utilisez pas le stylet de programmation Lyric3 dans les zones où les équipements électroniques sont interdits.

Informations et explication des symboles



Avec le symbole CE, Phonak AG confirme que ce produit Phonak satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.



Ce symbole indique que les produits décrits dans ce mode d'emploi respectent les exigences pour un appareil de Type B de la norme EN 60601-1. La surface du stylet de programmation Lyric3 est spécifiée comme élément de Type B.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur lise et tienne compte des informations importantes de ces modes d'emploi.



Étiquette de conformité EMC et radio-communications en Australie.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur veille aux précautions importantes signalées dans ces modes d'emploi.



Information importante pour la manipulation et la sécurité du produit.

Conditions d'utilisation

Sauf indication contraire signalée dans ces modes d'emploi, le produit est conçu de telle sorte qu'il fonctionne sans problèmes ni restrictions s'il est utilisé comme prévu.



Température : -20° à +50° Celsius (-4° à 140° Fahrenheit).



À conserver au sec.



Humidité de transport : jusqu'à 90% (sans condensation). Humidité de stockage : de 0% à 70%, s'il n'est pas en service.



Pression atmosphérique : 200 à 1500 hPa.



Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce stilet de programmation Lyric3, quand il sera usagé ou s'il est inutilisé, ne devra pas être considéré comme un déchet ménager. Veuillez le retourner à votre représentant Phonak local. Éliminer ce produit dans les règles protégera l'environnement et la santé.



Fabricant :

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Suisse

www.phonak.com/lyric

