

Phonak CROS B-R

Gebruiksaanwijzing



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op:

Draadloze CROS-toestel



Phonak CROS B-R

2018

Bekabelde oplaadaccessoires



Phonak Charger Case RIC

2016

Phonak Power Pack

2016

Phonak Mini Charger RIC

2016

① Deze gebruiksaanwijzing heeft alleen betrekking op het CROS-toestel. Lees de gebruiksaanwijzing voor hoortoestellen voor uitleg over uw hoortoestel.



Details over uw CROS-toestel en oplader

- ❶ CROS B-R bevat een geïntegreerde, niet-verwijderbare, oplaadbare lithium-ion-accu.
- ❶ Raadpleeg ook de veiligheidsinformatie over het hanteren van oplaadbare toestellen (hoofdstuk 16).
- ❶ Zorg ervoor dat u het toestel oplaadt en gebruikt binnen het bereik van: +5° tot +40° Celsius (41° tot 104° Fahrenheit)

Oorstukjes

- ☐ Eartip
- ☐ CROSTip

Oplaadaccessoires

- ☐ Charger Case RIC incl. voeding
- ☐ Power Pack
- ☐ Mini Charger RIC incl. voeding

Uw CROS-toestel en opladers zijn ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Deze topproducten zijn het resultaat van decennia aan onderzoek en expertise en zijn ontwikkeld om u te helpen verbonden te blijven met al het moois van geluid! Wij danken u voor uw goede keuze en wensen u jarenlang luisterplezier.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door, zodat u zeker weet dat alles duidelijk is en zodat u uw CROS-toestel optimaal kunt gebruiken. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de functies en voordelen.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Inhoud

Uw CROS-toestel en oplader

- | | |
|--|---|
| 1. Snelgids | 6 |
| 2. Onderdelen van het CROS-toestel en de oplader | 8 |

De oplader gebruiken

- | | |
|-----------------------------|----|
| 3. De oplader voorbereiden | 14 |
| 4. Het CROS-toestel opladen | 15 |

Het CROS-toestel gebruiken

- | | |
|---------------------------------|----|
| 5. Markeringen links en rechts | 22 |
| 6. Drukknop | 23 |
| 7. Aan/uit | 24 |
| 8. Het CROS-toestel plaatsen | 25 |
| 9. Het CROS-toestel verwijderen | 26 |



Nadere informatie

- | | |
|---|----|
| 10. Bedieningsomstandigheden | 27 |
| 11. Onderhoud en verzorging | 28 |
| 12. Service en garantievoorwaarden | 30 |
| 13. Conformiteitsverklaring | 32 |
| 14. Informatie en beschrijving van symbolen | 36 |
| 15. Problemen oplossen | 40 |
| 16. Belangrijke veiligheidsinformatie | 44 |

1. Snelgids


Uw toestellen opladen

Nadat u uw toestellen in de oplader hebt geplaatst, begint het indicatorlampje langzaam te knipperen totdat het toestel volledig is opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, blijft het indicatorlampje permanent groen branden.

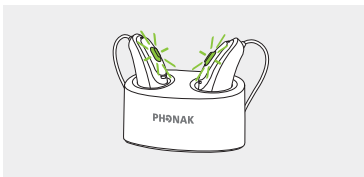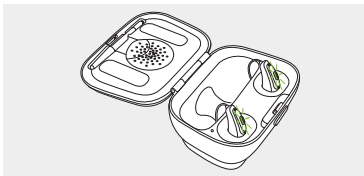


Markeringen voor links en rechts op CROS-toestel

Blaauwe markering voor het **linker** CROS-toestel.

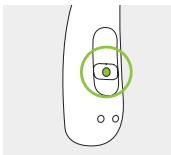


Rode markering voor het **rechter** CROS-toestel.

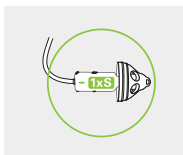

Drukknop met indicatorlampje

De drukknop heeft twee functies:

Kort indrukken heeft verschillende functies. De functie van deze knop voor uw CROS-toestel staat vermeld in uw persoonlijke instructies.

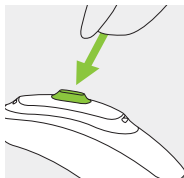


Lang indrukken (3 seconden) wordt gebruikt om het CROS-toestel in- of uit te schakelen.

Aan/uit

Druk met uw vinger 3 seconden op de knop totdat het indicatorlampje knippert.

Aan: knippert eenmaal kort

Uit: knippert tweemaal kort

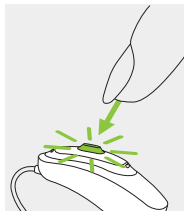

- i** U wordt geadviseerd om de CROS B-R 3 uur op te laden, voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

2. Onderdelen van het CROS-toestel en de oplader


Het Phonak CROS-systeem is een toepassing voor eenzijdige doofheid, gehoorverlies aan één kant of asymmetrisch gehoorverlies. Het wordt achter het dove oor geplaatst, en verstuurt geluid naar het Phonak-hoortoestel achter het goede oor.

Phonak CROS B-R + Phonak Audéo B-R-hoortoestel = Phonak CROS-systeem

❶ De Phonak CROS B-R werkt alleen in samenwerking met een Phonak Audéo B-R-hoortoestel als ontvanger.

❶ Phonak CROS B-R gebruikt dezelfde oplaadopties als Phonak Audéo B-R: de Charger Case RIC en de Mini Charger RIC.

Mogelijke oorstukjes

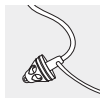


Eartip




CROSTip


CROS B-R

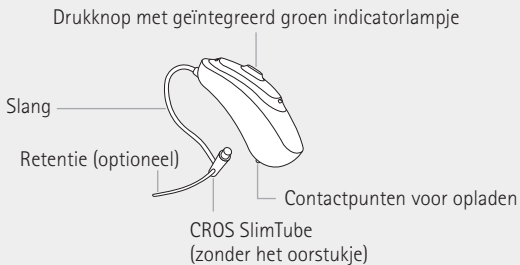

Charger Case RIC

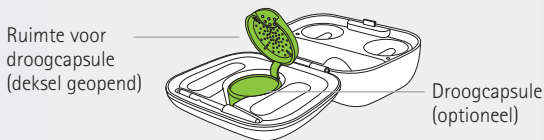

Charger Case RIC met optionele Power Pack

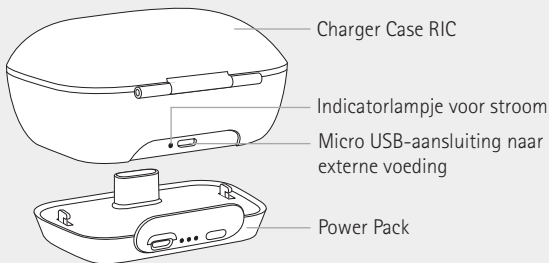


Micro USB-aansluiting naar externe voeding



Mini Charger RIC



Oplaadingangen met
links/rechts-indicatoren


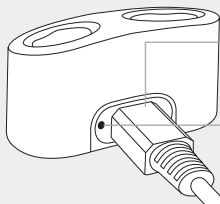


Micro USB-aansluiting
naar externe voeding

Indicatorlampje voor stroom

3. De oplader voorbereiden

De oplader aansluiten

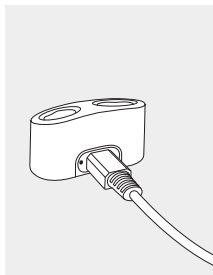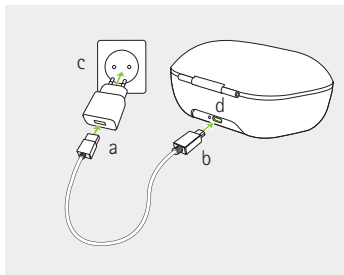

- a) Steek het grotere uiteinde van de oplaadkabel in de adapter.
- b) Steek het kleinere uiteinde in de micro USB-poort van de oplader.
- c) Steek de adapter in een stopcontact.
- d) Het indicatorlampje brandt groen wanneer de oplader wordt aangesloten op de voeding.

4. Het CROS-toestel opladen

- ① Accu bijna leeg: wanneer de accu bijna leeg is, krijgt u twee piepjes te horen, gevolgd door een melodie . U heeft nu ongeveer 60 minuten de tijd om het CROS-toestel op te laden (dit is afhankelijk van de instellingen, het omgevingslawaai etc.).
- ① CROS B-R bevat een geïntegreerde, niet-verwijderbare, oplaadbare lithium-ion-accu.
- ① U wordt geadviseerd om de CROS B-R 3 uur op te laden, voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- ① Het CROS-toestel moet droog zijn voordat het wordt opgeladen (zie hoofdstuk 11).
- ① Zorg ervoor dat u het CROS-toestel oplaadt en gebruikt binnen het bereik van: +5 °C tot +40° Celsius (41° tot 104° Fahrenheit).



4.1 De Charger Case RIC of Mini Charger RIC gebruiken

Raadpleeg hoofdstuk 3 voor het voorbereiden van de oplader.

1

Zet de toestellen in de oplaadingangen.

Zorg dat de markeringen aan de linker- en rechterzijde overeenkomen met de indicatoren aan de linker- (blauw) en rechterzijde (rood) van de oplaadingangen. De toestellen worden automatisch uitgeschakeld wanneer ze in de oplader worden geplaatst.

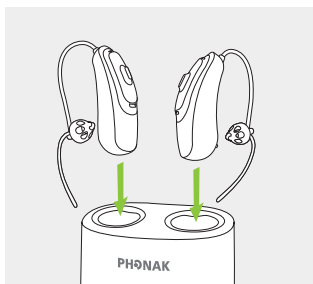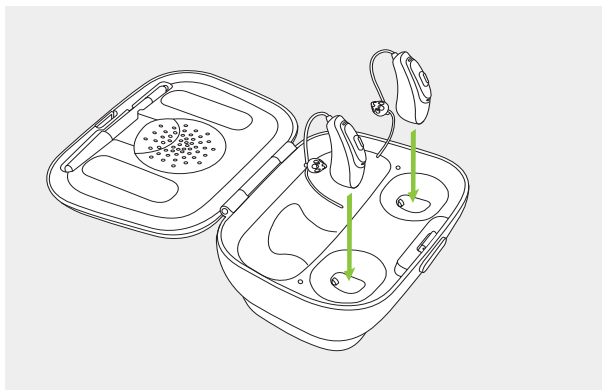

2

Het indicatorlampje knippert langzaam totdat de toestellen volledig zijn opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, blijft het indicatorlampje permanent groen branden.

Het oplaadproces stopt automatisch wanneer de accu's volledig zijn opgeladen, zodat de toestellen veilig in de oplader kunnen blijven zitten. Het kan tot 3 uur duren om de toestellen op te laden. Het deksel van de Charger Case RIC kan tijdens het opladen worden gesloten.





Oplaadtijd

100% opladen: 3 uur

80% opladen: 90 min



50% opladen: 60 min

30% opladen: 30 min

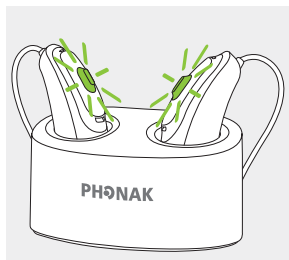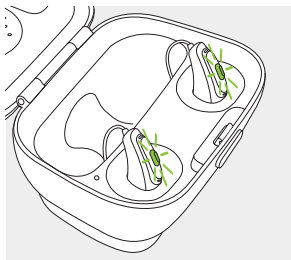

3

Verwijder de toestellen uit de oplaadingangen en schakel ze in (zie hoofdstuk 7).

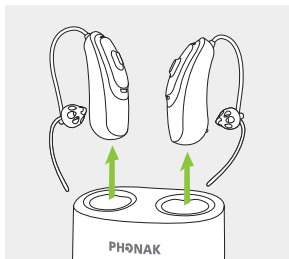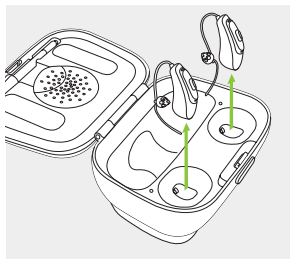


- ❗ Trek niet aan het speakerslangetje van de toestellen om deze uit de oplader te halen, aangezien dit het slangetje kan beschadigen.

4.2 De optionele Power Pack gebruiken

Let op: de Power Pack is alleen compatibel met de Charger Case.

1

Sluit de Power Pack aan op de Charger Case RIC en vergrendel het.

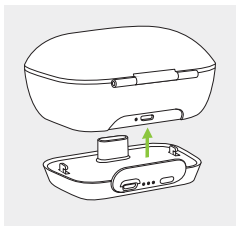


2

Steek de micro USB-kabel in de Power Pack en sluit deze aan op de adapter. De Power Pack en toestellen worden tegelijkertijd opgeladen. Terwijl de Power Pack is aangesloten op een externe voeding geeft het indicatorlampje ervan de huidige laadstatus van de accu weer.

- ① U wordt geadviseerd om de Power Pack 3 uur op te laden, voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- ① De Power Pack bevat een geïntegreerde, niet-verwijderbare, oplaadbare lithium-polymeeraccu.

Micro USB-aansluiting naar externe voeding

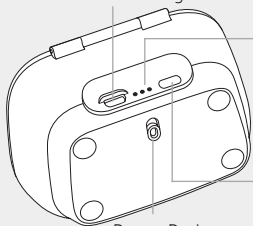

Accustatus indicatorlampje:

- 0% - 29%
- 30% - 59%
- 60% - 100%

Drukknop voor accucontrole

Power Pack-vergrendeling en -ontkoppeling

3

De volledig opgeladen Power Pack is in staat om één paar toestellen 7 keer volledig op te laden. Om de resterende accucapaciteit van de Power Pack te controleren, drukt u op de drukknop voor accucontrole (de indicatorlampjes staan standaard uit om de accu te sparen).


- ❗ Zorg ervoor dat u de Power Pack oplaadt binnen het temperatuurbereik van: +5° tot +40° Celsius (41° tot 104° Fahrenheit)

5. Markeringen links en rechts

Aan de achterzijde van het CROS-toestel bevindt zich een blauwe of een rode markering. Dit geeft aan of het een linker of rechter CROS-toestel is.

Blauwe markering voor
het **linker CROS-toestel**.

Rode markering voor
het **rechter CROS-toestel**.

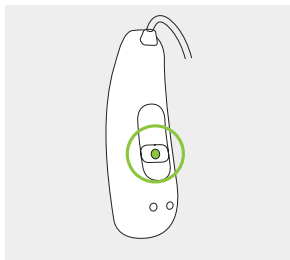


6. Drukknop

De drukknop heeft twee functies:

Kort indrukken

De drukknop op uw toestel kan verschillende functies hebben of is niet actief. Dit is afhankelijk van de programmering van het CROS-toestel en staat vermeld in uw persoonlijke 'hoortoestelinstructies'. Vraag uw audicien om een afdruk van deze informatie.

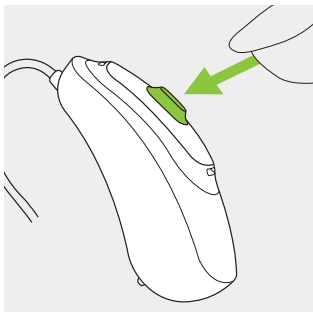

Lang indrukken(3 seconden)


De drukknop wordt gebruikt om het CROS-toestel in- of uit te schakelen. Raadpleeg het volgende hoofdstuk.

7. Aan/uit

Om het CROS-toestel in- of uit te schakelen, drukt u met uw vinger 3 seconden op de knop totdat het indicatorlampje knippert.

Knippert eenmaal kort =
CROS-toestel is **aan**


Knippert tweemaal kort =
CROS-toestel is **uit**

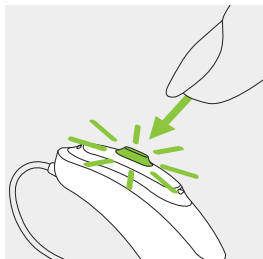

8. Het CROS-toestel plaatsen


1

Plaats het CROS-toestel achter uw oor.

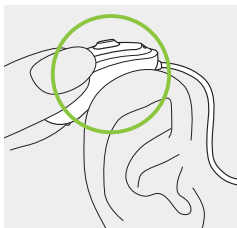


2

Plaats het oorstukje in de gehoorgang.

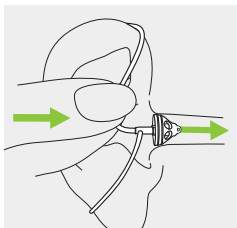

3


Als er een retentie aan het oorstukje vastzit, plaatst u deze in uw oorschelp om het CROS-toestel stevig te plaatsen.

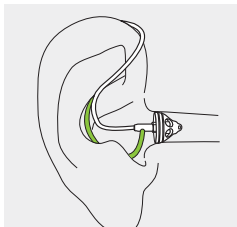

9. Het CROS-toestel verwijderen

1

Trek aan de bocht van de slang en verwijder het CROS-toestel van achter het oor vandaan.

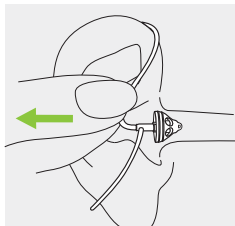

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip achterblijven in de gehoorgang wanneer u het toestel uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de eartip achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen.

10. Bedieningsomstandigheden

Het product is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.

Zorg ervoor dat u het CROS-toestel en de Power Pack oplaadt binnen het bereik van: +5° tot +40° Celsius (41° tot 104° Fahrenheit); en het bereik van de atmosfeerdruk: 800 hPA tot 1500 hPA.

De CROS B-R is IP68-gecertificeerd (diepte van 1 meter gedurende 60 minuten) en zijn ontwikkeld om in alle alledaagse situaties te worden gebruikt. Daardoor kan uw CROS-toestel zonder zorgen worden blootgesteld aan een regenbui of zweet. De CROS B-R is echter niet bedoeld om te worden gebruikt in wateractiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van water met chlorine, zeep, zout water of andere vloeistoffen met een chemische inhoud.

Vochtigheid tijdens het gebruik van de Charger Case RIC, Mini Charger RIC en de Power Pack: 0% tot 85% (niet-condenserend).

11. Onderhoud en verzorging

Een degelijke en regelmatige verzorging van uw CROS-toestel en oplader draagt bij aan uitstekende prestaties en een lange levensduur.

Gelieve de volgende specificaties te gebruiken als richtlijn. Zie hoofdstuk 16.2 voor meer informatie over productveiligheid.

Algemene informatie

Voor u haarlak of make-up gebruikt, dient u het CROS-toestel uit uw oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen.

Uw CROS-toestel is bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet u het CROS-toestel schoonmaken en drogen.
- Het CROS-toestel wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.



Zorg er altijd voor dat het CROS-toestel en de oplader droog en schoon zijn voordat u begint met opladen.

Dagelijks

CROS-toestel: controleer het oorstukje op oorsmeer en vochtafzettingen. Reinig de oppervlakten met een pluisvrije doek of gebruik het borsteltje dat bij uw Charger Case RIC zit. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw CROS-toestel. Het wordt niet aangeraden het hoortoestel met water af te spoelen. Indien u het CROS-toestel grondig dient te reinigen, kunt u advies en informatie vragen aan uw audicien over filters of droogcapsules.

Opladers: zorg dat de oplaadingangen schoon zijn. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep etc. voor het reinigen van uw oplader.

Wekelijks

CROS-toestel: Reinig het oorstukje met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere reiniging kunt u contact opnemen met uw audicien. Reinig de contactpunten voor opladen op het CROS-toestel met een zachte, vochtige doek.

Opladers: verwijder stof of vuil uit de oplaadingangen.

12. Service en garantievoorwaarden

Lokale garantie

Informeer bij uw audicien waar u uw CROS-toestel en opladers hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de lokale garantie.

Wereldwijde garantie

Sonova AG biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van één jaar. Deze beperkte garantie dekt fabrieks- en materiaalfouten in het CROS-toestel en opladers, maar geen accessoires zoals slangen, oorstukjes en speakertjes. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetten en wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij oneigenlijk gebruik of onderhoud, chemische invloeden of overbelasting.

Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie.

Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn werkplaats.

Serienummers

CROS-toestel (links/rechts): _____

Charger Case RIC: _____

Power Pack: _____

Mini Charger RIC: _____

Aankoopdatum: _____

Uw audicien

(stempel/handtekening):

13. Conformiteitsverklaring

Europa:

Conformiteitsverklaring voor het CROS-toestel

Sonova AG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG evenals de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak. Kijk voor de adressen op www.phonak.com (Phonak-vestigingen wereldwijd).

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië.

Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

Het draadloze model op pagina 2 is gecertificeerd onder:

Phonak CROS B-R

VS	FCC-ID: KWC-RICR
Canada	IC: 2262A-RICR

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken bij andere apparaten
- 2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Sonova AG, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt

radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit toestel schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- De afstand tussen het toestel en de ontvanger vergroten.
- Het toestel aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

14. Informatie en beschrijving van symbolen



Met het CE-symbool bevestigt Sonova AG dat dit product, met inbegrip van de accessoires, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en aan de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.



Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikersinstructies voldoen aan de vereisten voor een toepassingsgedeelte van het type B van EN 60601-1. Het oppervlak van het CROS-toestel is gespecificeerd als een toegepast gedeelte van Type B.



Toont de fabrikant van het medische instrument, zoals gedefinieerd in de EU richtlijn 93/42/EEG.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzingen leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.



Dit symbool geeft aan dat de elektromagnetische interferentie van het apparaat zich onder de limieten bevindt die zijn goedgekeurd door de Federal Communications Commission in de VS.



Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.



Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat medische apparaat kan worden geïdentificeerd.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Temperatuur tijdens transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius (-4° tot +140° Fahrenheit).



Vochtigheid tijdens opslag: 0% tot 70%,
wanneer niet gebruikt. Zie de instructies
in hoofdstuk 16.2 over het drogen van het
CROS-toestel na gebruik.



Atmosfeerdruk tijdens transport en opslag:
200 hPa tot 1500 hPa



Droog houden tijdens transport.



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit CROS-toestel, evenals oplader en de Power Pack, niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Gelieve een oud of ongebruikt CROS-toestel en de oplader in te leveren bij een stortplaats voor elektronisch afval, of het hoortoestel en de oplader te overhandigen aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering beschermt het milieu en de gezondheid.

15. Problemen oplossen

15.1 Problemen met het CROS-toestel oplossen

Probleem

Het CROS-toestel werkt niet

Hoortoestel laat twee piepjes klinken

Het CROS-toestel start niet op

Hoortoestel laat twee piepjes klinken, gevolgd door een melodie



Indicatorlampje op CROS-toestel knippert snel tijdens het opladen

Oorzaken

Het CROS-toestel staat uit

Elektromagnetische storing opgetreden

Accu helemaal leeg

Accu leeg signaal

Accu helemaal leeg

Indicatie dat de accu van het CROS-toestel bijna leeg is

Defecte accu

Wat te doen?

Druk 3 seconden op de drukknop (hoofdstuk 1+7)

Druk op de drukknop

Voer het CROS-toestel in de oplader in

Hoortoestel opladen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het hoortoestel indien nodig)

CROS-toestel opladen (hoofdstuk 4)

CROS-toestel opladen (hoofdstuk 4)

Neem contact op met uw audicien als de levensduur van de accu niet aan de verwachtingen voldoet

Probleem

Het indicatorlampje op het CROS-toestel is uit wanneer het in de oplaadingangen wordt geplaatst

Accu gaat geen hele dag mee

Oorzaken

CROS-toestel is niet juist geplaatst in oplader

Oplader niet aangesloten op voedingsbron

CROS-toestel niet volledig opgeladen

Accu moet mogelijk worden vervangen

15.2 Problemen met oplader oplossen

Probleem

Het indicatorlampje op het CROS-toestel knippert tweemaal

Opladen begint niet (wordt geen Power Pack gebruikt)

Oorzaken

Het CROS-toestel ligt buiten het bereik van de bedrijfstemperatuur

Charger Case RIC of Mini Charger RIC is niet aangesloten op voeding

CROS-toestel is niet juist geplaatst in oplader

Power Pack leeg

Opladen begint niet bij gebruik van Power Pack



Indien het probleem blijft aanhouden, dient u voor verdere hulp contact op te nemen met uw audicien.

Wat te doen?

CROS-toestel juist plaatsen in oplader (hoofdstuk 4)

Sluit oplader aan op adapter

CROS-toestel opladen (hoofdstuk 4)

Neem contact op met uw audicien; er kan een vervanging van de accu noodzakelijk zijn

Wat te doen?

Warm het CROS-toestel op. Het bereik van de bedrijfstemperatuur ligt binnen +5° en +40° Celsius (41° tot 104° Fahrenheit)

Sluit oplader juist aan op voedingsbron of Power Pack (hoofdstuk 4.2)

CROS-toestel juist plaatsen in oplader (hoofdstuk 4.1)

Power Pack opladen (hoofdstuk 4.2)

16. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u het CROS-systeem en de oplaadaccessoires in gebruik neemt.

Een CROS-systeem kan slechthorendheid niet genezen, en kan gehoorverlies door organische oorzaak niet voorkomen of verbeteren. Bij onregelmatig gebruik heeft een gebruiker niet volledig profijt van het systeem. Het gebruik van een CROS-systeem is slechts een onderdeel van hoorrevalidatie, en kan worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen.

Het CROS-systeem is geschikt voor de zorgomgeving thuis en vanwege de draagbaarheid ervan kan het gebeuren dat het wordt gebruikt in professionele zorgfaciliteiten, zoals huisartspraktijken, tandartspraktijken etc.

16.1 Waarschuwingen

 De bedoeling van een CROS-toestel is om geluid te sturen naar het hoortoestel in het betere oor en zo het verslechterde gehoor te compenseren. Het CROS-toestel (geprogrammeerd voor het specifieke gehoorverlies) mag alleen worden gebruikt door diegene voor wie het bedoeld is. Andere mensen kunnen het beter niet gebruiken, omdat dit tot gehoorbeschadiging kan leiden.

 Het oplaadbare Phonak CROS-toestel en de Phonak Power Pack bevatten lithium-ion-accu's die

in de handbagage kunnen worden meegenomen in het vliegtuig. De Power Pack mag niet in de ingecheckte bagage worden geplaatst, maar alleen worden meegenomen in de handbagage.

 Wijzigingen en aanpassingen aan het CROS-systeem die niet uitdrukkelijk door Sonova AG zijn goedgekeurd, zijn niet toegestaan. Deze wijzigingen kunnen uw gehoor of het CROS-systeem beschadigen.

 Gebruik het CROS-systeem en de oplaadaccessoires niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden gebruikt) of waarin elektronische apparatuur is verboden.

 Indien u pijn voelt in of achter uw oor, indien het oor ontstoken raakt, of als er huidirritatie en meer opeenhoping van oorsmeer plaatsvindt, dient u uw audicien of arts te raadplegen.

 In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip achterblijven in de gehoorgang wanneer u het toestel uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de eartip achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen.

 Luisterprogramma's in de directionele microfoonmodus reduceren achtergrondgeluid. Denk eraan dat waarschuwingssignalen of geluiden die van achteren komen, bijv. van verkeer, geheel of gedeeltelijk onderdrukt worden.

 Het CROS-toestel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Indien dit toestel wordt gebruikt door kinderen en personen met een verstandelijke beperking, dienen zij te allen tijde onder toezicht te worden gehouden om hun veiligheid te garanderen. Het is een klein apparaat en bevat kleine onderdelen. Houd kinderen en personen met een verstandelijke beperking altijd onder toezicht wanneer dit CROS-toestel wordt gebruikt. Indien het toestel wordt ingeslikt, neemt u onmiddellijk contact op met een huisarts of ziekenhuis, aangezien

het toestel of onderdelen hiervan verstikkingsgevaar veroorzaken!

 Houd de Charger Case RIC buiten bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien de droogcapsule wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

 Alleen bevoegd personeel is toegestaan om de Power Pack te openen wegens risico op schokken.

 Maak geen bekabelde verbinding vanuit uw CROS-toestel met een externe audiobron zoals

een radio etc. Dit kan letsel aan uw lichaam veroorzaken (elektrische schok).



Bedek de Charger Case RIC of Mini Charger RIC niet tijdens het opladen, bijvoorbeeld met een doek etc.



Het onderstaande is alleen van toepassing op personen met geïmplanteerde medische apparaten die actief zijn (bijv. pacemakers, defibrillator, etc.):

- Houd het draadloze hoortoestel of CROS-toestel op minstens 15 cm (6 inches) afstand van het actieve implantaatsysteem.

Als u enige interferentie ondervindt, mag u het draadloze hoortoestellen of het CROS-toestel niet langer gebruiken en dient u contact op te nemen met de fabrikant van het actieve implantaatsysteem. Interferentie kan ook veroorzaakt worden door elektrische leidingen, elektrostatische ontlading, metaaldetectorpoorten op de luchthaven, etc.

- Houd de magneten (bijv. EasyPhone-magneet etc.) op minstens 15 cm (6 inch) afstand van het actieve implantaatsysteem.
- Bij gebruik van Phonak draadloze accessoires, raadpleegt u het hoofdstuk "Belangrijke veiligheids-

voorschriften" van uw draadloze accessoire-gebruiksaanwijzing.

 Het gebruik van deze apparatuur naast of in combinatie met andere apparatuur moet worden vermeden, aangezien het kan leiden tot onjuiste werking. Indien een dergelijk gebruik noodzakelijk is, dienen deze apparatuur en andere apparatuur te worden geobserveerd om er zeker van te zijn dat ze naar behoren functioneren.

 Het gebruik van accessoires, transducers en kabels, anders dan degene die door de fabrikant van

deze apparatuur zijn gespecificeerd of meegeleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verlaagde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en leiden tot onjuiste werking.

 Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) moet op meer dan 30 cm (12 inch) van elk onderdeel van het toestel worden gebruikt, inclusief de gespecificeerde kabels afkomstig van de fabrikant. Indien dit niet in acht wordt genomen,

kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van deze apparatuur.

 De USB-poort van de oplader mag alleen voor het beschreven doel worden gebruikt.

 Gebruik voor de oplader alleen apparatuur met een EN60950- en/of EN60601-1-certificatie met een outputkwalificatie van 5 VDC. Min. 500 mA.

 Een CROS-systeem mag niet uitgerust worden met eartips/cerumenfilters wanneer dit gebruikt wordt door cliënten met een geperforeerd trommelvlies, ontstoken gehoorgang of

wanneer de holtes van het middenoor op een andere manier blootliggen.

In dat geval raden we aan gebruik te maken van een aangepast klassiek oorstukje.

In het onwaarschijnlijke geval dat een onderdeel van dit product achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een medisch specialist te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen.

16.2 Informatie over de veiligheid van het product

- ① Phonak CROS-toestellen zijn waterbestendig maar niet waterdicht. De toestellen zijn bestand tegen normale activiteiten en incidentele onvoorziene blootstelling aan extreme omstandigheden. Dompel uw CROS-toestel nooit onder in water! Phonak CROS-hoortoestellen zijn niet specifiek ontworpen om meerdere malen voor langere periodes onder water gedompeld te worden, tijdens bijvoorbeeld activiteiten als zwemmen of een bad nemen. Verwijder uw CROS-toestel altijd voordat u deze activiteiten gaat ondernemen, aangezien het toestel gevoelige elektronische onderdelen bevat.
- ① Bescherm uw CROS-toestel tegen hitte (laat het nooit bij het raam of in de auto liggen.) Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om uw CROS-toestel te drogen (wegens risico op brand of ontploffing). Vraag uw audicien naar geschikte droogmethoden.
- ① De eartip moet elke drie maanden vervangen worden, of eerder als hij stijf of poreus wordt. Dit voorkomt dat de eartip losraakt van de slangbuis bij het inbrengen in of verwijderen uit het oor.

❗ Laat uw CROS-toestel niet vallen! Uw CROS-toestel kan beschadigd raken wanneer het op een hard oppervlak valt.

❗ Bewaar het CROS-toestel in de oplader indien u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

❗ Speciale medische en tandheelkundige onderzoeken waarbij blootstelling aan straling noodzakelijk is, kunnen de juiste werking van uw CROS-systeem beïnvloeden. Verwijder het voorafgaand aan het onderzoek en houd het buiten de onderzoeksruimte tijdens:

- Medisch of tandheelkundig onderzoek met röntgenstraling (inclusief CT-scan).
- Medische onderzoeken met MRI/NMRI-scans waarbij magnetische velden worden gegenereerd.

Het is niet noodzakelijk de CROS-toestellen voor het passeren van een detectiepoort (luchthaven etc.) te verwijderen. Als hierbij al röntgenstraling

wordt gebruikt, is dit een zeer lage dosis en zal dit geen invloed hebben op de werking van het CROS-toestel.

- ① Het CROS-systeem moet droog zijn voordat het wordt opgeladen. Anders kan niet worden gegarandeerd dat ze op de juiste wijze worden opgeladen.
- ① Gebruik, voor het opladen van de toestellen, uitsluitend de goedgekeurde opladers en de Power Pack dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, anders kunnen de toestellen beschadigd raken.

- ① Uw CROS-toestel en Power Pack beschikken beide over lithium-ion-accu's met een wattuur-vermogen van <20 wattuur die zijn getest volgens UN 38.3 van de "UN Manual of Tests and Criteria" en moeten worden getransporteerd in overeenstemming met alle regels en wetgevingen aangaande veilig transport van lithium-ion-accu's.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

Uw audicien:



Fabrikant:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Zwitserland

www.phonak.com



029-0633-07/V1.00/2018-03/NLG © 2018 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

