

Phonak CROS B

Gebruiksaanwijzing



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor:

Draadloze modellen

Phonak CROS B-312

Phonak CROS B-13

CE-markering

2016

2016

① Deze gebruiksaanwijzing heeft alleen betrekking op de CROS-zender en niet op uw hoortoestel.



Uw CROS-zender

① Indien geen van de vakjes is aangekruist en u weet niet welk model CROS-zender u heeft, dient u dit na te vragen bij uw audicien.

Model

☐ CROS B-312

☐ CROS B-13

Batterijtype

312

13

Oorstukje

☐ Eartip of SlimTip

☐ Klassiek oorstukje

Uw CROS-zender is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zurich, Zwitserland.

Dit toproduct is het resultaat van decennia aan onderzoek en expertise en is ontwikkeld om u te helpen verbonden te blijven met al het moois van geluid! Wij danken u voor uw goede keuze en wensen u jarenlang luisterplezier.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door, zodat u zeker weet dat alles duidelijk is en zodat u uw CROS-zender optimaal kunt gebruiken. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de functies en voordelen.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Inhoud

Uw CROS-zender

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Snelgids | 6 |
| 2. | Beschrijving van de CROS-zender | 8 |

De CROS-zender gebruiken


- | | | |
|----|-----------------------------|----|
| 3. | Markeringen links en rechts | 10 |
| 4. | Aan/uit | 11 |
| 5. | Batterijen | 12 |
| 6. | De CROS-zender plaatsen | 14 |
| 7. | De CROS-zender verwijderen | 16 |
| 8. | Drukknop | 18 |
| 9. | Volumeregelaar | 19 |

Nadere informatie


- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Onderhoud en verzorging | 20 |
| 12. | Service en garantievoorwaarden | 23 |
| 13. | Conformiteitsverklaring | 25 |
| 14. | Informatie en beschrijving van symbolen | 29 |
| 15. | Problemen oplossen | 32 |
| 16. | Belangrijke veiligheidsinformatie | 34 |

1. Snelgids

Markeringen voor links en rechts

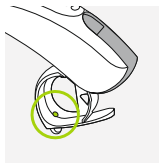

CROS B-312

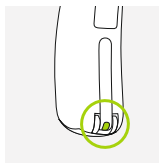


CROS B-13


Blauwe markering
voor de **linker** zender.

Rode markering voor
de **rechter** zender.


Batterijen vervangen

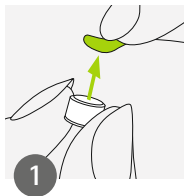

Haal de sticker van
de nieuwe batterij
en wacht twee
minuten.

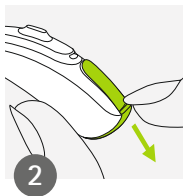


Open de
batterijlade.

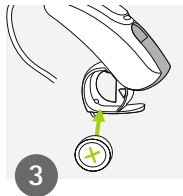


Plaats de batterij
in de batterijlade
met het "+"
symbool naar
boven gericht.

Aan/uit

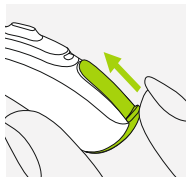


Aan

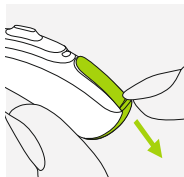


Uit

Drukknop

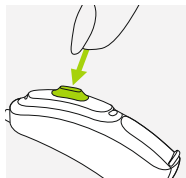

De drukknop op uw zender kan verschillende functies hebben. De functie van deze knop staat vermeld in uw persoonlijke instructies.

Volumeregelaar

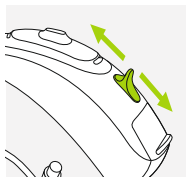

Alleen voor CROS B-13:
Om het volume te verhogen, drukt u de volumeregelaar omhoog. Om het volume te verlagen, drukt u de volumeregelaar omlaag.

2. Beschrijving van de CROS-zender

Onderstaande afbeeldingen geven de modellen weer die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. U kunt vaststellen wat uw persoonlijke model is door:


- Op pagina 3 het onderdeel "Uw CROS-zender" te raadplegen;
- Of uw CROS-zender te vergelijken met de modellen op de volgende pagina. Let hierbij op de vorm van de zender en of er wel of niet een volumeregelaar aanwezig is.

Het Phonak CROS-systeem is een toepassing voor eenzijdige doofheid, gehoorverlies aan één kant of asymmetrisch gehoorverlies. Het wordt op het dove oor geplaatst, en verstuurt geluid naar het Phonak-hoortoestel op het goede oor.


Phonak CROS B-zender + Phonak hoortoestel =
Phonak CROS-systeem

❶ Phonak CROS B werkt alleen in combinatie met een Phonak Belong™ hoortoestel op het andere oor.

CROS B-312

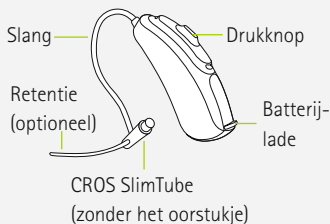

CROS B-13

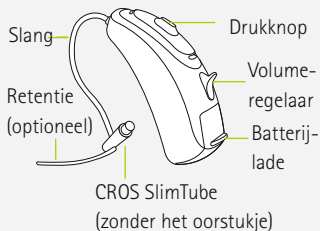

Beschikbare oorstukjes voor de CROS B-zender



Eartip



SlimTip



Oorstukje*



* Alleen voor CROS B-13

3. Markeringen links en rechts


Aan de rode en blauwe markering kunt u zien wat de linker en de rechter zender is.

Alleen voor CROS B-312:

Om de batterijlade te openen, trekt u de rand aan de onderkant van de zender naar beneden.

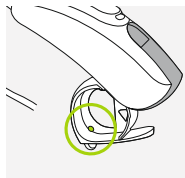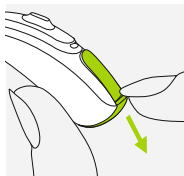

CROS B-312

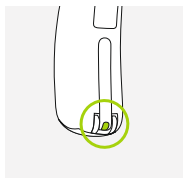

CROS B-13

Blauwe markering voor de **linker** zender


Rode markering voor de **rechter** zender.

4. Aan/uit

De batterijlade is ook de aan/uit-schakelaar.


1

Gesloten batterijlade –
CROS-zender staat **aan**

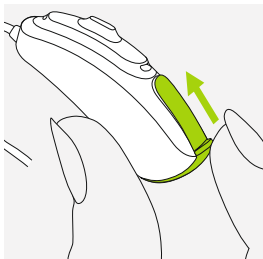


2


Open batterijlade –
CROS-zender staat **uit**

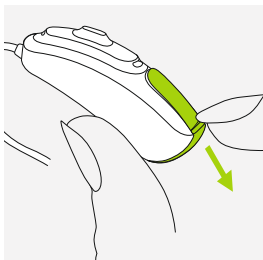


5. Batterijen

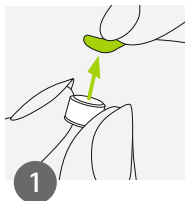

Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.

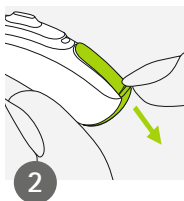

Open de batterijlade.

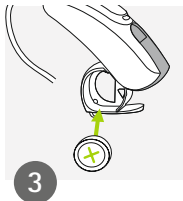

Plaats de batterij in de batterijlade met het "+" symbool naar boven gericht.

- ❗ Indien het sluiten van de batterijlade moeizaam gaat: Controleer of de batterij juist is geplaatst en of het "+" symbool zichtbaar is in de batterijlade. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal de CROS-zender niet werken en kan de batterijlade beschadigd raken.



Batterij bijna leeg: Als de batterij van uw CROS-zender bijna leeg is, hoort u twee piepjes, gevolgd door een melodie . U heeft dan nog ongeveer 30 minuten om de batterij te vervangen (dit kan per

batterij verschillen). Wij raden aan om altijd een nieuwe batterij bij de hand te houden.

Batterij type

Deze CROS-zender werkt op zink-luchtbatterijen. Bepaal het juiste batterij type (312 of 13) door:

- Op pagina 3 het onderdeel "Uw CROS-zender" te raadplegen
- De markering aan de binnenzijde van de batterijlade te bekijken.
- Of onderstaande tabel te raadplegen.

Model	Zink-lucht-batterij type	Kleurmarkering op pakket	IEC-code	ANSI-code
CROS B-312	312	bruin	PR41	7002ZD
CROS B-13	13	oranje	PR48	7000ZD


❗ Zorg ervoor dat u het juiste type batterij in uw CROS-zender gebruikt (zink-lucht). Lees ook hoofdstuk 15.2 voor meer informatie over productveiligheid.

6. De CROS-zender plaatsen

6.1 De CROS-zender met eartip of SlimTip plaatsen


1

Plaats de CROS-zender op uw oor.

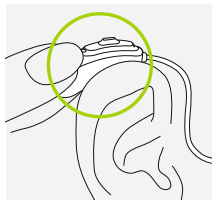


2

Plaats het oorstukje in de gehoorgang.

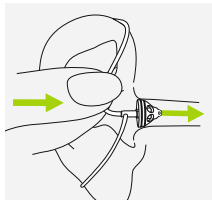

3


Als er een retentie aan het oorstukje vastzit, plaatst u deze in uw oorschelp om de CROS-zender stevig te plaatsen.

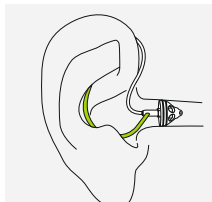

6.2 Een CROS met klassiek oorstukje plaatsen


1

Breng het oorstukje naar uw oor en plaats het in uw gehoorgang.

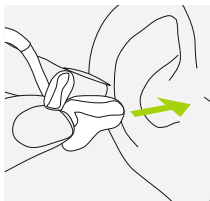


2

Plaats de CROS-zender achter uw oor.

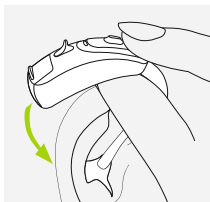

3

Plaats ten slotte het bovenste deel van het oorstukje in het bovenste deel van uw oorschelp.

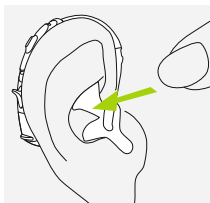


7. De CROS-zender verwijderen

7.1. De CROS-zender met eartip of SlimTip verwijderen

1

Trek aan de bocht van de slang en verwijder de zender van het oor.

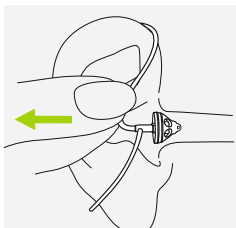


⚠ In zeer uitzonderlijke gevallen kan het oorstukje achterblijven in de gehoorgang wanneer u de zender uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat het oorstukje achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen.

7.2 Een CROS met klassiek oorstukje verwijderen


1

Til de zender tot boven het bovenste deel van uw oor.

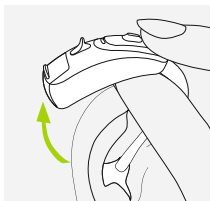

2


Pak het oorstukje vast en haal het voorzichtig uit uw oor.

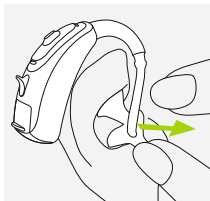

ⓘ Probeer bij het verwijderen van de zender de slang niet vast te pakken.


8. Druknop

De drukknop op uw CROS-zender kan verschillende functies hebben of is niet actief. Dit is afhankelijk van de programmering van de CROS-zender en staat vermeld in uw persoonlijke "hoortoestelinstructies". Vraag uw audicien om een afdruk van deze informatie.

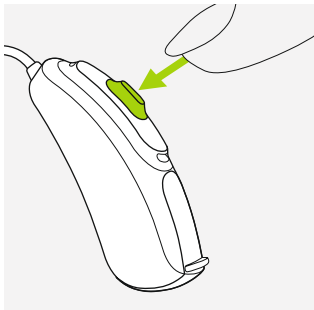

9. Volumeregelaar

Alleen voor CROS B-13:
Om het volume te verhogen, drukt u de volumeregelaar omhoog. Om het volume te verlagen, drukt u de volumeregelaar omlaag. De volumeregelaar op uw CROS-zender kan verschillende functies hebben of is niet actief. Dit is afhankelijk van de programmering en staat vermeld in uw persoonlijke "hoortoestel-instructies". Vraag uw audicien om een afdruk van deze informatie.

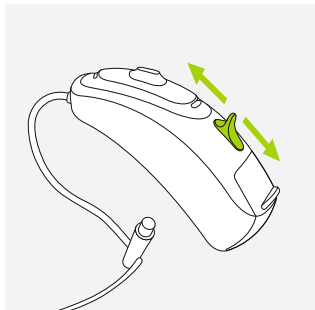

10. Onderhoud en verzorging

Een degelijke en regelmatige verzorging van uw CROS-zender draagt bij aan uitstekende prestaties en een lange levensduur.

Gelieve de volgende specificaties te gebruiken als richtlijn. Zie hoofdstuk 15.2 voor meer informatie over productveiligheid.

Algemene informatie

Voor u haarlak of make-up gebruikt, dient u de CROS-zender uit uw oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen.

Laat de batterijlade open wanneer u de CROS-zender niet gebruikt, zodat aanwezig vocht kan verdampen. Zorg ervoor dat u de CROS-zender steeds volledig droogt na gebruik. Bewaar de zender op een veilige, droge en schone plaats.

Uw CROS-zender is bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- De batterijlade is volledig gesloten. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zoals een haar tussen de batterijlade zit wanneer deze gesloten wordt.
- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet u de zender schoonmaken en daarna drogen.
- De CROS-zender wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

① Als u uw CROS-zender in en om water gebruikt, kan de luchtstroom naar de batterijen beperkt worden waardoor de zender niet meer werkt. Als uw CROS-zender het niet meer doet nadat het in contact is gekomen met water, raadpleeg dan de stappen voor probleemoplossing in hoofdstuk 14.

Dagelijks

Controleer het oorstukje (eartip of SlimTip) op oorsmeer en vochtafzettingen. Reinig de oppervlakten met een pluisvrije doek of gebruik het borsteltje dat bij uw hardcase hoesje zit. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw CROS-zender. Het wordt niet aangeraden de onderdelen met water af te spoelen. Indien u de CROS-zender grondig dient te reinigen, kunt u advies en informatie vragen aan uw audicien over droogcapsules.

Wekelijks

Reinig het oorstukje (eartip of SlimTip) met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over onderhoud en reiniging.

Maandelijks

Controleer de slang op kleurveranderingen, verharding of scheurtjes. Indien dergelijke veranderingen waargenomen worden, dient de slang vervangen te worden. Raadpleeg uw audicien.

11. Service en garantievoorwaarden

Lokale garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw CROS-systeem heeft aangeschaft naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van één jaar. Deze beperkte garantie dekt fabrieks- en materiaalfouten in de CROS-zender zelf, maar geen accessoires zoals batterijen, slangen, slimtube's, dome's en speakertjes. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetten en wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij oneigenlijk gebruik of onderhoud, chemische invloeden of overbelasting.

Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie.

Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn werkplaats.

Serienummer

Uw audicien
(stempel/handtekening):

Aankoopdatum:

12. Conformiteitsverklaring

Europa:

Conformiteitsverklaring

Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC evenals de Richtlijn 1999/5/EC voor Eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak. Kijk voor de adressen op www.phonak.com (Phonak-vestigingen wereldwijd).

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië.

Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

De draadloze modellen op pagina 2 zijn gecertificeerd onder:

Phonak CROS B-312

VS	FCC ID: KWC-WHSRIC2
Canada	IC: 2262A-WHSRIC2

Phonak CROS B-13

VS	FCC ID: KWC-WHSRIC4
Canada	IC: 2262A-WHSRIC4

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken bij andere apparaten
- 2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit toestel genereert en gebruikt

radiofrequente energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit toestel schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- De afstand tussen het toestel en de ontvanger vergroten.
- Het toestel aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

13. Informatie en beschrijving van symbolen



Met het CE-symbool bevestigt Phonak AG dat dit Phonak-product, met inbegrip van de accessoires, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en aan de RTTE-richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.



Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikersinstructies voldoen aan de vereisten voor een toepassingsgedeelte van het type B van EN 60601-1. Het oppervlak van de zender is gespecificeerd als een toegepast gedeelte van Type B.



Toont de fabrikant van het medische instrument, zoals gedefinieerd in de EU richtlijn 93/42/EEG.



Droog houden tijdens transport.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzingen leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Bedienings-
omstandig-
heden

Het product is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.



Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.



Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat medische apparaat kan worden geïdentificeerd.



Temperatuur tijdens transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius (-4° tot +140° Fahrenheit).



Vochtigheid tijdens transport: tot 90% (niet-condenserend).

Vochtigheid tijdens opslag: 0% tot 70%, wanneer niet gebruikt. Zie instructies in hoofdstuk 15.2 over het drogen van de zender na gebruik.



Atmosfeerdruk: 200 hPa tot 1500 hPa



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit apparaat niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Breng oude of ongebruikte apparaten weg naar stort-plaatsen voor elektronisch afval of overhandig het apparaat aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoord afvalbeleid beschermt het milieu en de gezondheid.

14. Problemen oplossen

Probleem

De CROS-zender werkt niet

Oorzaken

Lege batterij

Batterij is niet juist geplaatst

De CROS-zender staat uit

Hoortoestel is uitgeschakeld

Hoortoestel laat twee
piepjes klinken

Indicatie dat de batterij bijna leeg is

Hoortoestel laat twee
piepjes klinken, gevolgd
door een melodie 

Indicatie dat de batterij van de
CROS-zender bijna leeg is

Geluid schakelt in en uit
(met tussenpozen)

Vocht op de batterij van het hoortoestel
of CROS-zender

 Indien het probleem blijft aanhouden, dient u voor verdere hulp contact op te nemen met uw audicien.

Wat te doen?

Batterij vervangen (hoofdstuk 1 + 5)

Batterij juist plaatsten (hoofdstuk 1 + 5)

De CROS-zender inschakelen door de batterijlade volledig dicht te doen (hoofdstuk 4)

Het hoortoestel inschakelen door de batterijlade volledig dicht te doen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het hoortoestel indien nodig)

Vervang de batterij van het hoortoestel binnen 30 minuten (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het hoortoestel indien nodig)

Binnen 30 minuten de batterij van de CROS-zender vervangen (hoofdstuk 1 + 5)

Veeg de batterijen en de behuizing van het hoortoestel en de CROS-zender af met een droge doek

15. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u uw CROS-zender in gebruik neemt.

Een CROS-zender kan slechthorendheid niet genezen, en kan gehoorverlies door organische oorzaak niet voorkomen of verbeteren. Bij onregelmatig gebruik heeft een gebruiker niet volledig profijt van het systeem. Het gebruik van een CROS-zender is slechts een onderdeel van hoorrevalidatie, en kan worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen.

15.1 Waarschuwingen

 De bedoeling van een CROS-zender is om geluid te sturen naar het hoortoestel in het betere oor en zo het verslechterde gehoor te compenseren. De CROS-zender (geprogrammeerd voor het specifieke gehoorverlies) mag alleen worden gebruikt door diegene voor wie het bedoeld is. Andere mensen kunnen het beter niet gebruiken, omdat dit tot gehoorbeschadiging kan leiden.

 Wijzigingen en aanpassingen aan de CROS-zender die niet uitdrukkelijk door Phonak zijn goedgekeurd, zijn niet

toegestaan. Deze wijzigingen kunnen uw gehoor of de CROS-zender beschadigen.

 Gebruik de CROS-zender niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden behandeld) of waarin elektronische apparatuur is verboden.

 Hoortoestelbatterijen zijn giftig als ze worden ingeslikt! Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien batterijen worden ingeslikt,

dient u onmiddellijk een arts te raadplegen!

 Indien u pijn voelt in of achter uw oor, indien het oor ontstoken raakt, of als er huidirritatie en meer opeenhoping van oorsmeer plaatsvindt, dient u uw audicien of arts te raadplegen.

 In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip achterblijven in de gehoorgang wanneer u de akoestische slang uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de eartip achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen.

 Luisterprogramma's in de directionele stand reduceren achtergrondgeluid. Denk eraan dat waarschuwingssignalen of geluiden die van achteren komen, bijv. van verkeer, geheel of gedeeltelijk onderdrukt worden.

 Het CROS-systeem is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Het CROS-systeem bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze door kinderen worden ingeslikt. Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

 Maak geen bekabelde verbinding vanuit uw hoortoestel met een externe audiobron zoals een radio, etc. Dit kan letsel aan uw lichaam veroorzaken (elektrische schok).

 Het onderstaande is alleen van toepassing op personen met geïmplanteerde medische apparaten die actief zijn (bijv. pacemakers, defibrillator, etc.):

- Houd het draadloze hoortoestel of de CROS-zender op minstens 15 cm (6 inches) afstand van het actieve implantaatsysteem. Als u enige interferentie ondervindt, dient u het draadloze hoortoestellen of de CROS-zender niet langer

te gebruiken en contact op te nemen met de fabrikant van het actieve implantaatsysteem.

Interferentie kan ook veroorzaakt worden door elektrische leidingen, elektrostatische ontlading, metaaldetectorpoorten op de luchthaven, etc.

- Houd de magneten (bijv. batterijhulpstuk, EasyPhone-magneet, etc.) op minstens 15 cm (6 inches) afstand van het actieve implantaatsysteem.
- Bij gebruik van Phonak draadloze accessoires, raadpleegt u het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsvoorschriften" van uw draadloze accessoire handleiding.

15.2 Informatie over de veiligheid van het product

- ① Phonak CROS-zenders zijn waterbestendig maar niet waterdicht. De zenders zijn bestand tegen normale activiteiten en incidentele onvoorziene blootstelling aan extreme omstandigheden. Dompel uw CROS-zender nooit onder in water! Phonak CROS-zenders zijn niet specifiek ontworpen om meerdere malen voor langere periodes onder water gedompeld te worden, tijdens bijvoorbeeld activiteiten als zwemmen of een bad nemen. Verwijder uw CROS-zender altijd voordat u deze activiteiten gaat ondernemen, aangezien het hoortoestel gevoelige elektronische onderdelen bevat.
- ① Was of reinig de microfooningenang nooit. Dit kan leiden tot een verlies van de speciale akoestische kenmerken.
- ① Bescherm uw CROS-zender tegen hitte (laat het nooit bij het raam of in de auto liggen.) Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om uw CROS-zender te drogen. Vraag uw audicien naar geschikte droogmethoden.
- ① Laat de batterijlade open wanneer u de CROS-zender niet gebruikt, zodat aanwezig vocht kan verdampen. Zorg ervoor dat u de CROS-zender

steeds volledig droogt na gebruik. Bewaar de CROS-zender op een veilige, droge en schone plaats.

i Laat uw CROS-zender niet vallen! Uw CROS-zender kan beschadigd raken wanneer het op een hard oppervlak valt.

i Gebruik steeds nieuwe batterijen voor uw CROS-zender. Als een batterij lekt, vervang deze dan onmiddellijk door een nieuwe om huidirritatie te voorkomen. U kunt lege batterijen inleveren bij uw audicien.

i De batterijen die in de CROS-zender gebruikt worden, mogen de 1,5 volt niet overschrijden. Gebruik geen zilver-zink- of oplaadbare Li-ion-batterijen (lithium-ion). Deze kunnen ernstige schade aan uw CROS-zender veroorzaken. De tabel in hoofdstuk 5 laat precies zien welk type batterij geschikt is voor uw type CROS-zender.

i Verwijder de batterij indien u de CROS-zender langere tijd niet gebruikt.

- i** Speciale medische en tandheelkundige onderzoeken waarbij blootstelling aan straling noodzakelijk is, kunnen de juiste werking van uw CROS-zender beïnvloeden. Verwijder de CROS-zender voorafgaand aan het onderzoek en bewaar deze buiten de onderzoeksruimte:
- Medisch of tandheelkundig onderzoek met röntgenstraling (inclusief CT-scan)
 - Medische onderzoeken met MRI/NMRI-scans waarbij magnetische velden worden gegenereerd.
- Het is niet nodig uw CROS-zender voor het passeren van een detectiepoort (luchthaven etc.) te verwijderen. Als hierbij al

röntgenstraling wordt gebruikt, is dit een zeer lage dosis en zal dit geen invloed hebben op de werking van de CROS-zender.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Uw audicien:



029-0408-07/V1.00/2016-07/cu © Phonak AG All rights reserved



Fabrikant:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Zwitserland

www.phonak.com



sonova
HEAR THE WORLD

