

Phonak CROS B Custom

Használati útmutató



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Az Ön CROS készüléke

Ez a használati útmutató a következő készülékekre érvényes:

Vezeték nélküli modellek	CE-jelölés alkalmazása
Phonak CROS B-312 Custom	2017
Phonak CROS B-13 Custom	2017

i Ha egyik négyzet sincs megjelölve, és nem ismeri CROS készülékének típusát, kérjük, forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

Modell	Elem mérete
☐ Phonak CROS B-312 Custom	312
☐ Phonak CROS B-13 Custom	13

Az Ön hallásgondozó szakembere:



i Ez a használati útmutató kizárólag a CROS készülékre vonatkozik. A hallókészülék használatára vonatkozóan tekintse át annak saját használati útmutatóját.



Az Ön CROS készülékét a hallássegítő megoldások világvezető vállalata, a svájci, zürichi székhelyű Phonak fejlesztette ki.

A több évtizedes kutatás és szakértelem eredményeként megszületett kiváló minőségű terméket úgy terveztük, hogy az visszaadja a hang minden szépségét. Köszönjük, hogy jól választott, és kívánjuk, hogy még hosszú évekig élvezhesse a hallás örömét!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy biztosan megértse, hogyan működik CROS készüléke, és a legjobbat tudja kihozni belőle. A készülék funkcióira és előnyeire vonatkozó további információkért forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Tartalom

Az Ön CROS készüléke

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | Rövid útmutató | 6 |
| 2. | A CROS készülék részei | 8 |

A CROS készülék használata

- | | | |
|----|---|----|
| 3. | A bal és jobb oldali CROS készülék jelölése | 10 |
| 4. | Be- és kikapcsolás | 11 |
| 5. | Elemek | 12 |
| 6. | A CROS készülék felhelyezése | 14 |
| 7. | A CROS készülék eltávolítása | 15 |
| 8. | Nyomógomb | 16 |
| 9. | Hangerő-szabályozás | 17 |

További információk

- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Ápolás és karbantartás | 18 |
| 11. | Szerviz és jótállás | 20 |
| 12. | A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók | 22 |
| 13. | Tudnivalók és a szimbólumok ismertetése | 26 |
| 14. | Hibaelhárítás | 30 |
| 15. | A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók | 32 |

1. Rövid útmutató

Bal és jobb oldali jelölések



Bal




Jobb

Kék jelölés jelzi a **bal** oldali készüléket.


Piros jelölés jelzi a **jobb** oldali készüléket.

Az elemek cseréje

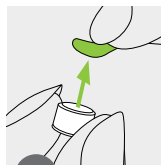


1

Távolítsa el a fóliát az új elemről, és várjon két percet.

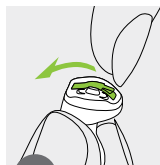

2


Nyissa fel az elemtartó fedelét.

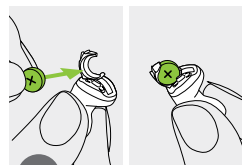


3

Helyezze az elemet az elemtartóba a „+” jellel felfelé.

Be- és kikapcsolás

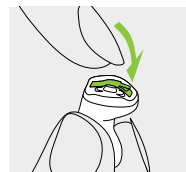


Be

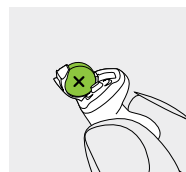


Ki

Nyomógomb

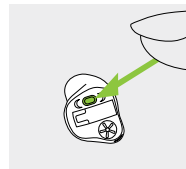

A CROS készüléken lévő nyomógomb számos funkcióval rendelkezhet.

Hangerő-szabályozás

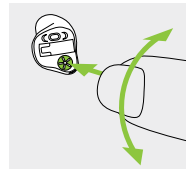

Kizárólag az ezzel a funkcióval rendelkező modellek esetén:
A hangerő növeléséhez tekerje előrefelé a hangerő-szabályozót.
A hangerő csökkentéséhez tekerje hátrafelé a hangerő-szabályozót.

2. A CROS készülék részei

Az alábbi képeken a jelen használati útmutatóban ismertetett típusok láthatóak. A következőképpen azonosíthatja saját hallókészüléke típusát:

- Ellenőrizze „Az Ön CROS készüléke” című részt a 3. oldalon.
- Ha ott nem talál jelölést, hasonlítsa össze saját CROS készülékét az alábbi ábrákon látható típusokkal. Figyeljen a CROS készülék alakjára, és hogy rendelkezik-e hangerő-szabályozóval.


A Phonak CROS készülék az egyoldali hallásvesztésben, egyoldali hallásvesztéségből vagy aszimmetrikus hallásvesztéségből szenvedő emberek számára készült. A készüléket a hallásvesztéssel érintett fülre helyezik, és az vezeték nélküli módon továbbítja a hangot a másik fülön lévő Phonak hallókészülék számára.

Phonak CROS B Custom készülék


+ Phonak Virto B hallókészülék = **Phonak CROS B rendszer**

i A Phonak CROS B készülékhez csak Phonak Virto B hallókészülék használható vevőként.

CROS B-312 Custom

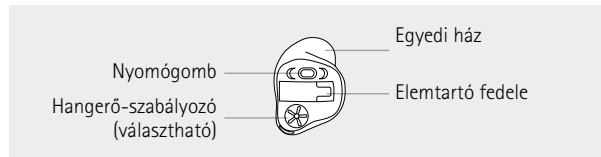


CROS B-13 Custom

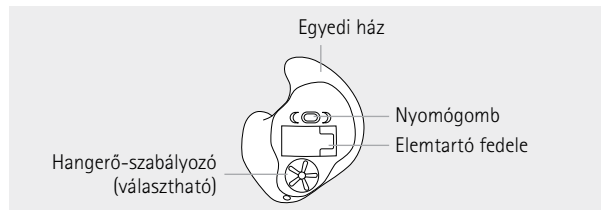


3. A bal és jobb oldali CROS készülék jelölése

Egy piros és egy kék jelölés mutatja, hogy melyik a bal, és melyik a jobb oldali CROS készülék. A színjelölés a házon látható (a szöveg piros vagy kék színű), vagy maga a ház piros vagy kék színű.

Kék jelölés jelzi a **bal** oldali készüléket.

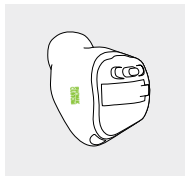

Piros jelölés jelzi a **jobb** oldali készüléket.

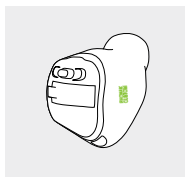


4. Be- és kikapcsolás

Az elemtartó fedele egyben a be-/kikapcsoló gomb is.


1

Zárt elemtartófedél =
a CROS készülék **be** van
kapcsolva

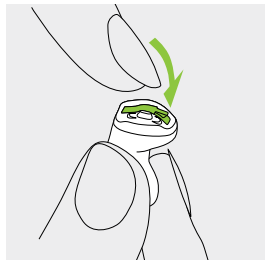


2

Nyitott elemtartófedél =
a CROS készülék **ki** van
kapcsolva

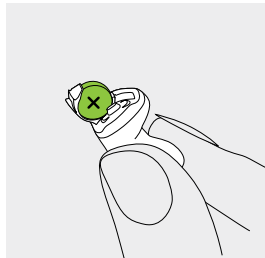

5. Elemek

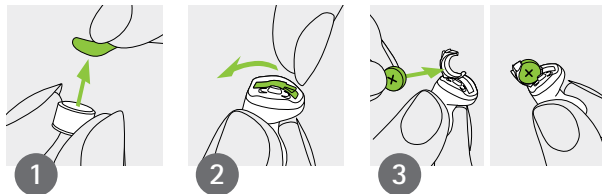

1
Távolítsa el a fóliát az új elemről, és várjon két percet.

2
Nyissa fel az elemtartó fedelét.

3
Helyezze az elemet az elemtartóba a „+” jellel felfelé.

i Ha az elemtartó fedelét nehéz becsukni: Ellenőrizze, hogy az elem helyesen legyen behelyezve, és a „+” jel felfelé nézzen. Ha nem megfelelően helyezi be az elemet, a CROS készülék nem fog működni, és károsodhat az elemtartó fedele.

Alacsony töltöttség: Ha a CROS készülék elemének alacsony a töltöttsége, két sípjel, majd egy dallam  hallható. Körülbelül 30 perce van, hogy kicserélje az elemet (ez az elemtől függően változhat). Javasoljuk, hogy mindig legyen kéznél egy új elem.

Elem csere

A CROS készülék cink-levegő elemmel működik. A következőképpen választhatja ki a megfelelő méretű (312-es vagy 13-as) elemet:


- Ellenőrizze „Az Ön CROS készüléke” című részt a 3. oldalon.
- Tekintse át a következő táblázatot.

Modell	Cink-levegő elem mérete	A csomagoláson található színkód	IEC-kód	ANSI-kód
Phonak CROS				
CROS B-312 Custom	312	barna	PR41	7002ZD
CROS B-13 Custom	13	narancs	PR48	7000ZD

i Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megfelelő (cink-levegő) típusú elemet használja CROS készülékéhez. Kérjük, a 15.2. fejezetben található további termékbiztonsági tudnivalókat is olvassa el.

6. A CROS készülék felhelyezése


Emelje a füléhez a CROS készüléket, és helyezze a hallójáratí rész a hallójáratába.

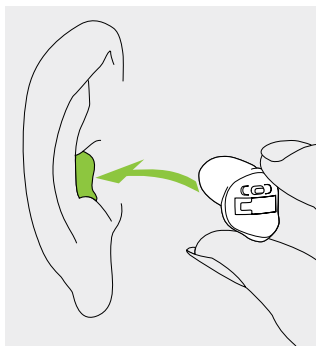

7. A CROS készülék eltávolítása


1

Tegye a hüvelykujját a fülcimpája mögé, és a fülét finoman felfelé nyomva tolja ki a CROS készüléket a hallójáratból. Az állkapcsával rágó mozdulatokat végezve segítheti a műveletet.

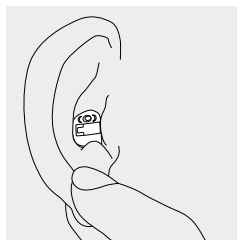


2

Fogja meg a CROS készülék kiálló részét, és vegye ki a készüléket.

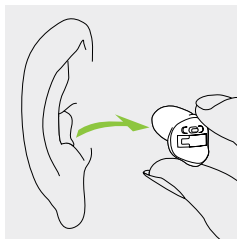

8. Nyomógomb

A CROS készüléken lévő nyomógomb számos funkcióval rendelkezhet, illetve inaktív is lehet. Ez a CROS készülék programozásától függ, és az egyedi „Hallókészülék-útmutatóban” van feltüntetve. Ezért a dokumentumért forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

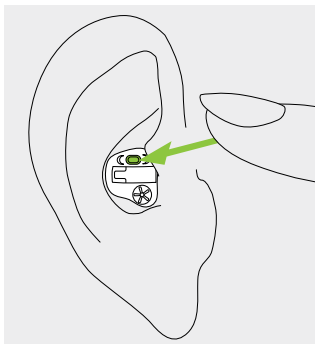


9. Hangerő-szabályozás

Kizárólag az ezzel a funkcióval rendelkező modellek esetén:

A hangerő növeléséhez tekerje előre felé a hangerő-szabályozót.

A hangerő csökkentéséhez tekerje hátrafelé a hangerő-szabályozót.

A hallásgondozó szakember letilthatja a hangerő-szabályozót.

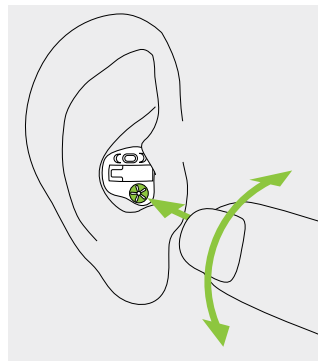

10. Ápolás és karbantartás

A CROS készülék alapos és rendszeres ápolása hozzájárul a készülék kimagasló teljesítményéhez és hosszú élettartamához.

Kérjük, a következő előírásokat tekintse iránymutatónak. A termék biztonságára vonatkozó további információkat lásd a 15.2 fejezetben.

Általános tudnivalók

Hajlakk és kozmetikai termékek használata előtt távolítsa el a CROS készüléket a füléből, mert ezek a termékek károsíthatják a készüléket.

Naponta

A napi tisztítás és szárítórendszer használata erősen ajánlott. A Phonak C&C termékvonallával a tisztításhoz szükséges termékek teljes készletét kínálja.

A hallásgondozó szakember örömmel ad tanácsot Önnek. A CROS készülék tisztításához soha ne használjon háztartási tisztítószeret (mosóport, szappant stb.).

Ha a CROS készülék új elemek behelyezését követően sem működik, forduljon tanácsért hallásgondozó szakemberéhez.

Hetente

A karbantartásra vonatkozó részletesebb útmutatásért és az alapvetőnél alaposabb tisztításra vonatkozó tanácsokért forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

11. Szerviz és jótállás

Helyi jótállás

A helyi jótállási feltételekről érdeklődjön a CROS készülék vásárlásának helyszínén a hallásgondozó szakembertől.

Nemzetközi jótállás

A Sonova AG egyéves, korlátozott nemzetközi jótállást biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától érvényes. Ez a korlátozott jótállás a CROS készülék gyártási és anyaghibáira vonatkozik, és nem érvényes a tartozékokra, például elemekre, csövekre, fülillesztékekre és külső vevőegységekre. A jótállás csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása esetén érvényesíthető.

A nemzetközi jótállás nem érint semmilyen törvényes jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi termékek értékesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglaltak alapján lehet jogosult.

A jótállás korlátozása

Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy karbantartás, vegyi anyagok hatása vagy túlzott erőhatások miatt bekövetkezett károsodásra. Harmadik fél vagy engedéllyel nem rendelkező szerviz által okozott kár esetén a jótállás semmissé válik. Ez a jótállás nem terjed ki a hallásgondozó szakember által a rendelőjében nyújtott szolgáltatásokra.

Sorozatszám
(bal oldal):

Felhatalmazott hallásgondozó
szakember (bélyegző/aláírás):

Sorozatszám
(jobb oldal):

A vásárlás dátuma:

12. A megfelelőségre vonatkozó tudnivalók

Európa:

Megfelelőségi nyilatkozat

A Sonova AG ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az orvostechikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelv, valamint a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv követelményeinek.

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a gyártótól vagy a Phonak helyi képviselőjétől igényelhető, amelynek az elérhetősége megtalálható a www.phonak.com webhelyen található listán (Phonak telephelyek világszerte).

Ausztrália/Új-Zéland:



R-NZ

Azt jelzi, hogy a készülék megfelel a Radio Spectrum Management (RSM) és az Australian Communications and Media Authority (ACMA) Új-Zélandon és Ausztráliában alkalmazandó, törvényes értékesítésre vonatkozó hatályos rendelkezéseinek.

Az R-NZ megfelelőségi címke az új-zélandi piacon A1-es megfelelőségi szinttel forgalmazott rádiós termékekre vonatkozik.

A 2. oldalon felsorolt vezeték nélküli típusok a következő tanúsítvánnyal rendelkeznek:

Phonak CROS B-312 Custom & Phonak CROS B-13 Custom

USA
Kanada

FCC-azonosító: KWC-ITEV13
IC-azonosító: 2262A-ITEV13

1. megjegyzés:

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének és az Industry Canada RSS-210 jelű szabványának. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött:

- 1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- 2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, a működését nem kívánatos módon befolyásoló interferenciát is.

2. megjegyzés:

A készüléken végzett olyan módosítások és változtatások, amelyeket a Sonova AG nem hagyott kifejezetten jóvá, érvényteleníthetik a készülék működtetésére vonatkozó FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés:

Ezt a készüléket az FCC-szabályok 15. része és az Industry Canada ICES-003 jelű szabványa értelmében a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékekkel összevetve tesztelték, és a készülék megfelelt a tesztelés során. Ezeknek a határértékeknek az a célja, hogy a készülék lakókörnyezetben való alkalmazása esetén észszerűen

elvárható mértékű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításokkal összhangban telepítik, illetve használják, akkor zavarhatja a rádiókommunikációs adatátvitelt. Nem garantálható azonban, hogy egy adott helyen való alkalmazás esetén nem keletkezik interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz rádió- és televíziókészülékekben – ami a készülék be- és kikapcsolásával ellenőrizhető –, akkor a felhasználónak törekednie kell az interferencia megszüntetésére a következő módszerek segítségével:

- a vevőantenna elfordítása vagy áthelyezése;
- a készülék és a vevőegység közötti távolság növelése;
- a készülék csatlakoztatása egy olyan fali aljzathoz, amely a vevőegységétől eltérő áramkörön van;
- a kereskedő vagy egy tapasztalt, rádió- és televíziókészülékekkel foglalkozó szakember felkeresése.

13. Tudnivalók és a szimbólumok ismertetése



A CE-jelöléssel a Sonova AG igazolja, hogy ez a termék – a tartozékokkal együtt – megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelv, valamint a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv követelményeinek. A CE-jelölést követő számok azon minősítő szervezetek kódjai, amelyek a minősítést végezték a fent említett irányelveknek megfelelően.



Ez a szimbólum jelzi, hogy az ebben a használati utasításban ismertetett termékek megfelelnek az EN 60601-1 szabvány „B” típusú alkalmazott alkatrészekre vonatkozó követelményeinek. A CROS készülék felülete „B” típusú páciensoldali alkatrésznek minősül.



A 93/42/EGK európai uniós irányelv követelményeinek megfelelően jelzi az orvostechnikai eszköz gyártóját.



A szállítás során szárazon kell tartani.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a felhasználónak el kell olvasnia és szem előtt kell tartania a használati útmutatóban foglalt vonatkozó információkat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a felhasználónak figyelembe kell vennie a használati útmutatóban szereplő, vonatkozó figyelmeztető megjegyzéseket.



Fontos információk a termék kezeléséről és biztonságos használatáról.

A használatra
vonatkozó
feltételek

A termék a kivitelezésének köszönhetően rendeltetésszerű használat esetén problémamentesen és korlátozások nélkül alkalmazható, amennyiben a használati útmutató ezzel ellentétes információt nem tartalmaz.



A gyártó sorozatszámát jelöli az adott orvosi eszköz azonosítása céljából.



A gyártó katalógusszámát jelöli az orvosi eszköz azonosítása céljából.



Szállítási és tárolási hőmérséklet: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ között.



Szállítási páratartalom: Max. 90% (nem lecsapódó).
Tárolási páratartalom: Használton kívül 0% és 70% között. A készülék használat utáni szárítására vonatkozó utasításokat lásd a 17.2. fejezetben.



Légköri nyomás: 200 hPa és 1500 hPa között



Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé. A régi és használaton kívüli készüléket az elektronikus hulladékok számára fenntartott hulladéklerakó helyeken vagy hullásgondozó szakemberénél adhatja le ártalmatlanításra. A helyes hulladékkezeléssel elkerülhető a környezet károsítása és az egészség veszélyeztetése.

14. Hibaelhárítás

Probléma

Nem működik a CROS készülék

A hallókészülék két sípjelet ad le

A hallókészülékben két sípjel, majd egy dallam  hallható

A hang ki- és bekapcsol (szakaszosan)

A probléma okai

Lemerült elem

Az elem nem megfelelően van behelyezve

A CROS készülék ki van kapcsolva

Azt jelzi, hogy a hallókészülék elemének töltöttsége alacsony.

Azt jelzi, hogy a CROS készülék elemének töltöttsége alacsony

Nedvesség a hallókészülék elemén vagy a CROS készüléken

Teendő

Cserélje ki az elemet (1. és 5. fejezet)

Helyezze be megfelelően az elemet (1. és 5. fejezet)

Kapcsolja be a CROS készüléket azáltal, hogy teljesen lezárja az elemtartó fedelét (4. fejezet)

Cserélje ki a hallókészülék elemét 30 percen belül (szükség esetén tekintse át a hallókészülék használati útmutatóját)

Cserélje ki a CROS készülék elemét 30 percen belül (1. és 5. fejezet)

Törölje át a hallókészülék és a CROS készülék elemeit és házát egy száraz kendővel



Ha a probléma továbbra is fennáll, további segítségért keresse fel hallásgondozó szakemberét.

15. A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók

Kérjük, a CROS készülék használata előtt olvassa el a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

A CROS készülék nem képes helyreállítani a normál hallást, és nem képes sem megelőzni, sem javítani a szervi eredetű halláskárosodást. Ha csak ritkán használja a CROS készüléket, nem tudja teljes mértékben kihasználni a készülék által kínált lehetőségeket. A CROS készülék használata csupán a hallásjavítás része, kiegészítésképpen szükség lehet hallástanításra és a szájról olvasás megtanulására.

15.1. Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

-  A CROS készülék a jobban halló fülön lévő hallókészülékbe való hangtovábbításra szolgál, így kompenzálva a halláskárosodást. A – speciálisan az adott hallásvesztésre programozott – CROS készüléket csak az a személy használhatja, akinek készült. Más személy nem használhatja, mert károsíthatja vele a hallását.
-  A CROS készülék a Sonova AG által kifejezett módon nem jóváhagyott változtatása és módosítása nem engedélyezett. Az ilyen változtatások következtében sérülhet a füle vagy károsodhat a CROS eszköz.
-  Ne használja a CROS készüléket robbanásveszélyes területen (robbanásveszélyes bányák vagy ipari területek, oxigéndús környezet vagy gyúlékony anesztetikumok környezete).
-  A hallókészülékben lévő elemek lenyelés esetén mérgező hatásúak! Tartsa távol gyermekektől, értelmi fogyatékkal élőtől és háziállatoktól. Ha valaki mégis lenyelte az elemeket, azonnal forduljon orvoshoz!
-  Ha fájdalmat érez a fülében vagy a füle mögött, ha begyullad a füle, ha bőrirritációt vagy gyors

fülzsír-felhalmozódást tapasztal, forduljon hallásgondozó szakemberéhez vagy orvosához.



A hallási programok iránymikrofon üzemmódban csökkentik a háttérzajokat. Tartsa szem előtt, hogy a rendszer részben vagy akár teljesen elnyomja a háta mögül érkező figyelmeztető jelzéseket és zajokat, például az autók hangját.



A CROS készülék nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra. Olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak, ha egy

gyermek lenyeli őket. Tartsa távol gyermekektől, értelmi fogyatékkal élőtől és háziállatoktól. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz vagy menjen kórházba.



Ne alakítson ki vezetékes kapcsolatot a hallókészüléke és bármilyen külső hangforrás, például rádió stb. között. Ez testi sérülésekhez vezethet (áramütés).



A következők kizárólag olyan személyekre vonatkoznak, akik aktív beültethető orvosi eszközökkel rendelkeznek (pl. pacemakerek, defibrillátorok stb.):

- Tartsa a vezeték nélküli hallókészüléket vagy a CROS készüléket legalább 15 cm-es távolságra az aktív implantátumtól. Ha bármilyen interferenciát észlel, ne használja a vezeték nélküli hallókészüléket, se a CROS készüléket, és lépjen kapcsolatba az aktív implantátum gyártójával. Kérjük, ügyeljen arra, hogy hálózati vezetékek, elektrosztatikus kisülések, repülőtéri fémdetektorok stb. szintén okozhatnak interferenciát.
- Tartsa a mágneses alkatrészeket (pl. az elem kezelésére szolgáló eszközt, az EasyPhone mágnes stb.) legalább 15 cm-es távolságra az aktív implantátumtól.

- Ha vezeték nélküli Phonak tartozékot használ, olvassa el „A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók” című fejezetet a vezeték nélküli tartozékokhoz kapott használati útmutatóban.



Fülbe helyezhető CROS készülék viselésekor kerülje a fülre irányuló erős fizikai behatásokat. A fülbe helyezhető héj stabilitását normál használatra tervezték. A fület érintő erős fizikai hatás (pl. sportolás közben) következtében a fülbe helyezhető héj eltörhet. Ez pedig a hallójárat sérüléséhez, illetve a dobhártya átszakadásához vezethet.

15.2 A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók

- i** Soha ne mossa ki a mikrofonbemeneteket! Óvja a túlzott mértékű nedvességtől. Zuhanyzás, fürdés vagy úszás előtt mindig távolítsa el a CROS készüléket, mert az érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaz.
- i** Óvja a hőtől a CROS készüléket (soha ne hagyja ablak közelében vagy autóban). A CROS készülék megszáritásához soha ne használjon mikrohullámú és egyéb melegítőeszközöket. Az alkalmazható szárítási módszerekről érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél.
- i** Ha nem használja a CROS készüléket, hagyja nyitva az elemtartó fedelét, hogy elpárologhasson az esetleges nedvesség. Használat után mindig teljesen szárítsa meg a CROS készüléket. A CROS készüléket biztonságos, száraz és tiszta helyen tárolja.
- i** Ne ejtse le a CROS készüléket! A CROS készülék károsodhat, ha kemény felületre ejtik.
- i** Mindig új elemeket használjon a CROS készülékhez. Abban az esetben, ha az elem szivárog, a bőrirritáció elkerülése érdekében azonnal cserélje ki egy újra. A használt elemeket ártalmatlanításra visszajuttathatja hallásgondozó szakemberéhez.
- i** A CROS készülékhez használt elemek feszültsége nem haladhatja meg az 1,5 V-ot. Kérjük, ne használjon ezüst-cink vagy Li-ion (lítiumion) újratölthető akkumulátorokat, mivel ezek súlyosan károsíthatják a CROS készüléket. Az 5. fejezetben található táblázatban látható, hogy pontosan milyen típusú elem szükséges az Ön CROS készülékébe.
- i** Ha hosszú ideig nem használja a CROS készüléket, vegye ki az elemet.

i Egyes speciális orvosi vagy fogászati vizsgálatok, ideértve az alábbiakban leírt sugárzástípusokat, károsan befolyásolhatják a CROS készülék működését. Vegye le hallókészülékét és hagyja a vizsgálósóban/-területen kívül, mielőtt a következő vizsgálatokon venne részt:

- Orvosi vagy fogorvosi röntgenvizsgálat (CT-vizsgálat is).
- Mágneses mezőt generáló orvosi MRI/NMRI vizsgálatok.
- A CROS készüléket nem kell levennie, amikor biztonsági kapun megy át (repülőtéren stb.). Ha egyáltalán

használnak röntgensugarat, az nagyon alacsony dózisé, ami nincs hatással a CROS készülékekre.

i Ne használja a CROS készüléket olyan helyen, ahol tilos az elektronikus eszközök használata.

Az Ön hallásgondozó szakembere:



029-0559-Hungarian/V1.00/2017-06/hlg © Sonova AG Minden jog fenntartva!



Gyártó:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Svájc

www.phonak.com



sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459

