

Fitting Guide

roger

Nov 23, 2021

로저 업그레이더 v1.22

로저 업그레이더란?

로저 송신기 및 수신기에 대한 정보를 읽거나 펌웨어를 업데이트 할 수 있는 포낙 소프트웨어입니다.

로저 업그레이더 다운로드 방법

웹하드에 로저 업그레이더 소프트웨어가 업로드 되어 있습니다.

www.webhard.co.kr

ID : phonak

PW : phonak2017

폴더명 : 피팅소프트웨어 - Roger Upgrader v1.22

폴더 비밀번호 : roger

GUEST폴더 > 피팅소프트웨어 > Roger Upgrader 1.22

GUEST 공지 > 업로드한 자료는 삭제가 불가하니, 정확히 확인 후

☐

이름 ▲

☐

Roger_Upgrader v1.22.zip

로저 업그레이더 사용 방법

소프트웨어를 켜고 로저 송신기를 USB 케이블을 통해 컴퓨터와 연결합니다.

1) Automatic upgrader : USB 케이블을 이용해서 여러 개의 로저를 동시에 최신 펌웨어 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다.

How to use this software

Equipment manager

Automatic upgrade

Read device data

Compatibility guide

Manual firmware change

USB devices (i.e. microphones/ AudioHub etc.)

Use this assistant to ensure the compatibility of Phonak USB devices such as wireless microphones, loudspeakers and multimedia accessories.

Start assistant

1 Roger 2 Connection 3 Selection 4 Programming 5 Finish

Please connect all your USB devices one after the other.

Update running...

This process may take several minutes. Please do not disconnect the active device or exit this software.

Do not disconnect the active device!
Do not exit this software until the end of the process!

Identified devices

Device	Serial Number	New version	Status
Roger Touchscre...	4711_0815	2.0.41947	94%

Continue

1 Roger 2 Connection 3 Selection 4 Programming 5 Finish

Please connect all your USB devices one after the other.

Update running...

This process may take several minutes. Please do not disconnect the active device or exit this software.

Do not disconnect the active device!
Do not exit this software until the end of the process!

Identified devices

Device	Serial Number	New version	Status
Roger Touchscre...	4711_0815	2.0.41947	10%

Continue

1 Roger 2 Connection 3 Selection 4 Programming 5 Finish

Please connect all your USB devices one after the other.

All devices are upgraded.


Do not disconnect the active device!
Do not exit this software until the end of the process!

Identified devices


Device	Serial Number	New version	Status
Roger Touchscre...	4711_0815	2.0.41947	Upgraded

Continue


2) Read device data : 로저의 펌웨어 버전, 시리얼 번호 등을 확인할 수 있습니다.

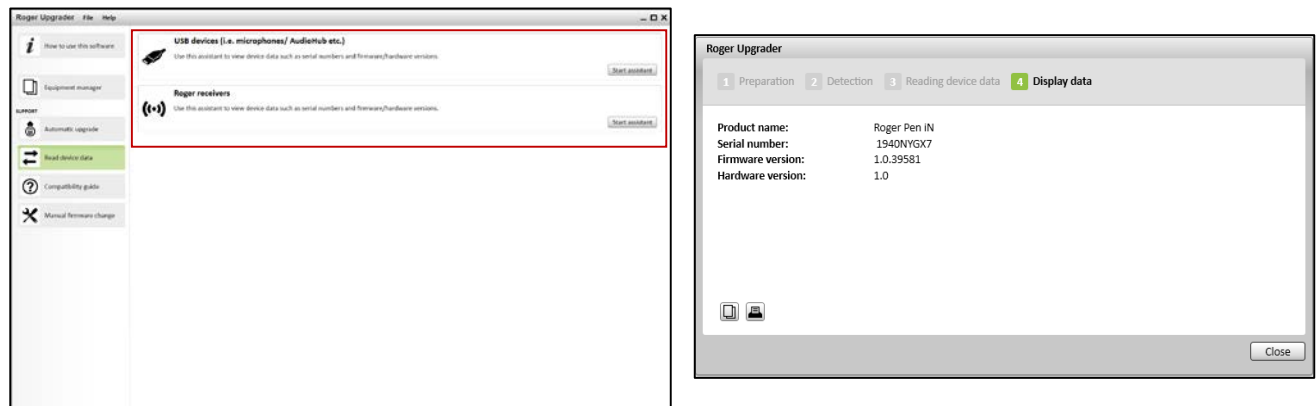

3) Compatibility guide : 로저 네트워크에서 함께 사용할 수 있는 장치를 확인할 수 있습니다(교육용만 해당).

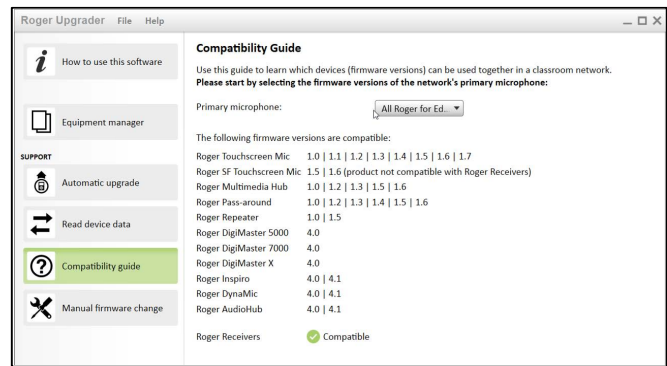

4) Manual firmware change : 업그레이드 해야 하는 펌웨어 버전을 이미 알고 있는 경우에 사용할 수 있습니다.

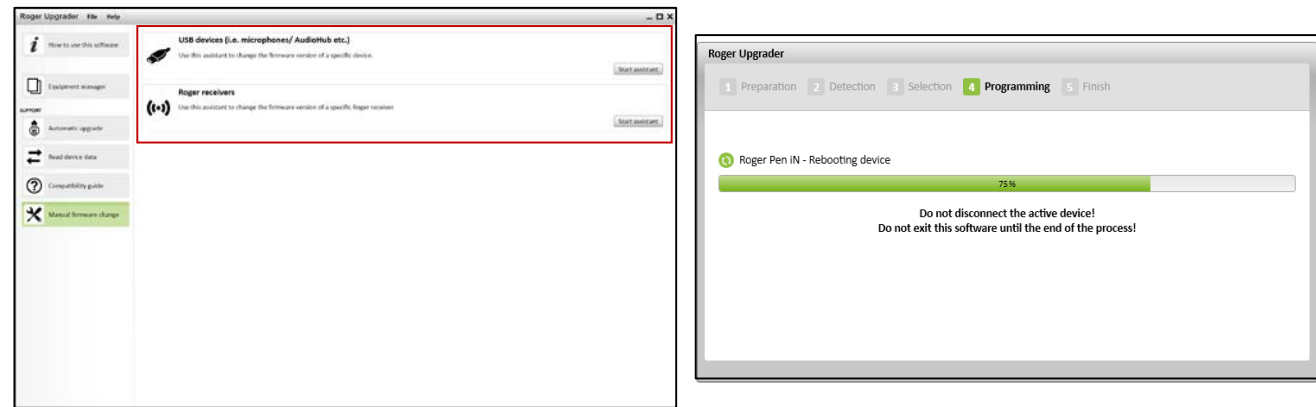

5) Equipment manager : 제품을 쉽게 관리할 수 있도록 미리 정의된 열이 있는 엑셀과 같은 스프레드 시트입니다. 기기가 연결되면 기기 데이터는 유형, 시리얼 번호 및 펌웨어 버전에 적합한 열에 자동으로 입력됩니다. 사용자의 이름, 학교등의 다른 정보를 사용자가 수동으로 입력할 수도 있습니다. 또한 데이터를 내보내고 엑셀에서 수정할 수도 있습니다.

