

Enklare telefonsamtal med Roger

Bruksanvisning



Telefonsamtal hör fortfarande till en av de största utmaningarna för personer med grav till mycket grav hörselnedsättning. Rogerprodukter från Phonak gör det enklare att höra samtalet direkt i hörapparaterna. Roger låter dig ansluta till en stor mängd telefoner och det finns en kompatibel Rogermottagare för praktiskt taget alla hörapparater och cochleaimplantat.

Alla alternativ




Telefonalternativ

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic


Tillbehör

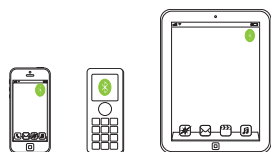

Bärbar enhet (trådlöst via Bluetooth)



Dator för telefonsamtal över Internet
(trådlöst via Bluetooth)

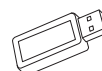

Tillval:
Bluetooth USB-adapter




Dator för telefonsamtal över Internet
(via kabel)



Tillval: Huvudburen
mikrofon



Fast telefon (via kabel)

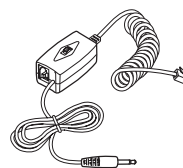

Adapter för
telefoninspelning

Växel



Hub för headset och
Bluetooth USB-adapter

Det finns fler telefonalternativ från Phonak. Gå in på www.phonak.se

Bärbara enheter med Bluetooth


Produkter du behöver



Roger Pen

Använda Bluetooth

Det är bara att parkoppla Roger Pen med din Bluetooth-aktiverade bärbara enhet. Du behöver inte hålla telefonen mot örat för att ringa ett telefonsamtal. Det bästa är att du kan höra den andra personen i båda öronen!

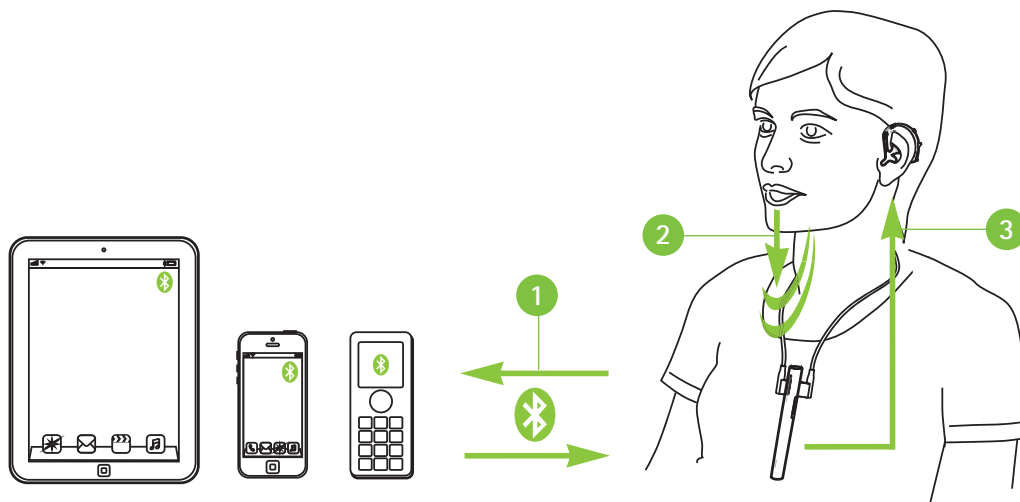


- 1 Parkoppla din bärbara enhet med Roger Pen.
- 2 Under telefonsamtalet är det bara att prata rakt in i Roger Pen.
- 3 Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Dator för telefonsamtal trådlöst över internet via Bluetooth (VoIP, t.ex. Skype)

Produkter du behöver




Roger Pen

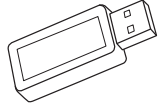

Bluetooth-USB-adapter (t.ex. Sennheiser BTD 500 USB
Phonak artikelnummer: 076-0856)

Använda Bluetooth

Inbyggt Bluetooth eller en separat Bluetooth USB-adapter uppgraderar Roger Pen till en VoIP-lösning. Om Roger Pen bärs runt halsen kan du ta emot telefonsamtal över internet när som helst och använda båda händer till att ta anteckningar.

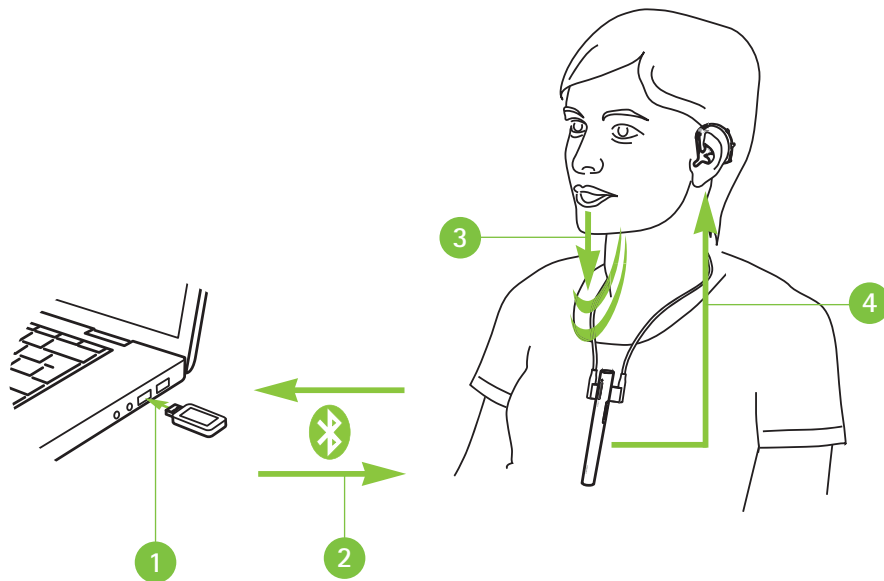

- 1 Sätt in Bluetooth USB-adaptern i en ledig USB-port på din dator.
- 2 Parkoppla Bluetooth USB-adaptern med Roger Pen.
- 3 Under telefonsamtalet är det bara att prata rakt in i Roger Pen.
- 4 Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Dator för telefonsamtal över internet med kabel (VoIP, t.ex. Skype)

Produkter du behöver



Roger Pen



Roger Clip-On Mic




Roger Table Mic



Tillval: Huvudburen mikrofon

Använd en inbyggd mikrofon från en dator

Det här alternativet, som är lätt att ställa in, skickar uppringarens röst direkt till båda öronen.

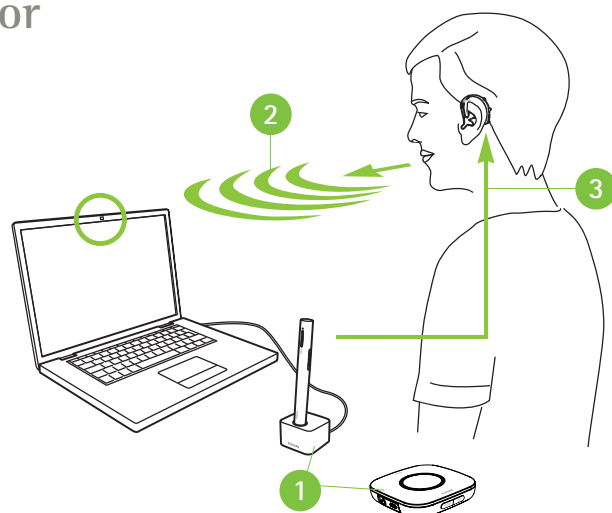


- 1 Anslut kontakten för hörlurarna på din dator till dockningsstationens ljudingång eller direkt till mikrofonens ljudingång.
- 2 Under själva telefonsamtalet talar du in i datorns inbyggda mikrofon.
- 3 Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Använda en extern mikrofon

Om du använder en extern mikrofon överförs din röst med bättre ljudkvalitet.

Anmärkning: Du måste justera ljudinställningarna för din dator eller VoIPprogramvaran för att definiera 3,5 mm-kontakten som ljudutgång och USB-mikrofonen som endast mikrofon.

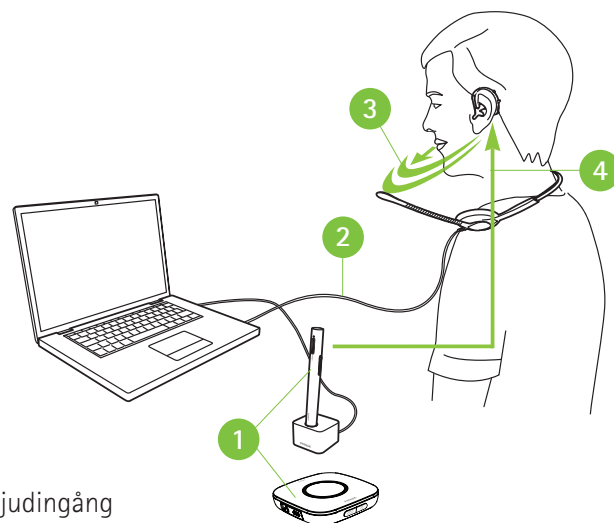

- 1 Anslut kontakten för hörlurarna på din dator till dockningsstationens ljudingång eller direkt till mikrofonens ljudingång.
- 2 Anslut den externa mikrofonen till mikrofoningången på din dator. Alternativt kan du ansluta ditt headset till en USB-port om den har en USB-kontakt.
- 3 Under själva telefonsamtalet talar du in i den externa mikrofonen.
- 4 Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Fast telefon

Produkter du behöver




Roger Pen



Roger Clip-On Mic




Roger Table Mic

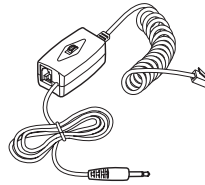

Adapter för telefoninspelning
(t ex Telefonkit 055-4064)

Använda adapter för telefoninspelning

Lyft handenheten och håll den mot munnen för att svara på samtal. Du måste fortfarande tala in i handenheten. Uppringarens röst skickas direkt till båda öronen.

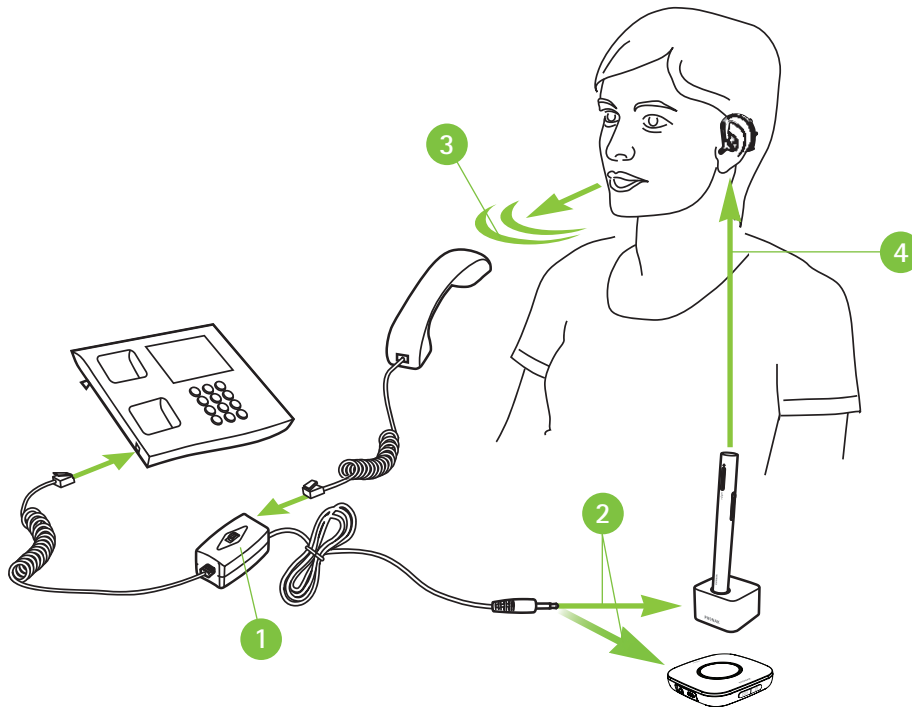



- 1 Installera adaptern för telefoninspelning mellan telefonen och handenheten.
- 2 Anslut kontakten för adaptern för telefoninspelning på din dator till dockningsstationens ljudingång eller direkt till mikrofonens ljudingång.
- 3 Under själva telefonsamtalet talar du in telefonens handenhet.
- 4 Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Växel (dator och fast telefon) trådlöst via Bluetooth

Produkter du behöver




Roger Pen

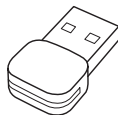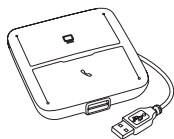

Kommunikationshub för headset (t.ex. Plantronics MDA200), Bluetooth-USB-adapter (t.ex. Plantronics PLT-BT300) Tillgängligt som set från Phonak: 076-0031

Använda Bluetooth

Detta är den mest avancerade lösningen för hektiska kontorssamtal. Telefonen kan växla mellan att vara en datortelefon och en kontorstelefon. I båda fallen överförs ljudet till Roger Pen, som helst bärs runt halsen, som ger dig båda händerna fria under telefonsamtalet.

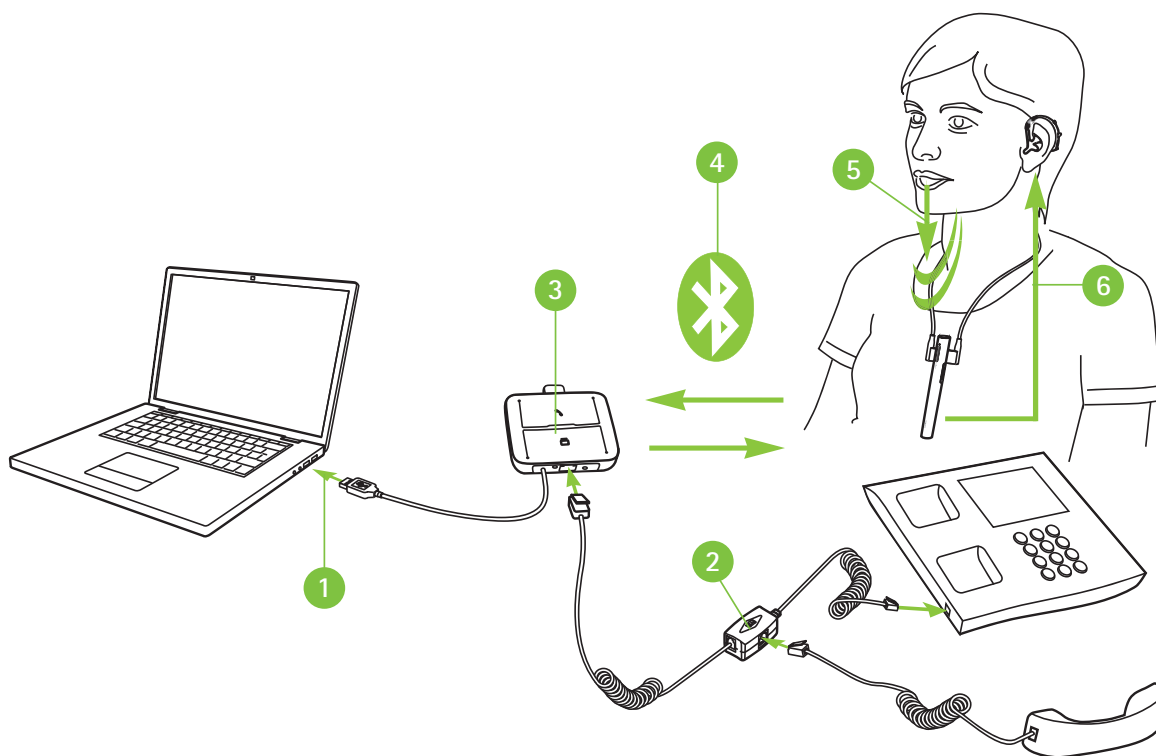

- 1 Anslut huben för headset till din dator.
- 2 Installera adaptern för kommunikationshuben för headset mellan telefonen och handenheten.
- 3 Anslut Bluetooth USB-adaptern till huben för headset.
- 4 Parkoppla Bluetooth USB-adaptern med Roger Pen.
- 5 Under själva telefonsamtalet talar du in i Roger Pen.
- 6 Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se