

Öppna nästa kapitel med Paradise



Phonak ActiveVent™ hörtelefon


There's nothing like the sound of Paradise

Välkommen till
nästa kapitel med
Paradise



Socialt och

Fysiskt

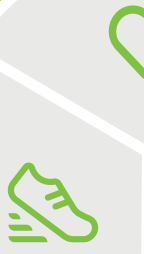

Med introduktionen av Phonak Audéo™ Paradise utvecklade vi en hörapparat som ger klienten en oöverträffad hörselupplevelse¹. Detta första kapitel började för tolv månader sedan, och sedan dess har vår vardag förändrats avsevärt. Ibland behöver man bära munskydd till exempel. För vissa hörapparat användare innebär detta ytterligare svårigheter eftersom det inte går att avläsa vad människor säger.

Phonak Paradise hörapparater med AutoSense OS™ 4.0 anpassar sig enkelt till en rad lyssningssituationer, och låter klienten hantera flera olika miljöer. Dina klienter behöver inte justera sina hörapparater och på så sätt har vi tagit bort ett potentiellt lager av komplexitet. Det kan ha en direkt inverkan på hörapparat användares välbefinnande. Genom att göra det möjligt för fler klienter med hörselnedsättning att kommunicera enklare, kan de hålla kontakter socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

Phonak presenterar nu nästa kapitel med Paradise. Med sitt karaktäristiska klara och naturliga ljud ger Paradise en oöverträffad hörselupplevelse¹ i ännu fler situationer.



Vi presenterar ActiveVent™ – hörtelefon

Världens första intelligenta hörtelefon för hörapparater

Paradise är känd för sin oöverträffade¹ ljudkvalitet⁴ med fantastisk taluppfattning^{3,4,5} och personligt anpassad bullerreducering. Nu öppnar vi ett nytt kapitel med introduktionen av ActiveVent- hörtelefon.


Den helt nya ActiveVent™ är världens första intelligenta hörtelefon för hörapparater och balanserar taltydlighet i bullrig miljö och lyssnarkomfort² för att stärka Phonak Paradises oöverträffade¹ ljudkvalitet⁴ för klienter med lätt till måttlig hörselnedsättning ännu mer.

Den här innovativa hörtelefonsteknologin innefattar en mekaniskt växlande ventil som sömlöst styrs av AutoSense OS 4.0. Den kombinerar intelligent hörselprestandan från en apparat med individuell anpassning med komforten från en med öppen anpassning². Detta skapar en kompromisslös hörsellösning för dina klienter och låter dem få en medvetenhet om sina omgivningar och den egna röstens naturliga ljud samtidigt som taluppfattning i bullrig miljö förbättras⁶.




Hur fungerar ActiveVent-hörtelefon?

ActiveVent är en hörtelefon som integrerar en inbyggd ventil med en liten disk som flyttas mellan två lägen: öppen och stängd. Allt det här kontrolleras intelligent av AutoSense 4.0. Ett betryggande klick signalerar till klienten att disken har bytt läge.

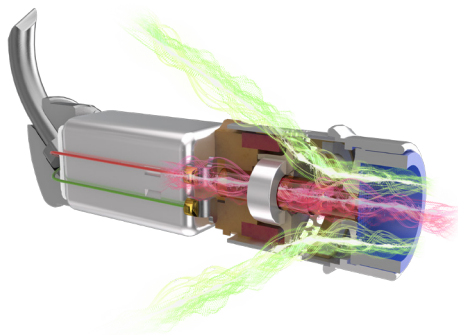

När disken är i det öppna läget passerar direkta ljud genom hörtelefonens inbyggda ventil. Den tillhandahåller på så sätt komforten av en öppen anpassning, den egna röstens naturliga ljud samt medvetenhet om ljud i omgivningen².

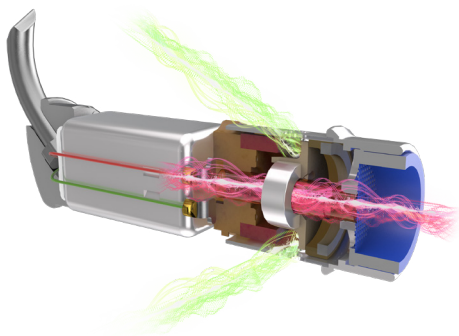

I svåra lyssningssituationer med tal i starkt buller, eller när media streamas, flyttar disken till det stängda läget och blockerar ljud i omgivningen från att gå direkt in i örat, vilket stärker fokus på tal eller streamat material.

ActiveVent kopplingsalternativ

1. Universal SlimTip AV

Du kan enkelt demonstrera ActiveVent för dina klienter tack vare den nya Universal SlimTip AV. Universal Slimtip designades baserat på insamlad data från tusentals öronscanningar vilket gjorde det möjligt för utvecklarna att ta fram fyra former som i hög grad passar bra. Universal SlimTips är en perfekt tillfällig lösning för demonstration och test medan ni väntar på klientens formgjutna SlimTip Titanium AV.

2. Formgjutna SlimTip Titanium AV

För att uppnå optimal akustisk prestanda är ActiveVent designad för långvarig användning med SlimTip Titanium, vilket innebär ett helt individuellt skal i ett hållbart, bekvämt material.

De viktigaste punkterna

- Intelligent balanserad taltydlighet i bullrig miljö och lyssningskomfort².
- Ger överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media^{6,7}
- Kontrolleras intelligent av AutoSense OS 4.0.
- Kompatibel med alla Audéo Paradise laddningsbara hörapparater⁸

Att tänka på vid anpassning av ActiveVent

- För optimal prestanda bör hörtelefoner bytas ut var sjätte månad. Detta görs på mottagningen
- Den ideala kandidaten har minimalt med öronvax och god fingerfärdighet
- Regelbunden rengöring och byte av vaxfilter behövs
- Inte lämplig för de med grav tinnitus eller ljudöverkänslighet



ActiveVent Prestanda + fördelar för dina klienter

ActiveVent är kompatibel med alla Audéo Paradise laddningsbara hörapparater, vilket erbjuder olika nivåer av fördelar enligt hörapparatens funktionsnivå. ActiveVent Prestanda + är en samling fördelar som klienter kan förvänta sig att ActiveVent låser upp i deras hörapparater.


Intelligent balanserad taltydlighet i bullrig miljö och lyssningskomfort²

ActiveVent är idealisk för klienter som har en aktiv livsstil och tillbringar mycket tid i bullriga miljöer som restauranger, sociala sammankomster och offentliga platser med mycket externt buller. Dessa platser kan göra det ännu svårare att höra. Med ActiveVent så stänger AutoSense OS 4.0 automatiskt ventilen när bullernivån höjs, vilket ger hörapparat användaren fördelen av den förbättrade prestandan från en individuell anpassning (tillgänglig på Premium-funktionsnivån). När bullernivån sjunker öppnas ventilen så att klienterna kan njuta av komforten från en öppen anpassning. Med ActiveVent får klienten också tillgång till manuella program med ett stängt ventilläge. (Tillgänglig på Premium-, Avancerad och Standard-funktionsnivå).

Överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media^{6,7}

Klienter kan nu även njuta av överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media tack vare den stängda ventilen. Den verkligt unika aspekten av dessa hörtelefoner är att om din klient vill byta från streaming av media till deltagande i ett samtal så pausar en enkel dubbeltryckning det streamande materialet och ActiveVent öppnas för att tillåta en smidig övergång (tillgänglig på alla funktionsnivåer).

Fördelar

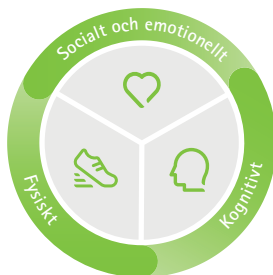

- ActiveVent ger i snitt 10% bättre taluppfattning i bullrig miljö samtidigt som den tillhandahåller ett naturligt ljud i olika lyssningssituationer⁶
- Universal SlimTip gör det enkelt att direkt testa och göra demonstrationer av ActiveVent
- ActiveVent hjälper klienter vara en del av gemenskapen i både bullriga och lugna miljöer, och säkerställer att de kan umgås med familj och vänner och bibehålla goda relationer



There's nothing like the sound of Paradise

Med introduktionen av Paradise säkrade Phonak sin plats som en av industriledarna vad gäller audiologisk expertis. På grundvalarna av industriledande hårdvara inkluderar Paradise nu ännu fler funktioner för att hjälpa dina klienter att åter upptäcka det underbara med ljud i ännu fler situationer medan de förbättrar sitt välbefinnande överlag. Med en bevisad prestanda från PRISM™-chipet fungerar dessa funktioner sömlöst tillsammans för att ge en oöverträffad hörupplevelse¹.

Oöverträffad ljudkvalitet

- Den nya ActiveVent
 - Nya ActiveVent Prestanda +
- Rörelsesensor
- APD 2.0
- AutoSense OS™ 4.0
 - Speech Enhancer
 - Dynamic Noise Cancellation
 - Motion Sensor Hearing



▶ Pålitlig laddningsbar liti



Personliga digitala lösningar

- Uppdaterad myPhonak-app
 - Personligt anpassad tryckkontrollskänslighet
 - AudiogramDirect (via fjärrsupport)
 - Fjärrkontroll
- Ny Target 7.1.9

Universella anslutningsmöjligheter

- Ansluter till smartphones, TV och mycket mer
- RogerDirect™
- Made for all
- Flera Bluetooth®-anslutningar
- Tryckkontroll för enkel tillgång till Bluetooth-funktioner



life is on

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan känna att "life is on". Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonakpro.se

