

Phonak Audéo Fit™

Termékinformációk



A Paradise termékcsoporthoz legújabb innovációja, az Audéo Fit pulzusérzékelő funkcióval rendelkezik, nyomon követi a szervezet egészségügyi adatait, melyek a myPhonak app alkalmazásban tekinthetők meg. A pulzus, a lépésszám és az aktivitási szintek követésével ez a hallókészülék elősegíti az egészséges szokásokat és a jóllét érzetét. A Phonak Paradise platform innovatív technológiájára épülő Phonak Audéo Fit hallókészülékek alkalmasak az enyhétől a súlyosig terjedő hallásvesztéssel élők számára, megoldást nyújtva azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnék figyelemmel követni egészségügyi adataikat.

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com

Termékleírás



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

Többfunkciós gomb		•
Bluetooth®		•
Víztaszító bevonat		•
IP-besorolás		IP68 ¹
Méret	H x Sz x M	30,6 x 12,3 x 8,1 mm (1,21 x 0,49 x 0,32")
	Súly	2,23 g (0,078 oz)
Töltési idő ²	0–100%	3 óra
	0–80%	1,5 óra
	30 perces	10 perc
M vevő	illesztés	
Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)		114
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	51
Frekvenciatartomány (Hz)	2 cm ³ csatoló	<100 – >8000
P vevő		
Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)		122
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló	59
Frekvenciatartomány (Hz)	2 cm ³ csatoló	< 100 – 6300

A burkolat színei



P1
Homokbézs



P4
Gesztenye



P6
Ezüstszürke

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

² A tényleges töltési idő az elem hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

Teljesítményszintek

	Premium	Advanced	Funkciók	Premium	Advanced
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Advanced	UltraZoom	•	•
Komfort visszhangos környezetben	•		Dinamikus zajsűrűsítés	•	
Beszélgetés autóban	•		Beszédkiemelő	•	
Beszéd hangos környezetben	•		EchoBlock visszhangcsökkentő	•	
Zene	•	•	Tap control		
Komfort zajban	•	•	– Siri/Google Asszisztens	•	•
Beszéd zajban	•	•	– Hangtovábbítás szüneteltetése/ újraindítása	•	•
Csendes környezet	•	•	– Hívás fogadása/befejezése	•	•
Média (beszéd) + mikrofon	•	•	StereoZoom	•	•
Média (zene) + mikrofon	•	•	WindBlock	•	•
További programok			SoundRelax	•	•
További programok maximális száma	4	4	Beszédirány érzékelő szenzor	•	•
Komfort visszhangos környezetben	•		DuoPhone	•	•
Beszéd hangos környezetben	•	•	Real Ear Sound	•	•
Beszéd 360°-ban	•	•	Roger és direkcionalitás beállítások	•	•
Beszéd zajban	•	•	SoundRecover2	•	•
Csendes környezet	•	•	WhistleBlock	•	•
Komfort zajban	•	•	NoiseBlock	•	•
Zene	•	•	RogerDirect™	•	•
Akusztikus telefon	•	•	Felhasználói szokások naplózása	•	•
Egyéni program	•	•	QuickSync	•	•
Hangtovábbító programok			AOV	•	•
RogerDirect + mikrofon	•	•	Tinnitus Balance	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	auto Acclimatization	•	•
Telefonhívás + mikrofon	•	•	Környezeti egyensúly	•	•
			Finomhangolható csatornák	20	20

Egészségügyi funkciók

	Audéo Fit	Paradise újratölthető, kihelyezett hangszórós hallókészülékek
Minden hallókészülék esetén egyedi viselési idő	•	•
Átlagos összevont viselési idő kétoldali hallókészülékek esetén	•	•
Átlagos viselési idő különböző hangkörnyezetekben	•	•
Lépések	•	•
Tevékenységi szintek	•	•
Séta vagy futás távolsága	•	
Pulzusérzékelő	•	
Választható célmeghatározás a viselési időre	•	•
Választható célmeghatározás a lépésszáma	•	•

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.
Az IOS a Cisco, Inc. védjegye.
Az Android a Google, Inc. védjegye.


Illesztés

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial
Phonak Target	7.3-as vagy újabb
Noahlink Wireless	•

Akusztikus csatoló*

Hosszúság	M Sensor Receiver	P Sensor Receiver
Négy méretben kapható (0, 1, 2, 3), bal és jobb	•	•
Dóm		
Kupak dóm	•	
Nyitott harang	•	
Zárt dóm furattal	•	
cShell		
Akril	•	•
Illesztési tartományok		

* Csak a 8 tús Sensor Receiver és a Sensor cShell működik az Audéo Fit készülékkel.

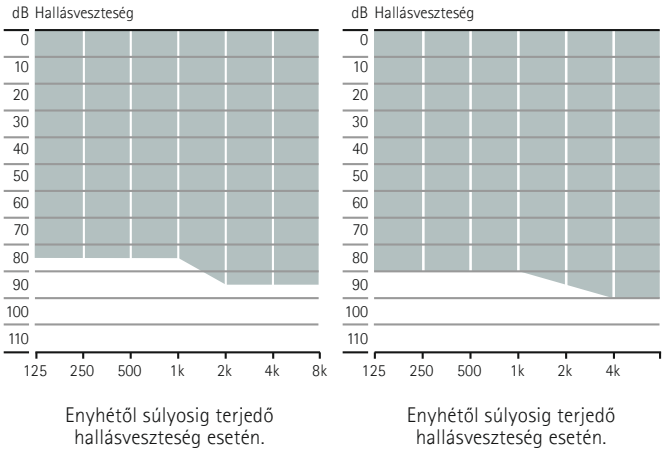

Phonak Audéo Fit Trial™

Az új Phonak Audéo P Fit Trial hallókészülékek a javaslatoknak megfelelően gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre. A Phonak Audéo P Fit Trial hallókészülékben megtalálható mindkét technológia számos lehetőséget biztosít arra, hogy már az első találkozó alkalmával illeszthessük a megfelelő készüléket az ügyfél számára, vagy a javítások közötti időszak áthidalására.

Phonak Audéo Fit töltési lehetőségek



Phonak Charger Case Combi

A Phonak Charger Case Combi töltő, szárítótégely és kemény fedelű tartó egyben. A strapabíró és fröccsenésbiztos burkolat emellett egy tisztítóeszközt is tartalmaz.



Phonak Power Pack

A Phonak Power Pack egyszerűen csatlakoztatható a Phonak Charger Case Combi alsó részéhez, így akár útközben is feltölthetők az újratölthető hallókészülékek.

Phonak Audéo Fit Bluetooth® verziók

Közvetlen hívások/hangadatátvitel

Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
Vezeték nélküli kiegészítő	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
RogerDirect™	•
Alkalmazások	
myPhonak	•

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com/audeoparadise

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/roger oldalon olvashat bővebben

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel, és elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallási megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a hallásvesztés mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit szociális kapcsolataik kialakításában, valamint mentális és érzelmi fejlődésükben.

www.phonak.com



027-0656-13/V1.00/2022-01/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved