

New Phonak Virto™ B-Titanium

Produktinformation



Den nye Phonak Virto B-Titanium er et innovativt i-øret-apparat med to forskellige ydelsesniveauer til personer med alt lige fra let til kraftig hørenedsættelse. Den nye model af Virto B-Titanium er det mindste Phonak i-øret apparat nogensinde opdateret med mindre ventilation og med biometrisk kalibrering.

Phonak Virto B-Titanium-høreapparaterne, som er baseret på teknologien fra Phonak Belong™-platformen, er den ideelle løsning for klienter, der efterspørger en specialudviklet og æstetisk smuk høreøsning, som giver en optimal hørepræstation.

Til modellerne B90 og B70 er der mulighed for Phonak Minicontrol til fjernstyring af apparaterne.

Tilpasning sker med Phonak Target 5.2 eller nyere, med NOAHLINK, HI-PRO og HI-PRO2.

Yderligere oplysninger finder du på www.phonakpro.dk

Produktbeskrivelse



Phonak Virto B-Titanium
B90/B70

Teknologiniveau	
M	•
P	•
SP	•
Hardwarekonfiguration/ekstraudstyr/teknologi	
Batteristørrelse	10
Trykknop (til programændring eller regulering af volumen)	ekstraudstyr
EasyPhone (til akustisk telefon)	ekstraudstyr
MiniControl* (til programændring eller regulering af volumen)	ekstraudstyr
Telespole	ekstraudstyr
Mikrofonteknologi	Omni
IP-klassificering	IP68 ¹

Farver

Skalstil
IIC/CIC



Skalfarve

Titanium Gray

Faceplate-farve

Black

Faceplate-farve

Cocoa

Faceplate-farve

Pink

* fås kun med trykknop.
Ved fjernelse af trykknop leveres MiniControl med som standard


Mulighed for mindre vent., længere udtrækssnor og to forskellige overfladetyper.

1 IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet dokumenteret ved test, at det kan holde til vedvarende nedsenkning i vand på en meters dybde i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC 60529. Der blev ikke fundet spor af støv i huset.


Tekniske data

Ydelsesniveauer		M*	P*	SP
Maksimal output (dB SPL)	2 cc-kobler	109	115	119
Power output	Ear simulator	120	125	129
Maksimalt gain (dB)	2 cc-kobler	40	50	60
	Ear simulator	50	60	70
Frekvensområde (Hz)	2 cc-kobler	<100-7.000	<100-6.700	<100-7.000
Strømforbrug (mA)	2 cc-kobler	0,95	1,00	0,95
Tilpasningsområde				


* Til M og P receiver fås Titanium FitGuide tool

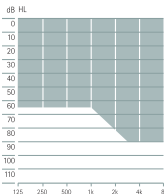

Til personer med let til moderat hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

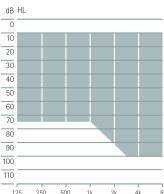

Til personer med let til moderat/kraftig hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

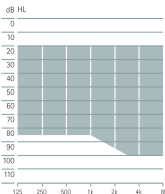

Til personer med moderat til kraftig hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

Vigtigste funktioner

Funktioner	Premium B90	Advanced B70
FlexControl	•	•
FlexVolumen	•	•
SoundRecover 2	•	•
Klientbaseret finindstilling	•	•
Finindstilling af kanaler	20	16
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
EchoBlock	•	•
SoundRelax	•	•
AOV og AOV-O	•	•
Tinnitus Balance	•	•
Auto acclimatization	•	•

Ydelsesniveauer

	Premium B90	Advanced B70
	Premium	Advanced
AutoSense OS		
Rolig situation	•	•
Tale i støj	•	•
Tale i bil	•	•
Komfort i støj	•	•
Komfort i ekko	•	•
Musik	•	•
Yderligere programmer		
Maks. yderligere programmer	5	5
Rolig situation	•	•
Tale i støj	•	•
Musik	•	•
Komfort i støj	•	•
Komfort i ekko	•	•
Akustisk telefon	•	•
Individuelt program	•	•