

Phonak Audéo™ L.

Produktinformation

Phonak Audéo L er den omfattende RIC portefølje til mild til svær hørenedsættelse. Phonak Audéo L omfatter tre designs, fire ydelsesniveauer og fire højttalere.

Baseret på Phonak Lumity platformens innovative teknologi er Phonak Audéo L høreapparater løsningen til de klienter, der foretrækker fleksible og diskrete RIC modeller



Produktbeskrivelse

				
		Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Multi-funktionsknap		•	•	•
Telespole			•	
Bluetooth®		•	•	•
Vandafvisende belægning		•	•	•
IP rating		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mål	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32")	29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35")
	Vægt	2,2 g (0,08 oz)	2,6 g (0,09 oz)	2,8 g (0,1 oz)
Opladningstider ²	0 % til 100 %	3 t	3 t	3 t
	0 % til 80 %	1,5 t	1,5 t	2,0 t
	30 min. tilpasning	15 min.	15 min.	20 min.
S Receiver				
Maks. Udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	111	111	111
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	47	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
M Receiver				
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	114	114	114
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	51	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
P Receiver				
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	122	122	122
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	59	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
UP Receiver				
Maks. Udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	132	132	132
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	71	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

Husfarver

							
P1 Sand Beige	H0 Beige	P3 Sandalwood	P4 Chestnut	P5 Champagne	P6 Silver Gray	P7 Graphite Gray	P8 Velvet Black

¹ IP68 indikerer, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
² Faktisk opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men vil ikke overstige 3 timer.

Ydelsesniveauer

	Premium	Advanced	Standard	Essential
AutoSense OS™ 5.0				
Komfort i ekko	•			
Tale i bil	•			
Tale i kraftig støj	•			
Musik	•	•		
Komfort i støj	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Medietale + mic	•	•	•	•
Mediemusik + mic	•	•	•	•
Yderligere programmer				
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefonopkald + mic	•	•	•	•

	Premium	Advanced	Standard	Essential
Funktioner				
SmartSpeech™ Technology				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger og direktionel streaming	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•		
- Acceptor/afslut telefonopkald	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Sundhedsfunktioner	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Klientbaseret indstilling	•	•	•	•
Tinnitus balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Finjusteringskanaler	20	20	16	12


Tilpasning

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 eller nyere	8.0 eller nyere	8.0 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•	•

Koblingsmulighed

Længde	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Fås i fire forskellige længder (0, 1, 2, 3), til venstre og højre øre	•	•	•	•
Lydkuppel				
Cap lydkuppel	•	•	•	
Åben lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Vented lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Power lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Akryl	•	•	•	
Silikone	•	•	•	
cShell				
Akryl	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
Tilpasningsområder				

*Fås med ekstra kanallængde

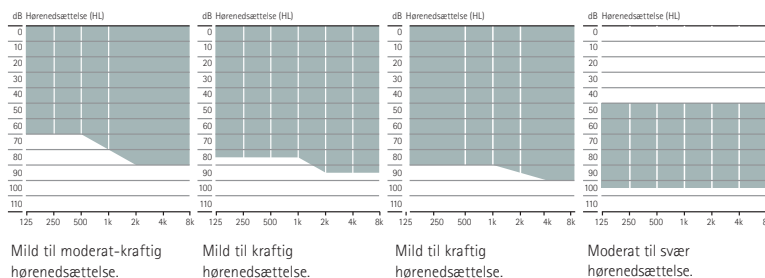

SmartSpeech™ Technology

SmartSpeech Technology repræsenterer Phonaks dedikation til at designe funktioner, der forbedrer taleforståeligheden og øger lyttepræstationen i forskellige lyttesituationer¹. Vores udvalg af funktioner omfatter Speech Enhancer, Dynamic Noise Cancellation og Motion Sensor Hearing og Roger Direct teknologi. Med Phonak Audéo™ Lumity introducerer vi to nye funktioner: StereoZoom 2.0 og SpeechSensor som en tilføjelse til de eksisterende fordele.

Phonak Audéo L Trial™

Phonak Audéo L Trial høreapparaterne kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau, så det passer til dine behov. Alle niveauer af teknologi i ét Phonak Audéo L Trial høreapparat giver mange muligheder for at levere en hørreløsning ved første aftale og sikrer klienten hørelse, imens høreapparatet er til reparation.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 – significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet februar 2022.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News under udarbejdelse. Forventet i midten af 2022.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411.

Phonak Audéo L opladningsudstyr



Phonak Charger Ease

Phonak Charger Ease er en kompakt oplader med magneter i opladningshullerne, der gør det nemt at indsætte og udtage Audéo L-R og RT. Den bruger en standard USB-C opladningsport, der lyser, når strømmen er tilsluttet.



Phonak Charger Case Go og Phonak Life Charger

Der er to muligheder for Audéo L-RL.
Phonak Charger Case Go er udstyret med et indbygget batteri, der kan oplade to høreapparater op til tre gange. Begge opladere bruger en standard USB-C opladningsport, og LED bagpå lyser, når strømmen er tilsluttet.

Phonak Audéo L Bluetooth® versioner

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

Trådløs kommunikationsportefølje

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Trådløst tilbehør			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
RogerDirect™	•	•	•
Apps			
myPhonak	•	•	•

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge www.phonakpro.com/audeolumity

Du kan finde oplysninger om Roger mikrofoner på www.phonakpro.com/roger

Du kan finde yderligere oplysninger om eSolutions på www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Siden 1947 har Phonak været dedikeret til at understøtte menneskers livskvalitet ved at åbne op for en verden af lyd. Allerede da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet med en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne nyde livet til fulde. Høresansen hænger nemlig direkte sammen med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag såvel som i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det mest omfattende udvalg af innovative høreløsninger. Sammen med vores hørespecialister fortsætter vi med at fokusere på det vigtigste: at forbedre taleforståeligheden, give mennesker en bedre livskvalitet og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

www.phonak.com



027-0667-08/V3.00/2022-08/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved