

Phonak Naída™ Marvel



Kærlighed ved første lyd

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.com

Med Phonak Naída™ Marvel introducerer vi multifunktionelle høreapparater, der giver en ”kærlighed ved første lyd”-oplevelse

Når vi siger ”kærlighed ved første lyd”, mener vi ikke blot den første gang, klienterne prøver Phonak Naída™ Marvel høreapparaterne – vi mener hver eneste gang, de bruger dem. Fra det øjeblik, du tilpasser klientens høreapparater, kan de forvente en lyd kvalitet i særklasse.

Denne nye generation af Phonak-teknologi genkender og tilpasser automatisk lytteoplevelsen, så den passer til flere lyttesituationer end nogensinde før¹. Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Teknologi™ kan dine klienter nyde bedre hukommelsesgenkaldelse og reduceret lyttebesvær i støj.²


Vigtigste funktioner:

- Bedre taleforståelse i støj med Roger³
- Reduceret lyttebesvær i støj^{*2}
- Bedre hukommelsesgenkaldelse i støj^{*2}
- Verdens første høreapparat med klassificering af streamede lydsignaler¹

Pålidelighed

Naída er verdens mest populære høreapparat⁴. Førsteklasses ingeniørkunst og design gør Naída Marvel til en meget effektiv og diskret løsning for personer med kraftig til svær hørenedsættelse. Siden 1978, hvor vores første ultraeffektive høreapparat blev lanceret, har vi løbende udviklet høreapparater med det formål at forbedre klientens liv. Den nye Naída M-SP, som er baseret på den anerkendte Marvel teknologi, omfatter ultraeffektive premium-høreapparater med avancerede teknologiske løsninger, der til enhver tid leverer den ydeevne, som er nødvendig for at håndtere klienternes hørenedsættelse.

Klienter med kraftig til svær hørenedsættelse er afhængige af deres høreapparater og har brug for en løsning, der kan levere varen. Det robuste hus gør det muligt for klienten at håndtere sine aktiviteter og hverdagslivet, vel vidende at høreapparaterne aldrig lader dig i stikken og klarer selv de mest krævende lyttesituationer.

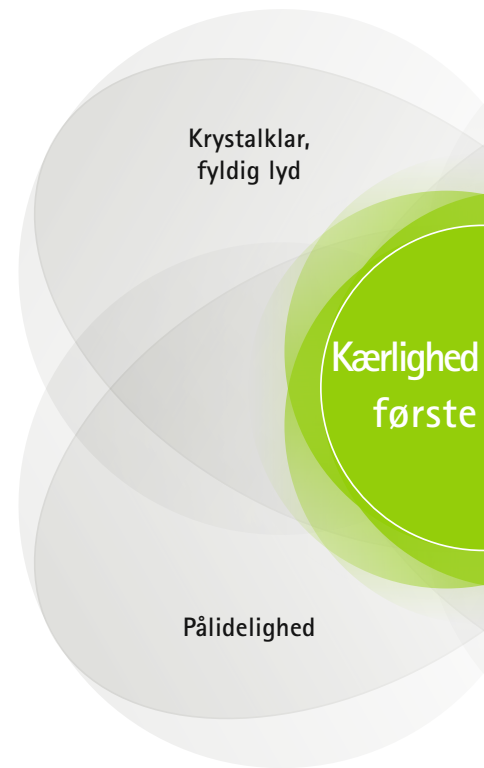


Produktbeskrivelse



Naída M-SP
Naída M-SP Trial
 M90/M70/M50/M30

Batteristørrelse		13	
Multi -funktionsknap		•	
Telespole		•	
Bluetooth®		•	
Nano-coating		•	
IP-rating		IP68 ⁵	
Mål	L x B x D	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)	
	Vægt	4,4 g/0.155 oz	
		HE11	HE11 680
Maks. Power Output (dB SPL)	2 cc-kobler	139	133
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	81	75
Frekvensområde (Hz)		<100 - >5000	<100 - >5000
Strømforbrug (mA)		2,1	2,0

Tilpasningsområde

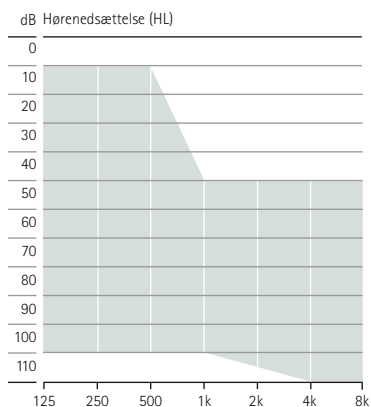

Moderat til svær hørenedsættelse,
 alle audiometriske konfigurationer

■ HE11 680

Husfarver



P1
 Sand Beige



P3
 Sandalwood



P4
 Chestnut



P5
 Champagne



P6
 Silver Gray



P7
 Graphite Gray



P8
 Velvet Black



T7
 Alpine White



H0
 Beige

Ydelsesniveauer

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS 3.0				
Rolig situation	•	•	•	•
Tale i støj	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	
Musik	•	•		
Tale i kraftig støj	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Medie:tale + mic	•	•	•	•
Medie:musik + mic	•	•	•	•
Yderligere programmer				
Maks. yderligere programmer	3	3	3	3
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefonopkald + mic	•	•	•	•

Funktioner	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Klientbaseret finindstilling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Finjustering af kanaler	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Akustisk Optimeret Ventilation	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger og retningsindstilling	•	•	•	

Tilpasning

	Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.2 eller nyere
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Koblingsmulighed

Lyddugang	Hook	Dæmpet (HE11 680) eller udæmpet (HE11), transparent	
	SlimTube 4.0	Fås til venstre/højre side og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)	
Øredel til SlimTube	Lydkuppel	Cap dome	
		Åben kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
		Ventileret kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
		Power kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip	Akryl	
		Silikone	
		Titanium	
Til hook	Øreprop		
	Universal øretip		

Phonak Trial™

De nye Phonak Naída M Trial-høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. De giver dig mulighed for at give din klient den optimale høreløsning allerede ved første aftale eller at tilbyde et låneapparat, når klientens høreapparat er til reparation.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuskript under udarbejdelse. Forventes primo 2020.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Skriv til os på adressen marketinsight@phonak.com, hvis du vil have flere oplysninger. Baseret på kundetilfredshedsundersøgelsen 2017.
- 5 IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
Brug af disse mærker fra Sonova AG er underlagt licens.
IOS er et varemærke tilhørende Cisco Technology, Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google, LLC.

Phonak Naída Marvel Bluetooth®-versioner

Direkte opkald/audiostreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste ældre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-ordet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Trådløs kommunikationsportefølje

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Trådløst tilbehør	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger-mikrofoner	•
App	myPhonak	•
	Phonak Guide	•


Du kan finde flere oplysninger om Naída Marvel ved at besøge www.phonakpro.com/naidamarvel

Du kan finde oplysninger om Roger-mikrofoner på www.phonakpro.com/roger

Du kan finde flere oplysninger om Phonak-apps på www.phonakpro.com/smartapps

Mageløse Marvel

Naída Marvel er de første og mest avancerede bag-øret-høreapparater i verden med håndfri opkald, som streamer til iOS, Android eller andre Bluetooth-kompatible enheder. Nu kan klienterne få gavn af håndfri telefonopkald ved hjælp af de indbyggede mikrofoner. Derudover kan lydmeddelelser afspilles i høreapparaterne. Naída gør det også muligt at streame musik, videoer, e-bøger, podcasts m.m. i stereo.

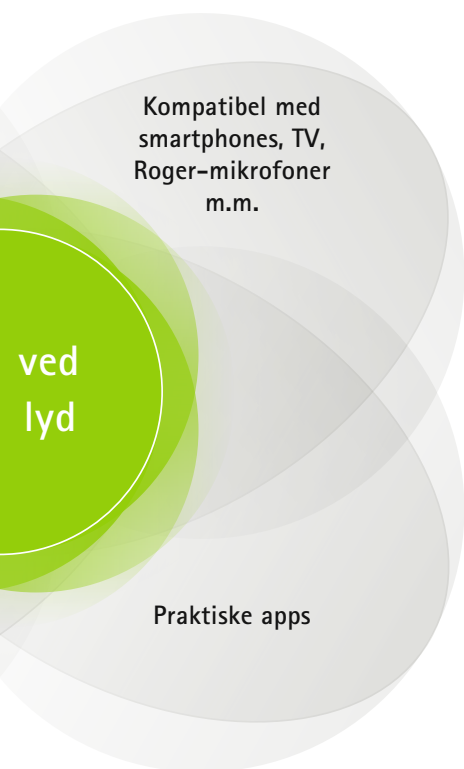

Naída er udstyret med patenteret AirStream™-teknologi, der gør det muligt at streame fra ethvert fjernsyn eller stereosystem. Med den brugervenlige plug and play-løsning TV Connector kan klienterne se TV-programmer og film. Den fungerer ligesom trådløse hovedtelefoner – eller måske endda endnu bedre, fordi Marvel høreapparaterne kan skelne mellem streamede tale- og musiksignaler og automatisk justere lydkvaliteten derefter.

Vigtigste funktioner:

- Tilslutning til smartphones – iOS og Android
- Tilslutning til en lang række elektroniske hverdagsprodukter
- Høreapparaterne fungerer som trådløse hovedtelefoner med stereolyd
- Ekstra lang streamingtid takket være AirStream Teknologi

Roger™-teknologien tilbyder en fremragende hørepræstation i støj og på afstand.³ Phonak Naída™ Marvel har RogerDirect™, som gør det muligt for Roger-teknologi at streame direkte til Marvel høreapparater uden tilslutning af en ekstern modtager.

Vigtigste funktioner:

- Marvel og Roger – den optimale løsning til udfordrende lyttesituationer
- Udviklet til at forbedre taleforståeligheden i støj og på afstand
- Diskrete og attraktive løsninger

Apps-olut mageløs!

Phonaks nye digitale serviceplatform er udviklet til at forbedre klienternes personlige lyttebehov. Via **myPhonak appen** kan dine klienter vælge at dele oplysninger med dig, du kan tilpasse deres lytteoplevelse i realtid, og med den avancerede fjernbetjeningsfunktion kan dine klienter selv justere deres høreapparater til lige netop deres behov.

Vigtigste funktioner:

- Tilpasning af lyd i realtid

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonakpro.dk