



Nouveautés Printemps 2018

Ensemble,
nous changeons des vies



Portefeuille Phonak

Phonak, premier fournisseur mondial de solutions auditives, lance toute une série de nouvelles technologies pour simplifier la vie de vos patients.

Vue d'ensemble

	RIC	BTE	ITE	Surpuissants	Pédiatriques	CROS
Premium	Audéo B90	Bolero B90	Virto B90	Naída B90	Sky B90	CROS
Avancé	Audéo B70	Bolero B70	Virto B70	Naída B70	Sky B70	
Standard	Audéo B50	Bolero B50	Virto B50	Naída B50	Sky B50	
Essentiel	Audéo B30	Bolero B30	Virto B30	Naída B30		
Basic		Vitus+	Vitus+			
CMU		Vitus				

Nouveautés printemps 2018

- Phonak Naída B Page 6
- Phonak Sky B Page 14
- Roger Select, Roger Table Mic II Page 22
- Phonak Vitus+/Vitus Page 24

Lorsqu'une technologie
auditive surpuissante
me rapproche de
l'essentiel, je profite
de la vie

Découvrez la 5^e génération
de l'aide auditive surpuissante
la plus fiable au monde :
Phonak Naída™ B



Naída B



Naída V



Naída Q



Naída



Naída S



Naída B-SP



Naída B-UP



Naída B-R RIC



Phonak Naída B

Dotée de la technologie éprouvée Phonak Belong™, la nouvelle gamme de produits Naída réunit des aides auditives haut de gamme équipées de technologies performantes spécifiques qui profitent grandement aux patients présentant une perte auditive sévère à profonde.

Phonak Digital Adaptive Contrast

- Un appareillage plus souple pour la perte de résolution auditive

SoundRecover2

- Une meilleure audibilité des sons aigus pour la perte d'audition des sons aigus^{1, 2, 3}

Technologie Binaurale VoiceStream™

- Une excellente compréhension vocale pour la perte du rapport signal sur bruit^{4, 5, 6}

Réglages améliorés de Roger™ et directivité, et de la gamme de microphones Roger™

- Des performances auditives améliorées à proximité du bruit et à distance pour la perte de rapport signal sur bruit⁶

Phonak Naída B–R RIC


- L'aide auditive rechargeable la plus riche en fonctionnalités de Phonak, conçue pour être simple et facile à utiliser par les patients présentant une perte auditive sévère à profonde

Phonak Naída B

Un appareillage plus souple

Les patients souffrant d'une baisse de la résolution auditive ont des difficultés à reconnaître certains détails spectraux et temporels dans la parole. Ces derniers sont essentiels pour identifier et différencier les mots prononcés. Même avec un niveau d'amplification adapté, la compréhension vocale de base peut rester difficile.

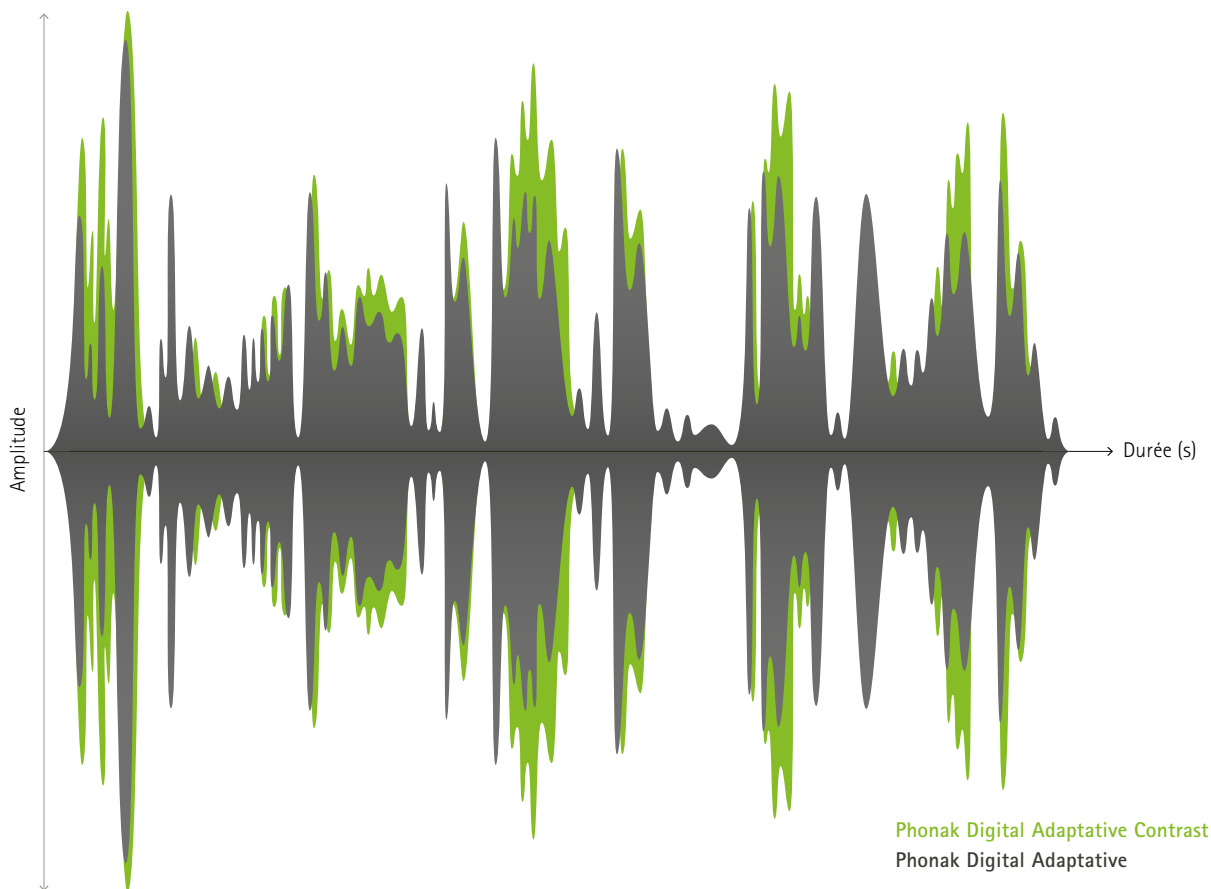

Grâce à la nouvelle formule d'appareillage brevetée **Phonak Digital Adaptive Contrast**, nous proposons désormais une option de compression lente. Avec des temps d'attaque et de retour longs, les contrastes spectraux ainsi que les modulations de la parole sont mieux préservés. Cela amplifie les informations sur l'enveloppe de la parole par rapport à Phonak Digital Adaptive. Il est donc désormais possible de se rapprocher du signal vocal original et de rendre les détails perdus de la parole plus audibles. Les recherches montrent que cela entraîne une meilleure reconnaissance des voyelles chez certains patients.^{7,8}



Selon les besoins, les préférences et/ou l'acceptation spontanée d'un patient, certaines personnes rencontrant des difficultés de résolution auditive préfèrent et entendent mieux avec Phonak Digital Adaptive Contrast. Pour cette raison, nous vous fournissons désormais la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de traitement des patients grâce à cette option supplémentaire d'appareillage adapté.

Le tableau ci-dessous vous fournit une recommandation sur le type de formule d'appareillage Phonak à sélectionner et à quel moment dans Phonak Target :




Caractéristiques du patient

Résolution auditive	Distinction de la parole inférieure aux attentes pour la configuration de l'audiogramme	Distinction de la parole conforme aux attentes pour la configuration de l'audiogramme
Recrutement de la sonie	Champ dynamique adéquat (niveau de sortie maximum prescrit)	Champ dynamique réduit et niveau de sortie maximum diminué
Réaction à la compression	Réagit mal à la compression, comme lors du passage d'aides auditives analogiques à des aides auditives numériques	Réagit bien à la compression, comme lors du passage d'aides auditives analogiques à des aides auditives numériques
		
Formule d'appareillage Phonak recommandée	Phonak Digital Adaptive Contrast	Phonak Digital Adaptive



Phonak Naída B

Description des produits

	 Naída B-R RIC (B90/B70/B50)	 Naída B-SP (B90/B70/B50/B30)	 Naída B-UP (B90/B70/B50/B30)
Pile/batterie	Lithium-ion	13	675
Bouton-poussoir (Programme / Volume)	•	•	•
Contrôle de volume		•	•
Bobine d'induction		•	•
EasyPhone	•	•	•
Entrée audio directe		•	•
Compatibilité Phonak CROS B		•	•
Indice de protection	IP68*	IP68*	IP68*
Gain Max. (dB)	xS (46/111)	HE 11 680 (74/133)	HE 11 680 (77/135)
MPO (dB SPL)	xP (57/124)	HE 11 (81/139)	HE 11 (82/141)
Coupleur 2 cc	xUP (66/130)		

Couleurs

								
P1	P3	P4	P5	P6	P7	P8	T7	O1
Dune de Sable	Santal	Noisette	Champagne	Gris Argenté	Gris Carbone	Velours Noir	Blanc Alpin	Beige

* L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529. Aucune trace de poussière n'a été retrouvée à l'intérieur du boîtier.

Lorsque les technologies
auditives révèlent tout le
potentiel d'un enfant,
la vie s'exprime

Découvrez la nouvelle gamme
dédiée à l'appareillage pédiatrique :
Phonak Sky™ B







Sky B-UP



Sky B-SP



Sky B-P



Sky B-PR



Sky B-RIC



Sky B-M

Phonak Sky B

Les recherches montrent que proposer aux enfants des solutions auditives optimales dès leur plus jeune âge a un impact direct sur la manière dont ils réussiront.⁹

La gamme Sky B ouvre les portes du cerveau grâce à une technologie innovante intégrée dans un boîtier solide. Elle est spécialement conçue pour être facile à utiliser et pour résister même aux jeunes enfants les plus actifs.

La gamme Sky B comprend trois niveaux de performances (B90, B70, B50) et six modèles (dont un BTE rechargeable), et offre les avantages suivants :

Meilleure compréhension

- AutoSense Sky OS est le seul* système d'exploitation conçu pour l'environnement sonore d'un enfant^{10,11}
- SoundRecover2 donne aux enfants l'accès à un plus vaste éventail de sons, essentiel au développement de la parole et du langage^{** 1,12}
- L'association de Roger™ et des aides auditives permet aux enfants de mieux entendre leurs camarades et leurs enseignants dans une salle de classe¹³

Simplicité d'utilisation

- Un témoin lumineux rassure les parents et les soignants sur l'état de l'appareil
- La batterie rechargeable au lithium-ion intégrée dans le modèle Sky B-PR évite de changer la pile

Sécurité et durabilité

- Aide auditive résistante à l'eau et à la poussière, avec un indice IP68^{***}
- Les options de sécurité enfant garantissent la sécurité des jeunes utilisateurs^{****}
- Boîtier solide conçu pour répondre au style de vie actif des enfants

* En date du mois de février 2018

** Par rapport à SoundRecover

*** L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace de poussière n'a été trouvée dans le boîtier

**** Phonak respecte la norme CEI en matière de sécurité enfant jusqu'à l'âge de 36 mois

Phonak Sky B-PR

Phonak Sky B-PR est la seule* aide auditive rechargeable conçue spécialement pour les enfants qui associe une technologie hautes performances et une batterie innovante.

Sûre, résistante et conçue pour le quotidien des enfants

Que ce soit pour de jeunes enfants ou des adolescents actifs, l'aide auditive Sky B-PR est prête à relever tous les défis. Grâce à sa batterie lithium-ion complètement intégrée et à un coude miniature avec sécurité enfant, cette aide auditive est idéale pour les petites oreilles. L'aide auditive Sky B-PR est solide, résiste à l'eau et convient même aux enfants les plus actifs.

Le témoin lumineux indique clairement si l'aide auditive est allumée ce qui permet d'être rassuré sur son bon fonctionnement.

Le coude avec sécurité enfant garantit la sécurité pour les jeunes utilisateurs.**

La batterie rechargeable intégrée ne peut être enlevée ni avalée.



L'aide auditive Sky B-PR est disponible en 14 couleurs de boîtier et 7 couleurs de coude.

Les aides auditives Sky B sont résistantes à l'eau.***
Les enfants peuvent garder leurs appareils dans un environnement humide.****

* En date du mois de février 2018

** Respecte la norme CEI en matière de sécurité enfant jusqu'à l'âge de 36 mois

*** L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace de poussière n'a été trouvée dans le boîtier

**** Il n'est pas recommandé d'utiliser ces aides auditives pour nager ou dans les lieux où de l'eau chlorée, du savon, de l'eau salée ou d'autres liquides contenant des produits chimiques sont présents

Toujours active

La batterie lithium-ion est fiable et capable de soutenir la technologie innovante et les performances de l'aide auditive Sky B. Les parents, les soignants, les enseignants et les enfants peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que les aides auditives vont rester en marche toute la journée. Les aides auditives rechargeables Phonak peuvent être complètement chargées en seulement 3 heures pour 24 heures d'audition.*¹⁴

En plus de l'aide auditive innovante Sky B-PR rechargeable, Phonak propose des options de charge intelligentes simples d'utilisation, pour que les parents et les enfants puissent recharger les aides auditives où qu'ils soient, sans craindre de se retrouver sans batterie.



Phonak Écrin de charge

Fournie avec un chargeur, un boîtier de séchage, un boîtier de protection et des accessoires de nettoyage.



Phonak Mini Chargeur

L'option de charge la plus compacte.



Phonak Power Pack

Facile à fixer au à l'écrin de charge, idéal pour les déplacements sans prise électrique à portée de main.

* Résultats attendus en cas de charge complète et jusqu'à 80 minutes de temps de diffusion sans fil

Phonak Sky B

Description des produits



Sky B-M
B90/B70/B50



Sky B-P
B90/B70/B50



Sky B-PR
B90/B70/B50

Pile/batterie	312	13	Lithium-ion
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	•	•
Contrôle de volume		•	•
Bobine d'induction	•	•	•
EasyPhone	•	•	•
Entrée audio directe		•	
Verrouillage du compartiment pile	•	•	
Témoin lumineux	•	•	•
Compatibilité Phonak CROS B	•	•	
Protection par « nano coating »	•	•	•
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Gain Max. (dB)	Tube fin HE (56/122)	Tube fin HE (58/126)	Tube fin HE (58/126)
MPO (dB SPL)	HE 10 680 (63/129)	HE 10 680 (66/131)	HE 10 680 (66/131)
Coupleur 2 cc			

Couleurs

Boîtier



O1

Beige



P1

Dune de Sable



P3

Santal



P4

Noisette



P5

Champagne



P6

Gris Argenté



P8

Velours Noir

Coude

R1

Vert

R2

Jaune

R3

Rose

Q6

Bleu

13

Transparent

Q7

Violet

R4

Orange



Sky B-SP
B90/B70/B50



Sky B-UP
B90/B70/B50



Sky B-RIC
B90/B70/B50

Taille de la pile zinc-air	13	675	13
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	•	•
Contrôle de volume	•	•	•
Bobine d'induction	•	•	•
EasyPhone	•	•	•
Entrée audio directe	•	•	•
Verrouillage du compartiment pile	•	•	
Témoin lumineux	•	•	
Compatibilité Phonak CROS B	•	•	•
Protection par « nano coating »	•	•	•
Indice de protection	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Gain Max. (dB)	HE 11 680 (74/133)	HE 11 680 (77/135)	xS (46/111)
MPO (dB SPL)	HE 11 (81/139)	HE 11 (82/141)	xP (57/124)
Coupleur 2 cc		-	xUP (66/130)



Q2

Vert
Électrique



Q3

Bleu
Caraïbes



T3

Rose Poudré



T7

Blanc Alpin



M6

Rouge Volcan



M7

Bleu Océan



M8

Violet Pourpre



Phonak Sky - Lauréat du prix de la Golden Concha 2017, dans la catégorie " Meilleure aide auditive pédiatrique "

Roger, une technologie adaptée à de nombreuses situations

En incluant des microphones et des récepteurs adaptés, Roger permet aux patients d'entendre le discours d'un orateur directement dans leurs oreilles et de profiter des réunions professionnelles ou entre amis.

Nouveaux microphones Roger pour adultes



Roger Select™

Roger Select est un microphone polyvalent, idéal pour les situations stationnaires en présence de bruit ambiant. Lorsqu'il est placé sur une table, il sélectionne automatiquement et en toute discrétion la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à un autre. Quand plusieurs conversations ont lieu en même temps, l'auditeur peut choisir manuellement celle qu'il souhaite écouter. L'appareil transmet également le son des dispositifs multimédia, comme un poste de télévision, et offre une connectivité Bluetooth à bande large pour les appels téléphoniques.



Roger Table Mic II

Roger Table Mic II est un microphone dédié aux adultes actifs qui participent à des réunions. Il sélectionne la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à un autre. Plusieurs Roger Table Mic II peuvent être connectés pour créer un réseau, idéal pour les grandes salles de réunion. Le microphone transmet également le son des appareils multimédia, comme des ordinateurs.

Roger Select est disponible en 3 couleurs

P5

Champagne

P7

Gris Carbone

T7

Blanc Nacré



Phonak Vitus™ /Vitus+

Description des produits



Vitus+ BTE-micro
Vitus BTE-micro



Vitus+ BTE-P
Vitus BTE-P



Vitus+ BTE-UP

Taille de la pile zinc-air	312	13	675
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	•	•
Contrôle de volume		•	•
Bobine d'induction	•	•	•
EasyPhone	•	•	•
Protection par « nano coating »	•	•	•
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Gain Max. (dB)	Tube fin HE (56/122)	Tube fin HE (58/126)	HE 11 680 (77/135)
MPO (dB SPL) Coupleur 2 cc	HE 10 680 (63/129)	HE 10 680 (66/131)	HE 11 (82/141)

Couleurs

Vitus+ BTE

P1	P3	P5	P6	P7
Dune de Sable	Santal	Champagne	Gris Argenté	Gris Carbone

Vitus BTE

26	E8
Beige	Cendre



Vitus+ ITE-312



Vitus+ ITE-13

Taille de la pile	312	13
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	•
Contrôle de volume (rotatif)	•	•
Bobine d'induction	•	•
EasyPhone	•	•
Technologie microphonique	Directionnel	Directionnel
Sans fil (QuickSync)	•	•
Indice IP68 (sans CV)		
Gain Max. (dB)	M (40/109)	M (40/109)
MPO (dB SPL)	P (50/115)	P (50/115)
Coupleur 2 cc	SP (60/119)	SP (60/119)
	UP (70/127)	UP (70/127)

Vitus+ ITE

Faces-plates	Beige	Cocoa	Marron	21	36	37
Coques	Beige	Cocoa	Marron	Transparent	Rouge Transparent	Bleu Transparent

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

*Et la vie s'exprime !

www.phonakpro.fr