

Ouvrir le nouveau chapitre de Paradise



Écouteur Phonak ActiveVent™

Rien n'égale le son de Paradise

Bienvenue dans le
nouveau chapitre
de Paradise



Avec le lancement de Phonak Audéo™ Paradise, nous avons développé des aides auditives offrant aux patients une expérience auditive inégalée¹. Ce premier chapitre a commencé il y a douze mois et depuis, des changements considérables sont intervenus dans notre vie quotidienne. Le port du masque est désormais considéré comme la « nouvelle norme ». Pour certains utilisateurs d'aides auditives, cette situation ajoute un niveau de difficulté supplémentaire car ils ne peuvent lire sur les lèvres.

Les aides auditives Phonak Paradise avec AutoSense OS™ 4.0 s'adaptent facilement à une multitude de situations auditives, permettant aux patients de profiter de nombreux environnements sonores. Les patients n'ont pas à ajuster leurs aides auditives et nous supprimons donc une potentielle source de complexité. Cela peut avoir un impact direct sur le bien-être des utilisateurs d'aides auditives.

En permettant à davantage de patients souffrant de perte auditive de communiquer plus facilement, ceux-ci peuvent rester connectés socialement et s'épanouir mentalement et émotionnellement.

Phonak est fier de présenter le nouveau chapitre de Paradise. En intégrant le son naturel et net qui le caractérise, Paradise offre une expérience auditive inégalée¹ dans encore plus de situations.



Présentation de l'écouteur ActiveVent™

Le premier écouteur intelligent au monde pour aide auditive

Paradise est réputé pour sa qualité sonore⁴ inégalée¹ avec une compréhension vocale exceptionnelle^{3,4,5} et une suppression personnalisée du bruit. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre avec l'introduction de l'écouteur ActiveVent.


Le tout nouvel écouteur ActiveVent™ est le premier écouteur intelligent au monde pour aide auditive, capable d'équilibrer intelligemment la clarté vocale dans le bruit et le confort d'écoute² afin de renforcer encore la qualité sonore¹ inégalée⁴ de Phonak Paradise pour les patients atteints de perte auditive légère à moyenne.

Cette technologie innovante d'écouteur est dotée d'un événement à commutation mécanique parfaitement piloté par AutoSense OS 4.0. Il combine intelligemment les performances auditives d'un appareillage fermé avec le confort d'un appareillage ouvert². Il s'agit d'une solution auditive sans compromis pour les patients, leur permettant de prendre conscience de leur environnement et du rendu naturel de leur propre voix tout en améliorant l'intelligibilité vocale dans le bruit⁶.




Comment fonctionne l'écouteur ActiveVent ?

L'écouteur ActiveVent incorpore un évent intégré en combinaison avec un petit disque qui se déplace entre deux positions : ouverte et fermée. Tout ceci est contrôlé de manière intelligente par AutoSense OS 4.0. Un clic rassurant signale au patient que le disque a changé de position.

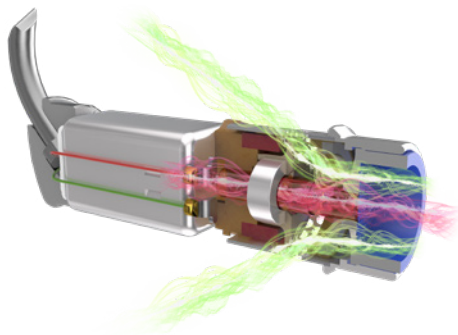

Lorsque le disque est en position ouverte, le son direct peut passer par l'évent intégré à l'écouteur et procure ainsi le confort d'un appareillage ouvert, un son naturel de sa propre voix et la conscience des sons environnants².

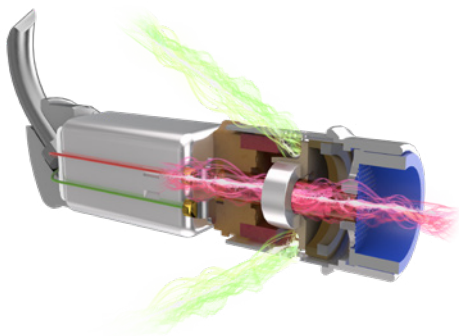

Dans les situations auditives difficiles, en présence de parole dans le bruit intense, ou lors de diffusion audio sans fil, le disque se met en position fermée, bloquant les sons environnants qui pénétreraient directement dans l'oreille, ce qui permet de se concentrer davantage sur la parole ou le contenu diffusé sans fil.

Options de couplage acoustique ActiveVent

1. SlimTip Universel AV

Vous pouvez facilement faire la démonstration de l'écouteur ActiveVent à vos patients grâce à Slim Tip Universel AV. La conception des SlimTip Universels s'est appuyée sur les données recueillies lors de milliers de scans d'oreilles, ce qui a permis aux développeurs de modéliser quatre formes susceptibles d'offrir un taux d'adaptation élevé. Les SlimTip universels constituent une solution temporaire idéale pour les démonstrations et les essais en attendant que votre patient reçoive son SlimTip Titanium AV sur-mesure.

2. SlimTip Titanium AV sur-mesure

Pour obtenir des performances acoustiques optimales, l'écouteur ActiveVent a été conçu pour une utilisation à long terme avec SlimTip Titanium, offrant une coque entièrement personnalisée dans un matériau durable et confortable.

Points forts

- Un équilibre intelligent entre clarté vocale dans le bruit et confort d'écoute²
- Offre une qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil^{6,7}
- Contrôlé de manière intelligente par AutoSense OS 4.0
- Compatible avec toutes les aides auditives rechargeables Audéo Paradise⁸

Considérations sur l'appareillage ActiveVent

- Pour une performance optimale, les écouteurs doivent être remplacés tous les six mois. Cela se fait facilement en centre auditif
- Les candidats idéaux sont ceux qui ont peu de cérumen et une bonne dextérité
- Un nettoyage régulier et un changement du filtre à cérumen sont nécessaires
- Ne convient pas aux personnes souffrant d'acouphènes sévères et d'hyperacousie



ActiveVent Performance + avantages pour vos patients

L'écouteur ActiveVent est compatible avec toutes les aides auditives rechargeables Audéo Paradise et offre différents niveaux d'avantages en fonction du niveau de performance de l'aide auditive. ActiveVent Performance + rassemblent les avantages que les patients peuvent s'attendre à voir débloquent par l'écouteur ActiveVent dans leurs aides auditives.


Un équilibre intelligent entre clarté vocale dans le bruit et confort d'écoute²

Les écouteurs ActiveVent sont idéaux pour les patients qui mènent un style de vie actif et passent beaucoup de temps dans des endroits tels que des restaurants, des rassemblements ou des lieux publics avec beaucoup de bruit extérieur. Ces endroits peuvent rendre l'audition encore plus difficile. Avec les écouteurs ActiveVent, lorsque le niveau de bruit augmente, AutoSense OS 4.0 ferme automatiquement l'événement, permettant ainsi à l'utilisateur d'aide auditive de bénéficier des performances améliorées d'un appareillage fermé (disponible avec le niveau de performances Premium). Lorsque le niveau de bruit diminue, l'événement s'ouvre pour que le patient puisse profiter du confort d'un appareillage ouvert. Avec les écouteurs ActiveVent, les patients peuvent également accéder aux programmes manuels avec un état d'événement fermé. (Disponible dans les niveaux de performance Premium, Avancé, Standard).

Qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil^{6,7}

Les patients peuvent désormais profiter d'une qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil grâce à l'événement fermé. La particularité de ces écouteurs est que si vos patients souhaitent passer de la diffusion audio sans fil à la conversation, une simple double touche met la diffusion audio sans fil en pause et l'écouteur ActiveVent s'ouvre pour permettre une transition sans effort (disponible pour tous les niveaux de performances).

Avantages

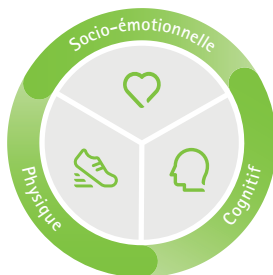

- L'écouteur ActiveVent améliore en moyenne de 10 % la compréhension vocale dans le bruit tout en offrant un son naturel dans diverses situations auditives⁶
- Le SlimTip Universel facilite l'essai et la démonstration instantanés de l'écouteur ActiveVent.
- L'écouteur ActiveVent aide les patients à rester connecté dans le bruit et dans le calme, ce qui leur permet de socialiser avec leur famille et leurs amis et de préserver des liens solides.



Rien n'égale le son de Paradise


Avec l'introduction de Paradise, Phonak a consolidé sa position parmi les leaders de l'industrie de l'excellence audilogique. Fondé sur un matériel de pointe, Paradise intègre désormais encore plus de fonctions pour aider vos patients à redécouvrir les merveilles du son dans encore plus de situations, tout en améliorant leur bien-être général. Alimentées par les performances éprouvées de la puce PRISM™, ces fonctions s'associent de manière fluide pour offrir une expérience auditive inégalée¹.

Qualité sonore inégalée

- **Nouvel écouteur ActiveVent**
 - Nouveau ActiveVent Performance +
- **Capteur de mouvement**
- **PDA 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
 - Renforcement de la parole
 - Suppression dynamique du bruit
 - Directivité avec capteur de mouvements



► Technologie rechargeable lithium



Solutions digitales personnalisées

- Mise à jour de l'application myPhonak app
 - Sensibilité personnalisée du contrôle tactile
 - AudiogramDirect (avec Remote Support)
 - Télécommande
- Nouvel objectif 7.1.9

Connectivité universelle

- Se connecte aux smartphones, à la télévision, etc.
- RogerDirect™
- Universel
- Plusieurs connexions Bluetooth®
- Sélectionnez le bouton de contrôle pour accéder facilement aux fonctionnalités Bluetooth



Life is on*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *La vie s'exprime

www.phonakpro.fr

sonova
HEAR THE WORLD*

*Entendre le monde



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Allemagne

CE
0459



028-2308-04/V4.00/2021-07/NLG © 2021 Sonova AG Tous droits réservés