

Phonak Tao Q15

Produktinformation



Phonak Tao Q15 ist die umfassende IdO-Hörgerätefamilie im Basissegment für leichte bis hochgradige Hörverluste. Sie ist in drei Modellen erhältlich und verfügt über vier Kanäle.

Basierend auf der innovativen Technologie der Phonak Quest Plattform bietet Phonak Tao Q15 gute Klangqualität und erwiesene Spontanakzeptanz in ansprechenden, maßgefertigten Gehäusen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.phonakpro.com

Produktbeschreibung



Phonak
Tao Q15-10 NW O



Phonak
Tao Q15-312 NW




Phonak
Tao Q15-13 NW


Power-Level			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP		•	•
Technische Informationen			
Batterietyp	10	312	13
Drucktaste (Hörprogramm / Lautstärke)	Optional	Optional	Optional
Lautstärkeregelung (Rädchen)	Optional	Optional	Optional
Telefonspule	Optional	Optional	Optional
Mikrofon-Technologie	Omni	Direktional	Direktional
Kabelgebundene Anpassung	•	•	•

Technische Daten


Technische Informationen		M	P	SP	UP
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm ³	112	118	122	130
	Ohrsimulator	120	124	128	135
Maximale Verstärkung (dB)	2 cm ³	40	50	60	70
	Ohrsimulator	50	60	70	79
Frequenzbereich (Hz)		<100 - 7900	<100 - 7100	<100 - 7200	<100 - 5500
Betriebsstrom (mA)		1.2	1.4	1.2	1.2
Anpassbereich					

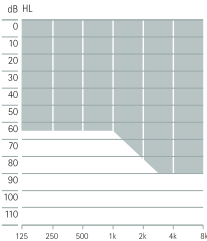


Leichter Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

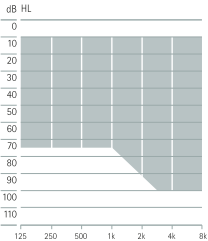

Leichter bis mittlerer Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

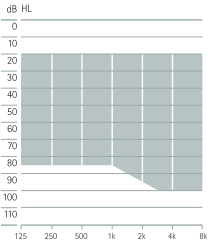

Leichter bis mittelstarker Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

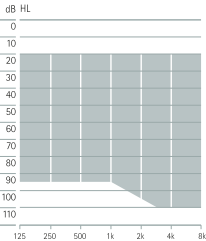


Mittlerer bis hochgradiger Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen


Farbpalette

Alle Phonak Tao Q15 Modelle sind in den folgenden Faceplate- und Schalenfarben erhältlich:

Faceplate Farben

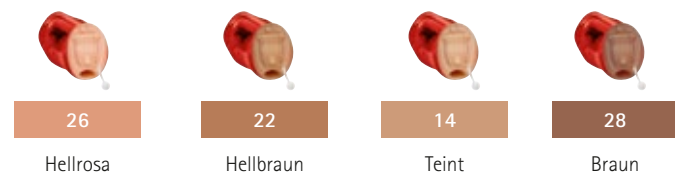


Schalen Farben

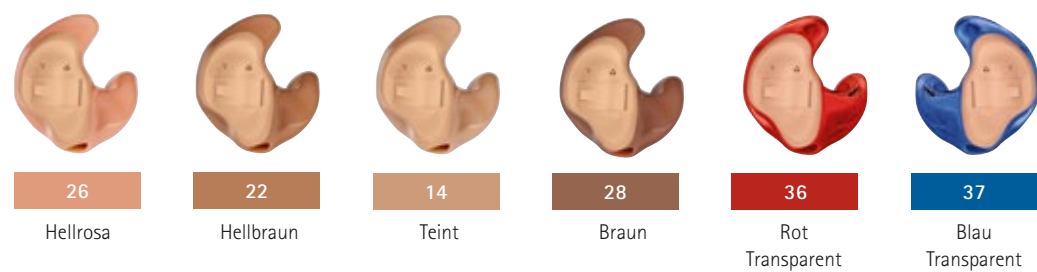

Anpassung

Software	Phonak Target™ 3.2 oder neuere Version
Schnittstellen	NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Wireless Communication Portfolio

Roger / FM-Empfänger	Phonak Tao Q15-10 NW O	Phonak Tao Q15-312 NW	Phonak Tao Q15-13 NW
 Roger MyLink / MyLink+	• ¹	• ¹	• ¹

¹ Nur mit Telefonspule

Weitere Informationen zu Roger Sendern finden Sie auf www.phonakpro.com/roger

Hauptfunktionen

Phonak Quest

Die Phonak Tao Q15 Hörgeräte basieren auf den leistungsstarken Funktionen der Phonak Quest Technologie und können mithilfe der Phonak Target™ Anpasssoftware programmiert werden. Die aktuelle Chip-Technologie und die wichtigsten Quest Funktionen bieten einen natürlichen Klang und eine hohe Spontanakzeptanz.

Phonak Target™

Die Phonak Target™ Anpasssoftware ermöglicht eine effiziente Anpassung. Alle Hörgeräte der Phonak Quest Plattform können mit der Phonak Target™ Anpasssoftware angepasst werden.

Fixdirektionales Richtmikrofon

Das fixdirektionale Richtmikrofon ist in Tao Q15-312 und Tao Q15-13 verfügbar und verbessert die Sprachverständlichkeit in lauten Hörumgebungen. Die Dualmikrofone reduzieren Störgeräusche von hinten, was es erleichtert, Gesprächen zu folgen. Es kann immer dann manuell aktiviert werden, wenn ein besseres Verstehen im Störgeräusch benötigt wird.

WhistleBlock

WhistleBlock kann exakt zwischen echten Rückkopplungen und natürlichen Signalen, wie sie z.B. in der Musik vorkommen, unterscheiden. WhistleBlock schaltet sich ausschließlich bei Rückkopplungen ein und bietet bis zu 20 dB zusätzlicher Verstärkung für bessere Hörbarkeit und Klangqualität, frei von störendem Rückkopplungspfeifen.

Leistungsstufen

Funktionen	Q15
Quest Signalverarbeitung	•
Quest Vorberechnung	•
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
Phonak Target™ Anpasssoftware	•

Funktionsübersicht	Q15
Direktionalität	Modelle mit omni- und direktionalen Mikrofonen verfügbar
Kanäle	4
Manuelle Programme	4
Farbpalette	4
Roger / FM Kompatibilität	•
Telefonspule	•
DataLogging	•
BassBoost	•
Einstellbare Signaltöne	•
Batteriewarnton	•
AOV (Akustisch Optimiertes Vent)	•

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonakpro.com