



## Technische Daten

# Phonak Virto B-10 O


Kompaktes IdO mit 10er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.


## Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

### Ausgangsschalldruck

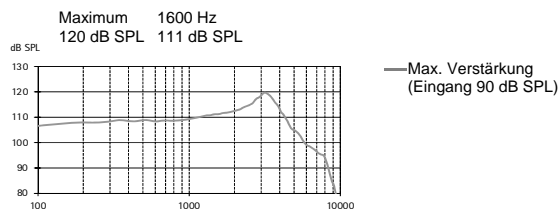


### Akustische Verstärkung

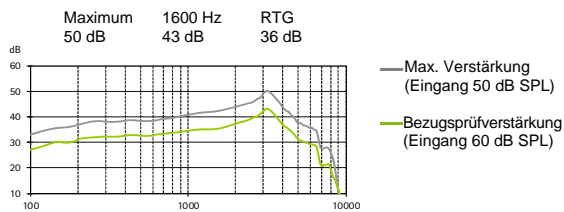

Frequenzbereich	<100 Hz - 8000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2%	2.5%	2%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1.1 mA	1.2 mA	
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

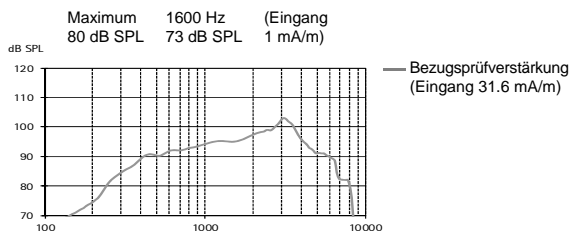

# Phonak Virto B

## (B90/B70/B50/B30) (M)


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

## 2cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015

### Ausgangsschalldruck

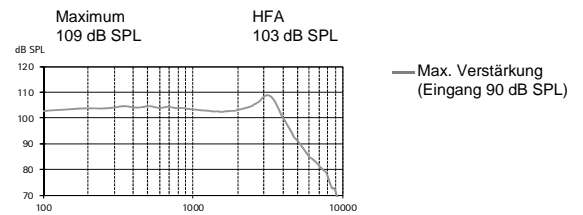


### Akustische Verstärkung

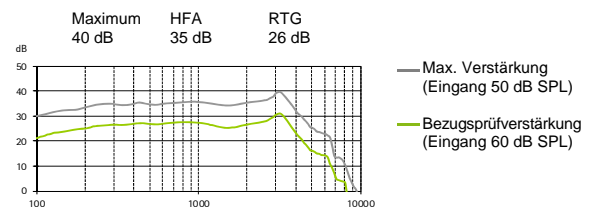

Frequenzbereich	<100 Hz - 7000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1.5%	1%
Batteriestrom	Betrieb		
	1.2 mA		
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

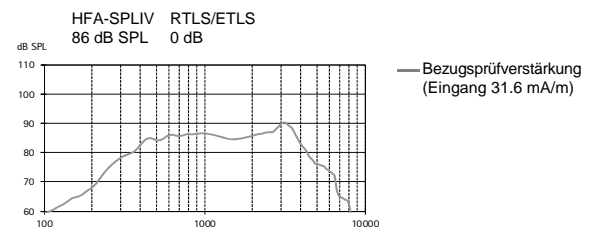

PHONAK

A Sonova brand



## Technische Daten

# Phonak Virto B-10 O


Kompaktes IdO mit 10er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.


## Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

### Ausgangsschalldruck

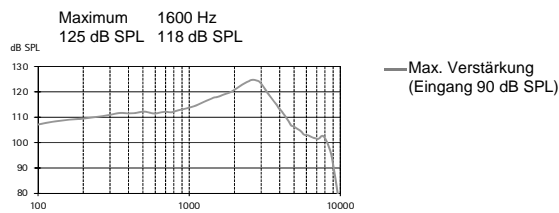


### Akustische Verstärkung

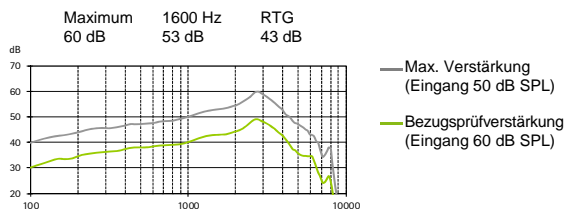

Frequenzbereich	<100 Hz - 6800 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	2%	1%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1 mA	1.1 mA	
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

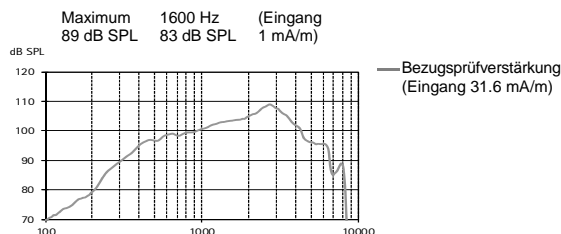

# Phonak Virto B

## (B90/B70/B50/B30) (P)


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

## 2cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015

### Ausgangsschalldruck

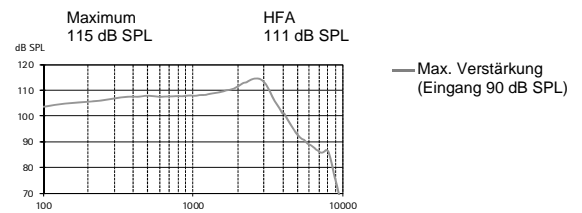


### Akustische Verstärkung

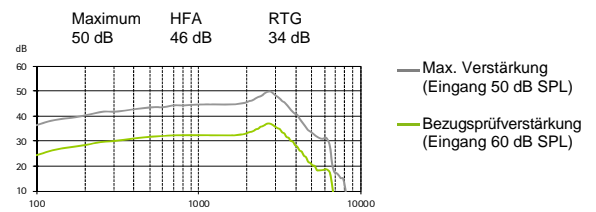

Frequenzbereich	<100 Hz - 6700 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Batteriestrom	Betrieb		
	1.2 mA		
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

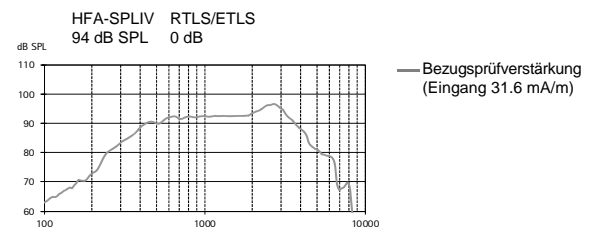

PHONAK



## Technische Daten

# Phonak Virto B-10 O


Kompaktes IdO mit 10er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.


## Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

### Ausgangsschalldruck

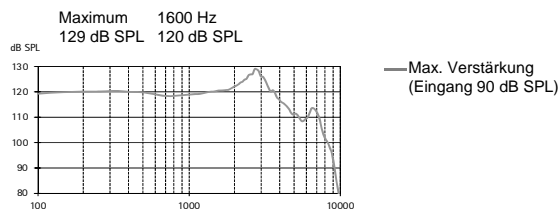


### Akustische Verstärkung

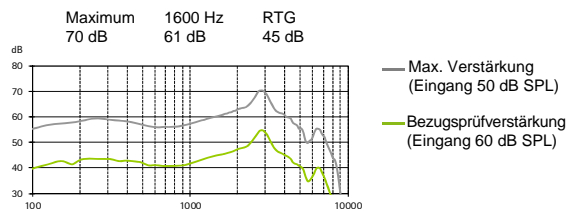

Frequenzbereich	<100 Hz - 7700 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1.5%	1%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1.1 mA	1.2 mA	
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

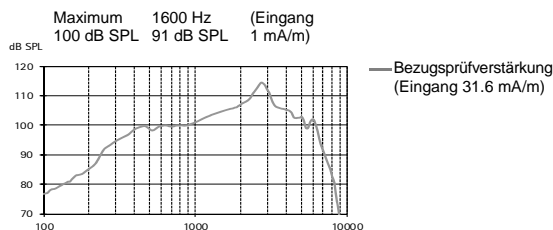

# Phonak Virto B

## (B90/B70/B50/B30) (SP)


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

## 2cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015

### Ausgangsschalldruck

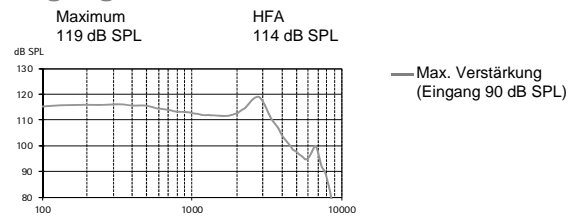


### Akustische Verstärkung

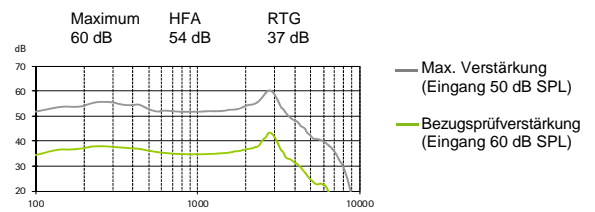

Frequenzbereich	<100 Hz - 7000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Batteriestrom	Betrieb		
	1.2 mA		
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

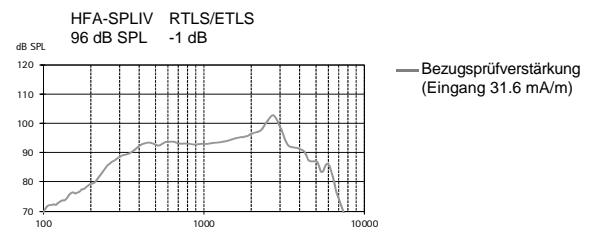

PHONAK