


Technische Daten



iCube II ermöglicht die drahtlose Übertragung von Anpassdaten von einem PC auf die Hörgeräte des Kunden. Er ermöglicht die drahtlose Anpassung sämtlicher Phonak Venture, Quest, Spice+ oder Spice Hörgeräte. iCube II erfordert die Anpasssoftware Phonak Target 4.0 oder eine neuere Version und enthält eine neue Induktionsschleife mit Rückverschluss für eine einfachere Handhabung sowie einen wireless USB-Adapter für eine schnelle und einfache Installation.

Beschreibung

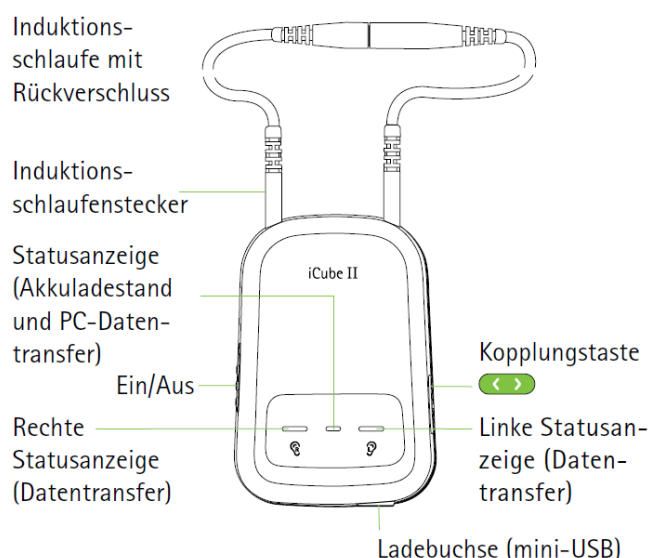

Wireless iCube II USB-Adapter

Zubehör (optional)

- USB Kabel, 3 m
- iCube II Aufbewahrungsstation
- USB Hub

Allgemein

Maße (L x B x H):	7,2 x 4,9 x 1,4 cm
Gewicht:	44 g
Farbe:	Schwarz
Betriebsbedingungen:	0° bis +40° C / < 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen:	-20° bis +60° C / < 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
USB :	2.0 (iCube II) 3.0, 2.0, 1.1 (USB-Adapter)



Strom- und Akkudaten

Batterie:	Lithium-Polymer 3.7 V DC
Kapazität:	450 mAh (typ.)
Ladezeit:	Die Ladezeit hängt vom anfänglichen Akkustatus ab. Ein leerer Akku wird in ca. 2 Stunden voll aufgeladen. Die volle Leistung wird nach 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.
Betriebszeit:	12 Stunden ununterbrochene Anpassung 30 Stunden iCube II eingeschaltet Bluetooth auf Standby
Ladegerät:	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 5 % Max. Stromstärke: 500 mA Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden. Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, ausschließlich das Original-Ladegerät von Phonak zu verwenden.

Angewandte Standards

	iCube II	USB-Adapter
Europa	ETSI EN 300 330 (Drahtlosverbindung zu Hörgeräten) ETSI EN 300 328 (Bluetooth) EN 62479 EN/IEC 60601-1, -2 EN301489-1, -3, -17 EN 60950-1	EN 300328 EN62479 EN 301489-1, -17 EN60950-1
USA	FCC CFR 47 Part 15	FCC CFR 47 PART 15C
FCC ID :	KWC-ICUBE2	079BT402
Kanada	RSS 210 Issue 8 RSS-102	RSS 210 Issue 8 RSS-102
IC:	2262A-ICUBE2	11512A-BT403
Japan	 R 202-LSC031 D 14-0027 202	 R 204-320232
	EWPE (Drahtlosverbindung zu Hörgeräten) ARIB-T66 (Bluetooth)	

Funkdaten

Antennentyp:	Externe Induktionsschlaufenantenne
Betriebsfrequenz:	10,6 MHz (Drahtlosverbindung zu Hörgeräten) 2,402-2,480 GHz / 79 Channel FHSS (Bluetooth)
Belegte Bandbreite: (99% BW) :	500 kHz
Modulation:	8DPSK (Drahtlosverbindung zu Hörgeräten) GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK (Bluetooth)
Magnetfeldstärke bei 10 m:	-21 dBµA/m
Hörgeräte- Kompatibilität:	Phonak Venture, Phonak Quest, Spice+, Spice*

Bluetooth

	iCube II	USB-Adapter
Bluetooth-Reichweite:	10 m Klasse 2	100 m Klasse 1
Bluetooth-Kompatibilität:	Version 4.1	Version 4.0+EDR
Unterstützte Bluetooth-Profile:	SPP (Serial Port Profile)	SPP, BLE PXP, FMP, ScPP, HID, etc.
Betriebsfrequenz:	2,402-2,480 GHz / 79 Channel FHSS	
Modulation:	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK	
Max. simultan gekoppelte Geräte:	1 iCube II 1 Phonak wireless USB-Adapter	



Der Begriff Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

* Eine vollständige Übersicht der kompatiblen Hörgeräte finden Sie auf www.phonakpro.com unter [Support] → [Anpassungs Hardware]