


Mit dem Roger Repeater kann die Reichweite eines Roger-Netzwerks erweitert werden. Der Roger Repeater muss dazu lediglich an das Hauptmikrofon des Roger-Netzwerks angeschlossen werden. Der Roger Repeater lässt sich an einer Wandhalterung oder einem Stativ anbringen und kann auch einfach auf den Tisch gelegt werden.

## Beschreibung



- 1 Statusanzeige
- 2 Verbinden-Taste
- 3 Ein/Aus
- 4 Micro-USB
- 5 Gummifüße

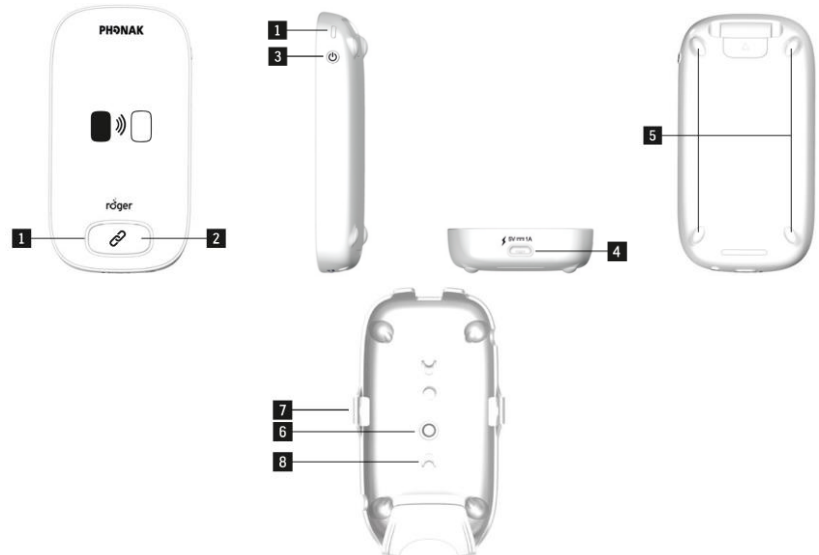

### Wandhalterungsvorrichtung

- 6 3/8" Loch
- 7 Halterungs-Clip
- 8 USB-Kabel-Halterung

## Funktionen

### Benutzerfreundlich

- Klar sichtbare Statusanzeigen
- Netz- und Akkubetrieb

### Wandmontage

- Clip für einfaches Anbringen an die Wandhalterung
- 3/8" Stativgewinde

### Kompatibilität

- Mit (02) Roger-Empfängern kompatibel
- Mit Roger-Mikrofonen für die Schule kompatibel

## Allgemein

Maße (L x B x H):	104 x 55 x 16 mm
Gewicht:	120 g
Farbe:	Champagner
Betriebsbedingungen:	0° bis +45° Celsius und relative Feuchtigkeit <95% (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen:	-20° bis +60° Celsius und relative Luftfeuchtigkeit 90 % über einen längeren Zeitraum

## Kompatibilität mit Roger-Geräten

Kompatible Roger-Empfänger:	(02) Roger-Empfänger
Kompatible Roger-Mikrofone:	Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around,
Kompatibler Roger Hub:	Roger Multimedia Hub
Kompatible Roger SoundField:	Roger DigiMaster 5000, Roger DigiMaster 7000, Roger DigiMaster X (Software-Version 4.x oder neuer)
Andere kompatible Roger-Geräte:	Roger WallPilot, Roger BaseStation

## Benutzungshinweis

Verbinden-Taste:	Nur zur Verbindung mit Roger-Empfängern (Hinweis: Wenn ein Roger-Empfänger bereits mit dem Hauptmikrofon des Roger-Netzwerks verbunden ist, muss die Verbinden-Taste nicht gedrückt werden.)
------------------	---

## Audiodaten

Audiobandbreite:	100 Hz – 7,3 kHz
------------------	------------------

## Zubehör

Netzteil-Adapter:	UK, AUS
Charging Rack Maße (L x B x H: ) :	188 x 75 x 28 mm 4 Steckplätze zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu 4 Geräten. Geeignet für Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger Multimedia Hub, Roger Repeater

## Angewandte Standards

Elektrische Sicherheit:	IEC/ EN 60950-1
Radiocom 2,4 GHz:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489-1,-3,-9,-17
SAR (2,4 GHz):	IEC/ EN 62209-2 SAR 1g = 0,10 W/kg SAR 10g = 0,05 W/kg

## Roger-Daten

Roger:	Roger ist der neue digitale Standard, mit dem die Stimme des Sprechers drahtlos über Roger-Empfänger auf die beiden Hörgeräte übertragen wird, sodass Sprache auch in geräuschvollen Umgebungen oder über Distanz klar verstanden werden kann.
Übertragungs-technologie:	2,4 GHz einschl. adaptives Frequenzspringen
Sendeleistung:	100 mW
Reichweite zum Hauptmikrofon oder zum nächsten Repeater	40-70 m, abhängig von der Umgebung
Reichweite zu Roger-Empfänger:	20 m
Reichweite zu Connect-Funktion:	10 cm

## Akkudaten

Batterie:	Lithium-Polymer, 3,7 V Gleichstrom
Ladezeit:	ca. 2 Stunden Ladezeit hängt vom Akkustatus ab
Kapazität:	1200 mAh
Betriebszeit:	ca. 10 Stunden
Lade-Eingang:	Eingangsspannung: 100 – 240 V Ausgangsspannung: 5 V Gleichspannung/1A Anschluss: micro-USB Kabellänge: 1,3 m (Lade- oder Verbindungskabel zum Computer für Aktualisierungen, Service)  Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden.  Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, ausschließlich das Original-Ladegerät von Phonak zu verwenden.



**PHONAK**

A Sonova brand