


Phonak TVLink S Basisstation

Technische Daten

Die TVLink S Basisstation ist eine speziell zum Fernsehen entwickelte Lösung, die ein großartiges Hörerlebnis bietet. Kurze Übertragungsverzögerungen vom TV zu den Hörgeräten und StereoSound sorgen für exzellente Klangqualität. Zudem kann das Gerät durch echtes Plug and Play in einem Schritt installiert werden und ist in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit. Die Phonak TVLink S Basisstation verwandelt gemeinsam mit dem ComPilot jedes drahtlose Hörsystem von Phonak zu einem leichten, drahtlosen Kopfhörer.



Beschreibung

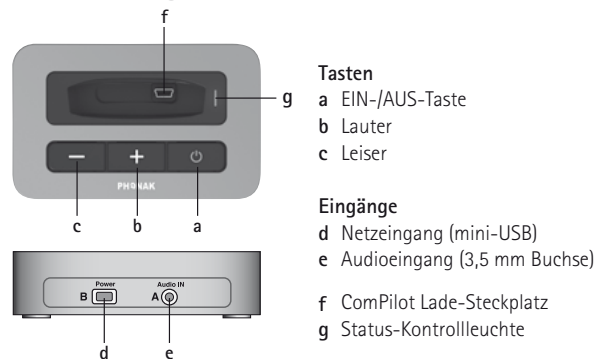

Tasten

- a EIN-/AUS-Taste
- b Lauter
- c Leiser

Eingänge

- d Netzeingang (mini-USB)
- e Audioeingang (3,5 mm Buchse)
- f ComPilot Lade-Steckplatz
- g Status-Kontrollleuchte

Funktionen

- Kompatibel mit Phonak ComPilot
- Einfaches Erzeugen einer Testmelodie
- Optischer Hinweis auf fehlenden Audioeingang
- Einfache und schnelle Installation
- Vollständiges Set mit Netzstecker und Kabeln
- Keine Sichtverbindung zu den Hörsystemen notwendig
- Reichweite bis zu 30 Meter
- Digitale Lautstärkeinstellung mit audio-visueller Statuskontrolle
- Integrierter Ladesteckplatz für den ComPilot

Allgemeine Daten

Abmessungen:	L x B x H: 90 x 60 x 23 mm
Gewicht:	100 g
Farbe:	Silber
Betriebsbedingungen:	Das Produkt ist so ausgelegt, dass es unter allen üblichen klimatischen Einsatzbedingungen störungsfrei funktioniert, sofern in dieser Gebrauchsanweisung nicht anderweitig angegeben 10°/55° Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit von < 95% (nicht kondensierend)
Transport und Lagerbedingung:	-20°/60° Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit von < 95% über einen längeren Zeitraum.

Statuskontrollanzeige

- EIN mit Audioeingang
- - - EIN ohne Audioeingang
- Tonübertragung an ComPilot
- - - Übertragungspause
- Bluetooth Kopplung

Manuelle Bluetooth Kopplung:

- Taste zum Ein-/Ausschalten 5 Sekunden drücken

Löschen der Bluetooth Kopplungstabelle:

- Taste zum Ein-/Ausschalten 10 Sekunden drücken



Netzstromversorgung

Typ:	DC, stabilisiert
Sekundärspannung:	5 VDC
Max. Stromstärke:	500 mA
Anschluss:	Mini-USB
Wichtiger Hinweis:	Verwenden Sie nur den Original-Netzstecker von Phonak oder einen USB-zertifizierten Netzadapter > 500 mA

Audio-Daten

Audioeingang:	via Kabel (3,5 mm Buchse)
Audioqualität:	Stereo, 20 Hz – 22 kHz

Basiert auf der Bluetooth® Technologie


Bluetooth Profil:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	<ul style="list-style-type: none"> Optimiert für Nutzung mit ComPilot Kompatibilität mit nicht-Phonak Geräten wird nicht garantiert
Frequenzbereich:	2402.0 bis 2480.0 MHz	
HF Leistung:	100 mW max.	
Bluetooth-Bereich:	Bis zu 30 m	
Bluetooth-Kompatibilität:	Bluetooth Version 2.1, Class 1	
Max. Anzahl gekoppelter Geräte	4	
QDID:	B018562	

Normen

Europa	
Funk:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489
El. Sicherheit:	EN 60950-1
USA	CFR 47, Teil 15
Kanada	RSS-210 Ausgabe 8



Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse 2, das in den EU-Mitgliedstaaten unbeschränkt drinnen, in Frankreich jedoch nicht im Freien betrieben werden darf.

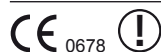

Zubehör

- Audiokabel 3,5 mm Stecker
- Audiokabel RCA/Cinch
- SCART Adapter (nur EU)
- Netzstecker: Länderspezifisch
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung

Kompatibilitätshinweis:

Stellen Sie sicher, dass die folgende Kombination genutzt wird:



Streamer:	ComPilot	iCom
Ladesteckplatz:	TVLink S	TVLink
Merkmale:	Runde Form silberfarben	Rechteckige Form bronzefarben