





Technische specificaties

Roger Select™

Roger Select is een veelzijdige microfoon die de beste prestaties biedt in situaties waarin u zich weinig beweegt en waar veel achtergrondlawaai aanwezig is. Wanneer deze op tafel wordt geplaatst, selecteert de microfoon discreet en automatisch wie aan het praten is en schakelt deze naadloos over van de ene spreker naar de andere. Wanneer er meerdere gesprekken tegelijkertijd plaatsvinden, kan de luisteraar handmatig kiezen naar wie hij of zij wil luisteren. De microfoon kan ook het geluid van multimedia-apparaten (zoals een tv) verzenden en beschikt bovendien over Bluetooth® voor telefoongesprekken.

Beschrijving

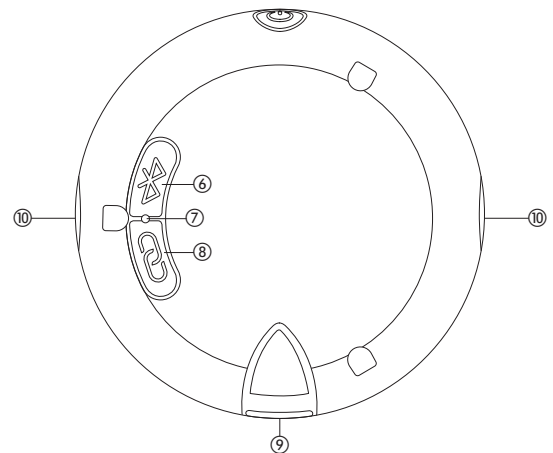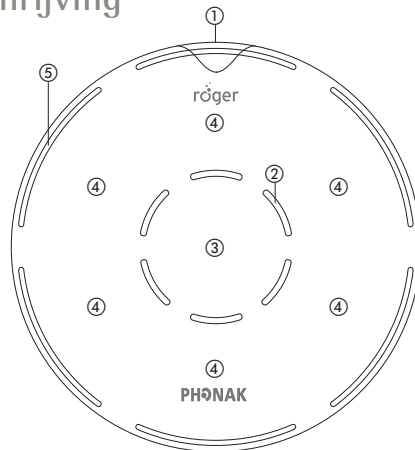

- 1) Aan-/uitknop met accustatuslampje
- 2) Microfoons en middelste indicatorlampjes
- 3) Middenknop
- 4) Zes drukknoppen voor selectie
- 5) Indicatorlampjes microfoonmodus

- 6) Bluetooth-knop
- 7) Indicatorlampje achterzijde
- 8) Verbindingsknop
- 9) Micro-USB-aansluiting
- 10) Sleuven voor draagkoord en clip

Functies van de Roger Select

- Bewezen Roger spraak-in-lawaai-prestaties
- MultiBeam-technologie
- Tafelmodus
- Selectiemodus
- Reversmodus
- Audio-input voor multimedia
- Bluetooth® voor telefoongesprekken
- Gebruik van meerdere microfoons in een netwerk (MultiTalker Network)

Algemene informatie

Afmetingen (Ø x H):	55 x 12 mm
Gewicht:	28 g
Kleuropties:	Champagne, Pearl White, Graphite Gray
Inbegrepen accessoires:	Voedingsadapter met USB-kabel, dockingstation, optische audiokabel, clip, draagkoord, tasje
Bedieningsomstandigheden:	0 °C tot 40 °C Relatieve vochtigheid van < 90% (niet-condenserend)
Transport- en opbergomstandigheden:	-20 °C tot 60 °C Relatieve vochtigheid van < 90% gedurende langere tijd

Voedingsadapter

Type:	Wisselstroom, gestabiliseerd
Primaire spanning:	100 - 240 V
Secundaire spanning:	5 V wisselstroom
Max. stroom:	1,0 A
Aansluiting:	micro-USB
Belangrijke opmerking:	Gebruik uitsluitend de originele USB-voedingsadapter van Phonak 5 VDC, > 500 mA

Accu

Type:	Lithium-polymeer
Capaciteit:	400 mAh
Spanning:	3,7 V
Bedrijfsduur:	8 uur

Audio-informatie

Audio-input:	Analoog via micro-USB-aansluiting
Audio-bandbreedte:	100 Hz - 7,3 kHz


Microfooneigenschappen

Aantal microfoons:	3
Microfoonmodi:	Tafelmodus, selectiemodus, reversmodus

Radio-informatie

Streaming-technologie:	Roger-technologie
Frequentiebereik:	2,4 GHz ISM-band inclusief adaptieve automatische frequentieverspringing
RF-vermogen:	max. 100 mW
Zendbereik:	10 meter (standaard) 20 meter (ideale omstandigheden)

Dockingstation

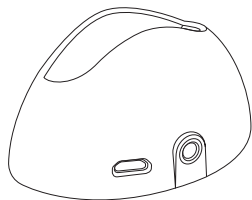

Audio-input (aansluiting 3,5 mm):	- Analoog
-----------------------------------	-----------

Compatibiliteit met ontvangers

Compatibele Roger-ontvangers:	Alle Roger-ontvangers, behalve SoundField-ontvangers
Max. aantal aangesloten ontvangers:	Onbeperkt

Microfooncompatibiliteit (MultiTalker Network)

Een Roger Select in een MultiTalker Network werkt uitsluitend in de reversmodus (rond de nek of op de borst gedragen).

Compatibele microfoons:	Roger Table Mic II Roger Select Roger On Roger On iN Roger Select iN Roger Table Mic II iN Roger Clip-On Mic
Max. aantal aangesloten microfoons:	Maximaal 10

Normen

Europa	EN 300 328 EN 301 489 EN 62368-1 IEC/EN 62311
Canada	RSS-247 RSS-102
Japan	ARIB-T66
VS	CFR 47, part 15.247 FCC OET Bulletin No.65

Bluetooth voor telefoongesprekken

Bluetooth-bereik:	3 Meter (Klasse 2)
Ondersteunde Bluetooth-profielen:	Headset Profile (HSP) Handsfree Profile (HFP)
Bluetooth-compatibiliteit:	Bluetooth-versie 4.0
Max. aantal gekoppelde telefoons:	8
Max. aantal verbonden telefoons:	2



Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Phonak onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de betreffende eigenaars.