

Accessoires sans fil Phonak Audéo™ B-Direct

Information produit



Phonak présente Audéo™ B-Direct, une nouvelle extension de la gamme d'aides auditives RIC pour les pertes auditives légères à sévères. Équipée de la technologie Phonak Belong™, Phonak Audéo B-Direct élargit la portée de la gamme Phonak en proposant une solution ciblée pour les personnes recherchant une connectivité directe. Conçue pour simplifier la vie de davantage d'utilisateurs, Audéo B-Direct est la porte d'entrée du segment de la connectivité directe, en proposant également une compatibilité universelle. Les nouvelles aides auditives se connectent facilement à tous les téléphones portables* ou à tous les téléviseurs.

* avec technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

TV Connector – L'appareil de diffusion simple d'utilisation pour la télévision et la musique



TV Connector est l'interface prête à l'emploi avec la TV et autres sources audio, qui prend en charge la connectivité directe aux aides auditives Phonak Audéo B-Direct. Il est conçu pour simplifier la configuration et l'utilisation de l'appareil et offre une excellente qualité sonore stéréo grâce à sa technologie AirStream™. TV Connector peut diffuser des signaux audio jusqu'à une distance de 15 mètres à un nombre illimité d'utilisateurs connectés simultanément.


Présentation des fonctions

- Diffusion dans les deux aides auditives en qualité stéréo
- Technologie AirStream pour une meilleure qualité sonore, une latence de diffusion moindre et une méthode de connexion plus efficace
- Technologie « en un clic » pour toutes les aides auditives compatibles à proximité sans manipulation à faire
- Diffusion simultanée à un nombre illimité d'utilisateurs à la fois
- Pour plus de discrétion, elle peut être installée derrière le téléviseur

Compatibilité

- TV Connector n'est compatible qu'avec Phonak Audéo B-Direct. Toutes les autres aides auditives ne sont pas compatibles.

Utilisation

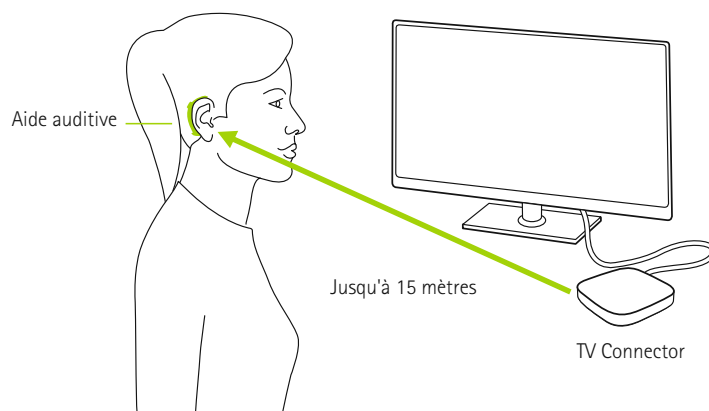

Pour visionner des vidéos sur l'utilisation et la configuration de TV Connector, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/TVConnector

Caractéristiques techniques



- 1 Bouton de connexion en un clic
- 2 Témoin lumineux (LED)
- 3 Prise microUSB
- 4 Prise audio pour Toslink (optique numérique) ou câble jack (analogique) 3,5 mm

Boîtier petite taille (L : 63 mm x l : 63 mm x h : 12 mm)

Phonak Remote – L'application télécommande simplifiée




Phonak Remote est la façon la plus simple de contrôler à distance les fonctionnalités de base et de prendre en charge la connectivité directe des aides auditives. Cette application est conçue pour offrir une plus grande facilité d'utilisation avec une télécommande. Il s'agit d'une commande simple pour les fonctions de votre aide auditive disponibles sur votre smartphone, sans avoir besoin d'un périphérique intermédiaire porté sur soi.

Présentation des fonctions

- Ajustement du volume des aides auditives les deux côtés à la fois ou un côté à la fois
- Liste des programmes avec sélection directe des programmes disponibles pour l'aide auditive
- Possibilité de personnaliser le nom des programmes disponibles dans l'application
- Sélection des sources audio disponibles connectées aux aides auditives
- Ajustement simple de la fonction de balance environnementale de l'aide auditive pendant la diffusion d'une source audio
- Ajustement séparé du niveau de volume du générateur de bruit Tinnitus, si l'aide auditive en est équipée
- Vérification de la durée de port moyenne des aides auditives connectées sur l'application


Pour visionner des vidéos sur l'utilisation et la configuration de l'application Phonak Remote sur votre téléphone, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/remoteapp

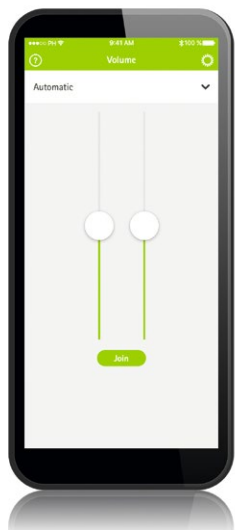


Ajustement du volume pour chaque côté



Balance environnementale d'un diffuseur audio

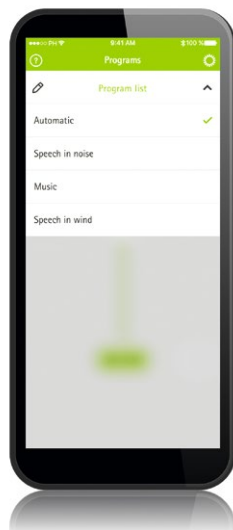

Sélection et personnalisation des programmes

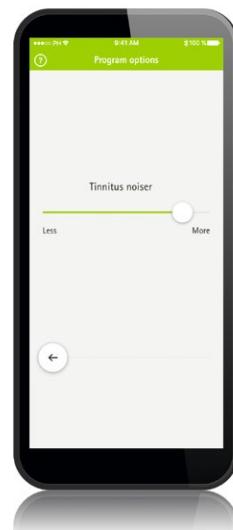

Ajustement du volume de la fonction anti-acouphènes

Compatibilité

- L'application Phonak Remote n'est compatible qu'avec Phonak Audéo B-Direct. Toutes les autres aides auditives ne sont pas compatibles.
- L'application Phonak Remote peut être utilisée avec les smartphones Apple iPhone équipés d'iOS 10.2 ou ultérieur et Google Android 6 ou ultérieur.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *La vie s'exprime.

www.phonak.fr