




Données techniques

iCube II permet le transfert sans fil de données d'appareillage du PC aux aides auditives du client. Il peut être utilisé avec n'importe quel produit Phonak Venture, Quest, Spice+ ou Spice.

iCube II nécessite Phonak Target 4.0 ou une version ultérieure. Il inclut un nouveau collier inductif à ouverture arrière pour une manipulation plus pratique et un adaptateur USB sans fil pour une configuration simple et rapide.

Description

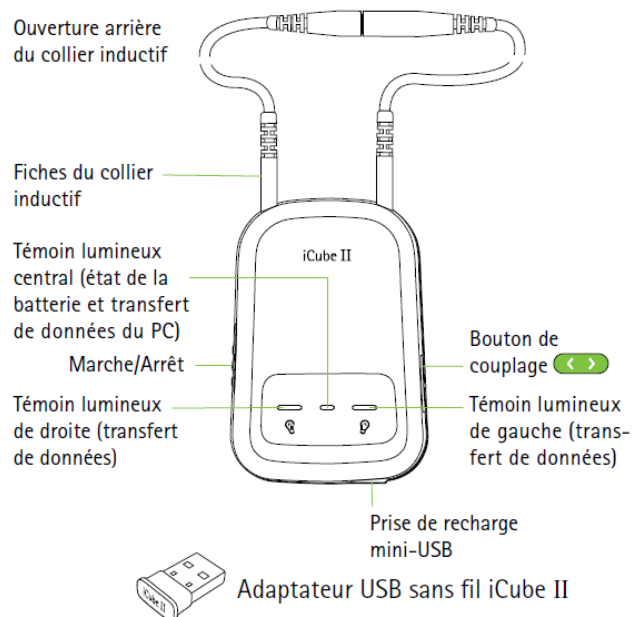

Accessoires (en option)

- Câble USB, 3 m
- Base de bureau iCube II
- Répartiteur USB

Informations générales



Dimensions (L x l x P) :	7,2 x 4,9 x 1,4 cm (2.8 x 1.9 x 0.6 ")
Poids :	44 g (0.1 lb)
Couleur :	Noir
Conditions de fonctionnement :	0 °C à +40 °C (+32° to 104° F) / < 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de transport et de stockage :	-20 °C à +60 °C (-4° to 140° F) / < 90 % d'humidité relative (sans condensation)
USB :	2.0 (iCube II) 3.0, 2.0, 1.1 (adaptateur USB)



Puissance et informations concernant la pile

Pile :	Lithium-polymère 3,7 V CC
Capacité :	450 mAh (typ.)
Durée de la recharge :	La durée de la recharge dépend de l'état initial de la pile. La recharge d'une pile vidée prend environ 2 heures. Les performances maximales sont atteintes après 3 cycles complets de charge et de décharge.
Durée de fonctionnement :	Appareillage continu de 12 heures iCube II allumé pendant 30 heures Bluetooth en veille
Chargeur :	Type : CC, 5 V +/- 5 % stabilisé Courant max. : 500 mA. La pile ne peut pas être surchargée. L'appareil peut chauffer pendant le chargement. Remarque importante : il est recommandé d'utiliser uniquement le chargeur Phonak d'origine.

Normes appliquées

	iCube II	Adaptateur USB
Europe	ETSI EN 300 330 (liaison sans fil aux aides auditives) ETSI EN 300 328 (Bluetooth) EN 62479 EN/CEI 60601-1, -2 EN301489-1, -3, -17 EN 60950-1	EN 300328 EN62479 EN 301489-1, -17 EN60950-1
États-Unis	FCC CFR 47 Part 15	FCC CFR 47 PART 15C
FCC ID :	KWC-ICUBE2	079BT402
Canada	RSS 210 Issue 8 RSS-102	RSS 210 Issue 8 RSS-102
IC :	2262A-ICUBE2	11512A-BT403
Japon	 202-LSC031 D 14-0027 202	 204-320232
	EWPE (liaison sans fil aux aides auditives) ARIB-T66 (Bluetooth)	

Informations radio

Type d'antenne :	Antenne de collier inductif externe
Fréquence de fonctionnement :	10,6 MHz (liaison sans fil aux aides auditives) 2,402-2,480 GHz / 79 canaux FHSS (Bluetooth)
Largeur de bande occupée (99 % de largeur de bande) :	500 kHz
Modulation :	8DPSK (liaison sans fil aux aides auditives) GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK (Bluetooth)
Puissance du champ magnétique à 10 m :	< -21 dBµA/m
Compatibilité de l'aide auditive :	Phonak Venture, Quest, Spice+, Spice*

Bluetooth

	iCube II	Adaptateur USB
Portée Bluetooth :	10 m (33 ft) classe 2	100 m (328 ft) classe 1
Compatibilité Bluetooth :	Version 4.1	Version 4.0+EDR
Profils Bluetooth pris en charge :	SPP (Serial Port Profile)	SPP, BLE PXP, FMP, ScPP, HID, etc.
Fréquence de fonctionnement :	2,402-2,480 GHz / 79 canaux FHSS	
Modulation :	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK	
Nombre max. d'appareils couplés simultanément :	1 iCube II	1 adaptateur USB sans fil Phonak



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

* Découvrez la liste complète d'aides auditives compatibles sur www.phonakpro.fr, dans [Support] → [Matériel d'appareillage]