

Phonak Suppression dynamique du bruit

En bref

De quoi s'agit-il ?

La Suppression dynamique du bruit est une fonctionnalité d'annulation du bruit ambiant qui fonctionne en association avec un focalisateur directionnel, afin d'améliorer le rapport signal sur bruit (RS/B) dans le cadre de situations difficiles.

Quels sont les avantages ?


C'est bien connu, comprendre la parole dans le bruit est considéré comme l'une des plus grandes difficultés auxquelles les personnes qui portent des aides auditives doivent faire face. Grâce à la suppression dynamique du bruit et à l'application myPhonak 4.0, les patients peuvent définir l'intensité en temps réel, en fonction de leurs préférences. Cette personnalisation sous-entend que chaque patient Paradise peut régler la fonctionnalité en suivant ses préférences en confort et en audibilité au sein d'un environnement auditif complexe.

028-2167-04/V1.00/2020-06/NLG © 2020 Sonova AG Tous droits réservés

Comment l'utiliser ?

- Réglable dans Phonak Target > Adaptation fine > Options de programme
- Réglage « faible » par défaut

Parole dans le bruit (PdB)

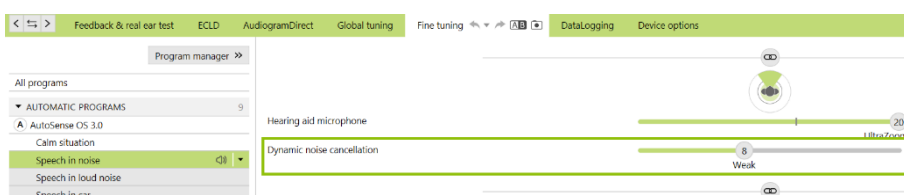

Parole dans le bruit intense (PdBI)

