







Bestelformulier Virto B-Titanium



Bedrijfsgegevens

Firmanaam:	Audicien:		
Adres:	Besteldatum:		
PC:	Plaats:	Naam cliënt:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V
Telefoon:	Geboortedatum:		

Uitvoering

Prestatie niveau	<input type="checkbox"/> B90	<input type="checkbox"/> B70	
Bediening (Één optie mogelijk)	<input type="checkbox"/> Drukknop/EasyPhone 	<input type="checkbox"/> MiniControl 	
Faceplate	<input type="checkbox"/> Zwart 	<input type="checkbox"/> Pink 	<input type="checkbox"/> Cacao 
Trekkoord	<input type="checkbox"/> Standaard	<input type="checkbox"/> Lang (+5mm)	
Extra retentie (Ruw schaal oppervlak)	<input type="checkbox"/> 		

Indien niet ingevuld = Standaard

Zo klein mogelijk


Toestel wordt mogelijk iets groter

Power level	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Fitguide indicatie ___	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Fitguide indicatie ___	<input type="checkbox"/> SP
	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Fitguide indicatie ___	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Fitguide indicatie ___	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> SP
Symmetrie (Binaurale aanpassing)	<input type="checkbox"/> Zo klein mogelijk (asymmetrisch)	<input type="checkbox"/> Gelijke grote (symmetrisch)	
Input opties	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> Luisterspoel	
Filter	<input type="checkbox"/> Cerustop <input type="checkbox"/> HF4	<input type="checkbox"/> HF3	<input type="checkbox"/> Smartguard
	<input type="checkbox"/> Doorgetrokken slang		
Venting	<input type="checkbox"/> AOV	<input type="checkbox"/> AOV-O Open (occlusie compensatie)	
		<input type="checkbox"/> Eigen keus: L ___ mm	<input type="checkbox"/> R ___ mm
		(minimaal 0,8mm)	

Indien niet ingevuld = Standaard

Audiogram

Voeg audiogram los bij!

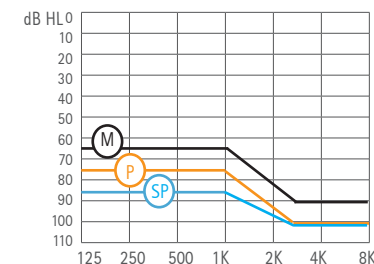

Oorafdruk

Doormiddel van de Phonak EasyView Otablock en de Titanium FitGuide kan Phonak een super discreet hoortoestel realiseren. Zie blad 2 voor werkwijze

Belangrijke info


- Gebruik alleen de speciale IIC/MIC-kabels voor het programmeren van Virto-B Titanium!
- De grootte van het toestel (IIC of CIC) is afhankelijk van de pasvorm en welke Power level, filter of venting er wordt toegepast. De grootte kan pas vastgesteld worden na beoordeling van de afdruk bij Phonak.
- De Virto B-Titanium is waterbestendig (IP 68)

Uw opmerkingen


Maak een kopie voor uw eigen administratie
Voorkom vertraging, vul het formulier volledig in!

De Titanium FitGuide gebruiken


Beweeg tijdens het hele proces erg langzaam en laat de cliënt weten wat hij of zij kan verwachten. Voer elke stap zorgvuldig uit.

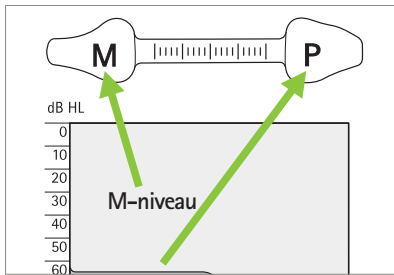


1. Richt de Titanium FitGuide op het oor van de cliënt door het juiste vermogensniveau te selecteren.

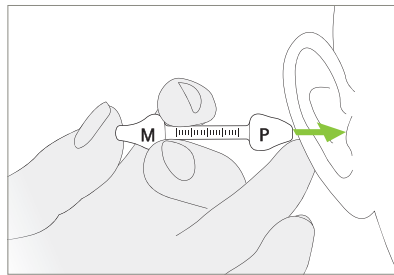


2. Houd de TFG vast met uw wijs- en middelvinger op de boven- en onderkant van het instrument. Laat uw pink en ringvinger tegen het hoofd van de cliënt rusten om te voorkomen dat deze onverwachte bewegingen maakt.

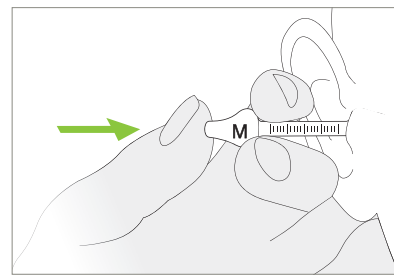

3. Breng de TFG langzaam in de eerste bocht in. Vraag de cliënt het instrument langzaam en voorzichtig verder naar binnen te duwen zolang dit comfortabel aanvoelt.

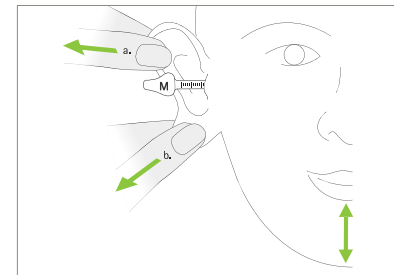


4. Trek voorzichtig in zijwaartse richting aan de oorschelp van de cliënt en vraag zijn of haar kaak te bewegen. Vraag of de diepte comfortabel aanvoelt en of dit meer dan acht uur per dag te verdragen is.

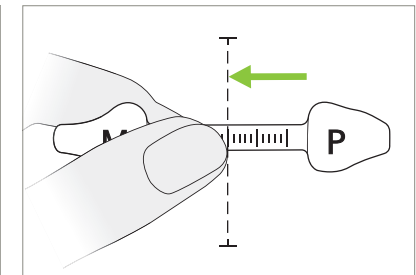


5. Neem de maat op door te kijken welke indicator zich direct bij de inkeping tussen de tragussen bevindt. Plaats uw vinger nagel bij de juiste diepte en verwijder het instrument zonder uw vinger te verplaatsen. Tel het aantal streepjes en noteer dit op het bestelformulier.


EasyView Otoblock gebruiken

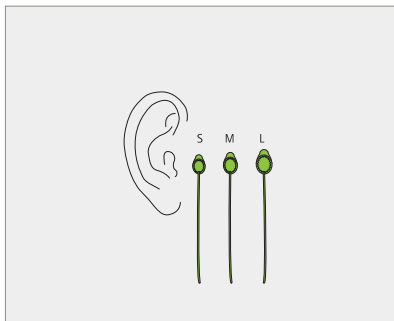


1. Maak vervolgens een oorafdruk met EasyView Otoblock. Zorg dat u de inkeping tussen de tragussen opneemt in de afdruk.

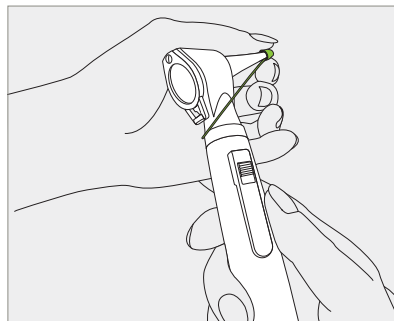


2. Plaats de EasyView Otoblock op het speculum van uw otoscoop, met de slang langs de onderzijde.

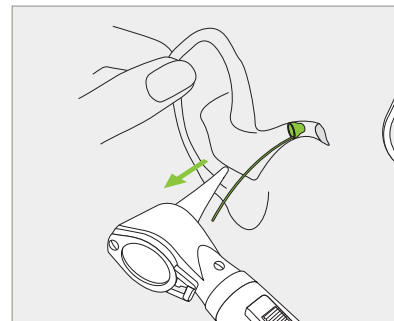

3. Breng het speculum in het oor van de cliënt in en leid de EasyView Otoblock geheel omlaag de gehoorgang in. Hierdoor ziet u altijd waar u zich bevindt.

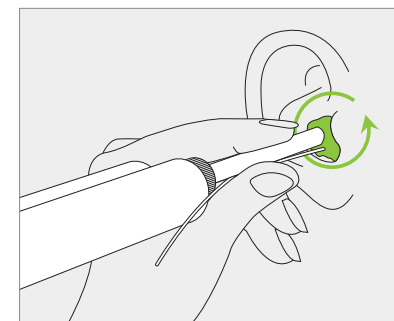

4. Maak de afdruk zoals gewoonlijk door het afdruk materiaal in te brengen (we raden het gebruik van Dreve Otoform A softX aan).

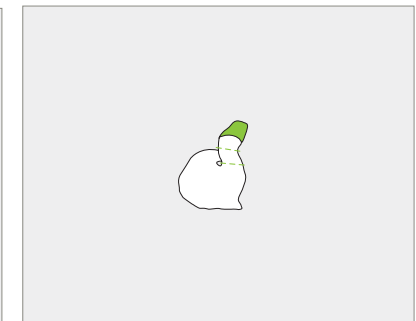

5. De Otoblock behoudt de vorm van de gehoorgang en wordt door fabrikant op informatie gescand. Verwijder de Otoblock daarom niet.