

Lyric™




O único aparelho auditivo 100% invisível do mundo está ainda melhor  
Apresentando os novos Lyric XXS e XXL

Uma marca Sonova



**PHONAK**  
life is on



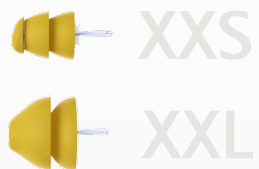

## Nós nos esforçamos para oferecer soluções que atendam às expectativas dos seus usuários

Com base nas avaliações e comentários recebido de profissionais e usuários, desenvolvemos o novo modelo do Lyric e desenvolvemos dois novos tamanhos, junto com uma confiabilidade melhorada em todo o nosso portfólio. Os usuários com canais auditivos menores que sentem desconforto e os usuários com canais auditivos maiores que verificam a ocorrência recorrente de microfonia podem agora se beneficiar com os novos tamanhos XXS e XXL.

---

### Apresentando o novo Lyric

#### Novos tamanhos:


Novas possibilidades de tamanho com o Lyric: XXS e XXL.

#### Melhorias no produto

A nova proteção da aba medial e o revestimento hidrofóbico P2i melhoram ainda mais a confiabilidade no produto.

## Nós criamos mais possibilidades

O novo Lyric foi projeto para atender às necessidades de ainda mais usuários. O Lyric agora está disponível em 7 tamanhos, e destaca os novos **modelos XXS e XXL** para mais possibilidades de adaptação.

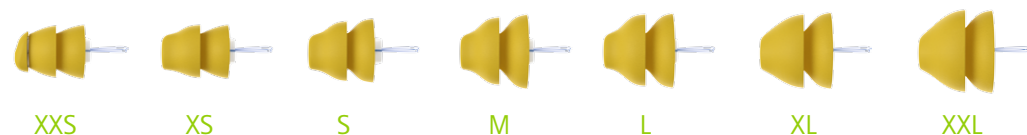

### Novo Lyric XXS

- Abas mais suaves e compatíveis para melhorar o conforto de uso.
- A aba de proteção medial adicional protege o canal auditivo durante a adaptação.

### Novo Lyric XXL

- Diminui a microfonia e é confortavelmente adaptado em canais auditivos maiores.




## Nós oferecemos maior confiabilidade

O novo Lyric apresenta melhorias de produção que otimizam a confiança no produto.

### Nova proteção da aba medial (protetor de cerúmen)

Especificamente projetada para proteção contra a umidade e cerúmen. Além disso, o novo protetor é 1 mm menor, por isso a probabilidade de encostar no canal auditivo é reduzida.

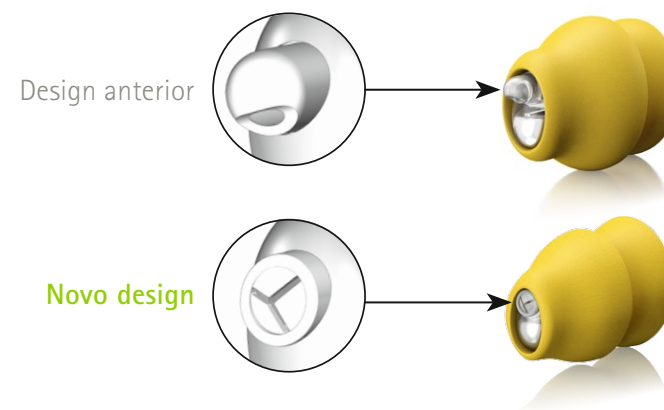

### Revestimento hidrofóbico P2i

Novo revestimento na proteção da aba medial e tela do receptor projetada para diminuir a obstrução precoce e o impacto da umidade.



# Nós proporcionamos maior satisfação aos usuários

Os novos modelos Lyric XXS e XXL proporcionam maior satisfação aos usuários e diminuem a taxa de cancelamento de teste.<sup>1</sup>

## Conforto de uso

O novo Lyric XXS proporciona um conforto otimizado para canais auditivos menores.<sup>1</sup>

## Diminuição da microfonia

Diminuição da microfonia em canais auditivos grandes, com o novo Lyric XXL.<sup>1</sup>

## Aumento da taxa de êxito do teste


36% de aumento da taxa de êxito do teste para o Lyric XXS em comparação com o Lyric XS.<sup>1</sup>



**60%** das pessoas que não se adaptaram anteriormente com o **Lyric XS** conseguem agora usar o novo Lyric XXS.<sup>1</sup>



**77%** das pessoas com canais auditivos grandes preferem o **Lyric XXL** ao Lyric XL.<sup>1</sup>

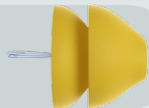

<sup>1</sup> Phonak Field Study News, Benefits of Lyric3 XXS and XXL, fevereiro de 2017



---

# Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos que somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas inovadoras que mudam as vidas das pessoas e permitem que elas se sintam social e emocionalmente concretizadas.

[www.phonak.com.br/lyric](http://www.phonak.com.br/lyric)