

Mi teszi a Marvelt még csodásabbá?

Más hallókészülékekkel ellentétben a Phonak Audéo Marvel **közvetlenül képes kapcsolódni mind az iOS-es, mind az Androidos okostelefonokhoz vagy más Bluetooth®-os telefonhoz**, és bármilyen hangot továbbít mindkét fülbe. Ügyfelei a beépített mikrofon segítségével élvezhetik a szabadkezes telefonálást. Ráadásul be lehet állítani, hogy a telefon hangüzenetei is a Marvel hallókészülékeken keresztül legyenek hallhatóak. A Marvel sztereó hangminőségben továbbítja a zenét, a videókat, e-könyveket, podcastokat és még annyi minden mást.



A Phonak Audéo Marvel tartalmazza a szabadalmaztatott AirStream™ technológiát, melynek segítségével **a hangátvitel bármely televízióból vagy sztereó berendezésből¹ a felhasználók által a legjobbra értékelt minőségben érhető el.** Ügyfelei a tévéműsort és a filmeket a Phonak TV Connector segítségével, egy egyszerű plug and play megoldással nézhetik. Ez éppen úgy működik, mint egy vezeték nélküli fejhallgató estében – várhatóan talán még jobban is, mert a Marvel hallókészülékek képesek megkülönböztetni a továbbított beszéd- és zenei jeleket, és automatikusan optimalizálják ezek hangminőségét.

A legfontosabb jellemzők:

- Kapcsolódás okostelefonokhoz – iOS és Android
- Kapcsolódás számos, a hétköznapi életben használatos elektronikai eszközökhöz
- A hallókészülék sztereó fejhallgatóként használható
- Extra hosszan tartó hangadatátviteli idő az AirStream technológiának köszönhetően

A Roger™ mikrofonok javítják a hallási teljesítményt nagy zajban és távolság esetén. A Phonak Audéo Marvel tartalmazza a RogerDirect™-et, mely a Roger technológia számára lehetővé teszi, hogy a hangadatátvitel közvetlenül, külső vevő/k közbeiktatása nélkül kerüljön a Marvel hallókészülékekbe.

A legfontosabb jellemzők:

- Marvel és Roger együtt, ez az optimális megoldás kihívást jelentő hallási helyzetekre
- A nagy zajban és nagyobb távolságról való beszédértés javítása érdekében fejlesztették
- Diszkrét és vonzó megoldások

App-szolút csodálatos!

A Phonak új digitális szolgáltatási platformjának az a rendeltetése, hogy ügyfelei személyes hallási igényeiket szolgálja. A myPhonak app*-pal ügyfelei megoszthatják önnel az információkat, és így ön valós időben végezheti el hallókészülékeik finomhangolását a hallási élményük alapján.

A legfontosabb jellemzők:

- Valós időben nyújtott videó támogatás
- Személyre szabott hallási élmény

A telefonálás megerősített lehet, főként, ha háttérzaj is van. A Phonak myCall-to-Text app-jával ügyfelei Marvel hallókészülékeiken keresztül hallhatják a beszélgetést, és valós időben olvashatják is azt, amit a telefonvonal másik végén levő személy mond. Próbálja ki az ingyenes próbaverziót.



Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve hűek maradunk küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

www.phonakpro.hu

Phonak Audéo™ Marvel



Nem csupán nagyszerű hallókészülék, hanem egy multifunkciós csoda

További információért látogasson el a www.phonakpro.hu honlapra.

A Phonak Audio Marvel egy olyan multifunkciós hallókészülék, mely a szerelem első hallásra élményt hozza el az Ön számára

Szerelem első hallásra... nap mint nap!

Amikor azt mondjuk, hogy szerelem első hallásra, nem arra az alkalomra gondolunk, amikor ön először illeszt Phonak Audéo Marvelt ügyfeleinek, hanem a készülék viselésének minden egyes napjára. Attól a pillanattól kezdve, amikor először illeszt a Marvel hallókészüléket ügyfeleinek, ők **semminél sem összehasonlítható hangminőségre** számíthatnak.

A Phonak-technológiának ez az új generációja több hallási helyzetet ismer fel, és pontosan adaptálódik ezekhez, mint korábban bármikor! Az AutoSense OS™ 3.0 és a Binaural VoiceStream Technology™ most az összes modellben benne van, így ügyfelei jobb beszéd-értést élvezhetnek zajban, és a hallás a mindennapokban kevésbé megerősített számukra.

A legfontosabb jellemzők:


- Kivételes hangminőség az első illesztéstől kezdve²
- Jobb beszédértés zajban³
- Kevésbé megerősített hallás zajban⁴
- Csúcsminőségűnek értékelt hangadatátvitel⁵

Az újratölthető technológiában rejlő erő

A Phonak úttörő szerepet töltött be a hallókészülék-iparban az újratölthető lítium-ion akkumulátorok bevezetésével. A Marvel hallókészülékek is kaphatók ezzel a technológiával: az ilyen készülékeket gyorsan lehet feltölteni, és hosszan tartó hallást biztosítanak. Automatikusan bekapcsolnak, ha leválasztjuk őket a töltőről, és kikapcsolnak, ha visszatesszük őket a töltő dobozba. Ügyfelei korlátok nélküli hallást és hangadatátvitelt (streaming) élvezhetnek egy teljes napon keresztül.

A legfontosabb jellemzők:

- Könnyen kezelhető – nincs több bajlódás az eldobható elemekkel
- Egész nap működik, beleértve a hangadatátvitelt (streaming) is
- Szuper gyors töltési opciók állnak rendelkezésre
- Az akkumulátorok 6 éven keresztül használatra lettek tervezve

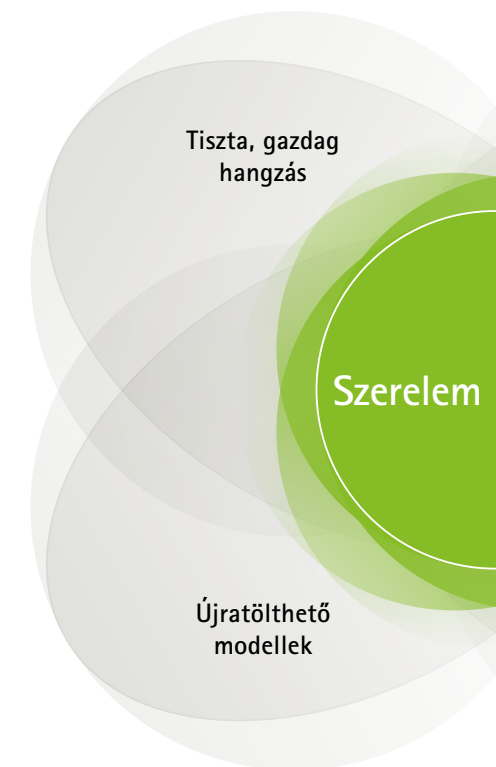

* A szolgáltatás egyelőre nem elérhető Magyarországon.

A termékek jellemzői

		 Audéo M-312 M90/M70/M50/M30	 Audéo M-312T M90/M70/M50/M30	 Audéo M-13T M90/M70/M50/M30	 Audéo M-R M90/M70/M50/M30	 Audéo M-RT M90/M70/M50/M30
Elemméret		312	312	13		
Multifunkciós nyomógomb		•	•	•	•	•
Telefontekercs			•	•		•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Nano bevonat		•	•	•	•	•
IP védelem		IP68 ⁶	IP68 ⁶	IP68 ⁶	IP68 ⁶	IP68 ⁶
Méret	M x Sz x M	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	29,1 x 11,9 x 7,2 mm (1,14 x 0,46 x 0,29")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	30,5 x 12,5 x 8,0 mm (1,20 x 0,49 x 0,32")
	Súly	1.1 g (0.04 oz)	1.3 g (0.04 oz)	1.4 g (0.05 oz)	2.1 g (0.07 oz)	2.3 g (0.08 oz)
Töltési idő ⁷	0% -ról 100% -ra				3 óra	3 óra
	0% -ról 80% -ra				1.5 óra	1.5 óra
	30 perc programozáshoz				10 perc	10 perc
S Hangszóró						
Max. kimeneti hangnyomás (dBB SPL)	2 cc csatoló	111	111	111	111	111
Max. erősítés (dB)	2 cc csatoló	46	46	46	46	46
Frekvenciaátviteli tartomány (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Áramfelhasználás (mA)		2.2	2.2	2.2		
M Hangszóró						
Max. kimeneti hangnyomás (dBB SPL)	2 cc csatoló	114	114	114	114	114
Max. erősítés (dB)	2 cc csatoló	50	50	50	50	50
Frekvenciaátviteli tartomány (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Áramfelhasználás (mA)		2.1	2.1	2.1		
P Hangszóró						
Max. kimeneti hangnyomás (dBB SPL)	2 cc csatoló	122	122	122	122	122
Max. erősítés (dB)	2 cc csatoló	58	58	58	58	58
Frekvenciaátviteli tartomány (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
Áramfelhasználás (mA)		2.2	2.2	2.2		
UP Hangszóró						
Max. kimeneti hangnyomás (dBB SPL)	2 cc csatoló	130	130	130	130	130
Max. erősítés (dB)	2 cc csatoló	67	67	67	67	67
Frekvenciaátviteli tartomány (Hz)		<100 - 6000	<100 - 6000	<100 - 6000	<100 - 6000	<100 - 6000
Áramfelhasználás (mA)		2.1	2.1	2.1		

Ház színek

Haj- és bőrszínek

								
P1 Homokbézs	P3 Szantálfa	P4 Gesztenye	P5 Pezsgő	P6 Ezüst szürke	P7 Grafit szürke	P8 Bársony fekete	T7 Alpesi fehér	H0 Bézs

Hagyományos

Teljesítményszintek

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30		Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS™ 3.0	Premium	Advanced	Standard	Essential	UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Csendes szituáció	•	•	•	•	SNR-Boost	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Komfort zajban	•	•	•		SoundRecover2	•	•	•	•
Zene	•	•			Felhasználói szokások beállítása	•	•	•	•
Beszéd hangos zajban ¹	•				Real Ear Sound	•	•	•	
Beszéd gépkocsiban	•				Állítható csatornák száma	20	16	12	8
Komfort visszhangos környezetben	•				WhistleBlock	•	•	•	•
Streamelt beszéd	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Streamelt zene	•	•	•	•	WindBlock	•	•		
További programok					EchoBlock	•			
Maximálisan beállítható programok	3	3	3	3	SoundRelax	•	•		
Komfort visszhangos környezetben	•				QuickSync	•	•	•	•
Beszéd hangos zajban	•	•			AOV	•	•	•	•
Beszéd 360°-ban	•	•			Tinnitus Balance	•	•	•	•
Beszéd zajban	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Csendes szituáció	•	•	•	•	Környezeti egyensúly	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•					
Zene	•	•	•	•					
Akusztikus telefon	•	•	•	•					
Egyéni program	•	•	•	•					
Adatátviteli programok									
Roger + mik	•	•	•	•					
Telefon + mik	•	•	•	•					

Programozás

	Audéo M-312 M90/M70/M50/M30	Audéo M-312T M90/M70/M50/M30	Audéo M-13T M90/M70/M50/M30	Audéo M-R M90/M70/M50/M30	Audéo M-RT M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.0 vagy újabb	6.0.1 vagy újabb	6.0.1 vagy újabb	6.0 vagy újabb	6.0.1 vagy újabb
Noahlink Wireless	•	•	•	•	•
NOAHLink		•	•		
HI-PRO, HI-PRO2		•	•		

Akusztikus csatolók

	S Hangszóró	M Hangszóró	P Hangszóró	UP Hangszóró
Hossz	•	•	•	•
Elérhető 4 hosszúságban (0, 1, 2, 3), jobb és bal oldal				
Dóm				
Kupak dóm	•	•	•	
Nyitott dóm	•	•	•	
Zárt dóm	•	•	•	
Power dóm	•	•	•	
SlimTip®				
Kemény	•	•	•	
Szilikon	•	•	•	
Titanium	•	•	•	
cShell				
Kemény	•	•	•	•

*Rendelhető extra hosszúságú hallójáratí opcióval

dB HL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Kis-közepes hallásveszteségnél

dB HL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Közepes-nagyfokú hallásveszteségnél

dB HL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Közepes-nagyfokú hallásveszteségnél

dB HL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Nagyfokú-súlyos hallásveszteségnél

A Phonak Audéo M-R töltési lehetőségei

		
Phonak Charger Case Combi A Phonak Charger Case Combi töltő, szárító doboz és védő, kemény tároló doboz egyben. Továbbá ez a robusztus és fröccsenő víz-álló doboz tartalmaz egy tisztító eszközt is.	Phonak Power Pack Újratölthető hallókészülékek menet közbeni töltéséhez a Phonak Power Pack-ot könnyen csatlakoztathatjuk a Phonak Charger Case Combi aljához.	Phonak Mini Charger Case A Phonak Mini Charger Case, mely standard USB-C töltővel működik, kompakt megoldás két Audéo M-R vagy Audéo M-RT hallókészülék töltéséhez.

Phonak Audéo M Bluetooth® verziók

Közvetlen hívások / hangadatátvitel	Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológia és a legtöbb régebbi Bluetooth telefonhoz
A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.	

Vezeték nélküli kommunikációs portfólió

	Audéo M-312 M90/M70/M50/M30	Audéo M312T M90/M70/M50/M30	Audéo M-13T M90/M70/M50/M30	Audéo M-R M90/M70/M50/M30	Audéo M-RT M90/M70/M50/M30
Vezeték nélküli kiegészítő					
TV Connector	•	•	•	•	•
Roger					
RogerDirect™	•	•	•	•	•
App-ok					
myPhonak	•	•	•	•	•
Phonak Remote	•	•	•	•	•

További információért keresse fel a www.phonakpro.hu/audéo oldalt.
A Roger mikrofonokról több információt talál a www.phonakpro.hu/roger oldalon.
További információért keresse fel a www.phonakpro.hu/smartapps oldalt.

⁶ Az IP 68 azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Túlélté az IEC60529-es szabvány szerinti, 1 méteres mélységben, 60 percen keresztül tartó vízbe merítést, valamint a 8 órás tartózkodást a porkamrában.

⁷ A mindenkor töltési időtartam függ az akkumulátor maradék töltöttségétől, de nem haladja meg a 3 órát.

¹ Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

² Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

³ Field Study News about Phonak StereoZoom in preparation, available by end of 2018 at www.phonakpro.com/evidence.

⁴ Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

⁵ Legarh, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.
Apple, the Apple logo, iPhone, and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.