

フォナック スリム.

プロダクトインフォメーション

フォナック スリムは、軽度から高度難聴用のデザインフォームファクタで、ルミティ RIC ポートフォリオを拡大します。また、アクティブベントレシーバを含む、4種類のレシーバに対応しています。

フォナック スリム補聴器は、フォナック ルミティの革新的な技術を搭載し、エレガントで独創性の高い補聴器をお求めの顧客にお勧めのソリューションです。



製品概要



スリム L-R
L90/L70/L50*/トライアル

多機能ボタン		●
T コイル		
Bluetooth®		●
ナノ コーティング		●
国際保護等級 IP		IP68 ¹
充電時間 ²	0%～100%	3時間
	30分フィッティング	15分
S レシーバ		
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	111
最大音響利得(dB)	2ccカブラデータ	47
帯域幅(Hz)		<100 - >8000
M レシーバ		
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	114
最大音響利得(dB)	2ccカブラデータ	51
帯域幅(Hz)		<100 - >8000
MAV レシーバ		
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	119
最大音響利得(dB)	2ccカブラデータ	50
帯域幅(Hz)		<100 - >8000
Pレシーバ		
最大出力音圧(dB SPL)	2ccカブラデータ	122
最大音響利得(dB)	2ccカブラデータ	59
帯域幅(Hz)		<100 - 6300

*国によってはご利用いただけない場合があります

ハウジング カラー



2A シルバー／
ブラック

3A グラファイト／
ブラック

4A カッパー／
ブラック

6A サンドルウッド／
ブラック

1 IP68は、防塵・防水の国際保護等級で、水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。
2 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

パフォーマンスレベル

オートセンス OS 5.0	プレミアム クラス	アドバンス クラス	スタンダー ドクラス*
反響する環境での快適性	●		
車の中でのことば	●		
非常に騒がしい中でのことば	●		
音楽	●	●	
騒音下での快適性	●	●	●
騒音下でのことば	●	●	●
静かな環境	●	●	●
メディア ことば+マイク	●	●	●
メディア 音楽+マイク	●	●	●
追加プログラム			
最大追加プログラム数	4	4	4
反響する環境での快適性	●		
非常に騒がしい中でのことば	●	●	
全方向(360°)からのことば	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●
静かな環境	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●
音楽	●	●	●
電話	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●
ストリーミングプログラム			
ロジャー ダイレクト+マイク	●	●	●
パートナーマイク+マイク	●	●	●
通話+マイク	●	●	●

機能	プレミアム クラス	アドバンス クラス	スタンダー ドクラス*
スピーチセンサー	●		
スピーチエンハンサー	●		
ステレオズーム 2.0	●	●	
ダイナミックノイズキャンセル	●	●	
アクティブイベント レシーバ	●	●	●
モーションセンサーヒアリング	●	●	●
ロジャーダイレクト	●	●	●
ロジャーと指向性のストリーミング	●	●	●
エコブロック	●		
タップコントロール			
- Siri/Google Assistant	●	●	
- ストリーミングの一時停止/再開	●	●	
- 通話の応答/終了	●	●	
サウンドリラックス	●	●	
デュオフォン	●	●	●
リアルイヤーサウンド	●	●	●
ヘルス機能	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●
耳鳴りバランス	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●
環境バランス	●	●	●
サウンドリカバー2	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●
クイックシンク	●	●	●
AOV	●	●	●
微調整チャンネル	20	20	16

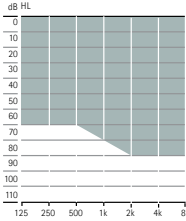
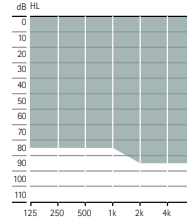
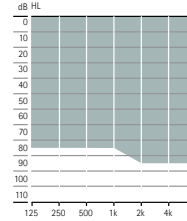
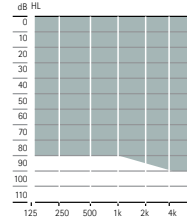
SmartSpeech™ (スマートスピーチ)テクノロジー

*国によってはご利用いただけない場合があります

フィッティング

	スリム L-R
フォナック ターゲット	8.1以降
Noahlink Wireless	●

音響カプリング

	S レシーバ	M レシーバ	MAV レシーバ	P レシーバ
長さ				
左右の異なる4つの長さで利用可(0、1、2、3)	●	●	●	●
耳せん				
キャップ型耳せん	●	●		●
オープン型耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)を用意	●	●		●
ベント付きドー	●	●		●
ム耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)を用意				
パワー型耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)を用意	●	●		●
スリムチップ*				
アクリル	●	●		●
シリコン	●	●		●
チタン AV			●	
ユニバーサル AV 4種類の形状(A, B, C, D)を用意			●	
フィッティングレンジ				
*外耳延長オプションが利用可能				
				
	軽度から中等度難聴	軽度から高度難聴	軽度から高度難聴	軽度から高度難聴

個性的、エレガント、つながる。それがフォナック スリム。

フォナック スリムは、顧客の**ライフスタイルと快適性**を考慮してデザインされています。最新のSmartSpeech™ 技術を利用すれば、顧客は難しい状況における**ことばの理解の改善**を体験できるでしょう¹。

フォナック ソリューションの汎用接続性は、顧客を周囲の世界とシームレスにつなげることができます。マイフォナック アプリを使うと聞こえを自分で制御したりヘルス データを追跡したりできます。また、販売店にリモートで接続できるため、販売店がより身近な存在になります。

¹Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility.フォナック フィールド スタディ ニュース。出典:<https://www.phonak.com/en-int/professionals/guides/evidence-library>、2023年2月にアクセス。

Latzel, M. & Hobi, S. (2022). Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception.フォナック フィールド スタディ ニュース(準備中)。

Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.

フォナック スリムの充電オプション



フォナック スリム チャージャー

フォナック スリム チャージャーはコンパクトな充電器で、フォナック スリムが簡単に出し入れできるように充電スロットに磁石が入っています。USB-C 充電ポートを備えたコンパクトなデザインのフォナック スリム チャージャーは、ハンディな保管および充電ソリューションを提供します。

フォナック スリム Bluetooth® バージョン

ダイレクト コール/音声ストリーミング Bluetooth® 4.2のワイヤレステクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

スリム L-R
L90/L70/L50*/トライアル

ワイヤレスアクセサリ	テレビコネクターD	•
	フォナック パートナーマイク	•
	フォナック リモートコントロール	•
ロジャー	ロジャー ダイレクト	•
アプリ	マイフォナック	•

*国によってはご利用いただけない場合があります

詳細については、www.phonakpro.com/slim をご覧ください。

ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonakpro.com/roger をご覧ください。

eSolutions の詳細については、www.phonakpro.com/smartapps をご覧ください。

life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに熱意を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会的・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるような力を注いでまいります。

www.phonak.com



027-0633-17/V3.00/2023-02/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved