

フォナック 公式SNS

フォナックでは、日々「聞こえ」に関する情報をSNSを通じてお届けしています。最新機器の情報から、ユーザーのみなさまのリアルな使い方までご紹介。フォナックのSNSを、ぜひチェックしてみてください。



Facebook
 @phonakjapan
 「聞こえ」に関する気になるニュースをピックアップ!

Instagram
 @phonak_japan
 ユーザーから投稿されたフォナックのあるリアルライフを紹介。

フォナック「きこえ」のブログ
 聞こえに関するコラムから、フォナックからのお知らせまで幅広い情報をお届け!
 フォナック ブログ 検索

フォナック「HearingLikeMe」ブログ
 世界中のフォナックユーザーのリアルな生活情報、専門家による「聞こえ」に関する記事を紹介。※海外サイト

ウェブコンテンツ「働くを切り拓く」
 社会人として知っておきたい、セルフアドボカシーと合理的配慮についての情報や活動レポートを紹介。
 フォナック ロジャー 働く 検索

フォナック あんしんサポート

送信機、受信機の無償保証期間はご購入日より2年間です。自然故障の場合のみ保証期間中は無償で修理します。保証期間満了後の1年間は修理の上限価格(30,000円)を設け、その金額を超える費用は請求しません。
 ※バッテリー交換は有償修理となります。



フォナックの「こども割」

お子さまの聞こえを応援するために、デジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」はこども割引制度を導入しています。対象製品や価格など詳しくは販売店までお問い合わせください。

製造販売業:ソノヴァ・ジャパン株式会社
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8
 天王洲パークサイドビル
 法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
 個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
 (受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
 FAX:0120-23-4080
 許可番号 13B2X10021

フォナック製品のご相談・ご用命は…



●電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。
 ●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



このカタログは、イワタUDフォントを使用しています。UD(ユニバーサルデザイン)とは、年齢・性別や、障害の有無に関係なくあらゆる人が商品・サービス・住居・施設を快適に利用できるよう配慮されたデザインのことです。イワタUDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。

本カタログの内容は2019年1月現在のものです。



028-1990-17

201901A-005000



「聞こえる」を届ける
 フォナックのソリューション。

A Sonova brand



どんなひとにも。どんなシーンでも。
よりよい聞こえをサポートする
補聴援助システム「ロジャー」。



roger


言葉の聞き取りで、困ったことはありませんか？

“話し手と聞き手の距離が遠い” “周囲に騒音・反響音がある” “複数人との会話”
こんな場合には、補聴器や人工内耳を装着していても、言葉の聞き取りが難しくなってしまいます。



「ロジャー」は、その課題に応えます。

ロジャーは話し手が使用する「送信機(ワイヤレスマイクロホン)」と、聞き手が使用する「受信機」、教室や会議室などに置く「線音源スピーカー」で構成されるシステムです。
ワイヤレスマイクで拾った音声をデジタル無線方式で送信するので、補聴器や人工内耳だけでは言葉の聞き取りが難しい環境でも、よりクリアな「聞こえ」が可能になるのです。

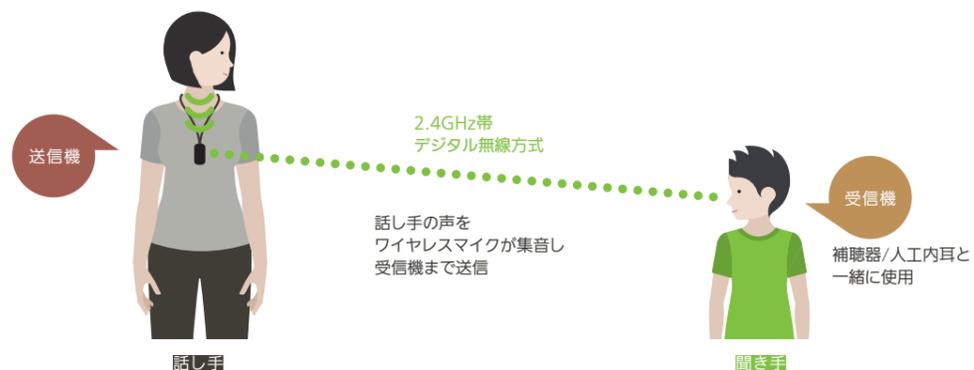

「合理的配慮」により、音環境の改善を考える皆さまへ

2016年4月に施行された「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)により、社会のさまざまな場所で「合理的配慮」が求められています。教育機関や企業で音環境の改善をご検討されている方に、補聴援助システムの情報のひとつとして本カタログをご活用いただけます。

「ロジャー」3つのポイント

1 誰でも使える。カンタンに使える。

互換性 操作性

国内で販売されているほぼ全ての補聴器/人工内耳に対応。
補聴器/人工内耳を使っていない方で、言葉の聞き取りに何らかの課題を抱えている方向けの、補聴器/人工内耳不要の専用受信機もあります。
しかも、操作はとてもカンタン。
送信機と受信機は、ボタンひとつでつながります。

2 いろいろつながる。たくさんつながる。

拡張性 複数台接続

ロジャーのワイヤレスマイクから音を届けることのできる、受信機の台数は無制限。送信機も複数台使用できます。
さらに、既存の音響システムやヒアリングループ、TV会議システム、電子黒板、音声認識アプリなど、さまざまな機器と一緒に利用することができます。




3 聞きたい声を届ける。不要な音は取り除く。

高音質 ノイズマネージメントシステム

デジタル無線方式で高音質の音声を届けるだけでなく、独自のテクノロジーで騒音を効率的にカットします。



指向性マイクロホン
マイクが特定の方向から音を拾う(指向性)ので、聞きたい音がしっかり聞こえます。

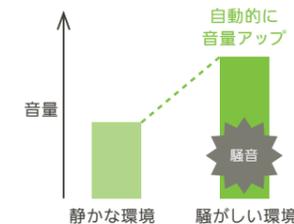

自動音量調節
周囲の騒音レベルをマイクが常時監視し、自動的に適切な音量に調節します。



デジタル騒音抑制
マイクが拾ってしまった騒音も、デジタル処理で取り除きます。

送信機と受信機のシンプルなシステム。用途に応じて自由に組み合わせられます。

受信機

ロジャー 受信機 台数無制限

フォナック補聴器専用

■ロジャー 18/19*
(一体型タイプ)



*:補聴器によって対応する型番が異なります。

■ロジャー エックス
(ユニバーサルタイプ)
+
フォナック コムパイロット
/コムパイロット II



ほぼ全メーカー対応の補聴器/人工内耳用

■ロジャー エックス
(ユニバーサルタイプ)
+
オーディオシュー



■ロジャー マイリンク/
ロジャー マイリンク
ショートループ
(首かけタイプ)



各社人工内耳用

■ロジャー 14
コクレア社
Nucleus 6(CP910)/5(CP810)
サウンドプロセッサ専用受信機



■ロジャー 17
アドバンスト・バイオニクス社
ナイーダ CI
サウンドプロセッサ専用受信機



■ロジャー フォーカス*



*:補聴器/人工内耳を使用していない方向けです。

ロジャー 20
コクレア社
Nucleus 7(CP1000)
サウンドプロセッサ専用受信機



ロジャー 21
メドエル社
SONNET/SONNET EAS
オーディオプロセッサ専用受信機



線音源スピーカー

■ロジャー デジマスター7000
■ロジャー デジマスター5000

300m までの スペース	ロジャー デジマスター 7000 ×2台	150m までの スペース	ロジャー デジマスター 7000 ×1台
100m までの スペース	ロジャー デジマスター 5000 ×1台		



送信機 (マイクロホン)

近距離対応*

■ロジャー セレクト



■ロジャー ペン



約15m

■ロジャー
テーブルマイク II
(卓上専用マイク)



■ロジャー
クリップオン マイク



同じネットワーク内で使用できる送信機:最大10台

遠距離対応*

■ロジャー
タッチスクリーン マイク



■ロジャー
パスアラウンド マイク



約20m

周辺機器
距離延長

■ロジャー リピーター
(中継機)



送信機と受信機の接続距離を
延長したいときに使用
※1台あたり40m延長可能。

約40m

■ロジャー
マルチメディア ハブ
(音響機器専用送信機)



約20m

同じネットワーク内で使用できる送信機:最大35台

*:近距離対応マイクと遠距離対応マイクは、同じネットワーク内での相互利用(互換性)はありません。※製品の詳細についてはP9~14をご覧ください。

教室も、体育館も、屋外でも。学びの現場で聞こえをサポートします。



学校

教室

ロジャー ウォールパイロット
教室や体育館に入るとき、受信機を自動的にそのエリアの送信機のネットワークに参加させることができます。

ロジャー デジマスター5000
大きな声を出さなくても先生の話を教室全体に届けることができます。電子黒板とも併用可能です。

先生の声

ロジャー タッチスクリーン マイク
タッチスクリーン式の使いやすい送信機で先生の声が届けることができます。

ロジャー マルチメディア ハブ
CDプレーヤーなどの音響機器の音をロジャー受信機に送信することができます。

ロジャー パスアラウンド マイク
補助マイクがあれば席が離れていても安心。集音中はLEDランプが点灯するので、誰が話しているかひと目でわかります。

補聴器/人工内耳+ロジャー受信機
補聴器/人工内耳とロジャー受信機を一緒に使用し、ロジャー送信機からの音声/音を受け取ります。

ロジャー フォーカス
補聴器/人工内耳を使っていないこども向けの受信機。集中が苦手なお子さんの聞こえをサポートします。

講堂 体育館

ロジャー デジマスター7000

ロジャー タッチスクリーン マイク

ロジャー パスアラウンド マイク

送信機 → 約40m → 中継機 → 約20m → 受信機

「ロジャー デジマスター」や「ロジャー リピーター」を組み合わせれば、話し手との距離が離れている場合でも、明瞭で快適な聞き取りが可能です。

線音源スピーカーとは？

- 距離による音の減衰が小さい。
- 反射が少なく、音が明瞭。
- 電波の混信や干渉がない。

通学路や放課後のコミュニケーションにも役立ちます。

班活動 ゼミ

ロジャー タッチスクリーン マイクの「小グループモード」

複数人がランダムに話をする班活動やゼミは、言葉の聞き取りが最も難しいシーンのひとつ。タッチスクリーン マイクを卓上に置くと自動的に小グループモードに切り替わり、話をしている人の声を優先的に集音してくれます。

ロジャー タッチスクリーン マイクの使用モード
シーンに合わせて便利な使い方ができます。

首かけモード

小グループモード | 集音方向を自動調整

集音距離 約1.5m

集音距離 約20cm

※手動の設定変更でインタビューモードも選択できます。

自宅

家族団らんのひとときも、会話がより弾みます。

車内
自動車/電車/バス

車の中や、大きな声を出しにくいバスや電車の中でも無理なく会話することができます。

職場やプライベートのさまざまな場面でも、ロジャーが役立ちます。



職場

大人数の会議 送信機を複数台組み合わせることで、大人数や広い会議室にも対応できます。

ロジャー テーブルマイク II
卓上専用のロジャー送信機。複数台使用することで、大人数での会議にも対応できます。付属のリモコンで、ミュート設定と集音範囲変更ができます。

ロジャー セレクト
胸元につけたり、卓上にも置けるロジャー送信機。6方向の指向性マイクロホンが自動で話し手の方向に切り替わります。

ロジャー ペン
首にかけたり、話し手に向けて使うことのできるロジャー送信機です。

ロジャー クリップオンマイク
小さくてシンプルなロジャー送信機です。

プライベート

外出 駅やビルなど街中のさまざまな騒音環境でも、同伴者とスムーズに会話できます。

カウンター お店のレジや銀行窓口など、カウンター越しでの聞き取りも安心です。

打ち合わせ 送信機を卓上に置くだけで参加者の声が聞こえます。

セミナー 研修 離れたところにいる話者の声が聞こえます。

会食 レストランや居酒屋など、周囲が騒がしい環境でも会話が弾みます。

携帯電話 スマートフォンにBluetooth®で接続すれば、ハンズフリーで通話できます。

マルチビームテクノロジー

ロジャーの多方向集音技術「マルチビームテクノロジー」。ロジャー セレクトとロジャー テーブルマイク IIではその技術がさらに進化しました。会話音と騒音の比率を毎秒数百回解析し、6方向/360度、その瞬間の話し手の声をビームのように捉えます。

ロジャー セレクトの使用モード

卓上モード/セレクトモード
テーブルの上に置くことで自動的に卓上モードに切り替わり、話している人の声を集音します。特定の人の声を聞きたいときは、その方向を手動で選択できます。

首かけモード
クリップやネックストラップを取り付けて、話し手が使用します。距離が離れていても話し手の声がロジャー受信機に届けられます。

テレビ テレビの音声を耳元に届け、離れた位置でも音量を上げずに楽しむことができます。

自宅 対面での会話はもちろん、離れたところからの呼びかけなどでも、聞こえを助けます。

DOLBY AUDIO™
*:ドルビーオーディオはロジャー セレクトのドッキングステーション利用時のみ。

送信機も受信機も。 必要な機器を、さまざまな組み合わせ方で選べます。

送信機

職場やプライベートでおすすめの小型マイク。
聞きたい方向からの声を自分で選べるセレクト機能付き。

ロジャー セレクト 128,000円(税抜)

【製品コード】
(シャンパン)052-3471-000P55
(グラフィックグレー)052-3471-000P75
(パールホワイト)052-3471-000W35



- Bluetooth®を利用した携帯電話のハンズフリー通話や、ドルビーオーディオ搭載のテレビ音声も楽しめます*。
- 2時間充電で約8時間使用できます。(Bluetooth®利用時は約4時間)
- 使用可能距離:約15m
- 直径55mm×高さ12mm 重さ28g

教育現場におすすめのワイヤレスマイク。
タッチスクリーン式で操作性も抜群。

ロジャー タッチスクリーン マイク 128,000円(税抜)

【製品コード】052-3297-000005



- 2時間充電で約10時間使用できます。
- 使用可能距離:約20m
- 幅55mm×奥行104mm×高さ16mm 重さ94g



携帯電話やテレビにも接続可能な1台3役の
ペン型ワイヤレスマイク。

ロジャー ペン 109,000円(税抜)

【製品コード】
(レッド)052-3293-000P9
(シルバー)052-3293-000T4
(ブルー)052-3293-000T5



- 2時間充電で約7時間使用できます。(Bluetooth®利用時は約5時間)
- ブルー/レッド/シルバーの3色からお選びいただけます。
- 使用可能距離:約15m
- 直径15mm×長さ142mm 重さ28g



持ち運び自在で小~大会議室まで対応可能の
会議専用 卓上置き型マイク。

ロジャー テーブルマイク II 158,000円(税抜)

【製品コード】052-4158-000P5



- 約4時間の充電で約16時間使用できます。
- 使用可能距離:約15m
- リモコン付属
- 幅69mm×奥行69mm×高さ14mm 重さ103g
- ※発売準備中

小型で持ちやすい、
ロジャー タッチスクリーン マイク用
子機ハンドマイク。

ロジャー パスアラウンド マイク 78,000円(税抜)

【製品コード】052-3261-000005



- 2時間充電で約10時間使用できます。
- 使用可能距離:約20m
- 直径34mm×高さ161mm 重さ84g
- ※ロジャー パスアラウンド マイク単体では送信機として使用できません。
必ずロジャー タッチスクリーン マイクが必要になります。

専用スタンド

手のひらサイズのクリップ型。
2台目や自宅用におすすめ。

ロジャー クリップオン マイク 56,000円(税抜)

【製品コード】052-3294



- 2時間充電で約4.5時間使用できます。
- 使用可能距離:約15m
- 幅25mm×奥行18mm×高さ54mm 重さ18g

Bluetooth®接続でさらに便利に

「ロジャー ペン」「ロジャー セレクト」は、Bluetooth®機能付きの携帯電話に接続可能。ハンズフリーで通話を楽しむことができます。Bluetooth®を使用しないときは、機能をオフにできます。



ロジャー ペン/ロジャー セレクトのマイクロホンで拾った声が無線で携帯電話に届きます。相手の声は、送信機を経由して補聴器/人工内耳から聞こえます。

*:ドルビーオーディオはロジャー セレクトのドッキングステーション利用時のみ。

受信機

販売店ご担当者様へご発注の際は、各製品コードの末尾2桁にカラー番号をご記入ください。例)サンドページの場合 000-000-P1

オーディオシュー不要の
フォナック補聴器専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 18* ロジャー 19* 各92,000円(税抜)

【製品コード】(18)052-3281-D02xx (19)052-3291-D02xx



ロジャー 19

- *1:防水・防塵の国際保護等級「IP67」取得。
- *2:防水・防塵の国際保護等級「IP68」取得。
- ※上記の防水機能は補聴器と一緒に使う場合のみ有効です。

「デザイナー体型受信機」のメリット

- 1 オーディオシューが不要な分サイズが小さくなる
- 2 電池交換の際にも受信機を外す必要がない
- 3 オーディオシューと一緒に紛失するリスクがない
- 4 補聴器も受信機も防水(一部の器/機種)



デザイナー体型
受信機



オーディオシュー
+ロジャーエックス

他メーカーの耳かけ型補聴器や人工内耳にも
使用できるユニバーサル(3ピン)タイプ。

ロジャー エックス 92,000円(税抜)

【製品コード】052-3113-X02P5



ロジャー エックス

- ※電源は補聴器から供給されるので、補聴器の電池寿命は短くなります。
- ※耳かけ型補聴器にはオーディオシューが別途必要です。

耳あな型やTコイル内蔵の補聴器、
人工内耳に対応。

ロジャー マイリンク (ループ長:76cm) ロジャー マイリンク ショートループ (ループ長:56cm) 各65,000円(税抜)


【製品コード】(マイリンク)052-3219-D02M3
(マイリンク ショートループ)052-3226-D02M3



- 2時間充電で約10時間使用できます。
- ※Tコイル特性のため、言語獲得中のお子さまには推奨していません。

こどものTコイルの利用について

補聴システムは、補聴器や人工内耳と同じ特性で音を聞けること、混信・雑音・断音がなく安定し、歪みが少なく音質が良い、という条件が望ましく*、Tコイルなどの電磁波等のノイズを拾いやすいシステムは、この条件を満たしません。そのためロジャーの受信機は、特に言語獲得中のお子さまに、直接補聴器や人工内耳に接続可能なデザイナー体型を推奨しています。

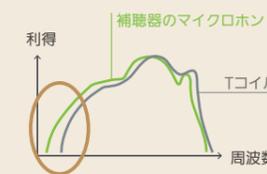

*1: American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines Remote Microphone Hearing Assistance Technologies for Children and Youth from Birth to 21 years (April 2008 update April 2011)
●電池寿命は使用状況により異なります。●ロジャーは、マイクロホンと受信機をセットでご利用ください。●ロジャー送受信機のバッテリー交換は有償(5,000円(税抜))です。
●防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。●詳しくは当社ホームページをご覧ください。www.phonak.com/jp/ja

アドバンスト・バイオニクス社 人工内耳プロセッサ
ナイーダ CI サウンドプロセッサ専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 17* 98,000円(税抜)

【製品コード】052-3235-D02xx

- *:防水・防塵の国際保護等級「IP54」取得。



コクレア社 人工内耳プロセッサ
Nucleus® 7 (CP1000)
サウンドプロセッサ専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 20 98,000円(税抜)

【製品コード】052-3317-D02xx



コクレア社 人工内耳プロセッサ
Nucleus® 6 (CP910)/5 (CP810)
サウンドプロセッサ専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 14* 98,000円(税抜)

【製品コード】052-3222-D02xx

- *:防水・防塵の国際保護等級「IPX4」取得。



メドエル社 人工内耳プロセッサ
SONNET/SONNET EAS
オーディオプロセッサ専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 21* 98,000円(税抜)

【製品コード】052-3469-D02xx

- *:防水・防塵の国際保護等級「IP54」取得。



補聴器・人工内耳不要の
レシーバ内蔵受信機。

ロジャー フォーカス* 56,000円(税抜)

【製品コード】052-3272-D02xx

- *:防水・防塵の国際保護等級「IP57」取得。
- ※使用電池はPR41 (312) 空気電池1個。
- 電池寿命は42~60時間です。



フォナックDSFシステム

フォナックDSFシステムは、「ワイヤレスマイク」と「スピーカー」のシンプルなシステムです。
線音源スピーカーにより反響音を抑え話者の声を聞き取りやすくします。

ロジャー デジマスター5000
150,000円(税抜)* / 1台

有効室内面積: 約100㎡
【製品コード】 052-3025
●スピーカー本体 直径70mm×高さ880mm 重さ2.1kg

ロジャー デジマスター7000
190,000円(税抜)* / 1台

有効室内面積:
スピーカー2台使用時: 約300㎡
スピーカー1台使用時: 約150㎡
【製品コード】 052-3158
●スピーカー本体 直径70mm×高さ1,045mm 重さ2.6kg
スタンド(5000/7000共通) 直径750mm×高さ1,035mm 重さ2.2kg
スタンド土台部(5000/7000共通) 直径825mm
ACアダプターコード長約350cm



〈有償オプション〉
高さ調整可能三脚
8,000円(税抜)

【製品コード】 052-3444
●スタンド部
高さ550mm~1,250mm 重さ1.8kg
土台部 高さ約630mm 重さ1.8kg



〈有償オプション〉
壁掛けキット セット
1,000円(税抜)*

【製品コード】 052-3428
※1セットはロジャー デジマスター
本体に同梱されています。



*:ロジャー デジマスターの壁付けの設置費用、また電源工事にかかる費用は製品価格に含まれておりません。
※ワイヤレスマイクは、「ロジャー タッチスクリーン マイク」もしくは「ロジャー インスパイロ」を使用します。
※スタンドは標準で付属されています。

周辺機器

部屋の出入口などに設置し、
受信機を自動的にその部屋のワイヤレスマイクに接続。

ロジャー ウォールパイロット
40,000円(税抜)*

【製品コード】 052-3115
●ACアダプター付属。
●幅80mm×奥行39mm×高さ95mm
重さ164g ACアダプターコード長約130cm



*:設置費用は製品価格には含まれません。

最大4台の送信機を
同時に充電できるラック。

ロジャー チャージングラック
12,000円(税抜)

【製品コード】 055-3010
●ACアダプター付属。
●ロジャー タッチスクリーン マイク、
ロジャー パスアラウンド マイク、ロジャー リピーター、
ロジャー マルチメディア ハブのみにご使用いただけます。
●幅75mm×奥行188mm×高さ28mm
重さ250g ACアダプターコード長約120cm



話者の使うマイクの音と同時に
音響機器からの音も流せる送信機。

ロジャー マルチメディア ハブ
78,000円(税抜)

【製品コード】 052-3299-000005
●2時間充電で約10時間使用できます。
●幅55mm×奥行104mm×高さ16mm
重さ120g ACアダプターコード長約130cm



送信機と受信機の
接続距離を延長できる中継機。

ロジャー リピーター
78,000円(税抜)

【製品コード】 052-3476-000005
●約2時間の充電で約10時間使用できます。
●互換性のあるロジャー送信機からロジャー リピーター、
またはロジャー リピーターから次のロジャー リピーター
までの使用可能距離: 約40m
ロジャー リピーターから受信機までの
使用可能距離: 約20m
●幅55mm×奥行16mm×高さ104mm
重さ120g ACアダプターコード長約130cm



カラーバリエーション

販売店ご担当者様へ ご発注の際は、各製品コードの末尾2桁にカラー番号をご記入ください。例) サンドベージュの場合 000-000-P1

ロジャー フォーカス



一体型受信機

<p>ロジャー 14 ・Nucleus® 6 サウンドプロセッサ ・Nucleus® 5 サウンドプロセッサ</p>	<p>Nucleus® 6用 黒 ベージュ 茶 グレー</p> <p>Nucleus® 5用 ブラウン 白 黒 ベージュ ダークグレー</p>
<p>ロジャー 17 ・ナイーダ C1 サウンドプロセッサ</p>	<p>シルバー グレー ベルベット ブラック ルビー プリンセス ピンク カリビアン バイレット</p>
<p>ロジャー 18 ・フォナック ナイーダ B-SP ・フォナック ナイーダ V-SP/RIC ・フォナック スカイ B-P/SP/RIC ・フォナック スカイ V-P/SP/RIC ・フォナック ホレロ B-P/SP ・フォナック ホレロ V-P/SP ・フォナック オーデオ B-13 ・フォナック オーデオ V-13</p>	<p>01 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q1 Q2 Q3 T3 T7 M6 M7 M8 ベージュ サンド ベージュ アンバー ベージュ サンド ウッド チェスト ナット シャンパン グラフアイト グレー ベルベット ブラック ルビー ペトロール エレクトリック グリーン カリビアン バイレット フレッシュ ピンク アルバイン ホワイト ラバ レッド ブルー オーシャン マジェスティ パープル</p>
<p>ロジャー 19 ・フォナック ナイーダ B-UP ・フォナック ナイーダ V-UP ・フォナック スカイ B-UP ・フォナック スカイ V-UP</p>	<p>01 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q1 Q2 Q3 T3 T7 M6 M7 M8 ベージュ サンド ベージュ アンバー ベージュ サンド ウッド チェスト ナット シャンパン グラフアイト グレー ベルベット ブラック ルビー ペトロール エレクトリック グリーン カリビアン バイレット フレッシュ ピンク アルバイン ホワイト ラバ レッド ブルー オーシャン マジェスティ パープル</p>
<p>ロジャー 20 ・Nucleus® 7 サウンドプロセッサ</p>	<p>L8 L9 M1 T1 T2 白 黒 ベージュ 茶 グレー</p> <p>ロジャー 21 ・SONNET/SONNET EAS オーディオプロセッサ</p> <p>V1 V2 V3 V4 V5 V6 淡黒色 きなこ色 黒色 こげ茶色 灰色 白色</p>

オーディオシュー 5,000円(非課税)

<p>AS18 【製品コード】 054-0244-xx ・フォナック ナイーダ B-SP ・フォナック ナイーダ V-SP/RIC ・フォナック スカイ B-P/SP/RIC ・フォナック スカイ V-P/SP/RIC ・フォナック ホレロ B-P/SP ・フォナック ホレロ V-P/SP ・フォナック オーデオ B-13 ・フォナック オーデオ V-13</p>	<p>01 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q1 Q2 Q3 T3 T7 M6 M7 M8 ベージュ サンド ベージュ アンバー ベージュ サンド ウッド チェスト ナット シャンパン グラフアイト グレー ベルベット ブラック ルビー ペトロール エレクトリック グリーン カリビアン バイレット フレッシュ ピンク アルバイン ホワイト ラバ レッド ブルー オーシャン マジェスティ パープル</p>
<p>AS19 【製品コード】 054-0732-xx ・フォナック ナイーダ B-UP ・フォナック ナイーダ V-UP ・フォナック スカイ B-UP ・フォナック スカイ V-UP</p>	<p>01 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q1 Q2 Q3 T3 T7 M6 M7 M8 ベージュ サンド ベージュ アンバー ベージュ サンド ウッド チェスト ナット シャンパン グラフアイト グレー ベルベット ブラック ルビー ペトロール エレクトリック グリーン カリビアン バイレット フレッシュ ピンク アルバイン ホワイト ラバ レッド ブルー オーシャン マジェスティ パープル</p>

※印刷の都合上、実物の色味とは異なって見える場合があります。

受信機対応表(フォナック補聴器)

製品名			一体型受信機	ロジャー エックス + オーディオシュー	ロジャー マイリンク / ロジャー マイリンク ショートループ *4	ロジャー エックス + フォナック コムパイロット II
耳かけ型	標準タイプ	フォナック ボレロ B / ボレロ V	PR	—	■	■
			M	—	■	■
			P	■ ロジャー 18	■ AS 18	■
			SP	■ ロジャー 18	■ AS 18	■
	RICタイプ	フォナック オーデオ B / オーデオ V	ダイレクト*2	—	—	—
			R*2	—	—	■
			13	■ ロジャー 18	■ AS 18	■
			312	—	—	■
	パワータイプ	フォナック ナイダ B / ナイダ V	SP	■ ロジャー 18	■ AS 18	■
			UP	■ ロジャー 19	■ AS 19	■
			RIC	■ ロジャー 18	■ AS 18	■
			R RIC*2	—	—	■
お子さま向けタイプ	フォナック スカイ B / スカイ V	P	■ ロジャー 18	■ AS 18	■	
		SP	■ ロジャー 18	■ AS 18	■	
		UP	■ ロジャー 19	■ AS 19	■	
		RIC	■ ロジャー 18	■ AS 18	■	
ベシックタイプ	フォナック ヴィータス / ヴィータス+	BTE-micro	—	—	■	
		BTE-P	■ ロジャー 18	■ AS 18	■	
		BTE-UP	■ ロジャー 19	■ AS 19	■	
	フォナック ヴィータス+	RIC-312T	—	—	■	
耳あな型 *1	フォナック パート B / パート V	チタン*2	—	—	—	
		nano*3	—	—	—	
		10 NW O	—	—	■	
		312 NW O*2	—	—	■	
		10 O	—	—	■	
		10	—	—	■	
		312	—	—	■	
	13	—	—	■		
	フォナック ヴィータス+	ITE-10 NW O	—	—	■	
		ITE-312	—	—	■	
		ITE-13	—	—	■	

*1: 補聴器のプログラムをTコイルに切り替える際、プログラムスイッチ、またはリモコンが必要です。*2: B(ヒロンク)シリーズのみの機種です。
*3: V(ベンチャー)シリーズのみの機種です。*4: 補聴器にTコイル機能が必要です。

ロジャー 特別パッケージ 送信機と受信機をセットにした特別パッケージをご用意しました。

製品名	パック内容	価格
ロジャーパック(片耳用)	送信機:ロジャー タッチスクリーン マイク もしくは ロジャー ペン(1台) 受信機:各種*(1台)	178,000円(税抜)
ロジャーパック(両耳用)	送信機:ロジャー タッチスクリーン マイク もしくは ロジャー ペン(1台) 受信機:各種*(2台)	258,000円(税抜)

フォナックDSFシステム特別パック

製品名	パック内容	価格
■約100mまでのスペースに ロジャー デジマスター5000パック	線音源スピーカー:ロジャー デジマスター5000(1台) ワイヤレスマイク:ロジャー タッチスクリーン マイク(1台)	単品合計278,000円(税抜) → 242,000円(税抜)
■約150mまでのスペースに ロジャー デジマスター7000パック1	線音源スピーカー:ロジャー デジマスター7000(1台) ワイヤレスマイク:ロジャー タッチスクリーン マイク(1台)	単品合計318,000円(税抜) → 265,000円(税抜)
■約300mまでのスペースに ロジャー デジマスター7000パック2	線音源スピーカー:ロジャー デジマスター7000(2台) ワイヤレスマイク:ロジャー タッチスクリーン マイク(1台)	単品合計508,000円(税抜) → 402,000円(税抜)

*ロジャー マイリンク/ロジャー マイリンク ショートループ/ロジャー フォーカスは対象外です。

アクセサリ価格表

写真	製品名	製品コード*	価格(税抜)	写真	製品名	製品コード*	価格(税抜)			
ロジャー セレクト用				ロジャー タッチスクリーン マイク用						
	セレクト用 クリップ	055-3030	1,000円		タッチスクリーン マイク用 ネックストラップ	055-3005	1,000円			
	セレクト用 ネックストラップ	055-3029	1,000円		タッチスクリーン マイク用 キャリーケース	017-3272	2,000円			
	セレクト用 ポーチ	017-3344	1,500円		タッチスクリーン マイク用 保護ケース	055-3021	500円			
ロジャー テーブルマイク II 用								タッチスクリーン マイク用 ポーチ	017-3310	1,500円
	テーブルマイク II 用 ソフトケース	017-4009	2,000円		タッチスクリーン マイク用 ベルトクリップ	004-4031	1,000円			
ロジャー ペン用								タッチスクリーン マイク用 ブームマイク	055-3009	12,000円
	ペン用 ネックストラップ	052-3198	1,000円		タッチスクリーン マイク用 スクリーンプロテクター	017-3323	800円			
	ペン用ケース	017-3275	1,500円							
ロジャー クリップオン マイク用										
	クリップオン マイク用 ポーチ	017-3278	1,500円							

※その他のアクセサリにつきましては当社ホームページをご覧ください。www.phonak.com/jp/ja