

Phonak Audéo B

プロダクトインフォメーション



フォナック オーデオ Bは、6種類のデザインに出力レベルが異なる3種類のレシーバオプション（M/P/UP）があり、また、4つのパフォーマンスレベル（90/70/50/30）がある軽度から高度難聴の方に適した包括的なRICタイプのシリーズです。

革新的なテクノロジーを備えた フォナック ビロング プラットフォームにより、フォナック オーデオ Bは、機能と審美性の両方を求める方にとって理想的なソリューションとなるでしょう。

より詳細情報（英文）は www.phonakpro.com

製品概要

					
	オーディオ B-312 (90/70/50/30)	オーディオ B-312T (90/70/50/30)	オーディオ B-13 (90/70/50/30)	オーディオ B-Direct (90/70/50)	オーディオ B-R (90/70/50)
電池（種類/サイズ）	PR41(312)	PR41(312)	PR48(13)	PR48(13)	リチウムイオン電池
プログラムスイッチ	●	●	●	●	●
ボリュームコントロール			●		
テレコイル		●	●		
イージーフォン	●	●	●		●
防水防塵保護等級（IP）	IP68※1	IP68※1	IP68※1	IP68※1	IP68※1
本体サイズ（L × W × D）mm	26.6 × 10.8 × 6.9	28.7 × 12.3 × 6.8	31.6 × 14.4 × 8.4	27.2 × 10.9 × 7.3	29.7 × 12.9 × 7.9
重さ	1.3g	1.5g	2.2g	1.2g	2.4g
使用可能時間※2 無線通信無し時 無線通信 5時間使用時 無線通信 10時間使用時					最大 24時間 最大 20時間 最大 16時間
充電時間※3 フル充電 80%充電 30分間のフィッティング分					180分 90分 10分
xレシーバ（標準：M）					
最大出力音圧レベル（dB SPL） 2cm ² カブラ 密閉型疑似耳	111 122	111 122	111 122	111 122	111 122
最大音響利得（dB） 2cm ² カブラ 密閉型疑似耳	46 56	46 56	46 56	46 56	46 56
周波数範囲（Hz）	100 – 9200	100 – 9200	100 – 9200	100 – 9200	100 – 9200
消費電流	1.2	1.2	1.2	1.8	
xレシーバ（パワー：P）					
最大出力音圧レベル（dB SPL） 2cm ² カブラ 密閉型疑似耳	124 132	124 132	124 132	124 132	124 132
最大音響利得（dB） 2cm ² カブラ 密閉型疑似耳	57 65	57 65	57 65	57 65	57 65
周波数範囲（Hz）	100 – 6400	100 – 6400	100 – 6400	100 – 6400	100 – 6400
消費電流	1.2	1.2	1.2	1.8	
xレシーバ（ウルトラパワー：UP）					
最大出力音圧レベル（dB SPL） 2cm ² カブラ 密閉型疑似耳	130 136	130 136	130 136	130 136	130 136
最大音響利得（dB） 2cm ² カブラ 密閉型疑似耳	66 72	66 72	66 72	66 72	66 72
周波数範囲（Hz）	100 – 5800	100 – 5800	100 – 5800	100 – 5800	100 – 5800
消費電流	1.3	1.3	1.3	2.0	

※1 IP68は防水・防塵の国際保護等級で、粉塵試験装置に8時間入れた後や、水面から1mの水中に長時間入れた後でも修理が必要なダメージが発生せず、水面下での使用可能なことを示しています。
※2 実際の電池寿命は、聴力レベルや電池使用経過年月、周囲雑音の状況によって変化します。
※3 実際の充電時間は、電池残量により異なります

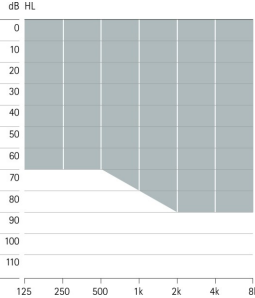
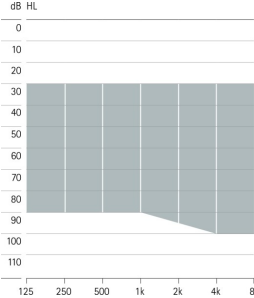
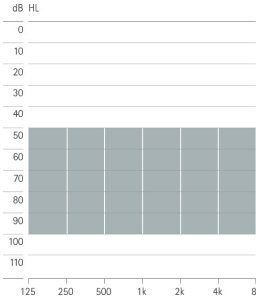
ハウジングカラー

スキン & ヘアー

トラディショナル

								
P1	P3	P4	P5	P6	P7	P8	T7	O1
サンド ベージュ	サンダル ウッド	チェスト ナット	シャンパン	シルバー グレー	グラファイト グレー	ベルベッ ト ブラック	アルパイン ホワイト	ベージュ

音響カプラ

	xレシーバ (標準：M)	xレシーバ (パワー：P)	xレシーバ (ウルトラパワー：UP)
長さ (サイズ：0、1、2、3)	●	●	●
ドーム耳せん	オープン型耳せん (サイズ：S、M、L)		
	クローズ型耳せん (サイズ：S、M、L)		
	パワー型耳せん (サイズ：S、M、L)		
スリムチップ	●	●	
SPシェル	●	●	●
フィッティングレンジ			
	軽度～中等度難聴	軽度～高度難聴	中等度～重度難聴

オーディオ B-R用の充電器



チャージャー ケース RIC
フォナック チャージャー ケースRICは、フォナック オーディオ B-Rを充電、乾燥、保管させることが1つでできるオールインワンのケースです。ケースの蓋にはクリーニングツールも付属されているので、いつでも清掃をすることができます。



パワーパック
チャージャーケースRICの底部に取り付けて使用するモバイルバッテリーです。旅行先などの外出時でも、2台のフォナック オーディオ B-Rを7回フル充電させることができます。



ミニチャージャー RIC
フォナック オーディオ B-R用のコンパクトタイプの充電器です。職場などに置くなどして2台目の充電器として、お使いください。

オーディオ B-ダイレクトのBluetooth®バージョン

ダイレクト電話	Bluetooth®4.2ワイヤレス技術およびそれ以前のBluetooth® バージョンが搭載された携帯電話
フォナック リモート App	iOS 10.2以降のバージョンおよびAndroid 6.0以降のバージョン

フィッティング

	オーディオ B-312 (90/70/50/30)	オーディオ B-312T (90/70/50/30)	オーディオ B-13 (90/70/50/30)	オーディオ B-Direct (90/70/50)	オーディオ B-R (90/70/50)
Phonak Target	5.0以上	5.0以上	5.0以上	5.2以上	5.0以上
iCube II	●	●	●		●
NOAHlink	●	●	●		
Noahlink Wireless				●	
HI-PRO、HI-PRO2	●	●	●		

ワイヤレスアクセサリー との互換性

ワイヤレスアクセサリー	オーディオ B-312 (90/70/50/30)	オーディオ B-312T (90/70/50/30)	オーディオ B-13 (90/70/50/30)	オーディオ B-Direct (90/70/50)	オーディオ B-R (90/70/50)
 フォナック クロス B-312	●	●	●		
 フォナック クロス B-13	●	●	●		
 フォナック パイロットワン II	●	●	●		●
 イージーコール II	●	●	●		●
 フォナック コムパイロット II	●	●	●		●
 フォナック コムパイロット エア II	●	●	●		●
 フォナック テレビリンク II ※	●	●	●		●
 フォナック リモートマイク ※	●	●	●		●
 テレビコネクター				●	

ロジャー 受信機

※ フォナック コムパイロット II もしくはフォナック コムパイロット エア II が必要です。

 ロジャー 18			●		
 ロジャー X / AS18			●		
 ロジャー X / コムパイロット II	●	●	●		●
 ロジャー マイリンク		●	●		

App

フォナック リモートコントロール	●	●	●		●
フォナック リモート				●	

機能一覧

	プレミアム B90	アドバンス B70	スタンダード B50	エッセンシャル B30※
オートセンス OS	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
静かな環境	●	●	●	●
騒音下でのことば	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	
音楽	●	●		
非常に騒がしい中でのことば	●			
車の中でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
追加のプログラム				
最大プログラム数	5	5	5	5
風の中のことば	●			
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
最大プログラム数	4	4	4	4
Bluetooth®オーディオ+マイク	●	●	●	●
Bluetooth®電話	●	●	●	●
ロジャー/リモートマイク	●	●	●	●
外部（オーディオ）入力	●	●	●	●

	プレミアム B90	アドバンス B70	スタンダード B50	エッセンシャル B30※
機能	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
ウルトラズーム	●	●	●	
SNRブースト	●	●	●	
フレックスコントロール	●	●	●	
デュオフォン	●	●	●	
サウンドリカバー 2	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
微調整チャンネル	20	16	12	8
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●		
エコーブロック	●			
サウンドリラックス	●	●		
耳鳴りノイズバランス	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●

※ エッセンシャルクラスには、フォナック オーデオ B-Rはありません。

Life is on

「聞こえ」に悩む全ての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ **Life is on!**