



テクニカルデータ

Phonak CROS B Custom

フォナック クロス B-312 カスタム & フォナック クロス B-13 カスタム

フォナック社のビロング補聴器との組み合わせで使用いただくフォナック クロス Bカスタムは、一側性難聴の方に効果的なソリューションがご提供できるCROS補聴システムです。

クロス B カスタムで集音した音声は、即座に反対側のビロング補聴器に送信され良聴耳に音声を届けることで、非良聴耳側にある聞き取ることも困難な音声を良聴耳で聞き取ることが出来ます。


クロス B カスタムはビロングITE補聴器*の全てのクラス（B90～B30）と互換性があります。

フィッティングソフトTarget5.2以上でフィッティングが可能です。


詳しい内容は、以下をご参照ください。

※ 指向性マイクロホンを搭載したワイヤレス機能付き器種に限りです

各部の名称

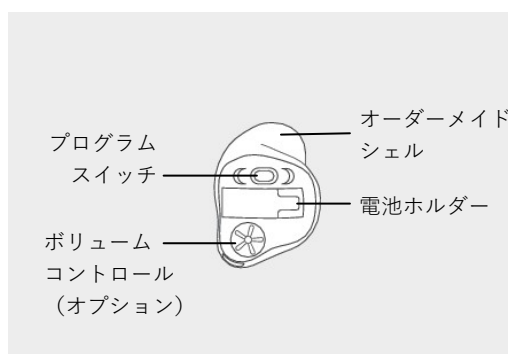

クロス B-312 カスタム

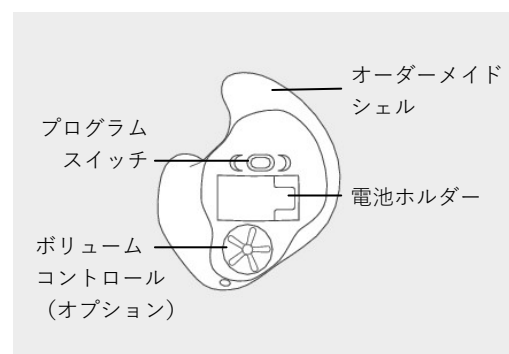

クロス B-13 カスタム

主な特長

- ・ 両耳間音声通信技術を利用可能
- ・ ビロング補聴器（ITE）と互換性あり
- ・ ステレオズームを利用し雑音下でのことばの聞き取りを改善

製品仕様

保管・輸送環境条件	温度	： -20℃ ～ 60℃
	湿度	： 0% ～ 70%（保管時）
	相対湿度 90%以下（ただし、結露無きこと）	

電源情報		
器種	電池	消費電流
クロス B-312	PR41 (312)	2.1 mA
クロス B-13	PR48 (13)	2.1 mA

オーディオ情報	
サンプリング：	22.05 kHz
周波数範囲：	100 Hz ～ 11 kHz

無線仕様	
アンテナ：	フェライトアンテナ（誘導式、一体型）
周波数：	10.6 MHz
占有周波数帯幅：	498 kHz
変調方式：	8-DQPSK
チャンネル：	シングルチャンネル
通信可能範囲：	18 cm
装用場所：	耳あな
使用用途：	反対側に装用した補聴器へ音声信号を伝送
磁界強度： （@3m）	-20.5 dB μ A/m

認証	
ヨーロッパ	
電波：	ETSI EN 300 330
EMC：	EN/IEC 60601-1-2
電気安全：	EN/IEC 60601-1

米国	クロス B-312 カスタム & B-13 カスタム 47 CFR Part 15.209 FCC ID:KWC-ITEV13
----	---

カナダ	RSS-210 Issue 8 Annex 1 IC:2262A-ITEV13
-----	--

日本	EWPE
----	------