



テクニカルデータ


Roger™ Touchscreen Mic

ロジャー タッチスクリーンマイクはシンプルで直感的に操作ができ、各インジケータにより状態を簡単に把握することができる新しいロジャー送信機です。

特に周りが非常に騒がしい環境においては、授業中の先生の声が直接、耳に届くため理解しやすくなります。こども同士による小グループでの活動の時もロジャー タッチスクリーンマイクを机に置き参加しているみんなの声を拾い届けることができます。

各部の名称

- ① 電源ボタン
- ② 復帰 / スリープ
- ③ インジケータ
- ④ マルチマイクロホン
- ⑤ ミュートボタン
- ⑥ タッチスクリーン
- ⑦ マイクロUSBソケット
- ⑧ 3.5mmオーディオジャック
- ⑨ ゴム脚
- ⑩ ネックストラップ取外しボタン
- ⑪ ネックストラップ クリップ
- ⑫ アジャスター
- ⑬ セイフティーパーツ

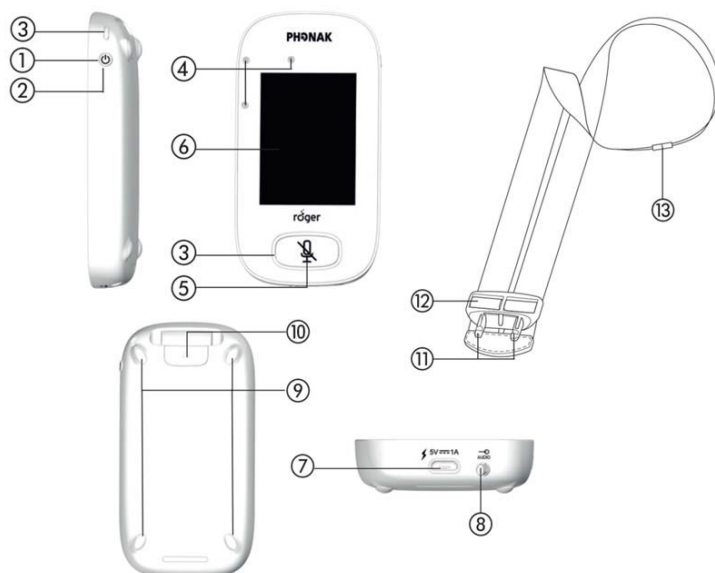

特長

ユーザビリティ

- タッチスクリーンでの操作
- 直感的にわかりやすいアイコンで素早く各機能にアクセス可能
- 画面切り替えはスワイプ操作で簡単
- インジケータで状態をひと目で確認可能
- 分かりやすい電源、スリープ操作

マルチトーカー ネットワーク

- チームティーチングでの使い方可能
- ロジャー パスアラウンドマイク（別売）とロジャー マルティメディアハブとのネットワーク構築が可能

3つのマイクロホンモード

- 自動切り替えモード
（首かけモード、インタビューモード、小グループモード）
- 卓上スタイルにて本体に埋め込まれた3つのマイクが自動適応して作動

仕様一覧

本体外寸 (L × W × H) :	104 × 55 × 16 mm
重さ :	94 g
カラー :	シャンパン / ブラック
動作環境条件 :	温度 : 0°C ~ 45°C / 相対湿度95%以下 (ただし、結露無きこと)
保管・輸送環境条件 :	温度 : -20°C ~ 60°C / 相対湿度90%以下 (ただし、結露無きこと)



PHONAK

電源仕様	
電池：	リチウムポリマー（電圧：3.7V）
充電時間：	120分 ※充電時間は電池状態により変わります。 ※最大性能のために、3回の放充電を行うことをお勧めします。
容量：	1200 mAh
使用時間：	約10 時間 ※電池残量は画面に表示されます
充電供給： （入力）	入力電圧：100 – 240 V 出力電圧：5 VDC / 1A 接続部：マイクロ USB ケーブルの長さ：1.3 m 過充電されない仕組みとなっていますが、充電中、高温になることがあります。 《重要！》 専用のACアダプターを使用して充電することを勧めします。

マイクロホン仕様	
マイクの数：	本体埋め込み式 3つ
タイプ：	3点式指向性マイクアレイ
モード：	首かけモード インタビューモード 小グループモード
加速度計：	本体の状態（位置）をモニターし検知して、適切なマイクロホンモードを自動的に作動させます。

音声信号	
音声入力/出力：	3.5mm ステレオミニジャック
再生周波数帯：	100 ～ 7,300 Hz

Roger仕様	
Roger：	2.4GHz帯のデジタル無線方式を用いた新しい補聴援助システムです。騒がしい教室や公共の場所など、補聴器や人工内耳を装着していても聞き取りが難しい騒音下での聞き取りを飛躍的に向上させます。
伝搬技術：	2.4GHz 自動適応型周波数ホッピング方式
電波出力：	100 mW
伝達範囲：	20 m
接続操作範囲：	10 cm

ロジャー機器との互換性	
Roger受信機：	全Roger受信機
ネットワークに参加できる Roger受信機数：	無制限
Roger送信機：	ロジャー タッチスクリーンマイク ロジャーパスアラウンドマイク ロジャー インスパイロ※ ロジャー ダイナマイク※ ※ ロジャータッチスクリーン特有の機能の使用は不可
ネットワークに参加できる Roger送信機数：	最大35台
オーディオハブ：	ロジャー マルチメディアハブ
ネットワークに参加できる オーディオハブ数：	1台
DSF：	ロジャー デジマスター5000 ロジャー デジマスター7000
ネットワークに参加できる DSF数：	ロジャー デジマスター5000：1台 ロジャー デジマスター7000：2台
その他：	ロジャー ウォールパイロット

操作・使用	
スクリーン：	2.4インチ カラー タッチスクリーン画面
装着スタイル：	3点式指向性マイクアレイ
ストラップ：	- 本体に取り付け、取り外しが簡単な仕様 - 長さ調整可能（口元から20cmの位置になるように） - 首絞め防止のセイフティーパーツ使用

基準認証	
電波法：	202-LSD062
El.Safety：	IEC/ EN 60950-1
Radiocom 2.4 GHz:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489-1,-3,-9,-17
SAR (2.4 GHz):	E EN 62209-2 SAR 1g = 0.10 W/kg SAR 10g = 0.05 W/kg