

장애인 보청기 급여 제도

후기적합관리 급여비 청구 시 서류 제출_피팅 리포트


보장구 제품 구입 시 1년 후부터 후기적합관리 급여비(1회당 5만원, 총 20만원) 청구가 가능합니다.
 급여비 청구 시 제출하는 서류에는 3가지가 있으며, 이 중 **피팅 리포트**를 출력하는 방법에 대해 안내해 드립니다.

- [참고] 후기적합관리 급여비 청구 시 제출 서류
- ① 보청기 적합관리 급여 청구서
 - ② 세금계산서 및 현금영수증 등 구매 증빙서류
 - ③ 청력측정결과지와 데이터 로그기록지(피팅 리포트) - 서비스 제공 여부 확인용 서류

우선, 피팅 리포트는 Target 피팅 세션 우측 상단에 있는 프린트 모양의 아이콘을 클릭하여 출력이 가능합니다.



출력하고자 하는 방향 및 옵션을 선택하고 미리보기에서 확인한 후에 출력하시기 바랍니다.

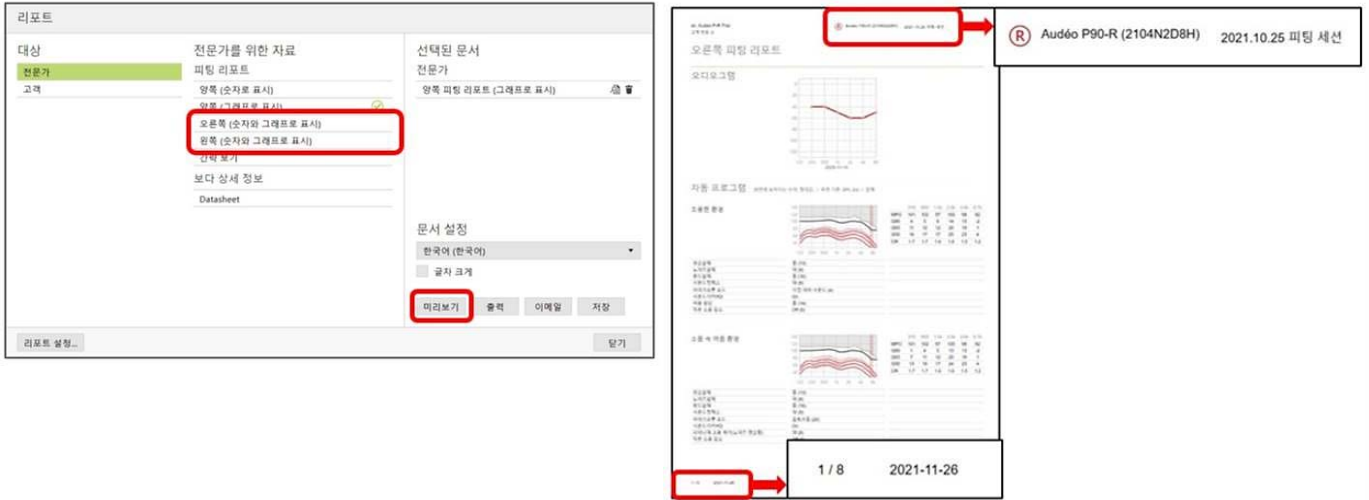

이때, 리포트 좌측 하단에는 피팅 리포트 출력 날짜가 표기되므로 **피팅을 진행한 세션 날짜**를 기입하는 방법은 다음과 같습니다.

[리포트 설정] - [레이아웃] - [사용자지정 레이아웃] - [텍스트 넣기]

기입 예시) 2021.10.25 피팅 세션

*** 단, 텍스트 넣기에 기입한 내용은 모든 피팅 리포트에 적용되므로 출력할 때마다 기입 내용을 수정해야 합니다.**

