



① Gegevens

Firma naam:		Audicien:	
Adres:		Besteldatum:	Opdracht nummer:
PC:	Plaats:	Naam cliënt:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V
E-mail:		Cliënt nummer:	

② Hoe voorkom ik vertraging van mijn bestelling?

- Voeg een audiogram toe voor AOV of geef zelf een venting aan. Indien niet bijgevoegd loopt de bestelling vertraging op.
- Zorg dat alle velden zijn ingevuld. Bij onvolledig ingevuld formulier loopt de bestelling vertraging op.
- Let op!!!! Bij air bone gap wordt AOV en AOV-O afgeraden. Kijk in de Target software wat de voorgestelde venting is.
- Maak een goede afdruk. Gebruik de **EasyView Otoblock** voor een beter resultaat. Zie meer info op blad 2.

③ Venting

Eigen keus	R <input type="checkbox"/> ____ mm L <input type="checkbox"/> ____ mm <i>Zie Target software voor voorgestelde venting</i>
AOV <i>voeg audiogram toe</i>	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L <i>Let op!!! bij air bone gap wordt AOV afgeraden</i>
AOV-O <i>voeg audiogram toe</i>	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L <i>Let op!!! bij air bone gap wordt AOV-O afgeraden (AOV-O = AOV-open / occlusie compensatie)</i>

④ Prestatie niveau M90 M70

⑤ Uitvoering

Optie	Eén optie mogelijk
EasyPhone/Drukknop/Ringleiding	<input type="checkbox"/>
EasyPhone/Drukknop	<input type="checkbox"/>
MiniControl/RingLeiding	<input type="checkbox"/>
MiniControl	<input type="checkbox"/>
Power level	
M	*Fitguide indicatie ___ R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L *Fitguide indicatie ___
P	*Fitguide indicatie ___ R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L *Fitguide indicatie ___
SP	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
Schaaltype	
IIC/CIC	Virto M-Titanium wordt altijd zo klein mogelijk uitgevoerd

* Gebruik voor een zo onzichtbaar mogelijk hoortoestel de **Titanium Fitguide**. Zie blad 2 voor meer info en gebruik.


⑥ Kleur =Standaard optie

Kleur faceplate	<input type="checkbox"/> Zwart <input type="checkbox"/> Cacao <input type="checkbox"/> Pink
Filter	<input checked="" type="checkbox"/> Cerustop
Trekkoord	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Lang (+5mm)


⑦ Uw opmerkingen:

De Titanium FitGuide gebruiken


Beweeg tijdens het hele proces erg langzaam en laat de cliënt weten wat hij of zij kan verwachten. Voer elke stap zorgvuldig uit.

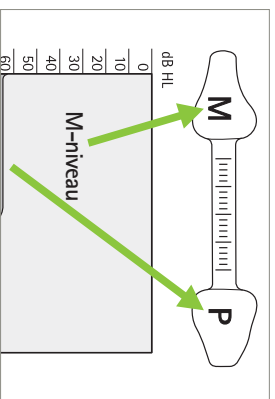


1. Richt de Titanium FitGuide op het oor van de cliënt door het juiste vermogensniveau te selecteren.

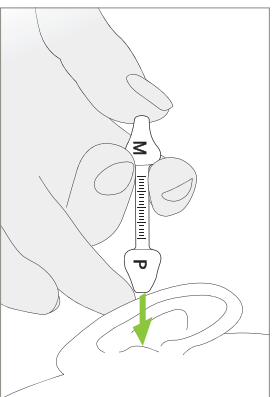


2. Houd de TFG vast met uw wijs- en middelvinger op de boven- en onderkant van het instrument. Laat uw pink en ringvinger tegen het hoofd van de cliënt rusten om te voorkomen dat deze onverwachte bewegingen maakt.

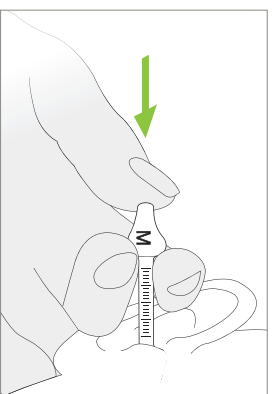

3. Breng de TFG langzaam in de eerste bocht in. Vraag de cliënt het instrument langzaam en voorzichtig verder naar binnen te duwen zolang dit comfortabel aanvoelt.

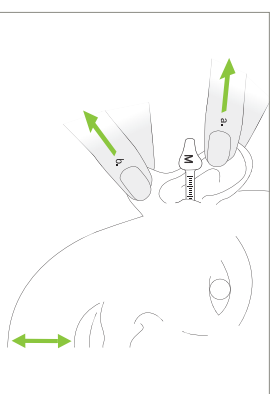


4. Trek voorzichtig in zijaartse richting aan de oorschelp van de cliënt en vraag zijn of haar kaak te bewegen. Vraag of de diepte comfortabel aanvoelt en of dit meer dan acht uur per dag te verdragen is.

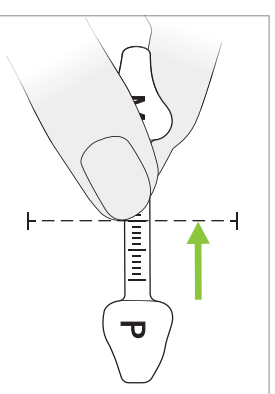


5. Neem de maat op door te kijken welke indicator zich direct bij de inkeping tussen de tragus bevindt. Plaats uw vinger nagel bij de juiste diepte en verwijder het instrument zonder uw vinger te verplaatsen. Tel het aantal streepjes en noteer dit op het bestelformulier.


EasyView Otoblock gebruiken

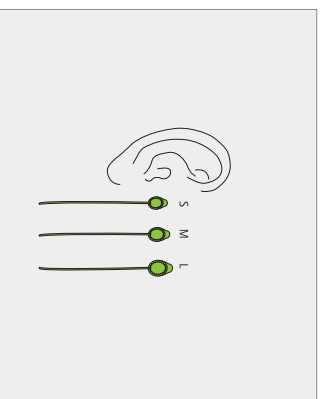


1. Maak vervolgens een oorafdruk met EasyView Otoblock. Zorg dat u de inkeping tussen de tragus openeent in de afdruk.

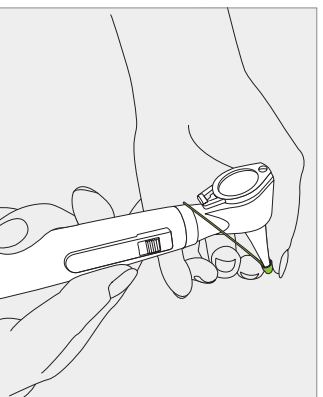


2. Plaats de EasyView Otoblock op het speculum van uw otoscoop, met de slang langs de onderzijde.

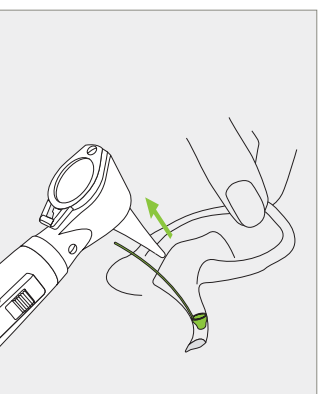

3. Breng het speculum in het oor van de cliënt in en leid de EasyView Otoblock geheel omhoog de gehoorgang in. Hierdoor ziet u altijd waar u zich bevindt.

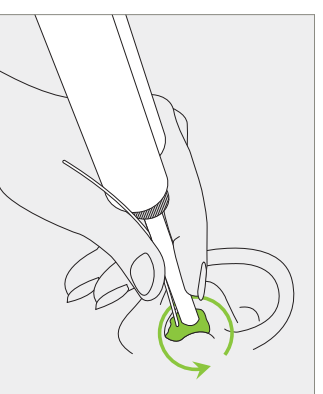

4. Maak de afdruk zoals gewoonlijk door het afdrukmateriaal in te brengen (we raden het gebruik van Dreve Otoform A softX aan).

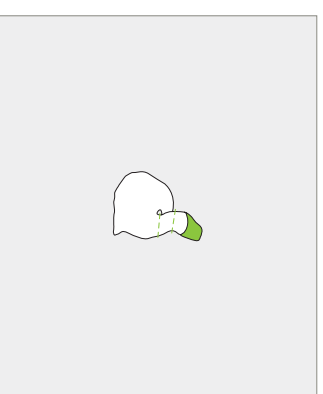

5. De Otoblock behoudt de vorm van de gehoorgang en wordt door fabrikant op informatie gescand. Verwijder de Otoblock daarom niet.