

Беспроводные коммуникационные устройства Phonak



Phonak EasyCall II	2
Phonak ComPilot II	3
Phonak ComPilot Air II	4
Phonak TVLink II	5
Phonak RemoteMic V2.0	6
Phonak RemoteControl App	7
Phonak PilotOne II	8


Phonak EasyCall II – Решение для мобильного телефона

Phonak EasyCall II беспроводным путем связывает слуховые аппараты с любым мобильным телефоном, поддерживающим Bluetooth. Разговор непосредственно передается в оба слуховых аппарата, обеспечивая максимальную разборчивость речи.



Обзор функций

- Распакуйте и пользуйтесь: не требует настройки
- Работает с любым мобильным телефоном, поддерживающим Bluetooth, не обязательно смартфоном
- Прикрепляется к мобильному телефону – вы не потеряете и не забудете его
- Время разговора – 10 часов
- Время ожидания – больше 1 недели

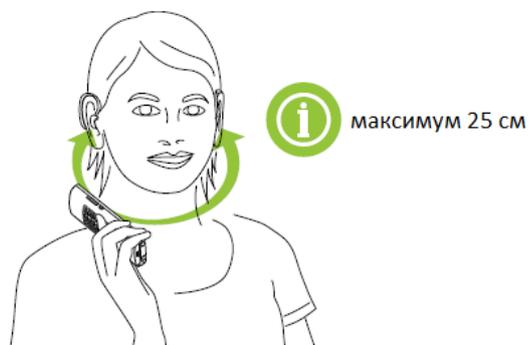

Совместимость:

- Phonak EasyCall II предназначен для беспроводных слуховых аппаратов Venture


Phonak ComPilot / ComPilot II – Многоцелевой аудиостример



Phonak ComPilot II подключается беспроводным путем ко всем беспроводным слуховым аппаратам Phonak и поддерживает соединение через аудиоразъем (3,5 мм) и евроразъем. Подключение приемника Roger X к ComPilot II позволяет передавать сигнал микрофонов Roger в слуховые аппараты. Устройство обеспечивает высокое качество звучания при просмотре ТВ или прослушивании музыки.

Обзор функций

- Встроенная демонстрация звучания
- Bluetooth и проводное подключение источников аудиосигнала
- Более 20 часов непрерывного аудиостриминга
- Встроенный пульт дистанционного управления слуховыми аппаратами
- Бинауральный стриминг стереосигналов
- Голосовые сообщения и произнесение имени вызывающего абонента
- Два варианта размера и цвета съемной петли

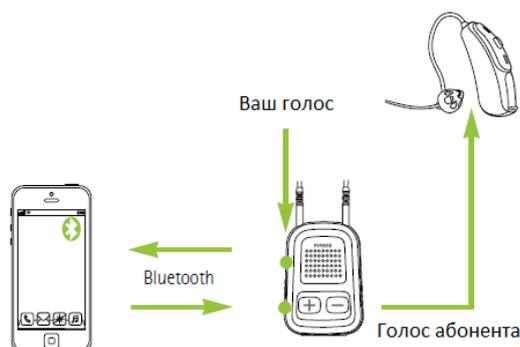

Совместимость:

- Phonak ComPilot предназначен для беспроводных слуховых аппаратов Core, Spice и Quest
- Phonak ComPilot II предназначен для беспроводных слуховых аппаратов Venture

Аккумулятор	Литий-полимерный, 3,7 В		
	Время зарядки	90 минут	
	Емкость	450 мАч	
Радиомодуль	Антенна	Петлевая	Ферритовая
		Съемная, индукционная	Встроенная, индукционная
	Рабочая частота	10,6 МГц	10,6 МГц
	Модуляция	8-DPSK	8-DPSK
	Напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м	-18 дБ мкА/м	-16 дБ мкА/м
	Радиус действия	40 см	до 100 см
	Применение	Стриминг и дистанционное управление	Только дистанционное управление




Phonak ComPilot Air II – Аудиостример с зажимом



Миниатюрный и стильный **Phonak ComPilot Air II** предназначен, в первую очередь, для беспроводной связи слуховых аппаратов Phonak Venture с мобильными телефонами и источниками звука (музыки), использующими технологию Bluetooth. Он также может использоваться совместно с Phonak TVLink II или Phonak RemoteMic V2.0.

Обзор функций

- Встроенная демонстрация звучания
- Без петлевой антенны
- Зажим для удобства ношения
- Бинауральный стриминг стереосигналов
- Встроенный пульт дистанционного управления слуховыми аппаратами
- Голосовые сообщения и произнесение имени вызывающего абонента
- Поддержка приложения Phonak RemoteControl App

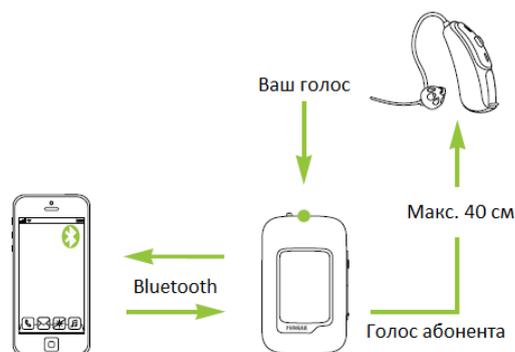

Совместимость:

- Phonak ComPilot Air II предназначен для беспроводных слуховых аппаратов Venture

Аккумулятор	Литий-полимерный, 3,7 В	
	Время зарядки	2 часа
	Емкость	325 мАч
Радиомодуль	Антенна	Встроенная, индукционная
	Рабочая частота	10,6 МГц
	Модуляция	8-DPSK
	Напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м	<-11,5 дБ мкА/м
	Радиус действия	До 40 см
	Применение	Стриминг и дистанционное управление



Phonak TVLink II – Идеальный интерфейс для ТВ и музыкальных проигрывателей



Phonak TVLink II – это интерфейс для ТВ и других источников аудиосигнала, поддерживающий цифровой формат аудиосигналов. TVLink II используется в сочетании с Phonak ComPilot II или ComPilot Air II и превращает любые беспроводные слуховые аппараты Phonak в наушники с радиусом действия до 30 м. Передает сигнал без ощутимой задержки и в стереокачестве.

Обзор функций

- Поддержка аналогового и цифрового (оптического и коаксиального) аудиовыходов
- Быстрая и простая установка
- Тестовый режим для быстрой проверки звучания
- Блок питания и шнуры в комплекте
- Гнездо зарядки для ComPilot II и ComPilot Air II



Совместимость:

- TVLink II предназначен для использования со стримерами Phonak ComPilot II и ComPilot Air II

Питание	5 В постоянного тока
Макс. ток	500 мА
Разъем	Мини-USB
Аудиовходы	Аналоговый (разъем диаметром 3,5 мм) Цифровой оптический (Toslink) Цифровой коаксиальный (SPDIF)
Звук	Сtereo, 20 Гц – 22 кГц




Phonak RemoteMic – Легкий беспроводной микрофон

Phonak RemoteMic V2.0 – беспроводной микрофон для общения с одним человеком на расстоянии. RemoteMic прикрепляется зажимом к одежде говорящего. В сочетании с Phonak ComPilot II или ComPilot Air II передает голос говорящего непосредственно в оба слуховых аппарата пользователя на расстояние до 20 метров.



Обзор функций

- Легкий и миниатюрный
- Ненаправленный микрофон
- Питание от аккумулятора
- До 8 часов непрерывной работы

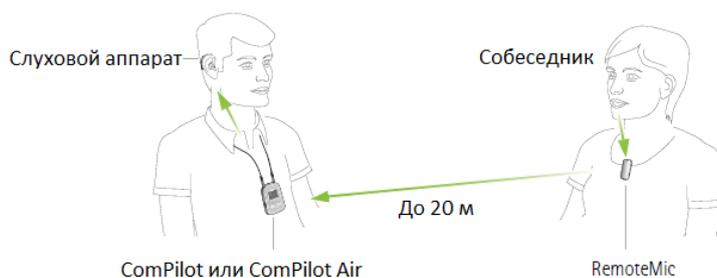

Совместимость:

- Phonak RemoteMic предназначен для использования со всеми стримерами Phonak

Аккумулятор	Литий-полимерный, 3,7 В, несъемный
Емкость	200 мАч
Время зарядки	2 часа
Направленность	Ненаправленный
Макс. количество сопряженных устройств	4



Phonak RemoteControl App – Приложение для дистанционного управления слуховыми аппаратами

Приложение **Phonak RemoteControl App** позволяет осуществлять дистанционное управление слуховыми аппаратами Phonak Venture, а также конфигурировать стримеры Phonak с помощью смартфона. Приложение доступно в двух вариантах – для платформ Android и iOS.



Обзор функций

- Индивидуальный выбор направления прослушивания (в программе "Речь на 360°")
- Раздельная регулировка громкости правого и левого слухового аппарата
- Непосредственный выбор программы и источника аудиосигнала
- Конфигурация настроек стримеров Phonak
- Проверка подключения к слуховым аппаратам
- Помощь по сопряжению со стримерами Phonak

Совместимость:

- Приложение Phonak RemoteControl App предназначено для использования со стримерами Phonak ComPilot II или ComPilot Air II

Приложение можно загрузить с сайта: www.phonakpro.com/rc-app



Phonak PilotOne II – Компактный пульт дистанционного управления

Phonak PilotOne II создан для удобства и простоты использования.



Обзор функций

- Простота регулировки громкости и переключения программ
- Переход к исходной программе с помощью кнопки возврата
- Функция блокировки клавиатуры

Совместимость:

- Phonak PilotOne II предназначен для использования с беспроводными слуховыми аппаратами Phonak Venture и Belong



Питание	Щелочная батарея, тип AAA, 1,5 В
Среднее время работы	12 месяцев
Антенна	Встроенная ферритовая
Рабочая частота	10,6 МГц
Напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м	-14,5 дБ мкА/м
Радиус действия	100 см