

Phonak

Naida™ Paradise

Phonak Naida Paradise открывает непревзойденное мощное звучание нового поколения слуховых аппаратов с большой и успешной историей инноваций, изменивших жизни людей с тяжелыми потерями слуха.

Новый уровень мощного звучания

- Звуковой микропроцессор – PRISM™
- Мощный двойной ресивер
- AutoSense OS™ 4.0

Универсальные возможности подключения

- Прямое подключение к смартфонам (iOS и Android), ТВ и другим устройствам
- Несколько подключений по Bluetooth®
- Управление касанием²

Персональные цифровые решения

- Приложение myPhonak
- Дистанционное управление с помощью приложения myPhonak

Новое поколение, Naida Paradise, соединяет в себе мощный звук, универсальное подключение и персонализацию. Как результат – непревзойденное мощное звучание, позволяющее пользователям быть на связи с миром, раскрываться социально и эмоционально, – что определяет их общее благополучие и качество жизни.¹



¹ Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P, Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27(3):18-22. Accessed June 1st, 2020.

² Датчик движения и Управление касанием доступны только в аппаратах Naida P-PR.

Новый уровень, мощный звук

Преимущества Naida P не ограничиваются только мощностью звука. Основная задача – добиться действительно качественного звучания для каждого, уделяя внимание максимальному количеству деталей и аспектов. С новыми электронными компонентами и современным ПО Naida P отвечает потребностям пользователей в бесчисленном множестве акустических ситуаций. При этом она остается гибкой, чтобы легко подстраиваться под индивидуальные предпочтения.

Новые электронные компоненты:

- **PRISM™**: радиочип нового поколения, реализующий новые функции качественного звучания
- **Мощный двойной ресивер**: Дусиление 141 дБ в Naida P-UP и 130 дБ в Naida P-PR
- **Датчик движения**: обеспечивает работу функции «Датчик движения» и «Контроль касанием»*


Новое ПО



Adaptive Phonak Digital 2.0:

Новый алгоритм усиления с преимуществами адаптивной скорости компрессии

- Больше гибкости в настройке для более точной персонализации
- Баланс между разборчивостью, громкостью и качеством звука
- Более естественное звучание

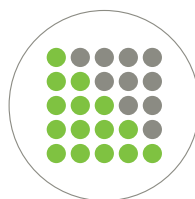

AutoSense OS™ 4.0:

Идеальное сочетание функций для оптимальной персонализированной настройки

- Усилитель речи – выделяет пики речевых сигналов в тихих ситуациях
- Динамическое шумоподавление – в сочетании с функциями направленности оптимизирует соотношение сигнал-шум в сложных акустических ситуациях
- Датчик движения* – незаметно управляет режимом микрофонов и настройками Динамического шумоподавления, когда пользователь находится в движении.

* Датчик движения и Управление касанием доступно только в аппаратах Naida P-PR.

Универсальное подключение

Phonak преодолевает технологические ограничения для пользователей с тяжелыми и глубокими потерями слуха. Теперь универсальное прямое подключение возможно для нескольких устройств одновременно.

Сегодня возможность подключения к современным устройствам важна как никогда. Phonak Naida Paradise позволяет пользователям оставаться на связи весь день, обеспечивая прямой стриминг практически с любого устройства с Bluetooth:

- ТВ, смартфонов, планшетов
- MFA – разработан для всех ОС
- Звонки handsfree
- RogerDirect™*
- Подключение к нескольким устройствам
- Управление касанием**

Универсальное подключение для всех

Naida Paradise подключается напрямую к устройствам с iOS, Android и другими операционными системами с Bluetooth так, что пользователи могут получать сигнал отличного качества напрямую в свои слуховые аппараты. Аппараты также можно использовать как гарнитуру для звонков hands-free и беспроводные наушники, чтобы слушать музыку, аудиокниги, подкасты и многое другое.

Незаметное переключение между устройствами

Новая функция Naida Paradise – возможность сопрягать до 8 Bluetooth-устройств, 2 из которых могут работать одновременно. Это позволит пользователю, например, быстро переключиться с музыки на входящий телефонный звонок и обратно.

Bluetooth – доступ в одно касание!

Благодаря датчику движения в Naida Paradise теперь можно управлять функциями Bluetooth просто двойным нажатием на верх ушной раковины. Так можно принимать/отклонять звонки, останавливать/возобновлять стриминг музыки и использовать голосовых помощников.

* Система Roger временно недоступна на территории РФ.

** Доступно только в аппаратах Naida P-PR 70/90.

Bluetooth® название и логотип – международные зарегистрированные торговые марки, принадлежащие Bluetooth SIG, Inc. Apple, логотип Apple, iPhone, и iOS – торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc. Android, Google Play и логотип Google Play – торговые марки Google Inc.

Описание моделей



Naída P-PR
Naída P-PR Trial




Naída P-UP
Naída P-UP Trial


Размер батареи			675	
Многофункциональная кнопка		•	•	
Телефонная катушка			•	
Bluetooth® 4.2 беспроводная технология		•	•	
Нанопокрытие		•	•	
Индекс IP		IP68 ⁵		IP68 ⁵
Размеры	Д x Ш x Г	36.7 x 16.4 x 8.5 (1.44 x 0.64 x 0.33")		42.6 x 18.8 x 8.6 (1.68 x 0.74 x 0.34")
	Вес	3.68 г		4.60 г
Время зарядки ⁶	0% до 100%	3 ч		
	0% до 80%	1.5 ч		
	30 мин. настройки	10 мин.		
		SlimTube 4.0	HE11 680	HE11 HE11 680
ВУЗД90 (дБ УЗД)	2 cc coupler	129	130	141 134
Макс. усиление (дБ)	2 cc coupler	69	68	84 78
Диапазон частот (Гц)		< 100 - > 7100	< 100 - > 5700	< 100 - > 4700 < 100 - > 4700
Рабочий ток (мА)				3.3 2.8

Диапазон настройки

- SlimTube 4.0
- HE11 680

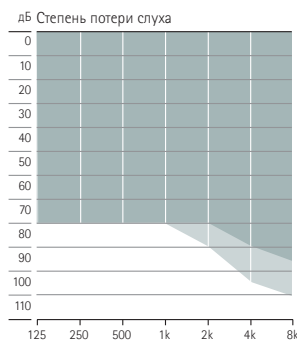

Легкая - умеренно тяжелая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

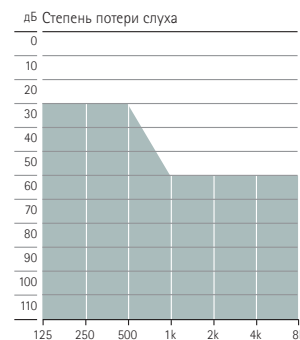

Тяжелая - глубокая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

Цвета корпуса



P1
Песок



N0
Бежевый



P4
Каштан



P5
Шампань



P6
Серебро



P7
Графит



P8
Черный бархат

⁵ Слуховым аппаратам присвоен индекс IP68, что означает водо- и пылезащищенность. То есть слуховой аппарат должен восстановить функциональность после погружения в воду на глубину 1 м в течение 60 минут или после пребывания в пылевой камере в течение 8 часов, согласно международному стандарту IEC60529 (ГОСТ 14254-2015). После вскрытия корпуса следов пыли не обнаружено.

⁶ Реальное время зарядки зависит от остатка заряда в аккумуляторе, но не превышает 3 часов.

Уровни функциональности Phonak Naída Paradise

	Премиум P90	Бизнес P70	Стандарт P50	Эконом P30	Функции	Премиум P90	Бизнес P70	Стандарт P50	Эконом P30
AutoSense OS 4.0	Премиум	Бизнес	Стандарт	Эконом	UltraZoom	•	•	•	•
Комфорт в эхе	•				Динамическое шумоподавление	•			
Речь в автомобиле	•				Усилитель речи	•			
Речь в громком шуме	•				EchoBlock	•			
Музыка	•	•			Управление касанием*				
Комфорт в шуме	•	•	•		- Siri/Google ассистент	•	•		
Речь в шуме	•	•	•	•	- Пауза/возобновление стриминга	•	•		
Тихая ситуация	•	•	•	•	- Принять/завершить звонок	•	•		
Медиа-речь + микрофон	•	•	•	•	StereoZoom	•	•		
Медиа-музыка + микрофон	•	•	•	•	WindBlock	•	•		
Дополнительные программы					SoundRelax	•	•		
Максимум доп. программ	4	4	4	4	Датчик движения*	•	•	•	
Комфорт в эхе	•				DuoPhone	•	•	•	
Речь в громком шуме	•	•			Real Ear Sound	•	•	•	
Речь на 360°	•	•			Roger + направленность	•	•	•	
Речь в шуме	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Тихая ситуация	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Комфорт в шуме	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Музыка	•	•	•	•	RogerDirect	•	•	•	•
Акустический телефон	•	•	•	•	Настройка по пользовательским предпочтениям		•	•	•
Собственная программа	•	•	•	•	QuickSync	•	•	•	•
Стриминговые программы					Акустически оптимизированный вент	•	•	•	•
RogerDirect + микрофон	•	•	•	•	Баланс тиннитуса	•	•	•	•
PartnerMic + микрофон	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Телефон + микрофон	•	•	•	•	Баланс окружающих звуков	•	•	•	•
					Количество настраиваемых каналов	20	20	16	12

Настройка

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
Phonak Target	7.1 или выше	7.1 или выше
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

** Датчик движения и Управление касанием доступны только в аппаратах Naída P-PR.

Акустическое сопряжение Phonak Naída Paradise



Naída P-PR
Naída P-PR Trial

Naída P-UP
Naída P-UP Trial

Вариант сопряжения			Naída P-PR Naída P-PR Trial	Naída P-UP Naída P-UP Trial
	Рожок	Демпфированный (HE11 680) или недемпфированный (HE11), прозрачный	•	•
	SlimTube 4.0	Правый и левый в 5 вариантах длины (00,0,1,2,3)	•	
Вкладыш для SlimTube	Вкладыш	Вкладыш-колпачок	•	
		Открытый вкладыш	доступен в трех размерах (S, M, L)	•
		Вкладыш с вентом	доступен в трех размерах (S, M, L)	•
		Мощный вкладыш	доступен в трех размерах (S, M, L)	•
	SlimTip	Акрил	•	
		Силикон	•	
Вкладыш для рожка	Индивидуальный		•	•

Phonak Naída P Trial™

Новые слуховые аппараты Phonak Naída P Trial можно быстро настроить под необходимый уровень функциональности в соответствии с вашей рекомендацией. Различные технологические уровни в одном устройстве дают вам гибкость в подборе - с первой примерки или в качестве замены на время ремонта.

Удобство технологии перезаряжаемых аккумуляторов

Naída P-PR обладает всеми функциями Paradise, которые все любят, а также преимуществом технологии перезаряжаемых аккумуляторов. Заряда хватает на весь день, даже при использовании стриминга*.

Зарядное устройство Phonak Charger BTE RIC: дополнительное место для больших ушных вкладышей, разъем USB-C и световой индикатор.



* Ожидаемое время работы аккумулятора - 16 часов, включая 4 часа стриминга по BT и 4 часа стриминга по TV Connector.